



AnyCare AnyCare Premium


MANUALE D'USO

S'informa l'utente che il presente manuale ha lo scopo di descrivere l'uso corretto del dispositivo per prevenire eventuali guasti e garantirne la massima efficienza. Si raccomanda di conservare sempre il manuale insieme al dispositivo e di leggerlo attentamente prima dell'uso.



INDICE

1-1. Anycare/Anycare Premium Introduzione	... 03
2 Precauzioni di sicurezza	
2-1. Precauzioni di sicurezza elettrica	... 04
2-2. Precauzioni prima dell'uso	... 06
2-3. Precauzioni durante l'uso	... 07
2-4. Precauzioni dopo l'uso	... 08
2-5. Istruzioni per l'utilizzo e la conservazione delle guaine	... 09
2-6. Pulizia	... 10
2-7. Condizioni di funzionamento / conservazione	... 11
2-8. RAEE	... 12
3 Descrizione del dispositivo_Anycare	
3-1. Imballo del dispositivo	... 13
3-2. Specifiche del dispositivo	... 14
3-3. Aspetto e nomi delle funzioni	... 15
4 Descrizione del dispositivo_Anycare Premium	
4-1. Imballo del dispositivo	... 16
4-2. Specifiche del dispositivo	... 17
4-3. Aspetto e nomi delle funzioni	... 18
5 Utilizzo del dispositivo e procedura	
5-1. Configurazione e utilizzo	... 20
5-2. Dimensioni delle guaine e della prolunga	... 23
6 Individuazione e risoluzione dei guasti	
6-1. Risoluzione dei problemi generali	... 25
6-2. Altri guasti	... 25

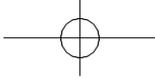

1

Informazioni

1-1. Anycare / Anycare Premium Introduzione

Grazie per aver acquistato il nostro dispositivo.

Il principio di funzionamento del presente dispositivo è il trasferimento dell'aria erogata dal motore ad aria a un guaina composta da quattro camere d'aria gonfiate in sequenza dalla prima alla quarta.

Il presente manuale d'uso contiene le informazioni relative all'utilizzo, alla conservazione e alla riparazione del dispositivo. S'informa l'utente che il presente manuale ha lo scopo di descrivere l'uso corretto del dispositivo per prevenire eventuali guasti e garantirne la massima efficienza. Si raccomanda di conservare sempre il manuale insieme al dispositivo e di leggerlo attentamente prima dell'uso.

2

Precauzioni di sicurezza

※ Osservare attentamente le seguenti precauzioni per garantire la sicurezza d'uso. In caso contrario l'utente può mettere a rischio la propria vita o quella degli altri.

2-1. Precauzioni di sicurezza elettrica



- Quando l'apparecchio non è in uso, scollegare il cavo di alimentazione.
- In caso di improvviso blackout causato da un temporale, spegnere il dispositivo e scollegare la spina di alimentazione.
(Vi è il rischio che si verifichino errori di funzionamento o scosse elettriche.)
- Collegare attentamente il cavo di alimentazione in modo che sia inserito saldamente.
(Se il cavo di alimentazione non è collegato saldamente, vi è il rischio di errori di funzionamento o incendio.)
- Slegare il cavo di alimentazione prima dell'uso.
(Vi è il rischio di surriscaldamento o incendio.)
- Per spostare il dispositivo, usare la maniglia invece di tirare il cavo di alimentazione.
(Se il cavo di alimentazione è danneggiato, vi è il rischio di incendio o scosse elettriche.)
- Non mettere in funzione l'apparecchio se il cavo è danneggiato o se lo si è fatto cadere danneggiandolo.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, utilizzare l'alimentatore con messa a terra di protezione.
(Vi è il rischio di incendio e scosse elettriche.)
- Non usare il dispositivo in luoghi molto umidi come saune e bagni. (In caso contrario si possono verificare guasti meccanici o lesioni fisiche causati da scosse elettriche o ustioni.)



- Per evitare le scosse elettriche, usare l'apparecchio collegandolo a un'alimentazione dotata di messa a terra.
(Vi è il rischio di incendio e scosse elettriche.)
- Non usare il cavo/la spina di alimentazione se danneggiati o su prese allentate.
(In caso di collegamento non stabile, vi è il rischio di incendio o scosse elettriche con conseguenti lesioni.)
- Per collegare e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa, afferrare la spina e non il cavo.



- Non toccare l'apparecchio, il cavo di alimentazione, la spina e la presa con le mani o altre parti del corpo bagnate.
(Vi è il rischio di scosse elettriche con conseguenti lesioni.)
- Non danneggiare, piegare, torcere o scaldare il cavo di alimentazione.
(Se il cavo è danneggiato, vi è il rischio di incendio o scosse elettriche.)
- In presenza di odori anomali durante l'uso dell'apparecchio, arrestarne immediatamente il funzionamento. In tal caso, spegnere immediatamente il dispositivo con il pulsante di accensione, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa e contattare il fabbricante o il venditore.



- Non smontare o manomettere l'apparecchio a propria discrezione con l'intento di ripararlo. Il dispositivo può essere smontato e riparato solo da personale autorizzato.
(Se si smonta e ripara il dispositivo a propria discrezione, vi è il rischio di guasti o lesioni.)

2-2. Precauzioni prima dell'uso

- Verificare che il dispositivo non sia danneggiato e che funzioni correttamente almeno una volta l'anno.
(Se si utilizza il dispositivo senza eseguire la manutenzione, vi è il rischio di guasti o lesioni.)
- Non usare l'apparecchio per finalità diverse dall'uso previsto.
- Se l'apparecchio rimane a lungo inutilizzato, pulirlo e verificare che funzioni correttamente prima dell'uso.
- Non installare l'apparecchio in un ambiente esposto a fonti di calore e alla luce diretta del sole.
(Vi è il rischio di deformarlo e danneggiarlo con conseguenti guasti.)
- Prima dell'uso, controllare lo stato dell'apparecchio e degli accessori.
(Se l'apparecchio o l'esterno degli accessori sono danneggiati, contattare il venditore o il centro assistenza. Se si utilizzano l'apparecchio e gli accessori anche se danneggiati, vi è il rischio di scosse elettriche o perdite di corrente che possono provocare incendi.)
(Se l'apparecchio e gli accessori sono danneggiati, vi è il rischio di malfunzionamenti, guasti e incendi che possono causare lesioni.)
- Non installare l'apparecchio su scrivanie o tavoli sottoposti a frequenti urti o vibrazioni.
(Vi è il rischio di caduta causata dalle vibrazioni o dagli urti che possono provocare guasti e lesioni.)
- Installare l'apparecchio in un luogo in cui la spina di alimentazione si possa collegare e scollegare senza incontrare ostacoli e in cui la spina di alimentazione possa essere rimossa facilmente.
- Usare l'apparecchio dopo averlo installato in un luogo sicuro dotato su una superficie piana.
(Se collocato con la base inclinata o instabile, può risultare rumoroso o vi è il rischio di cadute, guasti, malfunzionamenti, ecc.)
- L'apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini e di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza una sufficiente esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o non siano state istruite su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e non abbiano compreso i pericoli implicati.





- Non coprire il cavo di alimentazione con tappeti o altri oggetti.
(Camminandovi sopra, i piedi potrebbero rimanervi impigliati facendo cadere l'apparecchio.)
(In caso di caduta, vi è il rischio guasti e lesioni.)



- Impedire l'ingresso di acqua od oggetti estranei nel dispositivo. (L'ingresso di oggetti estranei nel dispositivo può provocare guasti o scosse elettriche.)
- Usare con il dispositivo solo accessori e componenti forniti o approvati da DAESUNG MAREF.
(In caso di utilizzo di accessori e componenti non approvati da DAESUNG MAREF, vi è il rischio di guasti che metterebbero a rischio la sicurezza dell'utente.)

2-3. Precauzioni durante l'uso



- Non percuotere eccessivamente l'apparecchio facendolo cadere.
- Prima di spostare l'apparecchio, accertarsi che sia spento. (Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.)
- Non mettere in funzione l'apparecchio se il tubo è posizionato di fronte agli occhi, al naso o alle labbra. (L'aria rilasciata dal tubo può provocare lesioni.)
- All'inizio, utilizzare il dispositivo con 20 mmHg per 10 minuti la prima volta, aumentando poi l'intensità della pressione gradualmente in base alle condizioni fisiche.
- Usare l'apparecchio in luoghi in cui la temperatura è superiore a 0°C e inferiore 40°C.



- Non usare l'apparecchio se le proprie condizioni sono alterate dagli effetti dell'alcool; in tal caso attendere la totale scomparsa di tali effetti. (Se si utilizza l'apparecchio dopo aver bevuto, si corre il rischio di lesioni causate da un uso errato.)

2-4. Precauzioni dopo l'uso



- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa prima di rimuoverlo dall'apparecchio.
- Prima di pulire l'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa, poi dall'apparecchio.
(Se si rimane impigliati nel cavo di alimentazione mentre si sposta l'apparecchio, vi è il rischio di cadute, lesioni, danni e scosse elettriche.)
- Accertarsi che nessun liquido s'introduca nella presa d'aria dell'apparecchio. (In caso contrario, i componenti interni interessati possono provocare guasti, scosse elettriche e incendi.)
- Non applicare detergenti liquidi direttamente sull'apparecchio né usare benzene, diluente o alcool per pulirlo. Applicare il detergente liquido su un panno per pulire l'apparecchio.
(Vi è il rischio scolorire o danneggiare l'apparecchio o provocare scosse elettriche e incendi.)
- Se l'apparecchio si danneggia, inoltrare immediatamente una richiesta di riparazione al fornitore o al centro assistenza.
- Riporre l'apparecchio e gli accessori in un luogo asciutto privo di acqua e umidità.
(L'umidità e le sostanze liquide possono danneggiare i componenti e i circuiti dell'apparecchio.)
- Non conservare l'apparecchio in luoghi sporchi e polverosi.
(La polvere e altre sostanze estranee possono provocare guasti, incendi o scosse elettriche con conseguenti lesioni.)
- Non conservare l'apparecchio su superfici inclinate.
(In caso di caduta dell'apparecchio, vi è il rischio di danneggiarlo e provocare guasti.)
- La temperatura di conservazione ideale del dispositivo è compresa tra -20°C e 60°C. Conservare l'apparecchio alla giusta temperatura.
- Conservare l'apparecchio in un luogo lontano dalla portata dei bambini.



- Non conservare l'apparecchio in un luogo esposto a fonti di calore e alla luce diretta del sole. (Vi è il rischio di guasti, deformazioni e incendi.)
- Non posizionare oggetti sull'apparecchio.
(Se l'apparecchio è messo in funzione o spostato con al di sopra recipienti contenenti liquidi (vasi, bottiglie d'acqua, tazze, prodotti cosmetici o chimici), sostanze volatili o chimiche od oggetti affilati (forbici o coltelli), vi è il rischio di caduta con conseguenti incendi e lesioni.)
- La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non possono essere eseguite da un bambino senza supervisione.

2-5. Istruzioni per l'utilizzo e la conservazione delle guaine



- Controllare regolarmente le condizioni della guaina
- Non conservare la guaina sotto la luce diretta del sole o in un luogo a elevate temperature.
- Conservare la guaina in un luogo pulito e non conservare l'apparecchio in un ambiente in cui la temperatura si abbassi troppo durante l'inverno.
- Se si conserva la guaina in un ambiente ad alta umidità, vi è il rischio di formazione di muffe.
- Non posizionare la guaina accanto a fonti di calore (stufette, sigarette) e oggetti affilati. (aghi, forbici).
- Se la guaina si è sporcata con sostanze estranee, usare un panno asciutto o un fazzoletto per rimuoverle.
- Conservare la guaina e il tubo in modo che non si pieghino eccessivamente e non siano schiacciati da oggetti pesanti.
- Utilizzare le maniche se si indossano indumenti sottili.
(Potrebbero verificarsi allergie su persone con la pelle sensibile).
- Nell'aprire e chiudere la cerniera sulla guaina, fare attenzione a eventuali peli o indumenti che potrebbero impigliarsi.
- Se la guaina rimane a lungo inutilizzata, pulirla e verificare che funzioni correttamente prima dell'uso.
- Conservare la guaina in un luogo lontano dalla portata dei bambini.




- La guaina va collegata solo a dispositivi prodotti da DAESUNG MAREF. Non collegare la guaina a prodotti fabbricati da altre aziende.
- Prima di indossare la guaina, rimuovere tutti gli accessori dalla parte del corpo su cui la si indosserà.
(Se si indossano accessori, vi è il rischio di danneggiare la guaina o lesionare la parte del corpo su cui la si indossa.)
(Gamba: oggetti dentro le tasche dei pantaloni, cavigliere, ecc.)
(Vita: cinture, oggetti dentro le tasche dei pantaloni, portachiavi, cellulare, ecc.)
(Braccio: orologi, braccialetti, anelli, ecc.)
- Non insufflare aria nella guaina se ancora non la si è indossata.
(In questo modo si potrebbe danneggiare la guaina.)
- Non usare spille da balia per fissare il tubo sulla guaina.
(La parte affilata della spilla da balia potrebbe strappare la guaina.)



2-6. Pulizia

2-6-1. Come pulire il dispositivo

- Se il dispositivo si è sporcato con sostanze estranee (es.: sporcizia, polvere, sangue), spegnere il dispositivo, applicare una piccola quantità di acqua o di detergente neutro su un panno e rimuovere delicatamente la sostanza estranea.
(Vi è il rischio di scolorimenti, danni e guasti.)
(Una volta pulito il dispositivo, lasciarlo asciugare completamente prima dell'uso.)
- Per la sanificazione, spegnere prima il dispositivo e usare del cotone con un detergente neutro.
(Fare attenzione a non causare eventuali scolorimenti, danni o malfunzionamenti).
- Fare il possibile per impedire che eventuali liquidi entrino nella presa d'aria o nella presa CA sul retro del dispositivo. In caso di contatto del liquido, con le parti interne, possono verificarsi errori di funzionamento, scosse elettriche e incendi.
- Non pulire il dispositivo con benzene, diluente, alcool, ecc. e non spruzzare acqua direttamente sul dispositivo.
(Vi è il rischio di scolorimenti, danni, scosse elettriche o incendi.)
- Per la pulizia, utilizzare un detergente neutro o alcalino.
Diluire in acqua se il detergente si trova allo stato alcalino non diluito.
Evitare il contatto con la pelle o gli occhi.

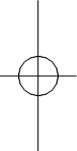

2-6-2. Come pulire il tubo




- Per eliminare eventuali materiali estranei dall'interno del tubo usare un panno morbido con una piccola quantità d'acqua o di detergente neutro.
- Fare attenzione a non lasciare entrare liquidi nel tubo.
(Se rimane acqua all'interno del tubo, la durata del tubo stesso può essere compromessa, potrebbe inoltre danneggiarsi e causare un incendio se l'acqua penetra nel dispositivo passando attraverso il tubo.)
- Non spruzzare acqua direttamente sul tubo né immergere il tubo nell'acqua.
- Non strofinare il dispositivo con benzene, diluente, alcool, ecc.

2-6-3. Come pulire la guaina



- Se la guaina si è sporcata con sostanze estranee, usare un panno asciutto o un fazzoletto per pulirla.
- Usare una piccola quantità di detergente neutro o acqua su un panno morbido e lasciare asciugare completamente la guaina. (Bagnare la guaina può ridurne la durata o alterarne la forma.)

2-7. Condizioni di funzionamento / conservazione

2-7-1. Condizioni operative

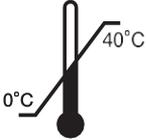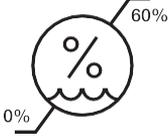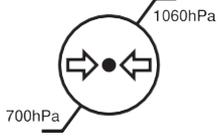Temperatura (-C)	Umidità relativa (%)	Pressione atmosferica (hPa)
		

2-7-2. Condizioni di Conservazione

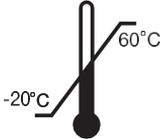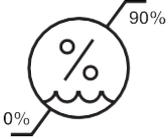Temperatura (-C)	Umidità relativa (%)
	

2-8. RAEE



Questo simbolo indica la raccolta differenziata delle AEE in base alla DIRETTIVA 2012/19/UE.

Scopo della Direttiva è contribuire alla produzione e al consumo sostenibili attraverso, come prima priorità, la prevenzione dei RAEE e, in aggiunta, il riuso, il riciclo e altre forme di recupero, di tali rifiuti in modo da ridurre lo smaltimento dei rifiuti e contribuire all'uso efficiente delle risorse e al recupero di preziose materie prime secondarie.

La Direttiva copre tutte le AEE usate dai consumatori e le AEE destinate all'uso professionale.

I consumatori devono contribuire attivamente alla raccolta di questo tipo di rifiuti e devono essere incoraggiati a restituire i RAEE secondo le disposizioni in vigore.

Il produttore deve fornire informazioni in merito alla capacità di riutilizzo, riciclo e recupero. Il 75% sarà recuperato e il 55% sarà trattato per il riuso e riciclato nella categoria 5 (piccole apparecchiature) della DIRETTIVA 2012/19/UE ALLEGATO III.

Anycare ha un tasso di recupero dell'84,81% e un tasso di riciclabilità dell'81,49%.

Anycare premium ha un tasso di recupero dell'84,81% e un tasso di riciclabilità dell'81,19%.

Le informazioni per gli impianti di trattamento sono messe a disposizione dei centri di predisposizione al riutilizzo e degli impianti di trattamento e riciclaggio da parte dei produttori di AEE.


Anche DAESUNG MAREF deve prepararsi in questo senso, ove richiesto.

3


Descrizione del dispositivo_Ancare

3-1. Imballo del dispositivo

3-1-1. Kit di base

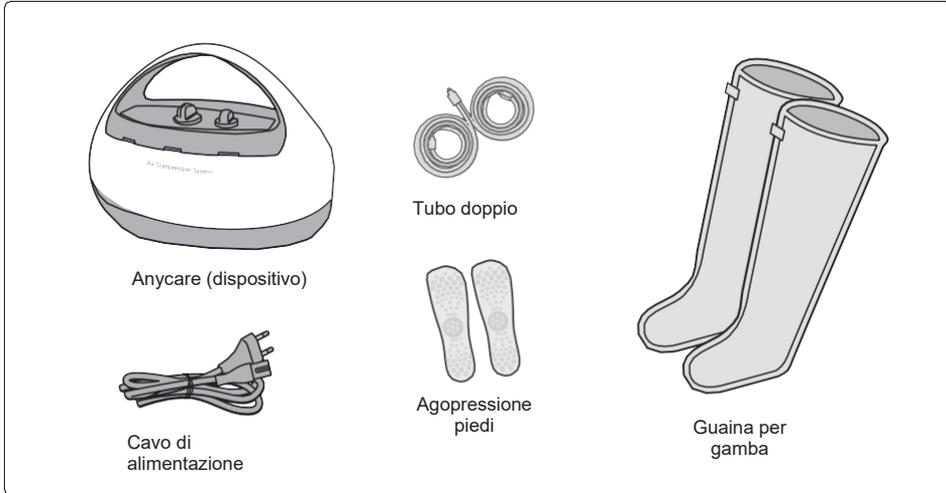

3-1-2. Accessori

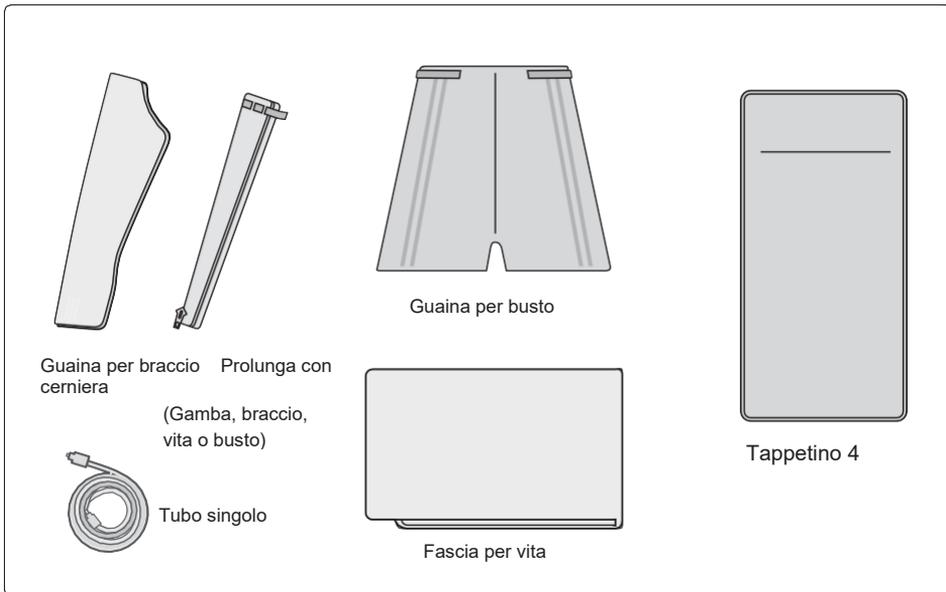

3-2. Specifiche del dispositivo

Voce	Specifiche
Modello	Anycare
Tipo di protezione	Classe II
Tensione nominale	CA220 - 240V, 50/60Hz
Consumo di energia	32 W
Pressione di regolazione	0 - 240 mmHg \pm 15%
Tempo	0 - 30 min
Dimensione	330 (L) x 180 (P) x 230 (A) mm
Peso	2,5 kg (solo corpo macchina)

- Gli accessori optional sono acquistabili presso i rivenditori locali.

Impiegare solo accessori originali DAESUNG MAREF.

Se gli accessori non sono prodotti da DAESUNG MAREF, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente, non durare a lungo o subire guasti, invalidando inoltre la garanzia per le riparazioni.

3-3. Aspetto e nomi delle funzioni




4


Descrizione del dispositivo_Anycare Premium

4-1. Imballo del dispositivo

4-1-1. Kit di base

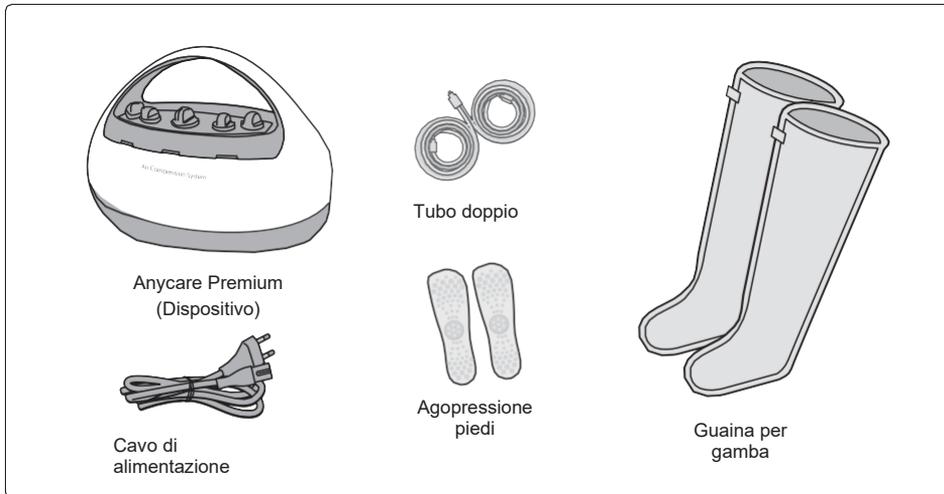

4-1-2. Accessori

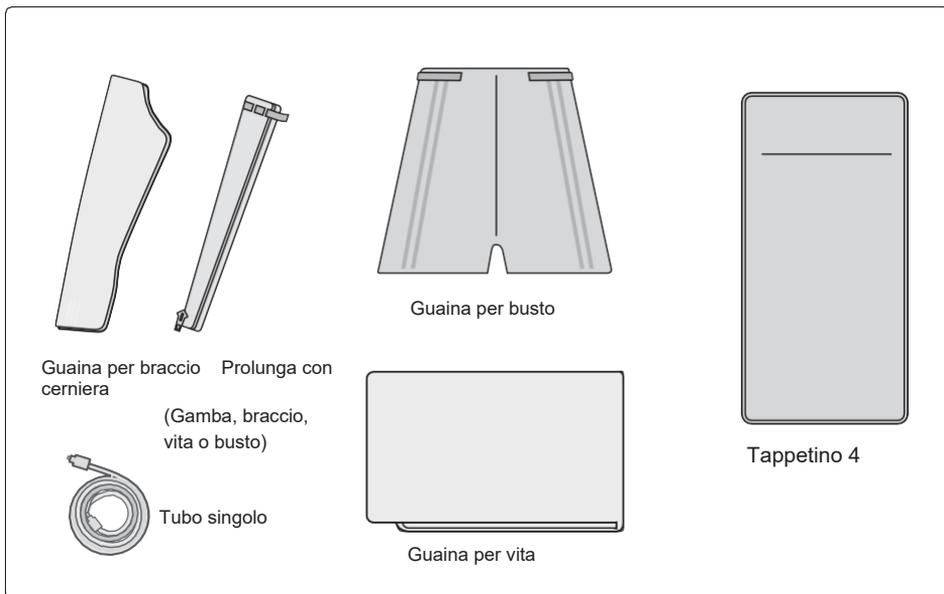

4-2. Specifiche del dispositivo

Voce	Specifiche
Modello	Anycare Premium
Tipo di protezione	Classe II
Tensione nominale	CA220 - 240V, 50/60Hz
Consumo di energia	32 W
Pressione di regolazione	0 - 240 mmHg \pm 15%
Tempo	0 - 30 min
Dimensione	330 (L) x 180 (P) x 230 (A) mm
Peso	2,5 kg (solo corpo macchina)

- Gli accessori optional sono acquistabili presso i rivenditori locali.

Impiegare solo accessori originali DAESUNG MAREF.

Se gli accessori non sono prodotti da DAESUNG MAREF, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente, non durare a lungo o subire guasti, invalidando inoltre la garanzia per le riparazioni.

4-3. Aspetto e nomi delle funzioni



Pres a d'aria

Pres a per collegamento tubo aria



Interruttore on/off

Interruttore di accensione/spengimento

Connettore per cavo di alimentazione

* Informazioni sugli accessori

	Nomi	Misure	Rif. n.
GUAINE	GUAINA PER GAMBA	L	4LAGL5A
		XL	4LAGX40
		XXL	4LAGY00
	GUAINA PER BRACCIO	F	4AAGF3A
	GUAINA PER VITA	F	4WAGF1A
	GUAINA PER BUSTO	F	4SAGF5A
	TAPPETINO 4	F	4MDRF00
PROLUNGA	CON CERNIERA PER GAMBA	L	4ELGL02
		XL	4ELGX01
		XXL	4ELGY00
	PROLUNGA CON CERNIERA PER BRACCIO	F	4EAGF02
	PROLUNGA CON CERNIERA PER BUSTO	F	4ECGF01
ALTRO	TUBO SINGOLO	-	1000370
	TUBO DOPPIO	-	1000380
	TUBO DI DISTRIBUZIONE	-	100050A

※ Prolunga con cerniera (accessorio acquistabile separatamente)

- Se una guaina risulta troppo piccola, si consiglia di utilizzare l'apposita prolunga con cerniera.
- Aprire la cerniera della guaina fino in fondo e collegare la prolunga.
Collegando una prolunga, la larghezza della guaina si estende di circa 10 cm.

5



Utilizzo del dispositivo e procedura

5-1. Configurazione e utilizzo

- 1) Collegare il cavo di alimentazione al dispositivo.
- 2) Collegare il tubo aria al dispositivo. (Inserire fino in fondo per impedire fuoriuscite d'aria.)



- 3) Collegare il tubo aria alle guaine.

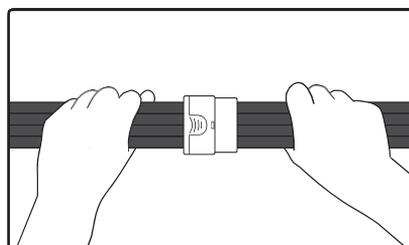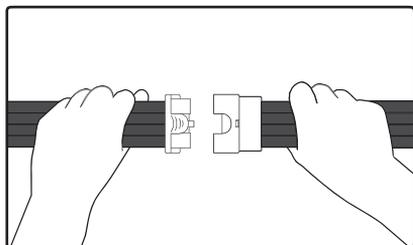

- Il dispositivo ripete in sequenza il gonfiaggio e lo sgonfiaggio di ogni camera nell'ordine piede > polpaccio > ginocchio > coscia. Verificare che la sequenza sia ripetuta correttamente da piede a coscia.

- ▷ In caso di guaina per braccio:
mano > gomito > avambraccio > spalla
- ▷ In caso di guaina per vita:
addome > vita > bacino > fianchi

(Usare il tubo singolo se si indossa una sola guaina.)

(Usare il tubo doppio se si indossa la guaina per busto o due guaine.)

4) Indossare le guaine che si desiderano utilizzare.

- L'utente potrebbe sentirsi più a suo agio indossando le guaine su indumenti leggeri anziché sulla pelle nuda
 - Chiudere la cerniera completamente per evitare di danneggiare le camere delle guaine.
 - Fare attenzione a non impigliare abiti o parti del corpo nella cerniera.
- ※ Vedi pagina 21.

5) Accendere il dispositivo con l'apposito interruttore.



6) Impostare il tempo e la pressione.

- Usare il compressore per il prima volta a una pressione eccessiva può provocare lesioni. Al primo utilizzo, provare il compressore con una pressione bassa per 10 minuti per poi aumentare gradualmente la pressione e il tempo di utilizzo.

- ※ Anycare è controllato da una manopola per il controllo della pressione in maniera generale. Anycare Premium è in grado di controllare la pressione di ciascuna delle 4 camere con le apposite manopole.


7) Per arrestare il funzionamento, posizionare la manopola del tempo su zero.

※ mmHg → hPa

mmHg	hPa	mmHg	hPa	mmHg	hPa
25		19050	1373	1705	2373
		5	0	0	0
35	47	110	147	185	247
	53	5	3	0	3
45	60	120	160	195	260
	67	5	7	0	7
55	73	130	173	205	273
		5	0	0	0
65	87	140	187	215	287
	93	5	193	0	293
75	100	150	200	225	300
	7	5	7	0	7
85	113	160	213	235	313
90	120	165	220	240	320


5-2. Dimensioni delle guaine e della prolunga

Dimensioni della guaina per gamba

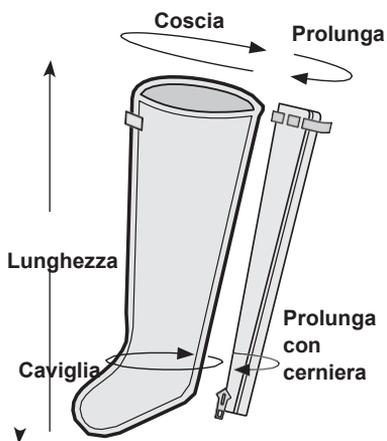


Misure	Coscia (+prolunga)	Caviglia (+prolunga)	Lunghezza
L	62 cm (72 cm)	41 cm (48 cm)	74 cm
XL	75 cm (85 cm)	43 cm (50 cm)	79 cm
XXL	76 cm (86 cm)	46 cm (53 cm)	94 cm

Dimensioni della guaina per braccio

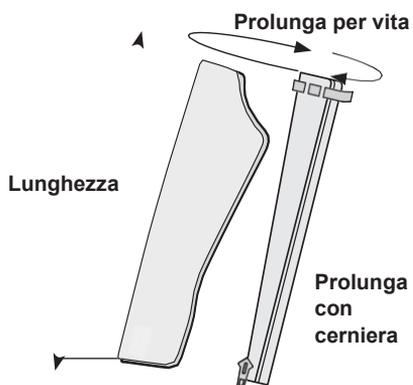


Misure	Vita (+prolunga)	Lunghezza
Taglia unica	50 cm (60 cm)	88 cm

Dimensioni della guaina per vita

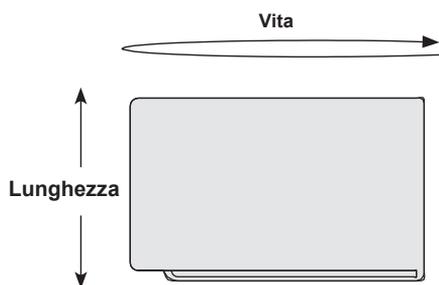


Misure	Vita	Lunghezza
Taglia unica	122 cm	38 cm

Dimensioni della guaina per busto

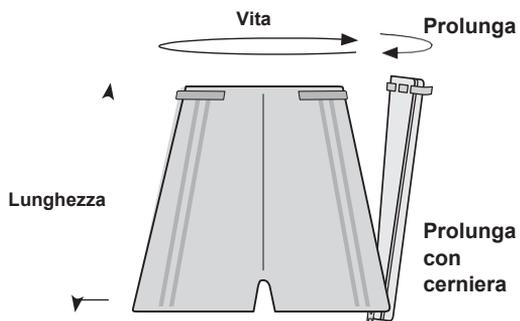

Misure	Vita (+prolunga)	Lunghezza
Taglia unica	108 cm (118 cm)	74 cm

Dimensioni del tappetino

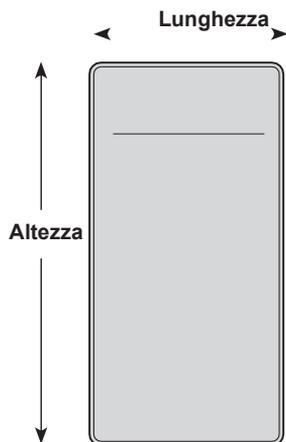

Misure	Lunghezza	Altezza
Taglia unica	60 cm	100 cm

6

Risoluzione dei problemi

6-1. Risoluzione dei problemi generali



N°	Problema	Causa	Soluzione
1	Assenza di alimentazione	Errore collegamento elettrico	Verificare che la spina sia correttamente inserita nella presa di corrente.
2	L'alimentazione è accesa ma il dispositivo non funziona.	Errore alimentazione elettrica	Spegnere e riaccendere il dispositivo
3	Rumore durante il funzionamento	Condizione di impostazione	Verificare che il dispositivo sia installato orizzontalmente
			Verificare l'eventuale presenza di oggetti sopra o sotto il dispositivo
4	Assenza di aria nel tubo	Errore collegamento tubo o tubo piegato	Verificare che il tubo sia inserito correttamente nel dispositivo
			Verificare che il tubo non sia piegato
5	L'aria scorre nel tubo in direzione errata	Errore di collegamento	Verificare che la spina sia correttamente inserita nella presa

6-2. Altri guasti

N°	Problema	Causa	Soluzione
1	Quantità di aria erogata scarsa	Tubo danneggiato	Contattare il negozio in cui si è acquistato il dispositivo.
		Presa tubo aria danneggiata	
		Componenti interni danneggiati	
2	Non funziona una volta acceso	Componenti interni danneggiati	Contattare il negozio in cui si è acquistato il dispositivo.



NOTE

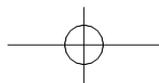

Garanzia

Grazie per avere scelto di utilizzare un nostro dispositivo. Daesung Maref fa il possibile per migliorare la qualità dei suoi dispositivi.

※ Non possiamo essere ritenuti responsabili per eventuali guasti derivanti dalla scarsa cura dell'utente nell'uso del dispositivo o nei seguenti casi, anche durante il periodo di validità della garanzia:

1. Il disturbo è stato causato da un forte impatto.
2. L'utente ha riparato o riprodotto in modo arbitrario una parte interna.
3. Il dispositivo è stato utilizzato in un ambiente non raccomandato.
4. Il dispositivo è stato utilizzato in modo non conforme alla "Modalità di utilizzo".
5. Le guaine sono materiali di consumo.

Dispositivo di compressione	
aria Anycare / Anycare	
Garanzia	Premium: 1 anno

DS MAREF
DAESUNG MAREF CO.,LTD.



RND-R-MUM-103-05-01-01 (Rev.4)

STORIA DELL'AZIENDA

- **1990**
- 1986
- Fondazione di DAESUNG Machinery Company
- 1994
- Conversione in DAESUNG MAREF CO. LTD.
- 1999
- - Registrazione di DOCTOR LIFE
- - Registrazione del modello di utilità per il dispositivo medico per pressoterapia
- **2000**
- 2004
- - Bronzo al 34° Precious Technique award
- - Vicepresident award
- Certificazione World class products
- 2006
- Innovation management awards
- - KFDA awards conferito dal Primo ministro
- 2007
- - Conferimento del Merit Award
- 2008
- - Ricevuta citazione da parte del Direttore dell'agenzia tributaria regionale di Chungbu
- 2009
- - Citazione da parte del sindaco di Gunpo-si
- - Premio conferito dal Ministro della salute e del Welfare

2010

2010

- Citazione da parte del Governatore della provincia di Gyeonggi nella Giornata del Commercio e dell'Industria

2011

- President Award

- Gold Listed al Korea Precision Industry Technology Contest

2012

- Selezionata come Global Small Giants Company

2013

- Membro del fondo di garanzia del credito

- Membro del Trade Industry Forum

2014

- Membro incaricato di INNO-BIZ

- Korean world-class product award in riconoscimento del sistema di prevenzione della trombosi venosa profonda (TVP)

2015

- President award all'8° edizione del Medical devices day per le industrie

2017

- Selezionata come azienda di innovazione nel design

- Gran premio per il servizio assistenza assegnato dai consumatori

2018

- Sponsor ufficiale di Seul E-Land FC

- Citazione da parte del Ministro del Lavoro



DS MAREF
DAESUNG MAREF CO.,LTD.

DAESUNG MAREF CO.,LTD.
298-24, Gongdan-ro, Gunpo-si, Gyeonggi-do, Corea

Tel : +82-31-459-7211 | Fax : +82-31-459-7215

E-mail : info@dsmaref.com | <http://www.dsmaref.com>