



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403  
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 - fax +39 02 95380056  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

# **PETTINE ELETTRICO ANTI PIDOCCHI ELECTRIC LICE COMB PEIGNE ÉLECTRIQUE ANTI-POUX PEINE ANTIPIOJO ELÉCTRICO**

**Manuale utente - User manual  
Notice d'utilisation - Manual del usuario**



**ATTENZIONE:** Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

**ATTENTION:** The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

**AVIS:** Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

**ATENCIÓN:** Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.



Fabbricante/Manufacturer:  
Gima S.p.A  
20060 Gessate (MI) - Italy  
Made in P.R.C.



EMC DIRECTIVE



## ***Indice***

Introduzione.....	3
Istruzioni per la sicurezza .....	3
Caratteristiche .....	4
Descrizione apparecchio e relativi accessori .....	5
Installazione delle batterie .....	5
Pulizia e disinfezione .....	5
Specifiche tecniche.....	6
Funzionamento .....	6
Condizioni di garanzia GIMA.....	8

## **INTRODUZIONE**

I pidocchi sono piccoli insetti privi di ali. A completo sviluppo, sono di dimensioni simili a un seme di sesamo. Dato che non possono sopravvivere al freddo, si aggrappano ai nostri capelli, tenendosi vicino al calore delle nostre teste.

I pidocchi sono innocui - anche se possono causare prurito alla testa del vostro bambino. I pidocchi sono una seccatura vecchia migliaia di anni. Fortunatamente per sbarazzarsi di loro al giorno d'oggi sono necessari soltanto dieci minuti di trattamento!

Il pettine elettrico anti pidocchi Gima è una valida opzione da considerare nel tentativo di eliminare i pidocchi, per evitare che si diffondano sui capelli e sul cuoio capelluto dei membri della vostra famiglia. Non è certo un segreto che un'infestazione di pidocchi può rendere la vita difficile per tutti in casa ma grazie alle moderne tecnologie - un pettine elettrico anti pidocchi - sbarazzarsi di questi parassiti può essere ancora più semplice.

## **ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA**

Per la vostra sicurezza, si consiglia di leggere questo manuale con molta attenzione, e osservare le seguenti istruzioni.

- Usare l'apparecchio solo come previsto, conformemente alle istruzioni fornite in questa guida.
- Questo dispositivo elettrico non è un giocattolo, tenetelo lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare con bambini al di sotto dei 3 anni.
- I bambini devono essere controllati da un adulto durante l'uso di questo dispositivo elettrico.
- In caso di pace maker, arti artificiali o qualsiasi impianto elettronico, consultare il medico prima dell'uso.
- Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di telefoni cellulari, forni a microonde o televisori (mantenere una distanza di più di 1 metro).
- Per le persone che soffrono di epilessia o di problemi cardiaci, l'uso di questo apparecchio è sconsigliato.
- Non utilizzare su capelli umidi, nodi di qualsivoglia genere o trecce.
- Evitare il contatto diretto con cute lesa, screpolata o secca e con orecchie, occhi e bocca.
- Evitare l'esposizione diretta alla luce solare e non riporre su superfici calde.
- Tenere l'apparecchio lontano dall'umidità e dai liquidi.

- L'utilizzo è vietato qualora l'apparecchio risulti danneggiato, non funzioni correttamente o sia stato immerso in un liquido.
- Prevenire incidenti o danni tenendo l'apparecchio lontano da indumenti, setole, cavi, stringhe, lacci, fili, etc.
- Quando non in uso, spegnere sempre l'apparecchio.
- Rimuovere la batteria se l'apparecchio non deve essere utilizzato per lunghi periodi.

## **CARATTERISTICHE**

Con un solo gesto, il pettine anti pidocchi Gima non solo disperde in modo efficiente, ma anche uccide pidocchi e lendini esistenti con una tensione elettrica crescente di 130-180 volt, impercettibile e innocua per la salute umana.

L'attività del pettine è indicata da un segnale acustico, con modalità differenti: un suono di tre secondi indica il funzionamento dell'apparecchio (60-90V); un breve segnale di 0,5 secondi indica il contatto con il corpo estraneo (130-180V).

Il pulsante di accensione / spegnimento è dotato di una spia, le cui modalità di lampeggiamento indicano se la batteria sia carica o scarica.

### **Funzione di spegnimento automatico.**


Dopo 5 minuti di accensione senza utilizzo, l'apparecchio si spegnerà automaticamente per prolungare la durata della batteria.

Indicazione di batteria scarica: l'apparecchio rileva la batteria se la tensione è inferiore alla normale tensione di lavoro; l'indicatore LED s'illuminerà due volte brevemente, una volta più a lungo e il cicalino emetterà un suono continuo per 30 secondi, fino allo spegnimento automatico.


Il design impeccabile include gli accessori all'interno dell'apparecchio principale, portatili e adatti per i viaggi, non avrete il timore di perderli.

## **DESCRIZIONE APPARECCHIO E RELATIVI ACCESSORI**

1. Accensione / Spegnimento  
(premere il pulsante)
2. Copertura protettiva
3. Pettine elettrico
4. Coperchio vano batteria
5. Spazzola per la pulizia
6. Vano batteria

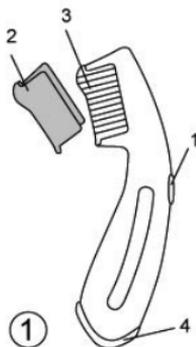

## **INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE**

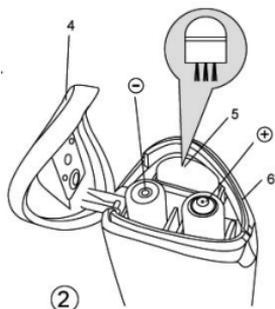

Aprire il coperchio del vano batteria sollevandolo dal punto 4.  
Inserire due batterie AAA. Rispettare la polarità (+/-) come indicato sulle pile e sul vano batteria. Un errore di polarità può danneggiare il vostro apparecchio e compromettere la garanzia.

## **PULIZIA E DISINFEZIONE**

1. Rimuovere le batterie prima della pulizia
2. Evitare l'uso di qualsiasi liquido o detergente aggressivo per pulire l'apparecchio.

3. Pulire l'esterno dell'unità utilizzando un panno asciutto, carta o un panno morbido in tessuto, per i denti utilizzare l'apposita spazzola in dotazione per rimuovere eventuali ostruzioni.
4. Verificare che non entri acqua nel gruppo durante la pulizia e non immergere mai l'unità.
5. Conservare in un ambiente pulito, asciutto, fresco e ben areato.
6. L'esposizione diretta alla luce solare può danneggiare l'unità.


## **SPECIFICHE TECNICHE**

Modello	24402
Alimentazione	N. 2 Batterie AAA
Corrente stand-by	$\geq 30\mu\text{A}$
Corrente massima	$\geq 30\text{mA}$
Tensione di esportazione	30 ~ 180 V
Consumo	$\geq 35\text{mA}$ durante l'utilizzo
Durata batteria	Otto ore di uso continuo
Spegnimento automatico	Sì
Dimensioni	177 x 34 x 39 mm
Peso	200 gr
Certificazioni	CE, RoHS

## **FUNZIONAMENTO**

1. Premere il pulsante Accensione / Spegnimento n. 1, tenere premuto per due secondi per azionare l'apparecchio.  
L'indicatore LED si accenderà, il cicalino emetterà un suono lungo tre secondi per indicare il funzionamento.
2. Utilizzare come un normale pettine. Accertarsi di usare l'apparecchio su capelli asciutti. Sciogliere nodi e trecce prima dell'utilizzo.
3. Durante il funzionamento, il LED si accenderà e il cicalino suonerà una volta ogni tre secondi.
4. Quando i denti entreranno in contatto con un pidocchio o un uovo, il segnale acustico si trasformerà da breve a veloce e l'indicatore LED lampeggerà rapidamente.  
4-1. La tensione dei denti eliminerà il corpo estraneo.

- 4-2. Assicurarsi di pulire accuratamente il pettine con l'apposita spazzola dopo ogni utilizzo per poterlo riutilizzare continuamente.
5. Dopo ogni utilizzo, spegnere l'apparecchio e pulire il pettine a fondo con l'apposita spazzola. Rimettere il coperchio protettivo n. "2" sul pettine prima di riporlo nella confezione.

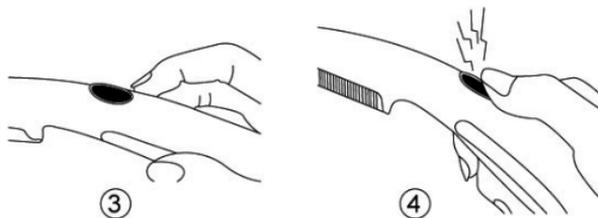



**Smaltimento:** *Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per ulteriori informazioni sui luoghi di raccolta, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto. In caso di smaltimento errato potrebbero venire applicate delle penali, in base alla leggi nazionali.*

## **CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA**

Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto. Questo prodotto risponde a standard qualitativi elevati sia nel materiale che nella fabbricazione. La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura GIMA. Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione delle spese di mano d'opera o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi. Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura. La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno l'effetto di prolungare la durata della garanzia. La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non autorizzato o con pezzi di ricambio non originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio. GIMA non risponde di malfunzionamenti su apparecchiature elettroniche o software derivati da agenti esterni quali: sbalzi di tensione, campi elettromagnetici, interferenze radio, ecc. La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se presente) risulti asportato, cancellato o alterato. I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale è avvenuto l'acquisto. Spedizioni inviate direttamente a GIMA verranno respinte.