



www.led.it

**IT** KIT DI ASPIRAZIONE per ASPIRATORI DI FUMI CHIRURGICI

REF 00900.02

**LED SpA**  
Via Selciatella 40  
04011 Aprilia (LT) - ITALY



0°C 50°C  
RH  
20% - 80%



**IT EN ES FR DE PT TR**

IA00900-01Ar2  
ed.05/2012 2012 (C) LED SpA

Verificare lo stato del prodotto prima dell'utilizzo.

Prodotto monouso. Non riutilizzare.

Non aspirare liquidi.

Il prodotto deve essere smaltito secondo le procedure per il controllo dei rifiuti pericolosi.

Le connessioni devono essere eseguite da personale addestrato.


Il prodotto è fornito per l'aspirazione dei fumi negli interventi chirurgici a "cielo aperto" (es. laparotomia). La tipica connessione è:

-collegamento sul codice 00900.01 (fornibile a parte) (fig. A -part. 4)

-collegamento sul filtro serie XX00900.XXX (fig. A -part. 2)

Adatto per la connessione diretta ad un accessorio endoscopico (es. intervento di laparoscopia) o altro sistema di captazione compatibile per diametro di attacco (22mm).

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC A

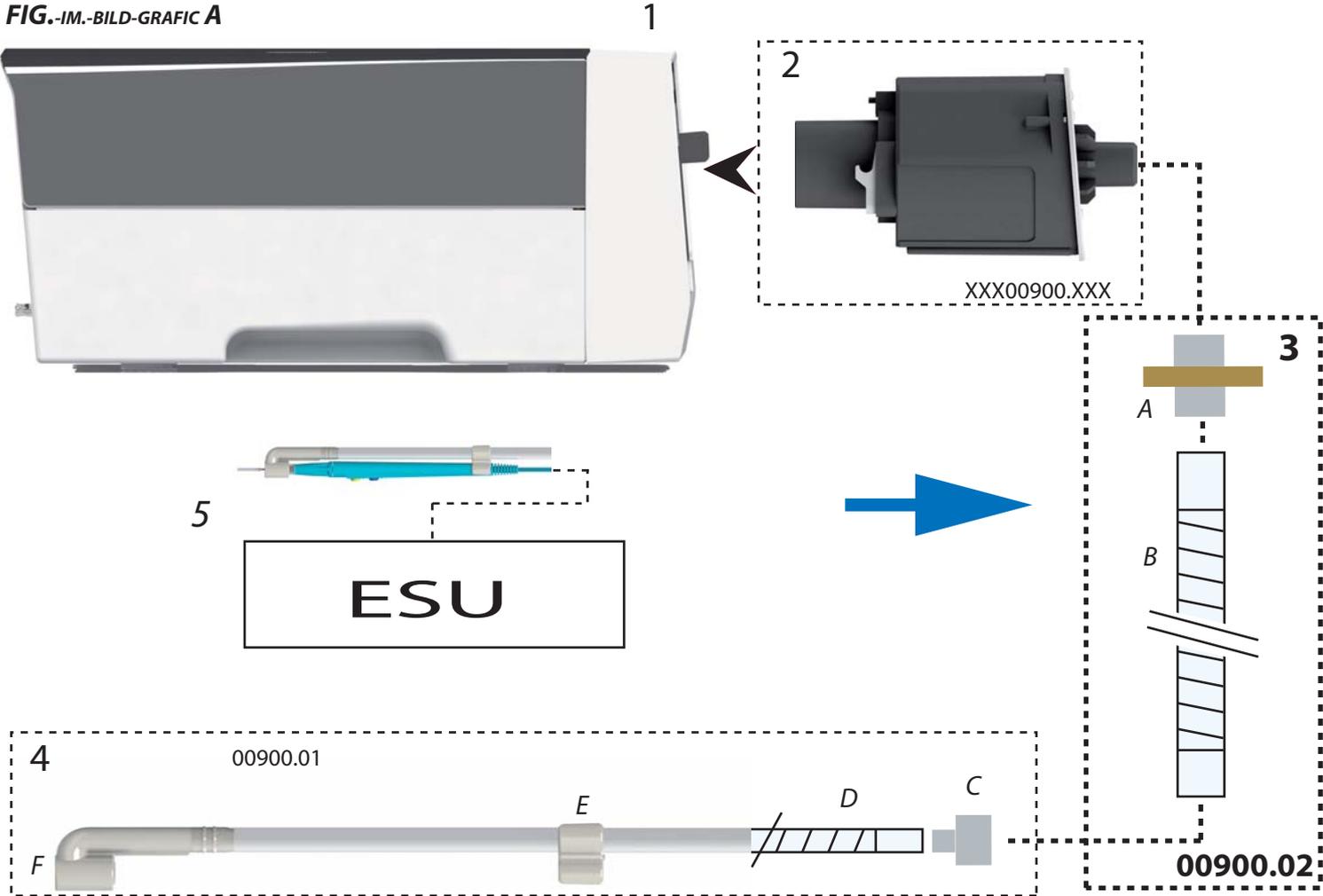

1 UNITA' DI ASPIRAZIONE FUMI\* serie XXX10200. 10 - XXX10200.10/115V **IT**  
 2 FILTRO\* serie XXX00900.XXX  
 3 KIT DI ASPIRAZIONE (00900.02) – A Filtro B - Tubo dia. 22mm  
 Lunghezza 2.4 mt  
 4 KIT ASPIRAZIONE MANIPOLO (00900.01)\* – C Adattatore 10mm/22mm – D  
 Tubo dia. 10mm Lunghezza 1.8 mt – E Clip –  
 F Adattatore per manipolo  
 5 Particolare del manipolo\* con 00900.01, il manipolo deve essere connesso alla  
 vostra unità elettrochirurgica (ESU\*). \*non fornito



REF 00900.02

**LED SpA**  
Via Selciatella 40  
04011 Aprilia (LT) - ITALY

IA00900-02Ar2  
ed.05/2012 2012 (C) LED SpA