

## PT - BOCAIS DE CARTÃO DESCARTÁVEIS: INSTRUÇÕES DE USO

**USO PRETENDIDO:** os bocais descartáveis destinam-se ao uso em conjunto com equipamentos de teste de função pulmonar e permitem que o paciente faça o exame sem ter contato direto com o equipamento.

O paciente manipula pessoalmente o bocal inserindo-o no equipamento. Os bocais devem ser aplicados apenas em pele intacta, limpa e saudável.

**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:** os dados de identificação (referência, lote e data de produção) constam da etiqueta afixada na caixa.

### USO:

- Siga sempre as instruções do espirômetro.
- Insira o bocal no sensor do dispositivo (turbina ou pneumotacômetro) sem forçar. Nunca reutilize o bocal para evitar expor o paciente à contaminação cruzada.
- Não abra antes de usar.
- Não use se a embalagem estiver danificada.
- O dispositivo não é adequado para utilização em pediatria neonatal.
- Guarde em local fresco e seco.

**DESCARTE E SEGURANÇA:** após o uso, o produto deve ser descartado em recipientes normais de resíduos sólidos atóxicos ou em lixo hospitalar geral.


**CONTRA-INDICAÇÕES:** com base na experiência e nos resultados de diversas análises, não existem efeitos adversos como resultado do uso adequado do produto.

**ARMAZENAGEM:** armazenar em local fresco e seco.

### AVISO:

- A embalagem em envelope individual termoselado (single-wrap) garante a ausência de bactérias, que é monitorada regularmente de acordo com o sistema de qualidade do fabricante. Se o dispositivo médico for reutilizado, existe o risco de infecção cruzada para o paciente que o reutiliza.
- Se o dispositivo for reutilizado, existem riscos de infecção cruzada para o paciente que o reutiliza.

Manuale d'uso LUMED Rev. 4.0 01/09/2023

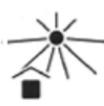

LUMED Srl  
Via Staffora 18/9  
20073 Opera ITALIA  
www.lumed.com  
tel +39 (0)2 57606750