



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

PARAVENTI

WING SCREENS

PARAVENTS

REF 45560-45561-45562-45563

Distribuito da / distributed by / distribué par
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant:
SCROSATI ARREDAMENTI METALLICI SRL
Via Vittorio Veneto 95, 21015 Lonate Pozzolo (VA)
scrosati@scrosati.com



PRODOTTI

- 45560 Paravento a 3 ante - senza tende
- 45561 Paravento a 3 ante con ruote - senza tende
- 45562 Paravento a 4 ante - senza tende
- 45563 Paravento a 4 ante con ruote - senza tende


INTRODUZIONE

Si consiglia di leggere attentamente il seguente manuale prima di utilizzare il presidio.

DESCRIZIONE

Il telaio del paravento è costituito da un tubolare in lega d'alluminio, dotato di ruote o piedini. Il prodotto è destinato a studi medici, ambulatoriali e di fisioterapia nel quale vi è necessità di creare un divisorio o una parte mobile.

COMPONENTI

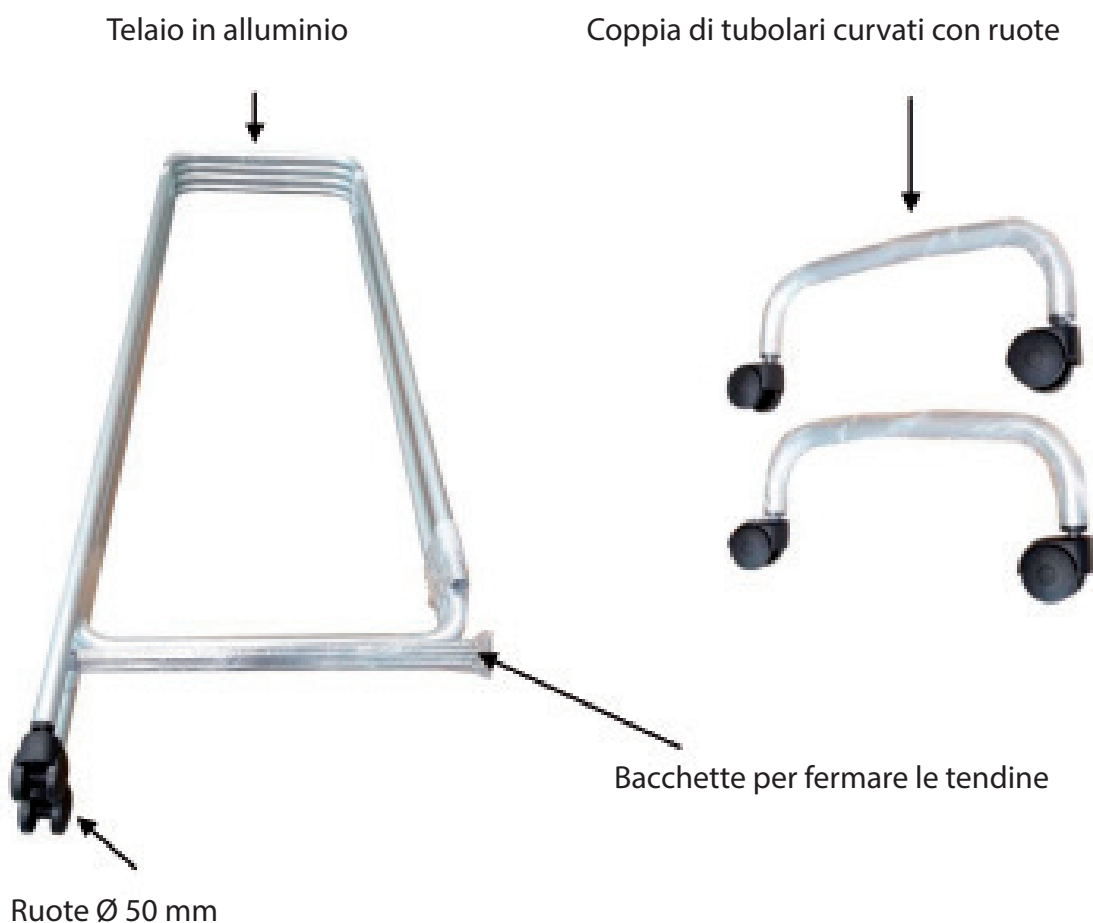

Sacchetto con materiale di montaggio



- n. 2 TE 6x50
- n. 2 DADI M6
- n. 4 RONDELLE 6x12
- CHIAVE ESAGONALE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Iniziare la fase di montaggio predisponendo un piano orizzontale di lavoro stabile.

	Prendere 1 vite TE, 2 rondelle e 1 dado e, utilizzando la chiave esagonale, fissare il telaio e il tubolare con le ruote come in foto. RIPETERE LA STESSA OPERAZIONE CON L'ALTRO TUBOLARE DOTATO DI RUOTE.
	Prendere le bacchette ed inserirle negli appositi fori nella parte inferiore del paravento, dopo aver infilato le tendine (vendute separatamente dal paravento).

SCHEMA TECNICA

Misure	• Cod.45560: cm 150 x h 167,5 • Cod.45561: cm 150 x h 174 • Cod.45562: cm 200 x h 167,5 • Cod.45563: cm 200 x h 167,5 Scatola cm 176x57x13
Peso	• Cod.45560: 3,7 kg • Cod.45561: 4 kg • Cod.45562: 5,1 kg • Cod.45563: 5,4 kg Scatola 2,4 kg

AVVERTENZE D'USO

- Verificare che i dadi del bloccaggio siano ben stretti.
- Attenersi alle portate massime indicate nelle schede tecniche.
- Evitare il contatto diretto con ferite aperte.
- Non adatto all'uso in ambienti aperti.

MANUTENZIONE E PULIZIA

- Utilizzare solo ricambi originali.
- Controllare periodicamente tutti i punti di fissaggio.
- Per conservarlo al meglio, si consiglia di evitare l'esposizione prolungata ai raggi solari; il contatto con ambienti salini; il deposito in ambienti molto umidi.
- Lavare le superfici in acciaio inox o alluminio con acqua saponata ed usare disinfettanti appositi.
- Risciacquare con un panno bagnato ed asciugare con cura.
- Non versare sulle superfici detergenti a base di cloro o ammoniaca, sostanze grasse ed oleose.
- Non usare per la pulizia utensili contenenti ferro. Se necessaria la disinfezione usare solo prodotti idonei non corrosivi.
-
-

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

PRODUCTS

- 45560 3 Wing screen - without curtains
- 45561 3 Wing screen with castors - without curtains
- 45562 4 Wing screen - without curtains
- 45563 4 Wing screen with castors - without curtains

INTRODUCTION

You should carefully read this manual before using this medical device.

DESCRIPTION

Wing screen in aluminium alloy tubular frame mounted on feet or castors. The product is intended for medical, outpatient and physiotherapy surgeries where there is a need to create a partition or mobile wall.

COMPONENTS

Aluminium alloy tubular frame

Pair of curved tubulars with castors



Castors Ø 50 mm

Assembly material



- n. 2 TE SCREWS 6x50
- n. 2 M6 NUTS
- n. 4 WASHERS 6x12
- HEXAGONAL WRENCH

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Begin the assembly phase by setting up a stable horizontal work plan.

	Take 1 TE screw, 2 washers and 1 nut and, using the hexagonal wrench, secure the frame and tubular with the wheels as in the picture. REPEAT THE SAME OPERATION WITH THE OTHER TUBULAR WITH CASTORS.
	Take the rods and insert them into the holes at the bottom of the screen, after inserting the curtains (sold separately from the screen).

TECHNICAL DATA

Measurement	• Cod.45560: cm 150 x h 167,5 • Cod.45561: cm 150 x h 174 • Cod.45562: cm 200 x h 167,5 • Cod.45563: cm 200 x h 167,5 Box cm 176x57x13
Weight	• Cod.45560: 3,7 kg • Cod.45561: 4 kg • Cod.45562: 5,1 kg • Cod.45563: 5,4 kg Box 2,4 kg

WARNINGS!

- Check the locking nuts are tightened.
- Observe the maximum flow rates indicated in the data sheets.
- Avoid direct contact with open wounds.
- Not for use in open environments.

MAINTENANCE AND CLEANING

- Use only original spare parts.
- Periodically check all fixing points.
- To preserve at best, it is recommended to avoid prolonged exposure to sunlight, to contact and deposit in saline and very humid environments.
- Wash the stainless steel or aluminium surfaces with soapy water and use appropriate disinfectants.
- Rinse with a damp cloth and dry thoroughly.
- Do not spill on the surface cleaners containing chlorine or ammonia, fatty and oily substances.
- Do not use cleaning utensils containing iron. If necessary disinfection only use suitable non-corrosive products.

GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

PRODUITS

- 45560 Paravent 3 panneaux - sans rideau
- 45561 Paravent 3 panneaux avec roulettes - sans rideau
- 45562 Paravent 4 panneaux - sans rideau
- 45563 Paravent 4 panneaux avec roulettes - sans rideau

INTRODUCTION

Il est conseillé de lire attentivement le manuel suivant avant d'utiliser l'équipement.


DESCRIPTION

Le bâti du paravent est constitué d'un tube en alliage d'aluminium, doté de roues ou de pieds. Le produit est destiné aux cabinets médicaux, ambulatoires et de kinésithérapie dans lesquels il est nécessaire de créer une séparation ou une partie mobile.

COMPOSANTS

Bâti en aluminium

Paire de tubes cintrés avec roues

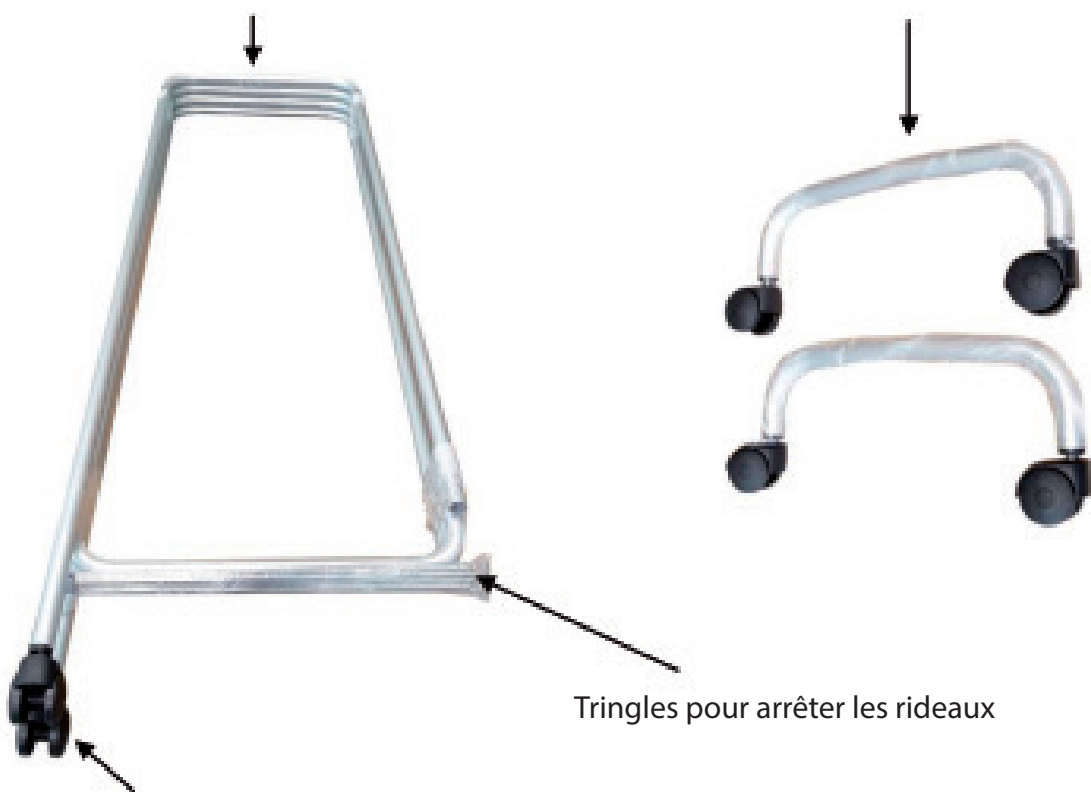

Roues Ø 50 mm

Sachet avec matériel de montage



- n. 2 TE 6x50
- n. 2 ÉCROUS M6
- n. 4 RONDELLES 6x12
- CLÉ ALLEN

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Commencez la phase de montage en aménageant un plan de travail horizontal stable.



Prendre 1 vis TE, 2 rondelles et 1 écrou et, en utilisant la clé Allen, fixer le bâti et le tube avec les roues comme sur la photo. RÉPÉTER LA MÊME OPÉRATION AVEC L'AUTRE TUBE DOTÉ DE ROUES.



Prendre les tringles et les insérer dans les trous dédiés dans la partie inférieure du paravent, après avoir enfilé les rideaux (vendus séparément).

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	• Cod.45560: cm 150 x h 167,5 • Cod.45561: cm 150 x h 174 • Cod.45562: cm 200 x h 167,5 • Cod.45563: cm 200 x h 167,5 Boîte cm 176x57x13
Poids	• Cod.45560: 3,7 kg • Cod.45561: 4 kg • Cod.45562: 5,1 kg • Cod.45563: 5,4 kg Boîte 2,4 kg

AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION

- Vérifiez que les écrous de blocage sont serrés.
- Respectez la capacité de charge maximale indiquée dans les fiches techniques.
- Évitez le contact direct avec des blessures ouvertes.
- Ne convient pas à l'usage en plein air.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- N'utiliser que des pièces de rechange d'origine.
- Contrôler périodiquement tous les points de fixation.
- Pour le conserver au mieux, il est conseillé d'éviter l'exposition prolongée aux rayons solaires, le contact avec des environnements salins et les séjours dans des environnements très humides.
- Lavez les surfaces en acier inoxydable avec de l'eau savonneuse et utilisez des désinfectants spéciaux.
- Rincez avec un chiffon humide et séchez soigneusement.
- Ne versez pas sur les surfaces des détergents à base de chlore ou d'ammoniac, de substances grasses et huileuses.
- N'utilisez pas d'outils contenant du fer pour le nettoyage. Si une désinfection s'avère nécessaire, utiliser uniquement des produits adaptés non corrosifs.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.