

***SEDIA DA DOCCIA con schienale e braccioli in PU***

***SHOWER CHAIR with PU backrest and seat***

***CHAISE DE DOUCHE avec dossier et siège PU***

***SILLA DE DUCHA con respaldo y asiento en PU***

***CADEIRA DE DUCHE com encosto e assento em PU***

***DUSCHSTUHL mit PU-Rückenlehne und -Sitz***

***DUSCHSTOL med ryggstöd och sits i PU***

***ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ με πλάτη και κάθισμα PU***

E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.


Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

**REF** HE10688023 (Gima 42909)



**HEBEI HEALTHPLUS MEDICAL DEVICE CO.,LTD**  
NO.1,Chuangye Street,Matou Industry Park,HanDan City,HeBei  
Province,China  
Made in China

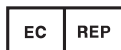

**Y.Sung Handelsvertretung**  
Dusselthaler Str. 24, 40211  
Dusseldorf Germany



**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



HE10688023

## SEDIA DA DOCCIA IN ALLUMINIO KD

Parti del prodotto



1. Schienale in PU
2. Sedile in PU
3. Tubo poggiapiedi regolabile in altezza
4. Suggestimento

### Istruzioni di sicurezza

- Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso.
- Prima dell'uso, verificare che tutti i componenti non siano danneggiati e che siano ben fissati.
- Approvato solo per uso interno.
- Gli indumenti o le parti del corpo possono essere schiacciati quando ci si siede, ci si alza, si inserisce il secchio della toilette e quando si sollevano i braccioli e li si blocca in posizione.
- Se è necessario superare qualche ostacolo, farlo lentamente e con attenzione, per evitare che le ruote si danneggino!
- Quando si utilizza una sedia a rotelle, utilizzare sempre i freni di stazionamento.
- Nel trasferimento da e verso la sedia a rotelle, i poggiapiedi devono essere spostati in modo da non essere d'intralcio.
- Non utilizzare mai i poggiapiedi come supporto per alzarsi: c'è il rischio di ribaltamento!
- Impedire l'uso non autorizzato, ad esempio da parte dei bambini.
- Prestare attenzione al peso massimo consentito per l'utente.

- Queste informazioni sono riportate nei dati tecnici di queste istruzioni per l'uso e sulla targhetta di identificazione.

### Montaggio

#### Fase 1

**Fissare lo schienale al telaio, premendo i pulsanti e facendo scorrere i tubi dello schienale nei tubi situati su ciascun lato e sul retro del sedile.**



**Fase 2**

Fissare le gambe al telaio premendo i pulsanti nei tubi situati su ciascun lato delle gambe.

Assicurarsi che i pulsanti “scattino” correttamente nei fori e che siano stabili e regolati allo stesso modo.

**Dati tecnici**

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Prodotto</b>                                         | SEDIA DA DOCCIA IN ALLUMINIO KD |
| <b>Numero prodotto</b>                                  | HE10688023                      |
| <b>Capacità di peso (libbre/kg)</b>                     | 300 libbre/ 136 kg              |
| <b>Dimensioni del prodotto (mm) L x L x A</b>           | (505-516)×(500-526)×(735-835)mm |
| <b>Peso del prodotto (libbre/kg)</b>                    | 4,02 kg                         |
| <b>Dimensioni del sedile (pollici/mm) L x L</b>         | 407 x 337 x 52 mm               |
| <b>Materiale dello schienale</b>                        | PU                              |
| <b>Materiale del sedile</b>                             | PU                              |
| <b>Materiale del telaio</b>                             | Alluminio                       |
| <b>Colore del telaio</b>                                | Argento                         |
| <b>Quantità nella scatola (pezzo)</b>                   | 1                               |
| <b>Peso del prodotto inclusa la scatola (libbre/kg)</b> | 5,74 kg                         |
| <b>Dimensione della scatola L x L x H</b>               | 460×200×430 mm                  |

**Simboli**

|                                                                                     |                                                                                 |                                                                                     |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso |  | Conservare in luogo fresco ed asciutto            |
|  | Fabbricante                                                                     |  | Data di fabbricazione                             |
|  | Numero di lotto                                                                 |  | Codice prodotto                                   |
|  | Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745                        |  | Rappresentante autorizzato nella Comunità europea |
|  | Dispositivo medico                                                              |  | Leggere le istruzioni per l'uso                   |
|  | Numero di serie                                                                 |  | Importato da                                      |

**CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA**

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi

HE10688023

# KD ALUMINUM SHOWER CHAIR

## Parts of the product



1. PU Backrest
2. PU Seat
3. Height adjustable foot tube
4. Tip

## Safety instructions

- Read these instructions for use carefully.
- All components should be checked for damage and a secure fit prior to use.
- Approved for indoor use only.
- Clothing or body parts can be pinched when sitting down, standing up, inserting the toilet bucket, as well as when raising the armrests and locking them into place.
- If you need to move over thresholds, do so slowly and carefully, otherwise the wheels can become damaged!
- When using a wheeled commode, always use the parking brakes.
- During transfer into/out of the wheeled commode, the footrests must be swiveled out of the way.
- Never use the footrests as assistance when getting up - risk of tipping!
- Prevent unauthorized use, for example, by children.
- Take note of the permitted maximum weight of the user.
- This information can be found in the technical data in these instructions for use as well as on the identification plate

## Assembly

### Step 1

**Attach backrest to the frame, by depressing push buttons and sliding the backrest pipes into the tubes located on each side and on the back of the seat.**



**Step 2**

Attach the legs to the frame by depressing push buttons into the tubes located on each side of the legs.

Make sure that push button “snap” correctly through holes and are stable and adjusted the same way.

**Technical data**

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Product</b>                               | KD ALUMINUM SHOWER CHAIR        |
| <b>Product number</b>                        | HE10688023                      |
| <b>Weight capacity (lbs/kg)</b>              | 300 lbs/ 136 kg                 |
| <b>Product dimension (mm) L x W x H</b>      | (505-516)×(500-526)×(735-835)mm |
| <b>Product weight (lbs/kg)</b>               | 4.02kg                          |
| <b>Seat dimension (inch/mm) L x W</b>        | 407*337*52mm                    |
| <b>Backrest material</b>                     | PU                              |
| <b>Seat material</b>                         | PU                              |
| <b>Frame material</b>                        | Aluminum                        |
| <b>Frame color</b>                           | Sliver                          |
| <b>Quantity in box (piece)</b>               | 1                               |
| <b>Product weight including box (lbs/kg)</b> | 5.74kg                          |
| <b>Carton dimension L x W x H</b>            | 460×200×430mm                   |

**Symbols**

|                                                                                     |                                                        |                                                                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Caution: read instructions (warnings) carefully        |  | Keep in a cool, dry place                           |
|  | Manufacturer                                           |  | Date of manufacture                                 |
| <b>LOT</b>                                                                          | Lot number                                             | <b>REF</b>                                                                          | Product code                                        |
| <b>CE</b>                                                                           | Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 | <b>EC REP</b>                                                                       | Authorized representative in the European community |
| <b>MD</b>                                                                           | Medical Device                                         |  | Consult instructions for use                        |
| <b>SN</b>                                                                           | Serial number                                          |  | Imported by                                         |

**GIMA WARRANTY TERMS**

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

HE10688023

## CHAISE DE DOUCHE EN ALUMINIUM KD

### Pièces du produit



1. Dossier PU
2. Siège PU
3. Tube de pied réglable en hauteur
4. Pointe

### Consignes de sécurité

- Lire attentivement ces instructions d'utilisation.
- Tous les composants doivent être vérifiés afin de détecter tout dommage et de s'assurer qu'ils sont bien montés avant l'utilisation.
- Approuvé pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Les vêtements ou les parties du corps peuvent être pincés lorsque vous vous asseyez, vous levez, insérez le seau des toilettes, ainsi que lorsque vous soulevez les accoudoirs et les verrouillez.
- Si vous devez franchir des seuils, faites-le lentement et prudemment car les roues pourraient être endommagées !
- Lorsque vous utilisez une chaise d'aisance avec roues, utilisez toujours les freins de stationnement.
- Lors du transfert dans/hors de la chaise d'aisance avec roues, les repose-pieds doivent être pivotés pour ne pas gêner.
- Ne jamais utiliser les repose-pieds comme base pour se lever - la chaise pourrait basculer !
- Empêcher toute utilisation non autorisée, par exemple par des enfants.
- Tenir compte du poids maximum autorisé de l'utilisateur.
- Ces informations se trouvent dans les données techniques

de ce mode d'emploi ainsi que sur la plaque signalétique

### Montage

#### Étape 1

**Fixer le dossier au cadre en appuyant sur les boutons poussoirs et en faisant glisser les tubes du dossier dans les tubes situés de chaque côté et à l'arrière du siège.**





### Étape 2

Fixer les pieds au cadre en enfonçant les boutons-poussoirs dans les tubes situés de chaque côté des pieds. S'assurer que le bouton-poussoir « s'enclenche » correctement dans les trous et qu'il est stable et ajusté de la même manière.

### Caractéristiques techniques

|                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Produit</b>                                    | CHAISE DE DOUCHE EN ALUMINIUM KD |
| <b>numéro du produit</b>                          | HE10688023                       |
| <b>Capacité de poids (lbs/kg)</b>                 | 300 lbs/ 136 kg                  |
| <b>Dimension du produit (mm) L x l x H</b>        | (505-516)×(500-526)×(735-835) mm |
| <b>Poids du produit (lbs/kg)</b>                  | 4,02 kg                          |
| <b>Dimension du siège (pouces/mm) L x l</b>       | 407*337*52 mm                    |
| <b>Matériau du dossier</b>                        | PU                               |
| <b>Matériau du siège</b>                          | PU                               |
| <b>Matériau du cadre</b>                          | Aluminium                        |
| <b>Couleur du cadre</b>                           | Silver                           |
| <b>Quantité dans emballage (pièces)</b>           | 1                                |
| <b>Poids du produit avec l'emballage (lbs/kg)</b> | 5,74 kg                          |
| <b>Dimension du carton L x l x H</b>              | 460×200×430 mm                   |

### Symboles

|                                                                                     |                                                                  |                                                                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) |  | À conserver dans un endroit frais et sec            |
|  | Fabricant                                                        |  | Date de fabrication                                 |
|  | Numéro de lot                                                    |  | Code produit                                        |
|  | Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745           |  | Représentant autorisé dans la Communauté européenne |
|  | Dispositif médical                                               |  | Consulter les instructions d'utilisation            |
|  | Numéro de série                                                  |  | Importé par                                         |

### CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

HE10688023

## SILLA DE ALUMINIO PARA LA DUCHA KD

### Piezas del producto



1. Respaldo PU
2. Asiento PU
3. Tubo de pie ajustable de altura
4. Consejo

### Instrucciones de seguridad

- Lea atentamente estas instrucciones de uso.
- Antes de usarla, se debe comprobar si hay daños en todos los componentes y si están bien ajustados.
- Aprobado solo para uso en interiores.
- La ropa o las partes del cuerpo pueden sufrir pellizcos al sentarse, pararse, introducir la cubeta del inodoro, así como al levantar los reposabrazos y encajarlos.
- Si tiene que pasar por encima de los umbrales, ¡hágalo despacio y con cuidado, pues de lo contrario las ruedas pueden resultar dañadas!
- Cuando utilice un inodoro con ruedas, utilice siempre los frenos de estacionamiento.
- Al entrar y salir del inodoro con ruedas, los reposapiés deben estar girados para que no estorben.
- Nunca utilice los reposapiés como ayuda para levantarse - ¡peligro de vuelco!
- Evite el uso no autorizado, por ejemplo, por parte de los niños.
- Tenga en cuenta el peso máximo permitido del usuario.
- Esta información se encuentra en los datos técnicos de estas instrucciones de uso, así como en la placa de identificación.

### Montaje

#### Paso 1

**Fije el respaldo al marco, presionando los pulsadores y deslizando los tubos del respaldo en los tubos situados a cada lado y en el respaldo del asiento.**



**Paso 2**

Fije las patas al marco presionando los pulsadores en los tubos situados a cada lado de las patas.

Asegúrese de que los pulsadores “encajan” correctamente a través de los orificios y que están estables y ajustados de la misma manera.

**Datos técnicos**

|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Producto</b>                                      | SILLA DE ALUMINIO PARA LA DUCHA KD |
| <b>Número de producto</b>                            | HE10688023                         |
| <b>Capacidad de peso (lbs/kg)</b>                    | 300 lbs/ 136 kg                    |
| <b>Dimensiones del producto (mm) L x A x A</b>       | (505-516)×(500-526)×(735-835)mm    |
| <b>Peso del producto (lbs/kg)</b>                    | 4,02 kg                            |
| <b>Dimensiones del asiento (pulgadas/mm) L x A</b>   | 407*337*52 mm                      |
| <b>Material del respaldo</b>                         | PU                                 |
| <b>Material del asiento</b>                          | PU                                 |
| <b>Material del marco</b>                            | Aluminio                           |
| <b>Color del marco</b>                               | Plateado                           |
| <b>Cantidad en la caja (pieza)</b>                   | 1                                  |
| <b>Peso del producto incluyendo la caja (lbs/kg)</b> | 5,74 kg                            |
| <b>Dimensiones de la caja L x A x A</b>              | 460x200x430mm                      |

**Símbolos**

|                                                                                     |                                                                 |                                                                                     |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente |  | Conservar en un lugar fresco y seco              |
|  | Fabricante                                                      |  | Fecha de fabricación                             |
|  | Número de lote                                                  |  | Código producto                                  |
|  | Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745     |  | Representante autorizado en la Comunidad Europea |
|  | Producto sanitario                                              |  | Consultar las instrucciones de uso               |
|  | Número de serie                                                 |  | Importado por                                    |

**CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA**

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses

HE10688023

## CADEIRA DE BANHO DE ALUMÍNIO

Peças do produto



1. Encosto em PU
2. Assento em PU
3. Tubo ajustável do pé em altura
4. Pé

### Instruções de segurança

- Leia estas instruções de utilização com atenção.
- Todos os componentes devem ser verificados relativamente a danos e ajustados de forma segura antes da utilização.
- Aprovado exclusivamente para utilização no interior.
- Roupas ou partes do corpo podem ficar presas ao sentar, ao levantar, ao inserir o bacio, bem como ao levantar os apoios de braços e ao bloqueá-los no lugar.
- Se for necessário ultrapassar os limiares, faça-o devagar e com cuidado, caso contrário as rodas podem ser danificadas!
- Ao usar uma cadeira sanitária com rodas, utilize sempre os travões de estacionamento.
- Durante a transferência para dentro/fora da cadeira sanitária com rodas, os apoios para os pés devem ser virados para o lado de fora do caminho.
- Nunca utilize os apoios para os pés como apoio para se levantar - perigo de capotamento!
- Evite a utilização não autorizada, por exemplo, por crianças.
- Tome nota do peso máximo permitido por utilizador.
- Esta informação pode ser encontrada nos dados técnicos

os deste manual de instruções, bem como na placa de identificação.

### Montagem

#### Passo 1

**FFixe o encosto à armação, pressionando os botões de pressão e deslizando os tubos do encosto para os tubos situados em cada lado e na parte de trás do assento.**



**Passo 2**

Fixe as pernas à armação pressionando os botões de pressão para os tubos situados em cada lado das pernas.

Certifique-se de que o botão de pressão “encaixe” corretamente nos orifícios e esteja estável e ajustado da mesma maneira.

**Dados técnicos**

|                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Produto</b>                                     | CADEIRA DE BANHO DE ALUMÍNIO     |
| <b>Número do produto</b>                           | HE10688023                       |
| <b>Capacidade de peso (lbs/kg)</b>                 | 300 lbs / 136 kg                 |
| <b>Tamanho do produto (mm) C x L x A</b>           | (505-516)×(500-526)×(735-835) mm |
| <b>Peso do produto (lbs/kg)</b>                    | 4,02 kg                          |
| <b>Tamanho do assento (polegadas/mm) C x L x A</b> | 407*337*52 mm                    |
| <b>Material do encosto</b>                         | PU                               |
| <b>Material do assento</b>                         | PU                               |
| <b>Material da armação</b>                         | Alumínio                         |
| <b>Cor da armação</b>                              | Prateado                         |
| <b>Quantidade na caixa (peça)</b>                  | 1                                |
| <b>Peso do produto incluindo a caixa (lbs/kg)</b>  | 5,74 kg                          |
| <b>Tamanho da caixa C x L x A</b>                  | 460*200×430 mm                   |

**Símbolos**

|                                                                                     |                                                                       |                                                                                     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente                   |  | Armazenar em local fresco e seco           |
|  | Fabricante                                                            |  | Data de fabrico                            |
|  | Número de lote                                                        |  | Código produto                             |
|  | Dispositivo médico em conformidade com a regulamentação (UE) 2017/745 |  | Representante autorizado na União Europeia |
|  | Dispositivo médico                                                    |  | Consulte as instruções de uso              |
|  | Número de série                                                       |  | Distribuído por                            |

**CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA**

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses

HE10688023

## KD-ALUMINIUM-DUSCHSTUHL

### Produktteile



1. PU-Rückenlehne
2. PU-Sitz
3. Höhenverstellbares Bein
4. Kappe

### Sicherheitsanweisungen

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Alle Teile sollten vor dem Gebrauch auf Schäden und festen Sitz geprüft werden.
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen geprüft.
- Kleidung oder Körperteile können beim Hinsetzen, Aufstehen, Einlegen des Toiletteneimers und beim Hochklappen und Einrasten der Armlehnen geklemmt werden.
- Wenn Sie den Stuhl über Schwellen bewegen müssen, schieben Sie ihn langsam und vorsichtig darüber, damit die Räder keinen Schaden nehmen!
- Ein Duschrollstuhl muss bei Gebrauch immer mit den Bremsen festgestellt werden.
- Beim Transfer auf und vom Duschrollstuhl müssen die Fußstützen weggedreht werden.
- Benutzen Sie die Fußstützen niemals als Hilfe beim Aufstehen - Kippgefahr!
- Gebrauch durch Unbefugte, zum Beispiel Kindern, vorbeugen.
- Achten Sie auf das maximal zulässige Gewicht des Benutzers.
- Diese Information finden Sie in den technischen Angaben in der Bedienungsanleitung und auf dem Typenschild.

### Montage

#### Schritt 1

**Bringen Sie die Rückenlehne an das Gestell an, indem Sie die Druckknöpfe drücken und die Rücklehnen Rohre in die Rohre an den Seiten und hinten am Sitz gleiten lassen.**



**Schritt 2**

Bringen Sie die Beine an das Gestell an, indem Sie die Druckknöpfe in die Rohre an beiden Seiten der Beine drücken.

Achten Sie darauf, dass die Druckknöpfe korrekt auf gleicher Höhe in die Löcher fest „eingeklinkt“ sind.

**Technische Daten**

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Produkt</b>                            | KD-ALUMINIUM-DUSCHSTUHL          |
| <b>Produktnummer</b>                      | HE10688023                       |
| <b>Belastbarkeit (lbs/kg)</b>             | 300 lbs/ 136 kg                  |
| <b>Produktabmessungen (mm) L x B x H</b>  | (505-516)×(500-526)×(735-835) mm |
| <b>Produktgewicht (lbs/kg)</b>            | 4,02kg                           |
| <b>Sitzfläche (inch/mm) L x B</b>         | 407 * 337 * 52 mm                |
| <b>Material der Rückenlehne</b>           | PU                               |
| <b>Material des Sitzes</b>                | PU                               |
| <b>Material vom Gestell</b>               | Aluminium                        |
| <b>Farbe des Gestells</b>                 | Silber                           |
| <b>Menge in Karton (Stück)</b>            | 1                                |
| <b>Produktgewicht mit Karton (lbs/kg)</b> | 5,74kg                           |
| <b>Kartonabmessungen L x B x H</b>        | 460 x200× 430 mm                 |

**Symbole**

|                                                                                     |                                                      |                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen    |  | An einem kühlen und trockenen Ort lagern |
|  | Hersteller                                           |  | Herstellungsdatum                        |
|  | Chargennummer                                        |  | Erzeugniscode                            |
|  | Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 |  | Autorisierter Vertreter in der EG        |
|  | Medizinprodukt                                       |  | Gebrauchsanweisung beachten              |
|  | Seriennummer                                         |  | Eingeführt von                           |

**GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN**

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

HE10688023

## KD ALUMINUM DUSCHSTOL

Delar av produkten



1. PU Ryggstöd
2. PU Sits
3. Fotrör justerbart i höjd
4. Spets

### Säkerhetsanvisningar

- Läs dessa bruksanvisningar noggrant.
- Alla komponenter ska kontrolleras för skador och säkert fäste före användning.
- Godkänd endast för användning inomhus.
- Klädesplagg eller kroppsdelar kan klämmas när du sätter dig, reser dig, för in toaletthinken, samt vid höjning av armstöden och när de låses på plats.
- Om du behöver köra över trösklar, gör det försiktigt annars kan hjulen skadas!
- När du använder en hjulburen kommodstol, använd alltid parkeringsbromsarna.
- Vid överföring i och ur den hjulburna kommodstolen, måste fotstöden fällas ut ur vägen.
- Använd aldrig fotstöden som hjälp när du reser dig - risk för tippning!
- Förhindra ej auktoriserad användning, till exempel, av barn.
- Informera dig om användarens totalt tillåtna vikt.
- denna informationen finner du under tekniska data i denna bruksanvisning samt på identifieringsplåten.

### Montering

#### Steg 1

**Fäst ryggstödet vid ramen tryck på knapparna och låt ryggstödet rör glida in på rören som är placerade på varje sida och på sitsens bakdel.**



**Steg 2**

Fäst benen vid ramen genom att trycka på knapparna på rören på varje sida av benen. Försäkra dig att knapparna "klickar" fast korrekt genom hålen och är stabila och justerade på samma sätt.

**Tekniska data**

|                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                  | KD ALUMINUM DUSCHSTOL           |
| <b>Produktnummer</b>                            | HE10688023                      |
| <b>Vikt-kapacitet (lbs/kg)</b>                  | 300 lbs/ 136 kg                 |
| <b>Produktens dimension (mm) L x B x H</b>      | (505-516)×(500-526)×(735-835)mm |
| <b>Produktens vikt (lbs/kg)</b>                 | 4,02 kg                         |
| <b>Sitsens dimension (inch/mm) L x B</b>        | 407*337*52mm                    |
| <b>Ryggstödet material</b>                      | PU                              |
| <b>Sitsens material</b>                         | PU                              |
| <b>Ramens material</b>                          | Aluminium                       |
| <b>Ramens färg</b>                              | Silver                          |
| <b>Antal i lådan (styck)</b>                    | 1                               |
| <b>Produktens vikt inklusive lådan (lbs/kg)</b> | 5,74 kg                         |
| <b>Lådans dimension L x B x H</b>               | 460×200×430mm                   |

**Symboler**

|                                                                                     |                                                                           |                                                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga                             |  | Förvara på svalt och torrt ställe                  |
|  | Tillverkare                                                               |  | Tillverkningsdatum                                 |
|  | Satsnummer                                                                |  | Produktkod                                         |
|  | Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745 |  | Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen |
|  | Medicinteknisk produkt                                                    |  | Läs bruksanvisningen                               |
|  | Serienummer                                                               |  | Importerad av                                      |

**GARANTIVILLKOR GIMA**

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.

HE10688023

## ΚΔ ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Μέρη του προϊόντος



1. Στήριγμα πλάτης από PU
2. Κάθισμα από PU
3. Πόδι με ρυθμιζόμενο ύψος
4. Άκρο ποδιού

### Οδηγίες ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- Όλα τα μέρη πρέπει να ελέγχονται για τυχόν ζημιές καθώς και για ασφαλή εφαρμογή πριν από τη χρήση.
- Προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Ενδέχεται να πιαστεί κάποιο ρούχο ή μέρος του σώματος όταν κάθεστε, σηκώνεστε, τοποθετείτε τον κάδο της τουαλέτας, καθώς και όταν σηκώνετε και ασφαρίζετε τα στηρίγματα των βραχιόνων.
- Εάν πρόκειται να διασχίσετε κάποιο κατώφλι, θα πρέπει να το κάνετε αργά και προσεκτικά, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος οι ρόδες να υποστούν ζημιά!
- Όταν χρησιμοποιείτε καρέκλα με ρόδες, χρησιμοποιείτε πάντα το φρένο.
- Κατά τη μεταφορά στην/από την καρέκλα με ρόδες, τα στηρίγματα των ποδιών πρέπει να είναι σηκωμένα ώστε να μην εμποδίζουν.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τα στηρίγματα ποδιών ως υποβοήθηση όταν σηκώνεστε διότι υπάρχει κίνδυνος ανατροπής!
- Μην επιτρέπετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση, για παράδειγμα από παιδιά.
- Λαμβάνετε πάντα υπόψη το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του χρήστη.

- Η πληροφορία αυτή περιλαμβάνεται στα τεχνικά στοιχεία που περιέχονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης καθώς και στην πινακίδα αναγνωριστικών στοιχείων.

### Συναρμολόγηση

#### Βήμα 1

**Fissare lo schienale al telaio, premendo i pulsanti e facendo scorrere i tubi dello schienale nei tubi situati su ciascun lato e sul retro del sedile.**



**Βήμα 2**

Συνδέστε τα πόδια στον σκελετό πιέζοντας τα κουμπιά μέσα στους σωλήνες που υπάρχουν σε κάθε πόδι.

Βεβαιωθείτε ότι τα κουμπιά «κουμπώνουν» σωστά μέσα στις οπές, ότι είναι σταθερά και προσαρμοσμένα με τον ίδιο τρόπ.

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Προϊόν                                         | KD ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ |
| αριθμός προϊόντος                              | HE10688023                       |
| Ικανότητα φορτίου (lbs/kg)                     | 300 lbs/ 136 kg                  |
| Διαστάσεις προϊόντος (mm) Μ x Π x Υ            | (505-516)×(500-526)×(735-835)mm  |
| Βάρος προϊόντος (lbs/kg)                       | 4,02kg                           |
| Διαστάσεις καθίσματος (inch/mm) L x W          | 407*337*52 mm                    |
| Υλικό στηρίγματος πλάτης                       | PU                               |
| Υλικό καθίσματος                               | PU                               |
| Υλικό σκελετού                                 | Αλουμίνιο                        |
| Χρώμα σκελετού                                 | Ασημί                            |
| Ποσότητα στη συσκευασία (τεμάχιο)              | 1                                |
| Βάρος προϊόντος μαζί με τη συσκευασία (lbs/kg) | 5,74kg                           |
| Διαστάσεις κουτιού Μ x Π x Υ                   | 460×200×430mm                    |

**Σύμβολα**

|                                                                                     |                                                         |                                                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)    |  | Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον       |
|  | Παραγωγός                                               |  | Ημερομηνία παραγωγής                               |
|  | Αριθμός παρτίδας                                        |  | Κωδικός προϊόντος                                  |
|  | Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745 |  | Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση |
|  | Ιατροτεχνολογικό προϊόν                                 |  | Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης             |
|  | Σειριακός αριθμός                                       |  | Εισαγωγή από                                       |

**ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA**

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών