

Nome: BANCO DE CHUVEIRO COM TABULEIRO AZUL

Modelo: KDB-793, KDB-794, KDB-795, KDB-796, KDB-797, KDB-798, KDB-799, KDB-799B, KDB-787, KDB-788

Utilização prevista: O Banco de Chuveiro é usado como equipamento de banho para pessoas com deficiências, doentes e idosos que têm dificuldade em manter o equilíbrio enquanto tomam banho.

Operador: O dispositivo pode ser operado pelo próprio utilizador, pela equipa de enfermagem ou pelo cuidador.

Populações de doentes: Pessoas com deficiências, doentes e idosos.

Contraindicações: Supervisione as crianças quando usarem o banco de chuveiro.

Instruções de utilização

1. Antes de utilizar, ajuste o assento para uma altura adequada, para que as quatro pernas fiquem equilibradas no pavimento.
2. Certifique-se de que o encosto das costas está firmemente instalado e se oscila durante a utilização. Sente-se ao centro do banco de chuveiro durante a utilização.
3. A altura do banco de chuveiro pode ser ajustada. Ao ajustar a altura, empurre primeiro para baixo os berlindes, e depois puxe para baixo. Ajuste apenas para a altura adequada à sua própria utilização.
4. O banco não deve ser usado para empurrar o utilizador quando este está sentado.
5. Antes de utilizar, certifique-se de que o parafuso de ajuste foi apertado e que o parafuso de botão foi ejetado da ranhura
6. Lave com água limpa e seque ao ar após a utilização
7. Não utilize este produto em pavimento irregular
8. mantenha afastado do fogo.

Manutenção

1. O banco deve ser limpo e desinfetado de forma rotineira, uma vez por dia, pela equipa técnica de saúde ou pelos utilizadores e desinfetado completamente aquando da troca de doentes.
2. Não a deixe entrar em contacto com ácidos fortes e álcalis para evitar a corrosão.

Cuidados: Não se apoie em um dos lados ao levantar-se ou sentar-se, para impedir que o banco de chuveiro tombe e provoque ferimentos.

Utilize-o com cuidado em pavimento irregular. Limpe e desinfete o banco de chuveiro atempadamente.





A utilização deste produto é segura até uma carga de 125kg. Proceda com cuidado ao utilizá-lo com mais peso, ou pode também ser personalizado pela empresa.

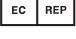


Armazenamento: produto deve ser guardado à temperatura e humidade normais e mantido seco.

Eliminação: As restrições de eliminação dependem da contaminação ocorrida durante a utilização e estão sujeitas à legislação nacional ou local.

Todos os acidentes graves relacionados com o dispositivo médico fornecido por nós devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde se situa a sua sede social.

Indice dei simboli - Index of symbols - Index des symboles - Índice de símbolos - índice de símbolo - Symbolindex - Ευρετήριο συμβόλων - Indeks symboli - Index symbolů - Symbol index - Symboli-indeksi - Indeks simbolov - Index symbolov - Index de simbol - Symbol index - Indeks simbola - Szimbólum index - Symbolindex - Индекс на символа - Simbolių rodyklė - Simbolu rādītājs


	<p>IT - Data di fabbricazione GB - Manufacturing date FR - Date de fabrication ES - Fecha de fabricación PT - Data de fabrico DE - Herstellungsdatum GR - Ημερομηνία παραγωγής PL - Data produkcji CZ - Datum výroby SE - Tillverkningsdatum FI - Valmistuspäivämäärä SI - Datum proizvodnje SK - Dátum výroby RO - Data fabricației NL - Productiedatum HR - Datum proizvodnje HU - Gyártás dátuma DK - Fabrikationsdato BG - Fabrikationsdato LT - Pagaminimo data LV - Izgatavošanas datums ET - Tootmiskoopäev NB - Fabrikasjonsdato</p> <p>AR - تاريخ التصنيع</p>
	<p>IT - Fabricante GB - Manufacturer FR - Fabricant ES - Fabricante PT - Fabricante DE - Hersteller GR - Παραγωγός PL - Producent CZ - Výrobce SE - Tillverkare FI - Valmistaja SI - Proizvajalec SK - Výrobca RO - Producător NL - Fabrikant HR - Proizvođač HU - Gyártó DK - Fabrikant BG - Fabrikant LT - Gamintojas LV - Ražotājs ET - Tootja NB - Produzent</p> <p>AR - الشركة المصنعة</p>
	<p>IT - Leggere le istruzioni per l'uso GB - Consult instructions for use FR - Consulter les instructions d'utilisation ES - Consultar las instrucciones de uso PT - Consulte as instruções de uso DE - Gebrauchsanweisung beachten GR - Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης PL - Przeczytaj instrukcję użytkowania CZ - Přečtěte si návod k použití SE - Läs bruksanvisningen FI - Lue käyttöohjeet SI - Preberite navodila za uporabo SK - Prečítajte si návod na použitie RO - Citiți instrucțiunile de utilizare NL - Lees de gebruiksaanwijzing HR - Pročitajte upute za uporabu HU - Olvassa el a használati utasításokat DK - Se brugsvejledningen BG - Se brugsvejledningen LT - Perskaitykite naudojimo instrukcijas LV - Izlasiet lietošanas instrukcijas ET - Lugege kasutusjuhendit NB - Les bruksinstruksjonene</p> <p>AR - اقرأ بدقة وحرص تعليمات الاستخدام</p>
	<p>IT - Conservare al riparo dalla luce solare GB - Keep away from sunlight FR - À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES - Conservar al amparo de la luz solar PT - Guardar ao abrigo da luz solar DE - Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern GR - Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία PL - Przechowywać z dala od światła słonecznego CZ - Skladujte mimo sluneční světlo SE - Skyddas från solljus FI - Säilytä auringonvalolta suojaassa SI - Hraniti zaščiteno pred sončno svetlobo SK - Skladujte mimo slnečného svetla RO - A se păstra ferit de razele soarelui NL - Afschermd van zonlicht opslaan HU - Cuvati zaščiteno od sunčeve svetlosti HU - Napfénytől védve tárolandó DK - Må ikke udsættes for sollys BG - Må ikke udsættes for sollys LT - Saugoti nuo saulės spindulių LV - Uzglabāt prom no saules gaismas ET - Hoida eemal päikesevalgusest NB - Må oppbevares på et sted uten direkte sollys</p> <p>AR - يحفظ بعيداً عن ضوء الشمس</p>
	<p>IT - Non sterile GB - Non-sterile FR - Non stérile ES - No estéril PT - Não esteril DE - Nicht steril GR - η αοστερωμένο PL - Niesterylne CZ - Nesterilno SE - Icke-steril FI - Ei-steriili SI - Nesterilno SK - Nesterilné RO - Nesteril NL - Niet-steriel HR - нестерильный HU - Nem steril DK - Ikke-steril BG - Нестерилни LT - Nesterili LV - Nesterilis ET - Mittesteriiline NB - ikke sterilt</p> <p>AR - غير معقمة</p>

	<p>IT - Rappresentante autorizzato nella Comunità europea GB - Authorized representative in the European community FR - Représentant autorisé dans la Communauté européenne ES - Representante autorizado en la Comunidad Europea PT - Representante autorizado na União Europeia DE - Autorisierter Vertreter in der EG GR - Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση PL - Uprawniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej CZ - Zplnomocněný zástupce v Evropském společenství SE - Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen FI - Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä SI - Pooblaščen zastopnik za Evropsko skupnost SK - Splnomocnený zástupca v Európskom spoločenstve RO - Reprezentant autorizat pe teritoriul Comunității Europene NL - Bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap HR - Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici HU - Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségen DK - Autoriseret repræsentant i det Europæiske Fællesskab BG - Autoriseret repræsentant i det Europæiske Fællesskab LT - Įgaliojatis atstovas Europos bendrijoje LV - Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā ET - Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses NB - Autorisert representant i EU</p> <p>AR - ممثل معتمد في الاتحاد الأوروبي</p>
	<p>IT - Identificatore univoco del dispositivo GB - Unique device identifier FR - Identifiant unique de l'appareil ES - Identificador de dispositivo único PT - Identificador exclusivo do dispositivo DE - Unique Device Identifier (Eindeutige Kennung des Geräts GR - Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής PL - Unikalny identyfikator urządzenia CZ - Jediněčný identifikátor zařízení SE - Unik identifierare för enheten FI - Laitteen yksilöllinen tunnistus SI - Enolični identifikator naprave SK - Jediněčný identifikátor zariadenia RO - Identificatorul unic al dispozitivului NL - Unieke identificatie van het apparaat HR - Jedinstveni identifikator uređaja HU - Az eszköz egyedi azonosítója DK - Unik identifikator for enheden BG - Уникален идентификатор на устройството LT - Unikalus įrenginio identifikatorius LV - Unikāls ierīces identifikators EE - Seadme kordumatu identifikaator</p> <p>AR - معرف فريد للجهاز</p>
	<p>IT - Dispositivo medico GB - Medical Device FR - Dispositif médical ES - Producto sanitario PT - Dispositivo médico DE - Medizinprodukt GR - Ιατροτεχνολογικό προϊόν PL - Wyrób medyczny CZ - Zdravotnický prostředek SE - Medicinteknisk produkt FI - Lääkinnällinen laite SI - Medicinski pripomoček SK - Zdravotnícka pomôcka RO - Dispozitiv medical NL - Medisch hulpmiddel HR - Medicinski uređaj HU - Orvosteknikai eszköz DK - Medicinsk udstyr BG - Medicinsk udstyr LT - Medicininis prietaisas LV - Mediciniskā ierīce ET - Meditsiiniseade NB - Medisinsk utstyr</p> <p>AR - جهاز طبي</p>


	<p>IT - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB - Caution: read instructions (warnings) carefully FR - Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES - Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT - Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente DE - Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen GR - Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενοτάσεις) PL - Ostrzeżenie - Zobacz instrukcję obsługi CZ - Pozor: Pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny (varování) k použití SE - Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga FI - Huomio: Lue käyttöohjeet (varoitukset) ja noudata niitä huolellisesti SI - Pozor: Preberite in skrbno sledite navodilom (opozorilom) za uporabo SK - Pozor: Pozorne si prečítajte a dodržujte pokyny na použitie (výstrahy) RO - Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare NL - Opgelet: Lees en volg aandachtig de gebruiksaanwijzing (waarschuwingen) HR - Pozor: Pročitajte i pažljivo slijedite upute (upozorenja) za upotrebu HU - Figyelem: Figyelmesen olvassa el és kövesse a használati utasításokat (figyelmeztetéseket) DK - Forsigtig: Læs instruktøner (advarsler) omhyggeligt BG - Forsigtig: Læs instruktioner (advarsler) omhyggeligt LT - Dėmesio: perskaitykite ir atidžiai laikykites naudojimo instrukcijų (įspėjimų) ET - Omsus: Izlasiet un uzmanīgi ievērojiet lietošanas instrukcijas (brīdinājumus) NB - OBS! Les og følg anvisningene (advarslene) svært nøye</p> <p>AR - الحذر: قراءة التعليمات (التحذيرات) بحناية</p>
	<p>IT - Numero di lotto GB - Lot number FR - Numéro de lote ES - Número de lote PT - Número de lote DE - Chargennummer GR - Αριθμός παρτίδας PL - Kod partii CZ - Číslo šarže SE - Satsnummer FI - Eränumero SI - Številka partije SK - Číslo šarže RO - Număr de lot NL - Partijnummer HR - Broj serije HU - Tételszám DK - Batchnummer BG - Batchnummer LT - Partijos numeris LV - Partijas numurs ET - Partii number NB - Produksjonsserienummer</p> <p>AR - رقم الدفعة</p>

GIMA 42902



 Zhongshan Kangdebao (KDB) Rehabilitation Equipment Co., Ltd.
Card 1, No. 5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China

REF KDB-797

 **SUNGO Europe B.V.**
Fascianatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands

 **Gima S.p.A.**
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com