

## GARANZIA

La stampella avambraccio è garantita **2 ANNI** dalla data di acquisto. Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazione o nei materiali usati, senza nessuna spesa per il cliente. **La garanzia non è applicabile in caso di danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno smontaggio effettuato da personale non autorizzato.** Per riparazioni, nel rispetto delle suddette condizioni, inviare la stampella avambraccio munita della ricevuta di acquisto al rivenditore locale più vicino.

## WARRANTY

This forearm crutche has **2-YEAR** warranty from purchase date which is certified by the receipt or invoice. The distributor reserves the right either to repair or replace necessary parts to correct defects in the materials or workmanship without any charge. **The warranty does not apply to damage resulting from failure to follow the operating instructions, accidents, abuse, alteration or disassembly by unauthorized individuals.** In the case you need to get your forearm crutche repaired and you fulfil the conditions of warranty, send it to the nearest retailer together with the purchase receipt.

### PARTI DI RICAMBIO

- **RV7010**.....Puntale colore grigio-paio
- **RV7011**.....Puntale colore nero-paio

### SPARE PARTS

- **RV7010**.....Grey rubber tip-pairs
- **RV7011**.....Black rubber tip-pairs



## CERTIFICATO DI GARANZIA - WARRANTY CERTIFICATE

Prodotto / Product \_\_\_\_\_

Acquistato in data / Purchasing date \_\_\_\_\_

Rivenditore /Authorized dealer \_\_\_\_\_

Via / Street \_\_\_\_\_ Località / Place \_\_\_\_\_

Venduto a / Purchased by \_\_\_\_\_

Via / Street \_\_\_\_\_ Località / Place \_\_\_\_\_

**MORETTI S.p.A.**


INTERNET: [www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) E-MAIL: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

MADE in P.R.C.

MOD. 70 / 02-2006



# MOPEDIA

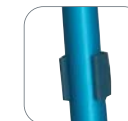


• Blu  
• Blue

RP701B



• Verde  
• Green

RP701V

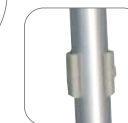

• Argento  
• Silver

RP701A



• Rosso  
• Red

RP701R



• Nero  
• Black

RP701N



## STAMPILLE AVAMBRACCIO MANUALE D'ISTRUZIONE

## FOREARM CRUTCHES INSTRUCTION MANUAL



Moretti S.p.A.  
Via Bruxelles 3 - Meleto  
52022 Cavriglia (Arezzo)  
Telefono +39 055 96 21 11

Fax +39 055 96 21 200  
[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)  
[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

Dispositivo Medico di Classe I  
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

## Codice RP701 (Colori disponibili: argento, blu, rosso, verde, nero)

Grazie per aver acquistato la stampella avambraccio **MOPEDIA** della linea Moretti, realizzata per sostenere persone con difficoltà di movimento. Costruita in alluminio anodizzato leggero con l'impugnatura anatomica antiscivolo per offrire comfort e sicurezza, fornita di puntali in gomma antiscivolo. La stampella avambraccio è regolabile in altezza ogni 2.5 cm:

- RP701 (tutti i modelli) ..... da 74 a 97 cm

### Regolazione dell'altezza:

Premere il fermo e sfilare la canna portandola in corrispondenza dei fori in base all'altezza desiderata e alla manovrabilità soggettiva del paziente stesso. Riposizionare il fermo sul foro per bloccare la canna e assicurarsi che il fermo sia penetrato completamente nel foro. Peso massimo sopportabile 130 kg.

### AVVERTENZE: USARE CON PRUDENZA SU SUPERFICI BAGNATE E SCIVOLOSE.

Si raccomanda di evitare contatti prolungati con acqua e di controllare periodicamente la robustezza della stampella. Per evitare eventuali rischi tenere la stampella avambraccio lontano dalla portata dei bambini e sostituire i puntali di appoggio a terra una volta usurati.



• Blu  
RP701B

• Verde  
RP701V

• Argento  
RP701A

• Rosso  
RP701R

• Nero  
RP701N

I class medical device according  
to EEC directive 93/42

## Code RP701 (Available colours: silver, blue, red, green, black)

Thank you for purchasing forearm crutch, **MOPEDIA** by Moretti manufactured to support people with movement difficulty. It consists of lightweight anodised aluminium tubing, anatomic non-slip handle to give you comfort and security, and non-slip soft rubber tips. It is height adjustable every 2.5 cm:

- RP701 (all models) ..... from 74 to 97 cm

### To adjust height:

To adjust the height press the push button and slide the cane to the desired height. Be sure the push button is fully protruded through the desired hole when finished. Maximum endurable weight 130kg.

### ATTENTION: USE EXTRA CAUTION ON WET AND SLIPPERY SURFACES.

Avoid to leave the forearm crutch in contact with water for long periods and control its sturdiness periodically. Keep it away from children to avoid any possible risks. Replace rubber tips every time they are worn out.



• Blue  
RP701B

• Green  
RP701V

• Silver  
RP701A

• Red  
RP701R

• Black  
RP701N