

**TABLE DE LIT** - Nous vous remercions pour avoir choisi notre table de lit – L100.

## 1 Généralités

### 1.1 Symboles

Ces mises en garde indiquées par des mots sont utilisés dans ce manuel afin de mieux identifier les risques ou les pratiques dangereuses susceptibles de causer des blessures corporelles au personnel et des dommages matériels. Veuillez lire ci-dessous pour les définitions de ces mises en garde.

#### ⚠ Mise en garde

Cela indique une situation potentiellement dangereuse à éviter pour ne pas risquer d'entraîner de graves blessures corporelles voire mortelles.

#### ⓘ Important

Indique une situation dangereuse qui pourrait entraîner des dommages matériels si elle n'est pas évitée.

🔍 Ce sont des conseils, des recommandations et des informations utiles pour une utilisation efficace et sans problème.

### 1.2 Sécurité

ⓘ Vérifiez TOUTES les pièces pour détecter les dommages dus au transport. Si des dommages d'expédition sont constatés, N'utilisez PAS cette table de lit. Contactez le transporteur ou le revendeur pour plus d'informations.

#### ⓘ Limitation de poids

La limite de charge statique horizontale et verticale de la table OT103 est de 25 kg (55 livres).

#### ⚠ Mise en garde générales

N'utilisez PAS ce produit ou tout autre équipement disponible en option sans la lecture préalable et la compréhension de ces instructions de tout ce manuel et de toute documentation supplémentaire d'utilisation matériel comme les manuels propriétaires, de service ou les fiches d'instructions qui accompagnent ce produit ou un équipement en option. Si vous êtes incapable de comprendre les mises en garde, les avertissements ou les instructions, veuillez vous adresser à un professionnel de santé, revendeur ou technicien avant de tenter d'utiliser cet équipement pour ne pas risquer de causer des blessures ou des dommages.

Vérifiez TOUJOURS l'état d'étanchéité de la table pour avant toute utilisation.

LES techniques des améliorations de produits seront être rédigées dans une nouvelle version du mode d'emploi sans préavis. C'est le type et la nature du produit qui prévalent même si apparence et la couleur de ces derniers sont modifiées.

#### ⚠ À propos des accessoires

Les produits IDEAL sont spécialement conçus et fabriqués pour une utilisation en association avec les accessoires IDEAL. Les accessoires conçus par d'autres fabricants n'ont pas été testés et sont contre-indiqués pour une utilisation avec les produits IDEAL.

#### ⚠ Avertissement d'installation

Faites TOUJOURS preuve d'une extrême prudence lors de l'installation de l'assemblage de la colonne, en raison de la partie tranchante à l'extrémité du tube horizontal ; veuillez ne pas y touche avant la fin de l'installation, pour ne pas risquer de causer des blessures ou des dommages. Après tout réglage, réparation ou entretien et avant toute utilisation, assurez-vous que tous les éléments de fixation sont bien fixés.

### 1.3 Usage prévu

La table de lit est un type de meuble conçu pour être utilisé comme surface de table mobile pour lire, manger ou garder à portée de main de petits objets personnels tels que des lunettes, un téléphone ou des livres.

## 2 Liste de colisage (pièces)


Base avec roulettes	Montant pour réglage en hauteur	Support du plateau	Plateau
4 x vis M8 x 50mm et 1 plaque	Vis M6 x 15mm 10pcs	Manivelle	Manuel de l'utilisateur

## 3 Montage de la table de lit

- Ouvrez l'extrémité de la boîte, puis faites glisser le contenu en dehors de celle-ci.
- Rassemblez la base avec les roulettes, la colonne de levage, le plateau de table et son support, la quincaillerie, la manivelle et le manuel de l'utilisateur

⚠ Lors de l'installation, il convient d'effectuer les opérations d'installation sur un sol plat.

🔍 Le montage s'effectue en 4 étapes simples.

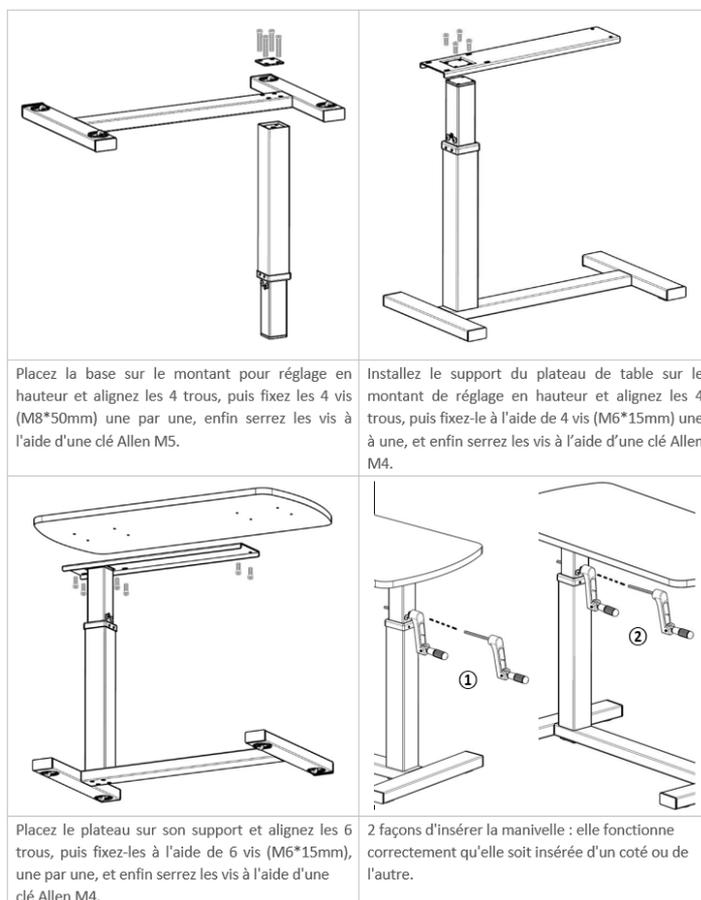

ⓘ La table de lit est principalement composée des matériaux suivants :

1. Panneau de fibres de moyenne densité (plateau de table)
2. Tube d'acier (cadre de la table)
3. Fixation (vis, manivelle)
4. Plastique (bouchon de tube, roulette)

## 4 Utiliser la table de lit

Non seulement cette table de lit est facile à installer, mais elle est également facile à utiliser pour l'utilisateur. Réglez le plateau de la table à la hauteur souhaitée par l'utilisateur en tournant la manivelle comme indiqué à la FIGURE 1

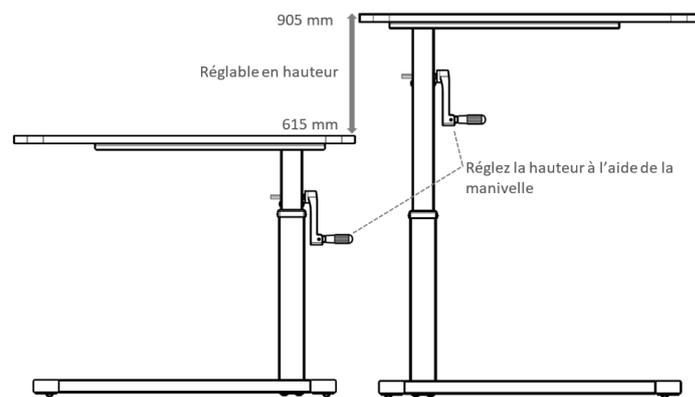


FIGURE 1 Utilisation de la table de lit

⚠ Cette table est conçue pour être utilisée comme surface d'appui pour le patient / le résident pour lire, prendre un repas ou garder des affaires personnelles comme des lunettes, le téléphone, ou des livres à portée de main.

Ce tableau est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement à proximité immédiate d'un personnel soignant qualifié. Il n'est pas conçu pour soutenir des appareils électriques (tels que téléviseurs, écrans d'ordinateur, cafetières, etc.) et ne doit pas être utilisé à proximité de flammes nues et d'une chaleur excessive.

La limite de poids maximum pour ce produit est de 25 kg (55 lb) ; le poids doit être uniformément réparti sur la surface de la table pour aider à maintenir une condition stable.

NE surchargez PAS la table pour ne pas risquer de la casser, et causer des dommages aux biens et / ou de graves blessures.

Utilisez UNIQUEMENT comme le préconise ce mode d'emploi. Ce produit ne doit PAS être utilisé : comme surface pour dormir ; comme déambulateur ou comme aide à la mobilité pour aider une personne à marcher, à s'asseoir ou à se lever ; pour prévenir ou amortir la chute d'une personne ; ou pour aider à transporter des personnes ou des objets.

## 5 Mesures (Unité : mm)

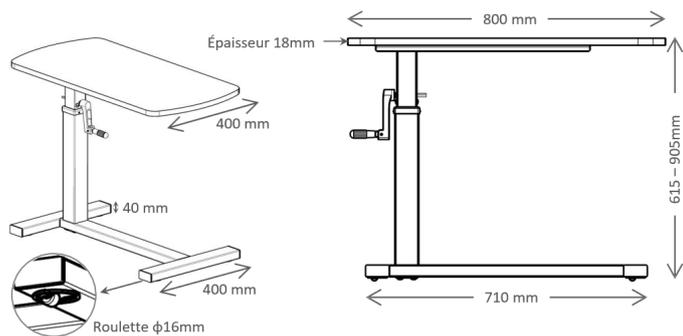


FIGURE 2 Mesures

## 6 Paramètres

Nom du paramètre	OT103
Longueur totale	800 mm
Largeur totale	400 mm
Hauteur totale	615 – 905mm
Charge statique horizontale	25 kg
Charge statique verticale	25 kg
Durabilité horizontale	10 kg
Impact vertical	10 kg
Poids net	11,5 kg
Poids brut	13 kg
Taille du paquet	820 * 90 * 430 mm

## 7 Nettoyage

Un entretien régulier permet d'éviter l'usure et les dommages inutiles de votre table de lit.

### 7.1 Surfaces métalliques

Bien que le cadre métallique soit recouvert d'un revêtement en poudre de haute qualité pour protéger sa surface, il est préférable d'utiliser un chiffon sec et doux ou une éponge pour l'essuyer.

### 7.2 Plastique

Pour un nettoyage normal, laver les surfaces en plastique avec un chiffon doux, un détergent doux et de l'eau. Rincer abondamment et sécher avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de solvants ou de nettoyeurs de cuisine abrasifs.

### 7.3 Plateau

Essuyer délicatement la table avec un chiffon doux, propre et humide. Ne pas utiliser pas de nettoyeurs susceptibles d'endommager la finition de la table. Pour un nettoyage plus approfondi, utiliser du savon doux et un peu d'eau, et essuyer l'eau dès que possible pour que le plateau reste sec.

## 8 Garantie limitée

Cette garantie est étendue uniquement à l'acheteur / utilisateur d'origine de nos produits.

IDEAL garantit son produit comme étant sans vices de matériaux et de fabrication pendant une année pour l'acheteur d'origine. Si au cours de cette période de garantie ce produit s'avère être défectueux, il sera réparé ou remplacé. Les réparations de produit ne peuvent en aucun cas prolonger la durée de cette garantie. Le délais de réparation se termine lorsque cette limitée garantie expire. La seule et unique obligation d'IDEAL et votre droit exclusif à la réparation en vertu de la présente garantie se limiteront à cette réparation et / ou remplacement. Pour le service de garantie, veuillez contacter le revendeur chez qui vous avez acheté. L'unité ou les pièces défectueuses doivent être retournées pour inspection sous garantie.

Cette garantie ne couvre pas de pannes dues à la mauvaise utilisation ou à la négligence du propriétaire ou à l'usure normale. La garantie ne s'étend pas aux composants non durables, tels que les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont soumis à une usure normale et doivent être remplacés périodiquement.

**REF** OT103 (GIMA 27487)

Importé par:  
**Gima S.p.A.**  
 Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)  
 Made in China

Fabriqué par:  
**Suzhou Ideal Medical Co., Ltd.**  
 No. 88 Huachi Street,  
 Suzhou Industrial Park,  
 Suzhou (215000), Jiangsu, China

