

EN

FR

ES

DE

BR

NL

JA


ZH

KO

Multi-Venous IV Training Arm

Male, Female and Pediatric

User Guide

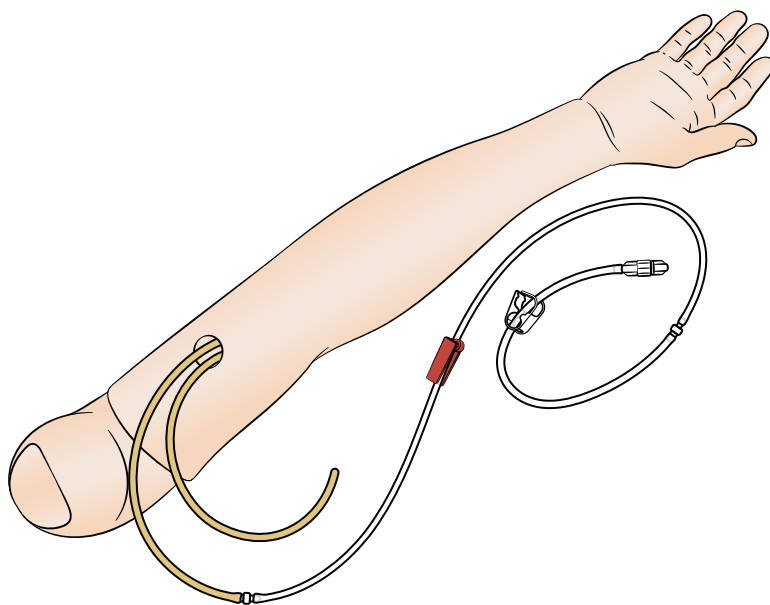

BR

O braço multivenoso para treinamento de acesso intravenoso é uma reprodução realista de um braço com sistema multivenoso, desenvolvido para terapia intravenosa periférica. Este Guia do usuário engloba três versões do braço multivenoso para treinamento de acesso intravenoso: adulto masculino, adulto feminino e pediátrico. A menos que seja especificado de outra forma, as informações neste Guia do usuário se aplicam a todas as versões.



Guia do usuário

Este produto contém látex de borracha natural, que pode causar reações alérgicas ao entrar em contato com tecidos humanos.



Cuidado

Não use preparação de iodo, pois ela pode manchar o braço permanentemente.




Notas

- Tamanho de cateter recomendado: calibre 22 ou menor.
- Lubrifique com lubrificante para manequim, para facilitar a inserção.
- Quando ocorrer vazamento excessivo, uma nova pele e sistema multivenoso devem ser instalados.

Items Included


EN

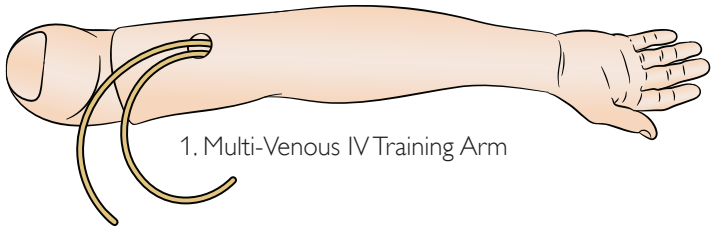


1. Multi-Venous IV Training Arm




2. Replacement Skin

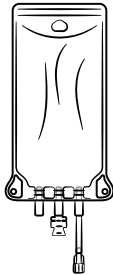

3. Blood Bag

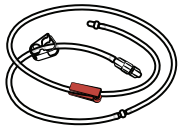

4. Tubing and Clamp

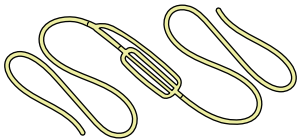


5. Multi-Vein System



6. Manikin
Lubricant




7. Simulated Blood
Concentrate

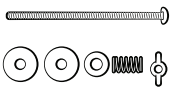

8. Shoulder Attachment
Hardware



9. Vein Bands (x 4)

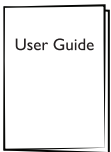

10. User Information

FR

1. Bras multi-veines de formation à la perfusion intraveineuse
2. Peau de remplacement
3. Poche de sang
4. Tubulure et clamp
5. Système multiveineux
6. Lubrifiant pour mannequin
7. Faux-sang concentré
8. Matériel de fixation de l'épaule
9. Bandes veineuses (x 4)
10. Informations utilisateur

ES

1. Brazo articulado con múltiples venas para el entrenamiento del acceso intravenoso
2. Piel de recambio
3. Bolsa de sangre
4. Tubos y abrazadera
5. Sistema de múltiples venas
6. Lubricante para el maniquí
7. Concentrado de sangre simulada
8. Piezas de conexión de hombro
9. Bandas para venas (x 4)
10. Información del usuario

DE

1. Multi-Venen-IV-Punktionsarm
2. Ersatzhaut
3. Blutbeutel
4. Schläuche und Klammer
5. Multi-Venensystem
6. Gleitmittel für Trainingsmodell
7. Simuliertes Blutkonzentrat
8. Befestigungsmaterial für die Schulter
9. Venenbänder (4 St.)
10. Anwenderinformationen

BR

1. Braço multivenoso para treinamento de acesso intravenoso
2. Pele de substituição
3. Bolsa de sangue
4. Tubos e clamps
5. Sistema multivenoso
6. Lubrificante para manequim
7. Concentrado de sangue simulado
8. Peças para colocação do ombro
9. Tiras para veias (x 4)
10. Informações para o usuário

NL

1. Multiveneuze IV-trainingsarm
2. Vervanghuid
3. Bloedzak
4. Slang en klem
5. Veneus systeem
6. Lubrificant voor de oefenpop
7. Gesimuleerd bloedconcentraat
8. Materiaal voor bevestiging aan de schouder
9. Aderbandjes (x 4)
10. Informatie voor de gebruiker

JA

1. IV トレーニングアーム
2. 交換用スキン
3. IVバッグ
4. チューブおよびクランプ
5. マルチ静脈システム
6. 潤滑剤
7. 疑似血液
8. 肩装着ハードウェア
9. 静脈帯 (x 4)
10. ユーザー情報

ZH

1. 多静脉注射训练臂
2. 备用皮肤
3. 输血袋
4. 夹子和挂钩
5. 多静脉系统
6. 模拟人润滑剂
7. 模拟血液浓缩液
8. 肩部连接配件
9. 静脉带 (x 4)
10. 用户手册


KO

1. 정맥로 확보 실습용 팔
2. 교체용 피부
3. 혈액 백
4. 튜브 및 클램프
5. 정맥로 시스템
6. 마네킹 윤활제
7. 인조 혈액 농축액
8. 어깨 부착 하드웨어
9. 정맥 밴드(4개)
10. 사용자 정보


Overview

EN

Adult Male Multi-Venous IV Arm

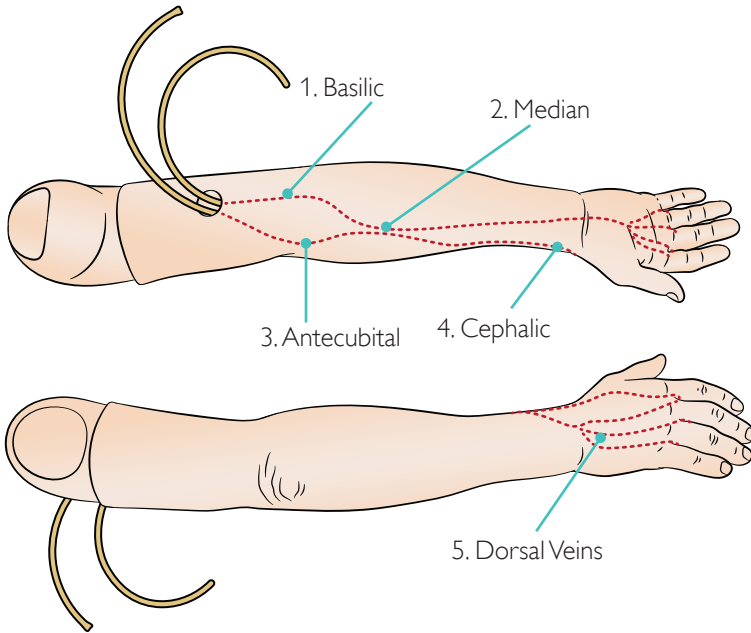

Adult Female / Pediatric Multi-Venous IV Arm

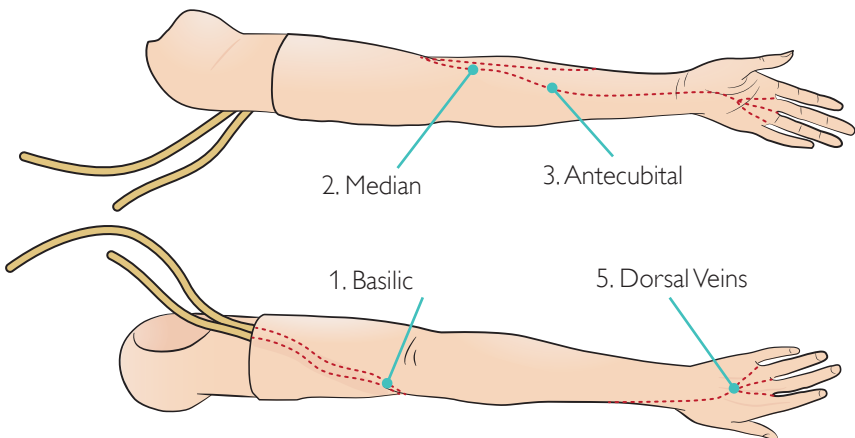

FR

Bras multi-veines de formation à la perfusion intraveineuse, version homme adulte

Bras multi-veines de formation à la perfusion intraveineuse, versions femme adulte/enfant

1. Veine basilique
2. Veine médiane
3. Veine antécubitale
4. Veine céphalique
5. Veines dorsales

ES

Brazo con múltiples venas para acceso intravenoso para hombre adulto

Brazo con múltiples venas para acceso intravenoso para mujer adulta/pediatría

1. Basílica
2. Mediana
3. Antecubital
4. Cefálica
5. Venas dorsales

DE

Multi-Venen-IV-Punktionsarm erwachsen männlich

Multi-Venen-IV-Punktionsarm erwachsen weiblich/Kind

1. V. basilica
2. V. mediana cubiti
3. Armbeuge
4. Vena cephalica
5. Dorsale Venen

BR

Braço multivenoso para acesso intravenoso masculino adulto

Braço multivenoso para acesso intravenoso feminino adulto/pediatríco

1. Basílica
2. Mediana
3. Antecubital
4. Cefálica
5. Veias dorsais

NL

Multiveneuze IV-trainingsarm, volwassen man

Multiveneuze IV-trainingsarm, volwassen vrouw

1. Basilica
2. Mediana
3. Antecubitaal
4. Cephalica
5. Dorsale aderen

JA

成人男性 IV アーム

成人女性/小児 IV アーム

1. 尺側皮静脈
2. 正中静脈
3. 肘前窩静脈
4. 橈側皮静脈
5. 手背部静脈

ZH

成年男性多静脉注射臂

成年女性/儿童多静脉注射臂

1. 贵要静脉
2. 肘正中静脉
3. 前臂正中静脉
4. 头静脉
5. 手背静脉

KO


성인 남성 정맥로 확보 실습용 팔

성인 여성/소아 정맥로 확보 실습용 팔


1. 귀요 정맥
2. 정중 동맥
3. 전주와 동맥
4. 두부 정맥
5. 배면 정맥

Setup

1

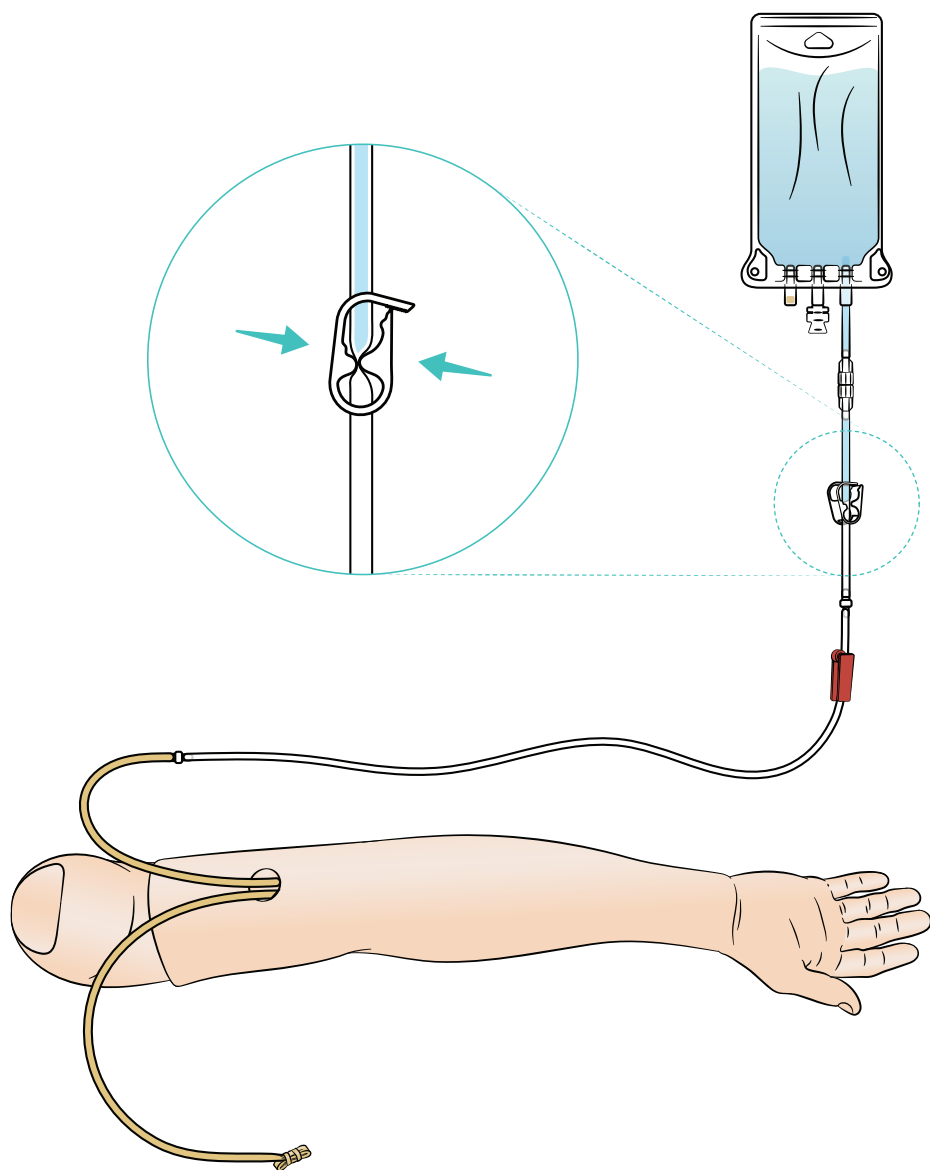


2

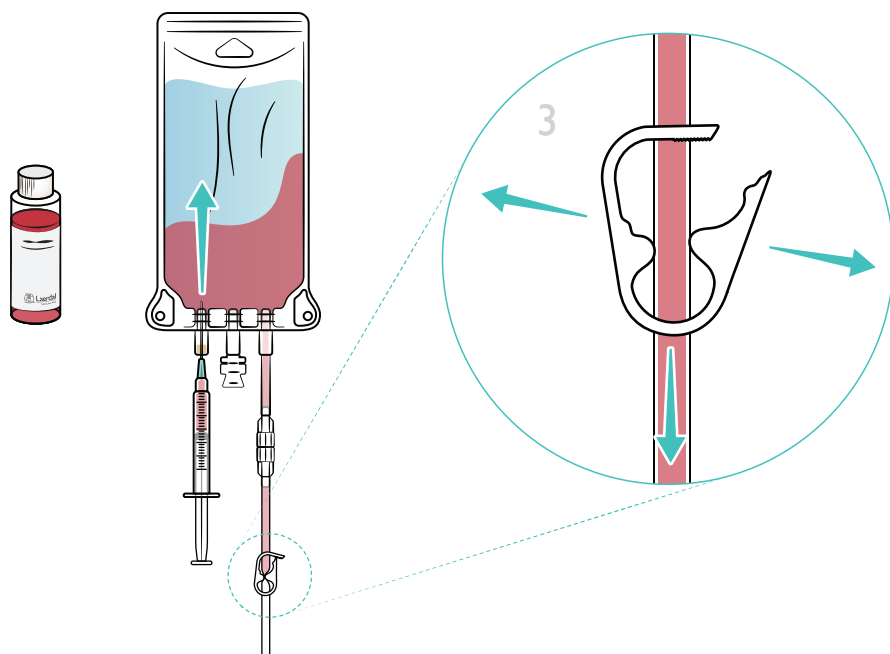

4a




4b

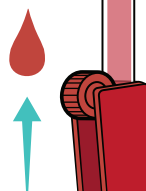


Removing Skin & Vein System


1

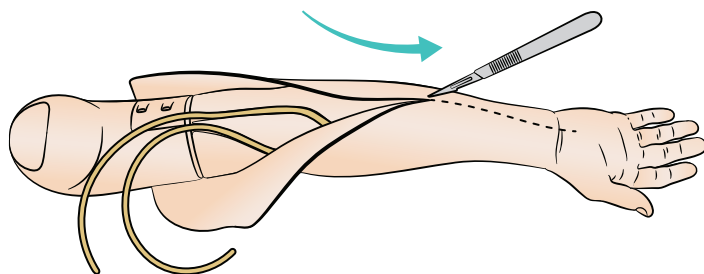


2

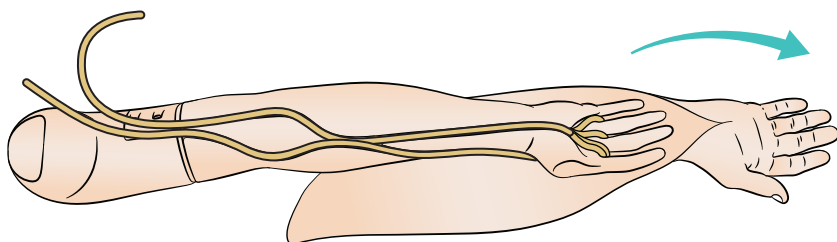



3

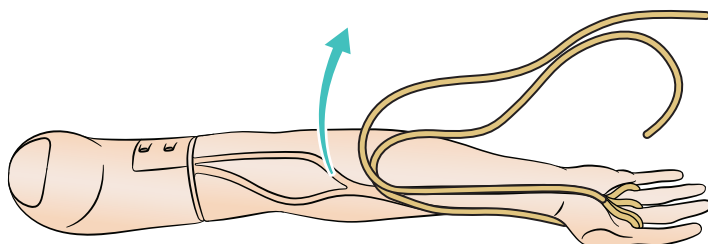

4

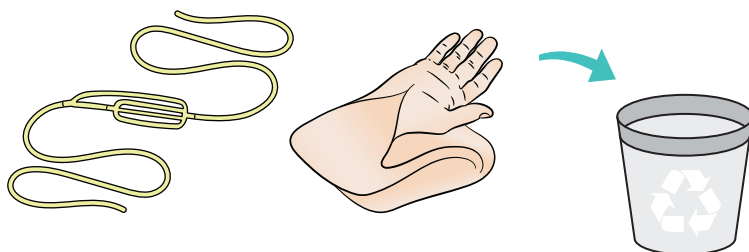

5

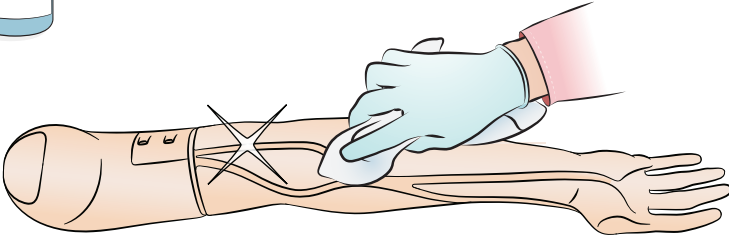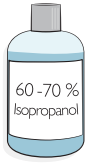

EN



Note

Excess dried glue may need to be scraped away.

FR



Note

Vous devrez éventuellement raclez la colle sèche en excès pour l'enlever.

ES



Nota

Puede que tenga que raspar para quitar el pegamento seco.

DE



Hinweis

Gegebenenfalls muss überflüssiger Klebstoff abgekratzt werden.

BR



Nota

O excesso de cola seca pode precisar ser removido.

NL



Opmerking

Overtollige lijmresten moeten worden weggeschrapt.

JA



注

チューブの固定のため予めいくつかのポイントに接着剤が用いられています。余分な接着剤は剥がしてください。

ZH



注意

刮除过量干胶。

KO




참고

건조된 접착제가 과도할 경우 긁어내야 합니다.


Replacing Skin & Vein System

6

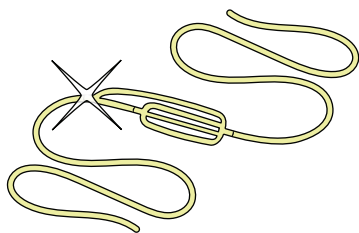


7


2,5 cm / 1 in

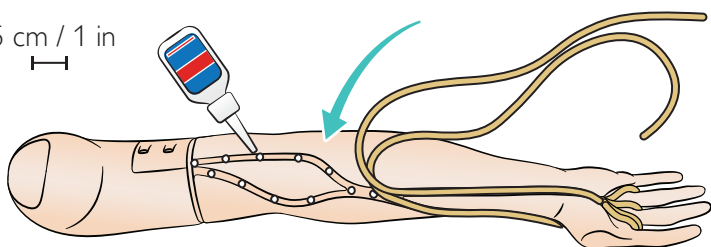

8

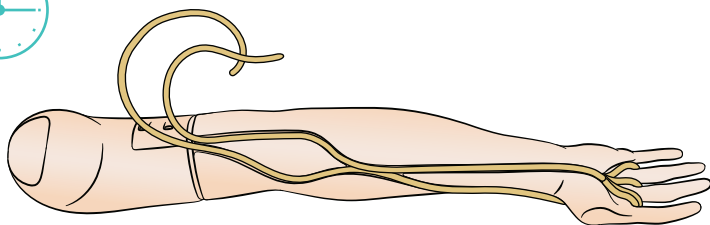

9

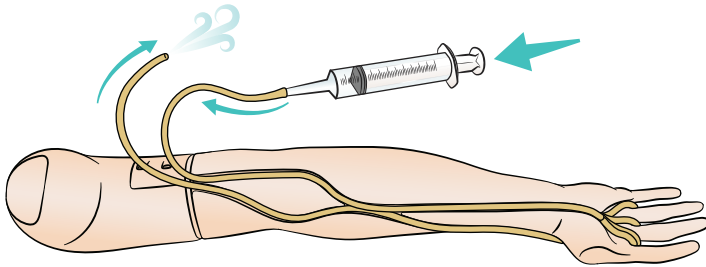

EN

9. Push air through vein with a syringe to check for kinks or blockages.

FR

9. Injectez de l'air dans la veine au moyen d'une seringue pour rechercher d'éventuels coudes ou obstructions.

ES

9. Introduzca aire por la vena con una jeringa para ver si hay pliegues o bloqueos.

DE

9. Spritzen Sie mithilfe einer Spritze Luft durch die Vene, um sie auf Knicke oder Verschlüsse zu überprüfen.

BR

9. Injete ar na veia com uma seringa, para verificar se há dobras ou obstruções.

NL

9. Duw met een spuit lucht door de aderen om te controleren op knikken of verstoppingen.

JA

9. シリンジで静脈内に空気を送り、ねじれや詰まりがないか確かめます。

ZH


9. 用注射器将空气推进静脉, 检查是否有扭结或堵塞。

KO

9. 정맥을 통해 주사기로 공기를 넣어 꼬이거나 막힌 부분이 있는지 확인합니다.

Replacing Skin & Vein System


10

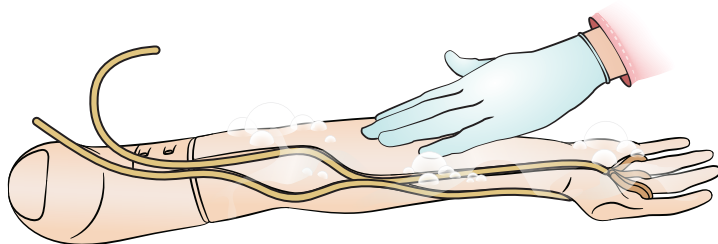


11



12

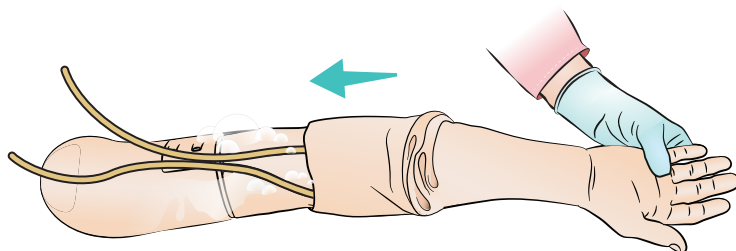

13

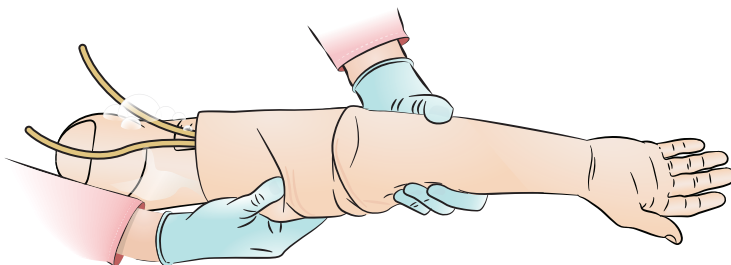

EN

Notes

- Heat arm skin before replacing on mandrel. This can be done with a hair dryer.
- Male arm skin includes thumb piece.

FR

Notes

- Chauffez la peau du bras avant de la remettre en place sur le mandrin, par exemple au moyen d'un sèche-cheveux.
- La peau du bras version homme inclut une pièce pour le pouce.

ES

Notas

- Caliente la piel del brazo antes de volver a colocarla sobre el molde. Esto se puede hacer con un secador.
- La piel del brazo masculino incluye una pieza para encajar el pulgar.

DE

Hinweise

- Erwärmen Sie die Armhaut, bevor Sie sie über die Armkonstruktion ziehen. Dies kann mithilfe eines Föns geschehen.
- Die männliche Armhaut umfasst ein Daumenstück.

BR

Notas

- Aqueça a pele do braço antes de recolocar no mandril. Isso pode ser feito com um secador de cabelo.
- A pele do braço masculino inclui a área do polegar.

NL

Opmerkingen

- Verwarm de huid voordat u deze op de arm plaatst. U kunt hiervoor een haardroger gebruiken.
- De huid van de mannelijke arm bevat een duimstuk.

JA

注

- アームスキンを温めてから取り付けてください。この際へアドライヤーをお使いいただくこともできます。
- 男性用アームスキンには親指パーツが含まれています。

ZH

注意

- 在芯轴上更换前预先加热手臂皮肤。此处可使用吹风机。
- 男性手臂皮肤包括拇指部位。

KO

참고

- 맨드릴에서 교체하기 전에 팔 피부에 열을 가하십시오. 헤어 드라이어로 열을 가할 수 있습니다.
- 남성 팔 피부에는 엄지 부분이 포함되어 있습니다.





BR

- Limpe o braço com sabão neutro e água, após cada sessão de treinamento, e realize uma inspeção geral regularmente.
- Lave as veias com água e depois insira ar usando uma seringa de ponta. Desinfete, quando necessário, com uma solução suave de alvejante e água e injete ar em seguida.
- Se usar a placa para injeção no deltoide (somente água), esprema a água da placa de espuma após cada sessão de treinamento. Deixe a placa secar antes da reinserção na pele. Aplique amido de milho para facilitar a inserção. As placas podem ser embebidas com uma solução suave de alvejante e água, para prevenir mofo e fungos. Não guarde as placas de espuma molhadas na pele.

Cuidados

- *Não submerja o braço ou outras peças em fluido de limpeza ou água.*
- *Evite usar luvas plásticas coloridas, pois elas podem manchar a pele do braço. Não use canetas esferográficas nem hidrocores, acetona, iodo ou outros materiais que causem manchas próximo ao braço. Tenha cuidado para não colocar o braço sobre papel impresso, jornal ou papel colorido. As manchas podem ser permanentes.*



BR

Especificações			
Temperatura de armazenamento	4 °C a 40 °C		
Temperatura em funcionamento	-15 °C a 50 °C		
Umidade	20% - 90% (sem condensação)		
	Braço masculino	Braço feminino	Braço pediátrico
Peso	1,7 kg	1,79 kg	0,91 kg
Dimensão	72,4 cm	73,7 cm	51,44 cm
Armazene em ambiente fechado e ao abrigo da luz solar direta			

Peças de reposição

Para conhecer as mais recentes peças de reposição e acessórios, visite www.laerdal.com



Advertências e cuidados

Uma indicação de Advertência refere-se a uma condição, perigo ou prática insegura que pode resultar em ferimento grave ou morte.

Uma indicação de Cuidado refere-se a uma condição, perigo ou prática insegura que pode resultar em ferimento leve ou danos ao produto.



Notas

Uma nota refere-se a informações importantes sobre o produto ou suas operações.



Warranty

EN

Global Warranty

Refer to the Laerdal Global Warranty for terms and conditions. For more information visit www.laerdal.com

FR

Garantie mondiale

Reportez-vous à la garantie mondiale de Laerdal pour en connaître les clauses. Pour plus d'informations, visitez le site www.laerdal.com/fr

ES

Garantía global

Consulte la garantía global de Laerdal para ver los términos y condiciones. Para obtener más información, visite www.laerdal.com/es

DE

Weltweite Garantie

Informationen zu den Gewährleistungsbedingungen finden Sie in der Broschüre über die weltweite Garantie von Laerdal. Weitere Informationen finden Sie unter www.laerdal.com/de

BR

Garantia global

Consulte a Garantia global da Laerdal para conhecer os termos e condições. Para obter mais informações, visite www.laerdal.com/br

NL

Wereldwijde garantie

Raadpleeg de algemene voorwaarden in de Laerdal Wereldwijde Garantie. Bezoek www.laerdal.com/nl voor meer informatie

JA

グローバル保証

諸条件については「Laerdal グローバル保証」をご参照ください。詳しくは、www.laerdal.com/jpをご覧ください。

ZH

全球保修

请参见《挪度全球保修》了解条款与条件。如需了解更多信息，请访问 www.laerdal.com/cn

KO

제한보증

이용약관은 Laerdal 글로벌 보증서를 참조하십시오. 자세한 정보는 www.laerdal.com/kr 을 방문하십시오.

© 2020 Laerdal Medical AS. All rights reserved.

Manufactured in USA for:
Laerdal Medical AS
P.O. Box 377, Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway
T: (+47) 51 51 17 00

Printed in USA

20-16104 Rev B

www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives