



www.wunder.it

**STATIMETRO PROFESSIONALE NEONATI
MOD. WH80**

MANUALE ISTRUZIONE



CDN V030299

N°REPERTORIO 676567



Leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo dello strumento

INDICE

2. SPECIFICHE TECNICHE ED UTILIZZO2

3. MONTAGGIO STATIMETRO PESANEONATI BABYONE O BABYTWO2

3. MISURAZIONE3



AVVERTENZE!

Gli operatori devono leggere attentamente il presente manuale, attenersi alle istruzioni in esso contenute e familiarizzare con le procedure corrette d'uso e di manutenzione dello strumento.

- Conservare questo manuale per consultazione e a supporto dell'addestramento del personale
- Per una migliore e più lunga durata del prodotto e bene eseguire periodicamente una accurata pulizia generale.
- La pulizia dello strumento va effettuata con un panno morbido, inumidito con acqua o detergente neutro, evitando l'utilizzo di solventi o sostanze abrasive. In caso di prolungato inutilizzo dello strumento, rimuovere le batterie dal terminale.
- Durante il trasporto, prestare attenzione a non sottoporre lo strumento a urti o eccessive sollecitazioni meccaniche.
- In caso di riparazione o assistenza, rivolgersi al proprio rivenditore.

1. SPECIFICHE TECNICHE ED UTILIZZO

SPECIFICHE


RANGE MISURAZIONE	35~80cm
DIVISIONE	1mm
DIMENSIONI	(w)87 x (L)30 x (h)7cm
PESO	700g
TEMPERATURA D'UTILIZZO	10°C~40°C

2. MONTAGGIO STATIMETRO PESANEONATI BABYONE O BABYTWO


Per l'installazione dello statimetro misura altezza digitale procedere come segue:

<p>A) Applicare il supporto dello statimetro al piano di pesatura con le 2 viti a croce in dotazione (Fig.a).</p>	<p>Fig.A</p>	
<p>B) Inserire lo statimetro meccanico sul supporto precedentemente applicato al piano di pesatura. (Fig.b)</p>	<p>Fig.B</p>	
<p>C) L'installazione è ora completa. (Fig.c)</p>	<p>Fig.C</p>	

3. MISURAZIONE

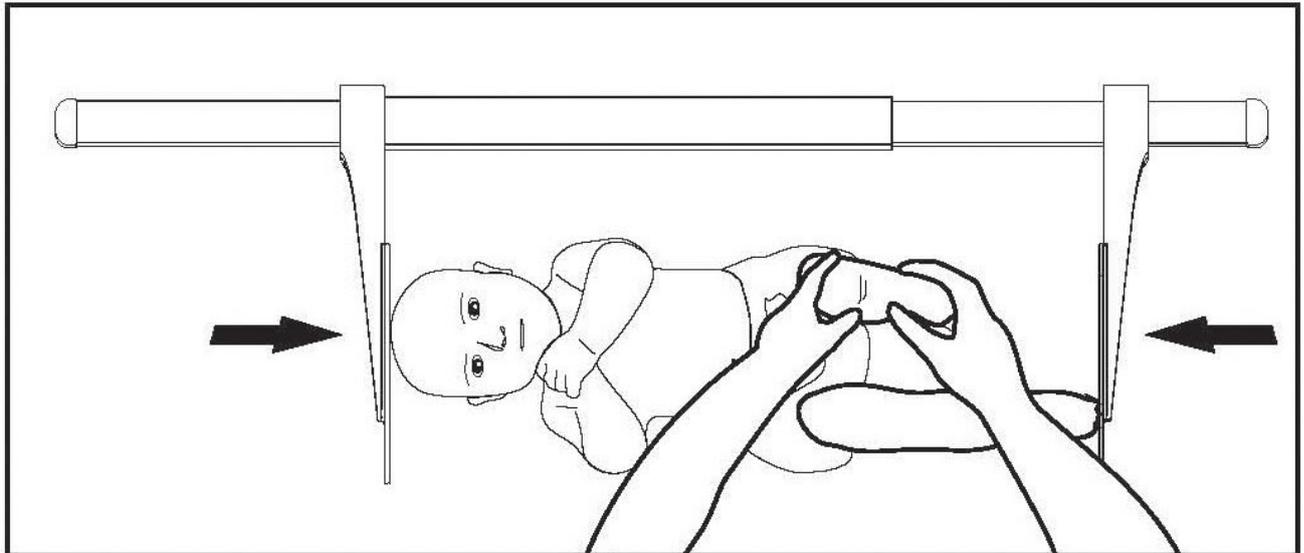

1. Appoggiare lievemente la testa del bambino alla paletta posta a sinistra
2. Allungare i piedi del bambino

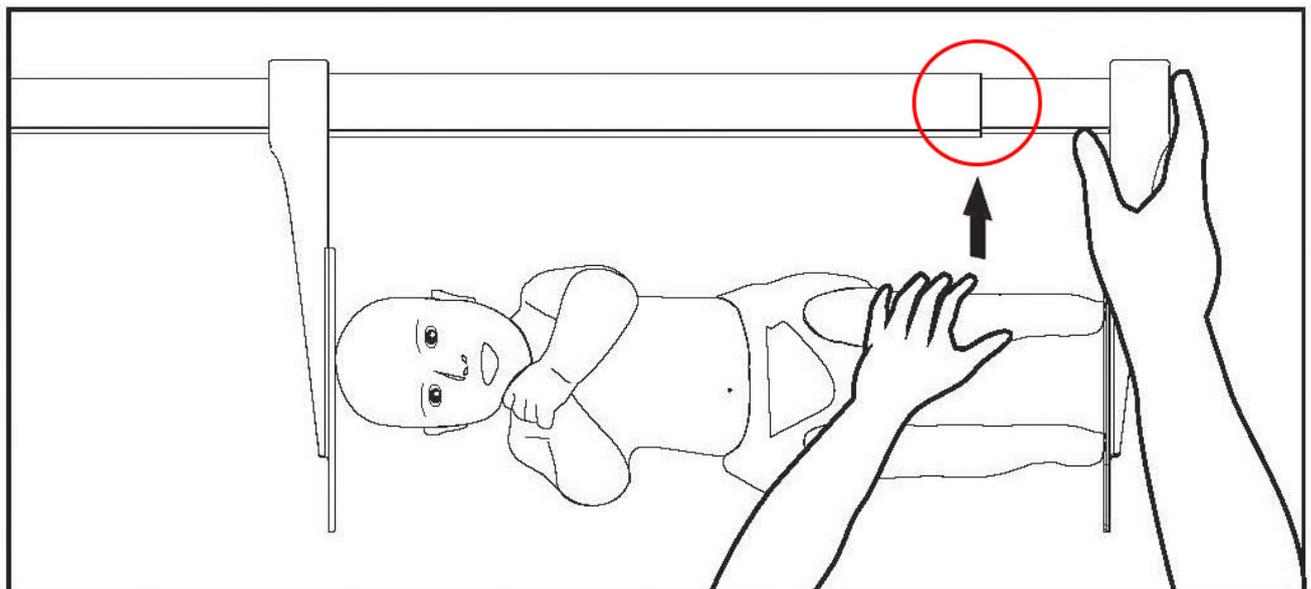

3. Muovere la paletta di destra fino a toccare i piedi del bambino
4. L'altezza del bambino viene letta in corrispondenza della linea rossa sullo statimetro