



TALLÍMETRO PARA RECIÉN NACIDOS MOD. WH80D



Lea atentamente el presente manual antes de utilizar el instrumento

ÍNDICE

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y USO	2
2. MONTAJE TALLÍMETRO PESANEONATOS BABYTWO	2
3. MEDICIÓN	3



¡ATENCIÓN!

Los operadores deben leer atentamente el presente manual, atenerse a las instrucciones contenidas en el mismo y familiarizarse con los procedimientos correctos de uso y de mantenimiento del aparato.

- Conserve este manual para su consulta y como apoyo para la formación del personal.
- Para una duración del producto mejor y más larga, es conveniente efectuar periódicamente una meticulosa limpieza general.
- La limpieza del instrumento debe realizarse con un paño suave, humedecido con agua o con un detergente neutro, sin utilizar disolventes ni sustancias abrasivas.
- En caso de que el instrumento no se utilice durante un periodo de tiempo prolongado, quite las pilas.
- Durante el transporte, preste atención a no golpear el instrumento ni someterlo a esfuerzos mecánicos excesivos.
- Para reparaciones o asistencia, póngase en contacto con su distribuidor o con un centro autorizado escribiendo a service2@wunder.it o sales@wunder.it

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y USO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


RANGO DE MEDICIÓN	35-80cm
DIVISIÓN	1mm
DIMENSIONES	W87 x L30 x H7cm
PESO	700g
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	10°C~40°C

2. MONTAJE TALLÍMETRO PESANEONATOS BABYTWO


Para la instalación del tallímetro de medición de altura, proceder de la siguiente manera:

<p>A) Colocar el soporte del tallímetro en la plataforma de pesaje con los 2 tornillos de estrella suministrados (Fig.a)</p>	Fig.A	
<p>B) Insertar el tallímetro en el soporte previamente colocado en la plataforma de pesaje (Fig.b)</p>	Fig.B	
<p>C) La instalación está ahora completa (Fig.c)</p>	Fig.C	

3. MEDICIÓN

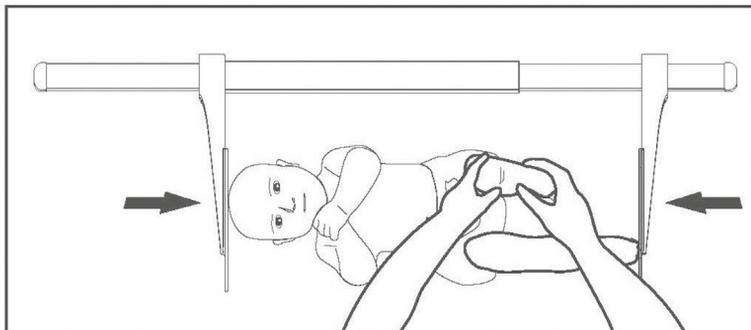

1. Apoyar suavemente la cabeza del niño en la paleta situada a la izquierda
2. Estirar los pies del niño

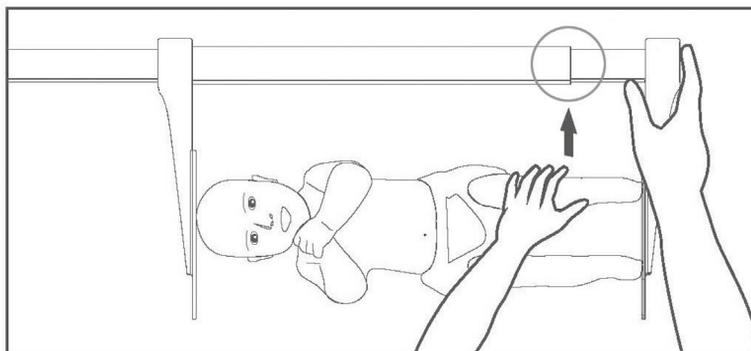

3. Mover la paleta derecha hasta que toque los pies del niño
4. La estatura del niño se lee en la línea roja del talímetro



Wunder Sa.Bi. S.r.l.
Via Vecchia per Monza, 20
20056 Trezzo sull'Adda (MI)
Tel. +39 02 90964566
www.wunder.it