



MEDIDOR DE ALTURA PROFISSIONAL PARA BEBÉS MOD. WH80



Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o instrumento

ÍNDICE

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E UTILIZAÇÃO	2
2. MONTERING AV HØYDEMÅLER- OG BABYVEKT BABYTWO	2
3. MEDIÇÃO	3



ATENÇÃO!

Os operadores devem ler atentamente este manual, seguir as instruções nele contidas e familiarizarse com os procedimentos corretos de utilização e manutenção do instrumento.

- Guarde este manual e a declaração de conformidade para consulta e apoio à formação do pessoal.
- Para prolongar a durabilidade do produto e mantê-lo em ótimas condições, deve-se realizar periodicamente uma boa limpeza geral.
- O aparelho deve ser limpo com um pano macio humedecido com água ou detergente neutro, evitando a utilização de solventes ou de substâncias abrasivas.
- Em caso de inatividade prolongada do instrumento, retire as baterias do terminal.
- Durante o transporte, prestar atenção para não submeter o instrumento a impactos ou tensões excessivas.
- Em caso de reparação ou serviço, contacte o seu revendedor ou um centro autorizado contactando **service2@wunder.it** ou **sales@wunder.it**

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E UTILIZAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


GAMA DE MEDIÇÃO	35~80cm
DIVISÃO	1mm
DIMENSÕES	W87 x L30 x H7cm
PESO	700g
TEMPERATURA OPERATIVA	10°C~40°C

2. MONTERING AV HØYDEMÅLER- OG BABYVEKT BABYTWO


Para instalar o medidor de altura, proceder da seguinte forma:

A) Fixar o suporte do medidor de altura à superfície de pesagem com os 2 parafusos de cabeça cruzada fornecidos (Fig.a)	Fig.A	
B) Colocar o medidor de altura sobre o suporte previamente fixado na superfície de pesagem (Fig.b)	Fig.B	
C) A instalação está concluída (Fig.c)	Fig.C	

3. MEDIÇÃO

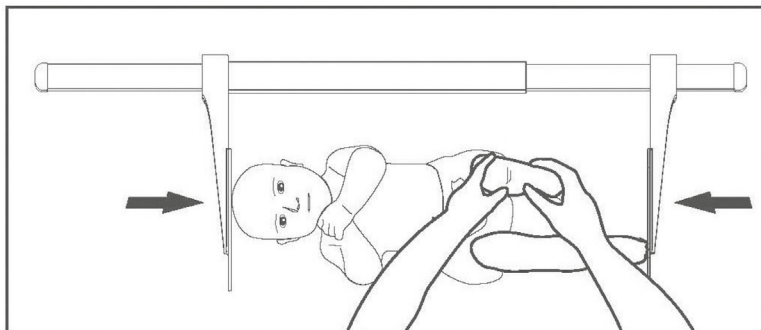

1. Apoiar ligeiramente a cabeça da criança na aleta à esquerda
2. Alongar os pés da criança

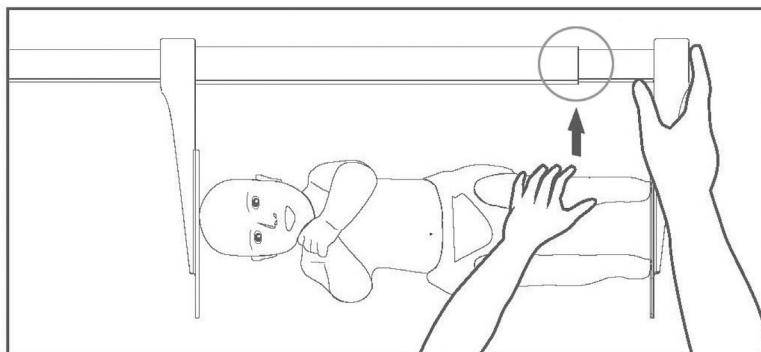

3. Mover a aleta direita até tocar nos pés da criança
4. Barnets høyde avleses ved den røde linjen på høydemåleren



Wunder Sa.Bi. S.r.l.
Via Vecchia per Monza, 20
20056 Trezzo sull'Adda (MI)
Tel. +39 02 90964566
www.wunder.it