

REF **KDB-699 (GIMA 43202)** Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands **Gima S.p.A.**
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

- Le produit doit être mis en place de manière stable et ferme et ne doit pas bouger pour éviter tout dommage structurel. La chaise percée à roulettes ne doit PAS être utilisée comme fauteuil roulant manuel et convient uniquement pour la mobilité sur de courtes distances.
- Ne pas monter sur la chaise si les pieds sont démontés car elle pourrait tomber.

STOCKAGE

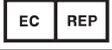
La chaise percée compacte doit être placée dans un endroit sec, dans une pièce propre, bien aérée et sans gaz corrosif. Pour éviter l'humidité, la lumière forte, la tenir à l'écart des sources de chaleur pendant le transport.

ÉLIMINATION

Les restrictions d'élimination dépendent de la contamination subie lors de l'utilisation et sont soumises à la législation nationale ou locale.

Tous les accidents graves concernant le dispositif médical que nous fournissons doivent être signalés au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre où se trouve votre siège social.

ETICHETTE, IMBALLAGGIO DESIGN DEL LOGO:

Symbole	Signification	Symbole	Signification
	Dispositif médical conforme au Règlement (UE) 2017/745		Dispositif médical
	Fabricant		Représentant autorisé dans la Communauté Européenne
	Date de fabrication		Conserver à l'abri du soleil
	Numéro de lot		Non stérile
	Avertissement : Lisez et suivez attentivement les instructions (avertissements) d'utilisation.		Code produit
	Lire la notice d'utilisation		Conserver dans un endroit frais et sec
	Importé de		

FRANÇAIS

NOM

Chaise percée

Modèle: KDB-699

Capacité de poids: 125 Kg.

USAGE PRÉVU :

La chaise percée est utilisée comme lieu d'aisance des personnes malades, blessées ou handicapées, elle peut être utilisée à la maison ou à l'hôpital.

OPÉRATEUR

L'appareil peut être utilisé par l'utilisateur lui-même, le personnel infirmier ou le soignant.

POPULATIONS DE PATIENTS

Personnes handicapées, patients et personnes âgées.

CONTRE-INDICATIONS

Surveiller les enfants lorsqu'ils utilisent la chaise percée.

MODE D'EMPLOI

- Le produit est une structure pliable, il suffit de déplier le châssis et d'installer les parties nécessaires telles que les roues, fixer le vase et le panneau du siège avant l'utilisation.
- Lever le plateau du siège, bien placer le vase sur la structure et abaisser la planche avant utilisation.
- Après utilisation, fermer le couvercle du vase et l'enlever de la structure du vase.
- La chaise percée peut être repliée lorsqu'elle n'est pas utilisée, ce qui est pratique pour le rangement et pour le gain de place.

ENTRETIEN

- La surface du produit ne doit pas être rayée par des objets durs afin d'éviter tout dommage matériel.
- Pour le nettoyage et l'entretien quotidiens, appliquer un détergent synthétique neutre, essuyer à l'aide d'un chiffon humide et puis essuyer avec un chiffon sec.
- Nettoyer et désinfecter régulièrement une fois par jour par le personnel médical ou les utilisateurs, et désinfecter soigneusement la chaise percée lors d'un changement de patient.
- Ne pas entrer en contact avec des acides forts et des alcalis pour éviter la corrosion.

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE:

- Placer la chaise percée dans un endroit sec et ventilé à l'abri de la lumière directe du soleil et éviter les produits chimiques corrosifs tels que l'huile, l'acide et l'alcali.
- La chaise percée ne doit pas être exposée au soleil et à la pluie et doit être nettoyée et séchée immédiatement après chaque utilisation.
- Certains lubrifiants de haute qualité peuvent être ajoutés aux pièces mobiles pour la lubrification pour un meilleur fonctionnement.
- Vérifier régulièrement l'assemblage de la chaise percée pour éviter les accidents dus au desserrage et à la chute.
- Vérifier fréquemment s'il y a des fissures partout dans la chaise percée et d'autres défauts qui affecteront l'utilisation de la chaise.
- Vérifier fréquemment si le cadre du siège et la plaque du siège sont stables.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie standard B2B Gima de 12 mois s'applique.