

Value&Safe

Mascherina filtrante contro particelle - Con elastico - bianca
Μάσκα Φιλτραρίσματος Σωματιδίων - Με βρόχους αυτιών - λευκή
Eficientă de filtrare a particulelor
Cu prindere după urechi - albă
Maska z filtrem cząsteczek - Z pętlą na uszy - biała
Filtrační maska proti částicím - S ušními smyčkami - bílá

FFP2 NR

1 Pezzo
Τεμάχιο
Bucată
Sztuk
Kus



■ Va indossata per bloccare l'espiazione o l'emissione di particelle contaminanti dalla bocca e dalla cavità nasale negli ambienti comuni - NON STERILE, MONOUSO, ANTIPOLVERE - 42,8% TNT, 28,6% cotone ad aria calda, 28,6% tessuto melblown - Non schiacciare eccessivamente durante il trasporto per evitare di danneggiare la confezione. Validità di 3 anni, non utilizzare oltre il periodo di validità.

■ Χρησιμοποιείται για τον αποκλεισμό της εκπομπής ή της απελευθέρωσης μολυσματικών σωματιδίων από το στόμα και από τη ρινική κοιλότητα στους κοινούς χώρους. - ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ - 42,8% TNT, 28,6% βαμβάκι ζεστού αέρα, 28,6% ύφασμα melblown - Μην το συνθλίβετε υπερβολικά κατά τη μεταφορά για να μην προκληθεί ζημία στη συσκευασία. Ισχύς 3 ετών, μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος.

■ Este folosită pentru a bloca expirația sau emisia de particule contaminate purtând și cavitatea nazală în mediile comune - NESTERILĂ, DE UNICĂ FOLOSIRE, ANTI PRAF - 42,8% TNT, 28,6% bumbac cu aer cald, 28,6% țesătură netesută - Nu strângeți excesiv în timpul transportului pentru a evita deteriorarea ambalajului. Valabilitate 3 ani, a nu se utiliza dincolo de perioada de valabilitate.

■ Należy ją nosić, aby zablokować wydech lub emisję zanieczyszczających cząstek z ust i jamy nosowej na wspólnych przestrzeniach - NIESTERYLNA, JEDNORAZOWA, PRZECIWPYŁOWA - 42,8% TNT, 28,6% bawełna na gorące powietrze, 28,6% materiał melblown - Nie ścisnąć nadmiernie podczas transportu, aby uniknąć uszkodzenia opakowania. Ważność 3 lata, nie używać po upływie terminu ważności.

■ Nasazuje se za účelem blokování výdechu nebo emisí kontaminujících částic z úst a nosní dutiny v běžném prostředí NESTERILNÍ, JEDNORÁZOVÁ, PROTI PRACHU - 42,8% TNT, 28,6% horkovzdušná bavlna, 28,6% tkanina melblown - Během přepravy nadměrně nestlačujte, aby nedošlo k poškození balení. Použitelnost 3 roky, nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

EU: 2016/425 - EN 149:2001 + A1:2009

■ Per indossare

1. Posizionare il nasello o sul naso e la maschera su mento.
2. Tirare gli elastici dietro le orecchie e sistemare la maschera.
3. Adattare il nasello al naso.
4. Verificare l'aderenza al viso.

⚠ ATTENZIONE

- a. È prevedibile un rischio se il prodotto viene utilizzato in ambiente chirurgico o con esposizione significativa a liquidi e fluidi corporei o altri fluidi pericolosi, se viene utilizzato in un ambiente clinico dove esiste un alto livello di rischio di infezione per inalazione o se viene utilizzato in presenza di una fonte di calore intenso o di un gas infiammabile.
- b. Il prodotto non è pensato per l'uso in un ambiente anossico e un ambiente subacqueo.
- c. Verificare l'integrità prima dell'uso.
- d. Il prodotto non è un respiratore.
- e. La mascherina non elimina il rischio di contrarre malattie o infezioni.
- f. L'uso scorretto e la conservazione errata del prodotto possono comportare disturbi.
- g. Non utilizzare oltre il periodo di validità.
- h. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.
- i. Non usare con l'ossigeno e solo in area ventilata con ossigeno >19% e per singolo turno. Modifiche, danni, capelli e barba riducono l'efficacia. In caso di malore abbandonare l'area di lavoro e raggiungere zone di aria fresca. Evitare uso in zone altamente contaminate o a rischio di esplosione.

■ Για να τη φορέσετε

1. Τοποθετήστε το ρινικό έλασμα στη μύτη και τη μάσκα στο πηγούνι.
2. Τραβήξτε τα λαστικά πίσω από τα αυτιά και προσαρμόστε τη μάσκα.
3. Προσαρμόστε το ρινικό έλασμα στη μύτη.
4. Ελέγξτε την πρόσφυση στο πρόσωπο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- a. Υπάρχει πιθανότητα κινδύνου εάν το προϊόν χρησιμοποιείται σε χειρουργικό περιβάλλον ή σε περιβάλλον με σημαντική έκθεση σε σωματικά υγρά ή άλλα επικίνδυνα υγρά, εάν χρησιμοποιείται σε κλινικό περιβάλλον όπου υπάρχει υψηλό επίπεδο κινδύνου μόλυνσης λόγω αστοχίας ή/και χρησιμοποιείται υπό την παρουσία πηγής έντονης θερμότητας ή εύφλεκτου αερίου.
- b. Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε ανοξικό περιβάλλον και σε συνθήκες κάτω από το νερό.
- c. Επαληθεύστε την ακεραιότητα του προϊόντος πριν από τη χρήση.
- d. Το προϊόν δεν είναι αναπνευστήρας.
- e. Η μάσκα δεν εξαλείφει τον κίνδυνο προσβολής από ασθένειες ή μολύνσεις.
- f. Η λανθασμένη χρήση και η εσφαλμένη αποθήκευση του προϊόντος ενδέχεται να συνεπάγονται διαταραχές.
- g. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν πέραν της περιόδου ισχύος.
- h. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημία.
- i. Μην τη χρησιμοποιείτε με οξυγόνο και φοράτε την μόνο σε αεριζόμενο χώρο με οξυγόνο >19% και μόνο για μία βάρδια. Τροποποιήσεις, φθορές, τριχές και γένια μειώνουν την αποτελεσματικότητα. Σε περίπτωση δυσφορίας εγκαταλείψτε τον χώρο εργασίας και μεταβείτε σε χώρο με καθαρό αέρα. Αποφύγετε τη χρήση σε χώρους με υψηλά επίπεδα μόλυνσης ή με κίνδυνο έκρηξης.

■ Pentru folosire

1. Poziționați partea superioară pe nas și masca pe bărbie
2. Trageți elasticele în spatele urechilor și așezați masca
3. Adaptați partea superioară la nas
4. Verificați potrivirea pe față.

⚠ ATENȚIE

- a. Un risc este previzibil dacă produsul este utilizat într-un mediu chirurgical sau cu expunere semnificativă la fluide corporale și alte fluide periculoase, dacă este utilizat într-un ambient clinic în care există un nivel ridicat de risc de infecție prin inhalare sau dacă este utilizat în prezența unei surse de căldură intensă sau a unui gaz inflamabil.
- b. Produsul nu este destinat folosirii într-un mediu lipsit de oxigen și într-un mediu subacvatic.
- c. Verificați integritatea înainte de utilizare.
- d. Produsul nu este un aparat respirator.
- e. Masca nu elimină riscul de a contracta boli sau infecții.
- f. Utilizarea incorectă și depozitarea incorectă a produsului poate duce la tuburări.
- g. A nu se utiliza dincolo de perioada de valabilitate.
- h. Nu utilizați dacă pachetul este deteriorat.
- i. Nu utilizați cu oxigen și numai în zone ventilate, cu oxigen >19% și pe durata unei singure ture de lucru. Modificările, daunele, părul lăsat peste față și barba reduc eficiența produsului. În caz de stare de rău, părăsiți zona de lucru și deplasați-vă într-o zonă cu aer proaspăt. Evitați folosirea măștii în zone puternic contaminate sau în zone ce prezintă pericol de explozie.

■ Zakładanie maski:

1. Umieść noskę na nosie, a maskę na brodzie.
2. Załóż gumki za uszy i dopasuj maskę.
3. Dopasuj noskę do nosa.
4. Sprawdź przyleganie maski do twarzy.

⚠ UWAGA

- a. Przewidywalne jest ryzyko, jeśli produkt jest używany w warunkach chirurgicznych lub w przypadku znacznego narażenia na cieple i płyny ustrojowe i inne niebezpieczne płyny, jeśli jest używany w warunkach klinicznych, w których istnieje wysokie ryzyko zakażenia przez drogi oddechowe lub jeśli jest stosowany w obecności źródła intensywnego ciepła lub łatwopalnego gazu.
- b. Wyrobek není určen pro použití v anoxickém prostředí a pod vodou.
- c. Před použitím należy sprawdzić integralność maski.
- d. Produkt nie jest respiratorem.
- e. Maska nie eliminuje ryzyka zarażenia się chorobami czy infekcjami.
- f. Niewłaściwe użytkowanie i nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować choroby.
- g. Nie używać po upływie terminu ważności.
- h. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- i. Nie używać z tlenem i stosować tylko w wentylowanych pomieszczeniach z tlenem >19% oraz przez okres jednej zmiany roboczej. Modyfikacje, uszkodzenia, włosy i broda zmniejszają jej skuteczność. W przypadku złego samopoczucia opuść miejsce pracy i wyjdź na świeże powietrze. Unikaj stosowania w obszarach silnie zanieczyszczonych lub w którym istnieje ryzyko wybuchu.

■ Způsob nasazení

1. Umístěte nosní svorku na nos a masku na bradu.
2. Vytáhněte gumičky za uši a upravte polohu masky na obličej.
3. Přizpůsobte nosní díl nosu.
4. Zkontrolujte přilnutí k obličejí.

⚠ POZORNOST

- a. Existuje předvídatelné riziko, jestliže je výrobek používán v chirurgickém prostředí nebo s významnou expozicí tělních tekutin nebo jiných nebezpečných kapalin, je-li používán v klinickém prostředí, kde je vysoké riziko infekce inhalací, nebo pokud se používá v přítomnosti zdroje intenzivního tepla nebo hořlavého plynu.
- b. Výrobek není určen pro použití v anoxickém prostředí a pod vodou.
- c. Před použitím zkontrolujte neporušenost.
- d. Výrobek není respirátor.
- e. Maska nevylučuje riziko přenosu nemoci nebo infekcí.
- f. Nesprávné použití a nesprávné skladování výrobku může vést k narušení.
- g. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
- h. Nepoužívejte, pokud je obal poškozený.
- i. Nepoužívejte s kyslíkem, používejte pouze ve větraném prostoru s kyslíkem >19% a na jednu směnu. Úpravy, poškození, vlasy a vousy snižují účinnost. V případě nevoľnosti opusťte pracovní prostor a přemístěte se do oblasti s čerstvým vzduchem. Nepoužívejte ve vysoce kontaminovaných nebo potenciálně výbušných oblastech.

REF LK-2006 (20733)

Marca: XIQUE / Εταιρεία: XIQUE / Marca: XIQUE
Marka: XIQUE / Značka: XIQUE

Anhui Lekang Sanitary Materials Co., Ltd.
Qingcao Industrial Park, Tongcheng,
Anqing City, Anhui Province
Made in China

Importato da / Εισαγωγή από / Importat de
Importowane przez / Importováno uživatelem:
Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



LOT

EN 149:2001 + A1:2009


Organismo notificato /
Κοινοποιημένος οργανισμός /
Organism notifié / Jednostka
notyfikowana / Oznámený subjekt
0370

LGAI Technological Center (APPLUS)
Campus UAB,
Ronda de la Font del Carme s/n,
E-08193, Bellaterra (Barcelona), Spain

Regolamento UE: 2016/425
Κανονισμός ΕΕ 2016/425
Regulament UE: 425/2016
Rozporządzenie UE 2016/425
Nařízení EU: 2016/425

SACCHETTO
BAG
PLASTICA
PP
PLASTIC
Verifica le disposizioni del tuo comune
per la gestione dei rifiuti.
Please refer to the provisions of your
municipality concerning waste disposal

CE 0370

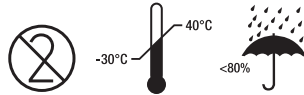

Rev. 7 - 12/21