



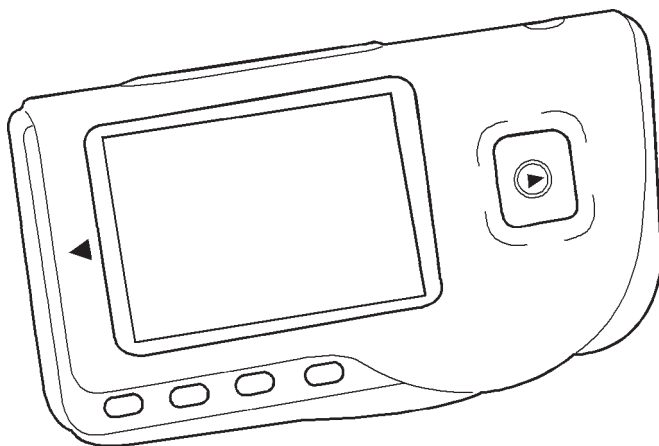
GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 fax +39 02 95380056
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

ECG Palmare Cardio B - Bluetooth
Cardio-B Palm ECG - Bluetooth
ECG de poche Cardio B - Bluetooth
ECG Palmar Cardio B - Bluetooth

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO



ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.



0123



Fabbricante
Manufacturer

Shenzhen Creative Industry Co., Ltd.
2/F Block 3 Nanyou
Tian'an Industry Town - 518054
Shenzhen, GD - P.R.C.



Shanghai International Trading Corp. GmbH (Hamburg)
Eiffestr. 80, 20537 Hamburg - Germany



ATTENZIONE

1. Controllare l'apparecchio per assicurarsi che non ci siano danni evidenti che possano influire sulla sicurezza dell'utilizzatore e sulla misurazione. Interrompere l'utilizzo dell'unità se vi sono danni evidenti.
2. **NON** effettuare auto-diagnosi tramite le misurazioni o i risultati delle misurazioni, consultare sempre il medico se si presentano frequentemente dati anomali.
3. L'apparecchio **NON** è stato progettato o creato per diagnosi mediche.
4. **NON** utilizzare questo apparecchio in bagno o in ambienti umidi.
5. **NON** utilizzare con un defibrillatore.
6. **NON** utilizzare su portatori di pacemaker cardiaci.
7. **NON** mettere in funzione in ambienti dove ci sia presenza di forti interferenze elettro-magnetiche.
8. L'assistenza necessaria deve essere eseguita **ESCLUSIVAMENTE** da personale tecnico qualificato.
9. Un esame clinico ECG è consigliabile per verificare le condizioni cardiache.
10. Collegare/scollegare il cavo dati al monitor delicatamente e con attenzione, **NON** torcere o strappare la spina del cavo dati con forza per inserirla o disinserirla dalla porta d'interfaccia dati che rischierebbe di essere danneggiata.
11. Alla data di scadenza provvedere allo smaltimento dell'apparecchio e dei suoi accessori secondo le leggi locali vigenti.

1 Indicazioni generali

1.1 Aspetto esteriore

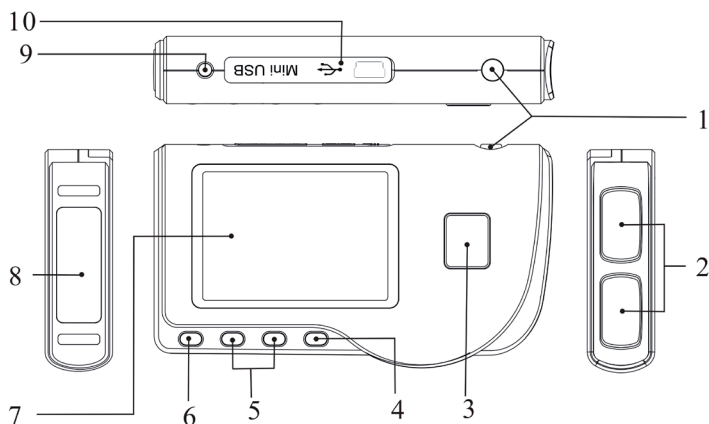




Figura 1 Illustrazione dell'apparecchio

1. Accensione: Tenendo premuto questo tasto (circa 2 secondi) si accende o si spegne l'apparecchio; premendolo brevemente si accende la luce del display.
2. Elettrodo metallico I, II
3. Misurazione: pulsante avvio rapido per la misurazione, premere questo pulsante per iniziare la misurazione.
4. OK: conferma la selezione o la modifica.
5. Tasti direzionali:
 - Su / sinistra / aumenta: muove il cursore verso l'alto / a sinistra, o regola i parametri.
 - Giù/destra/diminuisce: muove il cursore verso il basso / a destra o regola i parametri.
6. Invio: Ritorna al livello precedente nel menu.
7. Schermo: visualizza le onde e i dati dell'ECG .
8. Elettrodo metallico III

9.  Connettore derivazioni ECG: per il collegamento al cavo derivazioni.

10.  Porta interfaccia dati: per il collegamento con cavo dati mini USB.

1.2 Nome e Modello

Monitor PC-80B ECG Easy Bluetooth

1.3 Struttura

Il monitor PC-80B ECG Easy Bluetooth è composto da pannello principale, pannelli e elettrodi.

1.4 Caratteristiche

1. Di piccole dimensioni e leggero da trasportare.
2. Misurazione tramite un tasto, facile funzionamento.
3. Visualizzazione chiara onde ECG e interpretazione risultati su schermo LCD dot-matrix.
4. Si possono ottenere diciassette tipi di misurazioni.
5. Possibilità di memorizzare nella memoria incorporata, fino a 1200 record per la misurazione rapida o 10 ore di misurazione in continuo.
6. I dati memorizzati possono essere revisionati, copiati, cancellati e anche caricati su PC.
7. Risparmio energetico tramite funzione di spegnimento automatico.
8. Con due batterie AAA si possono effettuare più di 10 ore di attività (trasmissione senza fili disattivata).
9. Funzione di upload dei dati senza fili.

1.5 Destinazione d'uso

Il Monitor PC-80B ECG Easy Bluetooth è concepito per il monitoraggio e la memorizzazione delle onde e degli indici cardiaci dell'ECG in pazienti adulti. È applicabile per l'uso ambulatoriale o domestico e può essere utilizzato dallo stesso paziente.

Il dispositivo non è un monitor ECG paragonabile ai modelli in uso in cliniche o ospedali, ma viene utilizzato per il solo scopo di controlli saltuari. Non può essere utilizzato per sostituire esami ECG tradizionali o per il monitoraggio in tempo reale. I risultati delle misurazioni vengono utilizzati come riferimento per i medici ma non si possono formulare diagnosi o analisi dirette basandosi solo sulle informazioni fornite da questo apparecchio.

1.6 Ambiente operativo

Temperatura: 5~40°C

Umidità: 30%~80%

Pressione atmosferica: 70kPa~106kPa

2 Installazione

1. Aprire il coperchio delle batterie (vedere la figura).
2. Inserire due batterie formato AAA.
3. Chiudere il coperchio



NON inserire batterie invertendo la polarità. Provvedere allo smaltimento delle batterie esauste secondo le leggi locali vigenti.
Delle pellicole protettive sono posizionate sopra agli elettrodi del dispositivo, si prega di rimuovere le pellicole prima della misurazione.

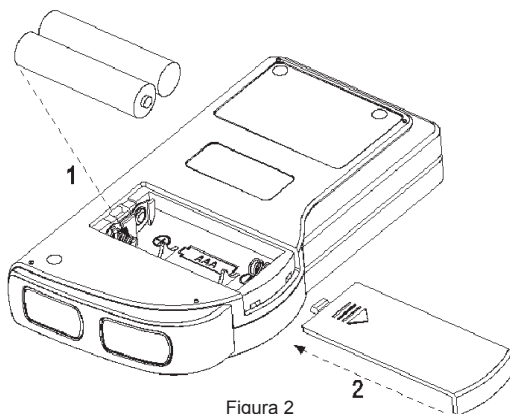


Figura 2

3 Funzionamento

3.1 Avvio misurazione ECG

Premere il tasto Accensione (per 2 secondi) per accendere l'apparecchio. Durante l'inizializzazione vengono visualizzate sullo schermo le seguenti immagini.

Dopo aver avviato il sistema, si accede ad un menu video come mostrato nella Figura 3-2.

Nota: Durante l'inizializzazione premere il pulsante "Invio" per accedere al menu video principale

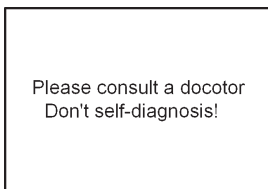


Figura 3-1A

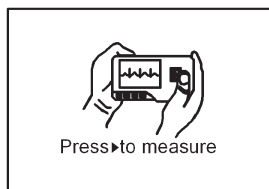


Figura 3-1B

come mostrato nella Figura 3-2. Premendo "▶ Measurement" (misurazione), si accederà al video della misurazione mostrato nella Figura 3-4.


Ci sono 6 pulsanti strumenti, premere il tasto di navigazione per posizionare il cursore e premere "■ OK" per confermare. Tutti le funzioni sono elencate di seguito:

 Misurazione: rileva le onde ECG e i valori HR e analizza se l'onda ECG è normale.

 Revisione: permette di rivedere i dati degli ECG salvati in memoria (comprese le onde ECG e i risultati delle misurazioni).

 Memoria: Visualizza lo spazio libero in memoria e cancella i dati degli ECG memorizzati nell'unità .

 Regolazione: regola i parametri relativi alla data di sistema, l'ora, la lingua, la modalità, la luminosità, il contrasto ecc.

 Aiuto: fornisce informazioni sui metodi di misurazione ecc.


 : Imposta la lingua del display. Il dispositivo è progettato in due lingue (cinese e inglese) che possono essere selezionate dall'utente.



Figura 3-2

3.2 Misurazione ECG

3.2.1 Metodi di misurazione ECG rapidi

Misurazione torace

Al fine di ottenere le onde ECG ideali, si suggerisce il metodo della misurazione sul torace. Tenere il dispositivo con la mano destra. Assicurarsi che il palmo e le dita tocchino perfettamente gli elettrodi metallici I e II. Posizionare l'elettrodo III sulla pelle nuda a circa 5 cm di distanza sotto il capezzolo sinistro. Il segnale dell' ECG rilevato dalla misurazione al torace è simile al segnale V Derivazione ECG.

Funzionamento improprio:

- A. Il punto di contatto dell'elettrodo III non corrisponde al petto sinistro.
- B. La mano non afferra correttamente l'apparecchio.
- C. L'elettrodo non è in contatto completo con la pelle nuda. (Per esempio l'elettrodo è stato posizionato sopra i vestiti).

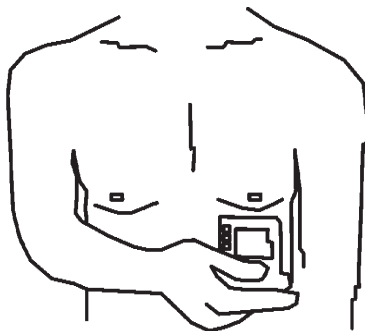


Figura 3-3A Misurazione torace

Misurazione gamba

Qualora non fosse possibile l'utilizzo della misurazione al petto, si consiglia la misurazione alla gamba. Durante la misurazione, tenere il dispositivo con la mano destra. Assicurarsi che il palmo e le dita tocchino perfettamente gli elettrodi metallici I e II. Posizionare l'elettrodo III sulla pelle 10 cm sopra la caviglia sinistra. Il segnale ECG rilevato dalla misurazione sulla gamba equivale al segnale II Derivazione ECG.

Funzionamento improprio:

- A. L'apparecchio non è tenuto in mano correttamente.
- B. L'elettrodo III non è in completo contatto con la pelle nuda: (per esempio è posizionato sopra la piega dei pantaloni o le calze).

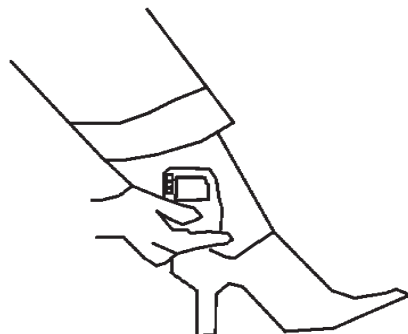


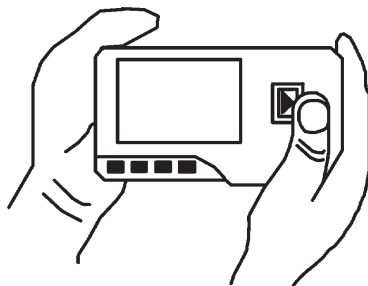
Figura 3-3B Misurazione gamba

Misurazione Palmo

Tenere il dispositivo con la mano destra. Assicurarsi che il palmo e le dita tocchino perfettamente gli elettrodi I e II. Premere l'elettrodo III contro il centro del palmo sinistro. Il segnale ECG rilevato con la misurazione sul Palmo equivale alla singola I Derivazione ECG.

Funzionamento improprio:

- A. Le mani si agitano troppo.
- B. Entrambe le mani perdono contatto con gli elettrodi durante la misurazione.
- C. Il palmo non è in contatto con gli elettrodi.



3-3C Misurazione palmo

3.2.2 Metodi di misurazione ECG in continua o lunghi periodi

Misurazione con cavetti

Per un migliore ECG, si può utilizzare la misurazione tramite cavetto di collegamento. Collegare il cavetto all'apparecchio tramite la relativa spina. Posizionare gli elettrodi e collegare i cavetti come nella figura accanto per ottenere il segnale ECG II Derivazione; se si desidera avere misurazioni con segnale I e III derivazione, collegare i cavetti agli elettrodi secondo la tabella seguente.

Funzionamento improprio:

- A. Errore nel collegamento alla porta.
- B. Elettrodo posizionato sul corpo non correttamente.

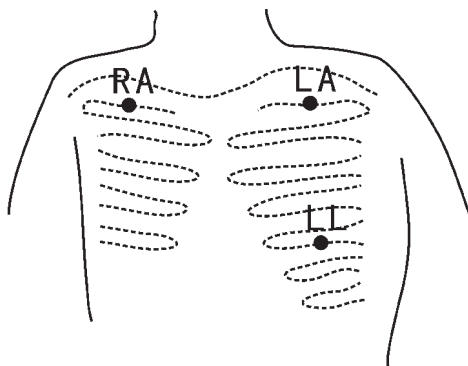



Figure 3-3D Misurazione con cavetti

Elettrodo / Posizione Elettrodo	Derivazione	Derivazione I	Derivazione II	Derivazione III
	L'intersezione tra l'asse della clavicola destra e seconda costola.	RA	RA	LA
L'intersezione tra l'asse della clavicola sinistra e seconda costola.	LL	LA	RA	
Tra l'estremità sinistra dello sterno e della quinta costola	LA	LL	LL	

Tabella posizionamento elettrodi e configurazione derivazioni ECG

3.3 Procedura di misurazione ECG

3.3.1 Misurazione rapida

1. Dopo la scelta di un metodo di misura adeguata, come descritto nel capitolo 3.2.1, premere  "Measure" per avviare automaticamente la misurazione ECG rapida, come mostrato nella Figura 3-4. Nei primi 15 secondi il dispositivo entra in fase preparatoria e valuta se la posizione degli elettrodi è adeguata o meno sulla base del tracciato ECG misurato. Se la forma d'onda rilevata non è chiara, regolare la posizione degli elettrodi.

Dati visualizzati:

1. "16: 14: 32": ora attuale.
2. "X1": scala ampiezza onde ECG.
- "X1/2": dimensione a metà della scala nominale;
- "X1": scala nominale;
- "X2": dimensione doppia della scala nominale
- "X3": dimensione tripla della scala nominale

3. : indicatore battito cardiaco. Lampeggia con il battito cardiaco.

4. : indica che la modalità filtro dell'ECG è "Enhanced" (potenziata); Far riferimento alla sezione 3.6.5 per la regolazione del filtro.

5. : Stato carica batteria

6. : onda ECG

7. : Righello per ampiezza 1mV

8. : Compressione compatta della forma d'onda in scala.

9. : Simbolo Wireless. Appare quando il "Wireless" è attivato nella schermata settaggi di sistema. Dopo una connessione riuscita tra il dispositivo e l'host remoto, i dati ECG possono essere caricati all'host (PC) per future consultazioni, analisi e salvataggio.

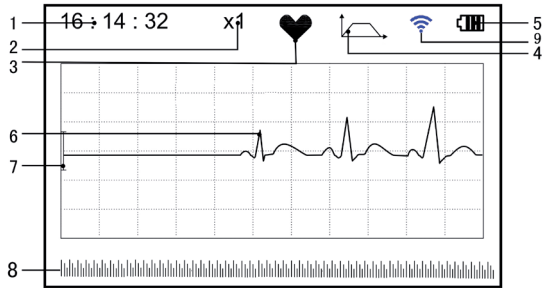


Figura 3-4 Schermata misurazione ECG

2. Quando la forma d'onda compressa in scala raggiunge la fine, significa che la misurazione è terminata. Il dispositivo passa quindi alla fase analisi dei dati che è seguita dalla schermata dei risultati misurazione, come mostrato in Figura 3-5.

"Return": torna al menu principale direttamente senza salvare i valori della misurazione e i risultati correnti.

"Save": salva il risultato della misurazione corrente e i suoi valori.

3. Nella schermata dei risultati misurazione, i dati correnti vengono salvati nel dispositivo automaticamente senza alcuna operazione entro 6 secondi o

premendo il tasto "Save", come mostrato nella Figura 3-6.

Il dispositivo tornerà alla schermata principale automaticamente dopo che i dati sono stati salvati.

4. Se è attiva la trasmissione senza fili, dopo che i dati sono stati salvati il dispositivo passa alla schermata illustrata nella Figura 3-7.

Premere il tasto "Send" sul lato del dispositivo per avviare la trasmissione dell'ECG in modalità wireless, e sul lato host, cliccare l'icona "Wireless Receive" all'interno del software "ECG Viewer Manager" sul PC. In questo modo i record dei dati verranno trasmessi e salvati sul PC, al termine il dispositivo torna alla schermata principale automaticamente. (Fare riferimento al Manuale Utente di "ECG Viewer Manager" per la procedura dettagliata di funzionamento)

3.3.2 Misurazione in continuo

1. Dopo aver scelto il metodo di misurazione in continuo, come descritto nel capitolo

3.2.2, premere il pulsante "Measure" per eseguire la misurazione ECG in continuo automaticamente, come mostrato nella Figura 3-8. La differenza tra la misura in continuo e quella rapida è descritto di seguito:

"Exit": visualizza le informazioni di funzionamento sullo schermo. Premere

il tasto "Return" per terminare la misurazione ECG e tornare alla schermata principale. Se il tempo di misurazione in continuo è di oltre 30 secondi, questi dati verranno salvati automaticamente.

"HR = 59": indica la frequenza cardiaca in tempo reale.

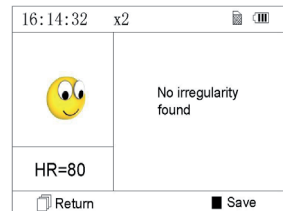
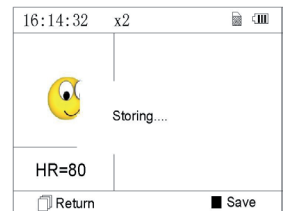


Figura 3-5 Schermata risultati misurazione



3-6 Memorizzazione dati

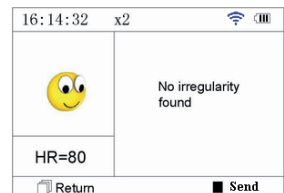


Figura 3-7

2. Durante la misurazione in continuo, se è selezionata la funzione di trasmissione wireless ed è attiva una connessione, cliccare l'icona "Wireless Receive" all'interno del software "ECG Viewer Manager" sul PC. In questo modo i record dei dati verranno trasmessi e salvati sul PC, al termine il dispositivo torna alla schermata principale automaticamente. (Fare riferimento al Manuale Utente di "ECG Viewer Manager" per la procedura dettagliata di funzionamento). I dati rilevati nello stato di trasmissione in tempo reale senza fili non vengono memorizzati nell'unità.

3. Se non viene effettuata alcuna operazione dopo 3 minuti di misurazione in continuo, l'unità passa in modalità risparmio energetico automaticamente (lo schermo si scurisce) ma la misurazione non viene interrotta. Una volta premuto un tasto qualsiasi o in caso di allarme, il sistema esce dalla modalità di risparmio energetico, e lo schermo ripristina la luminosità piena.

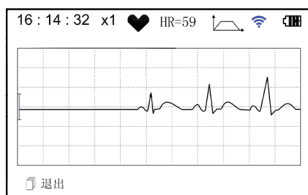


Figura 3-8

Note: 1) La figura 3-5 mostra il risultato di una normale forma d'onda ECG, questo dispositivo è in grado di fornire 17 differenti risultati di misura, fare riferimento alla Tabella 3-1 (sezione 3.4.3) per i dettagli.

2) Durante la misurazione se la parte sottoposta a misurazione e gli elettrodi metallici perdono contatto, il dispositivo visualizzerà il messaggio "Contact?" come illustrato in Figura 3-9. In caso di assenza del segnale, il dispositivo visualizzerà "No signal".

Premere il pulsante "Return" per uscire.

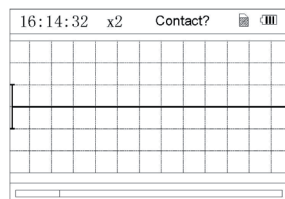


Figura 3-9

3) Nel dispositivo possono essere salvati un massimo di 1200 registrazioni di dati misurazione rapida o 10 ore di dati per la misura in continuo. Quando lo spazio di memoria è pieno, il dispositivo visualizza il messaggio "Memory full! Overwrite record?" e il simbolo "Memory Full" come mostrato in Figura 3-10. Da questo momento, non saranno più memorizzate nuove registrazioni fino a quando l'utente non elimina manualmente i dati non necessari o carica le registrazioni sul PC per liberare memoria.

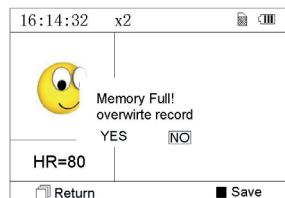


Figura 3-10

3.4 Revisione onde

3.4.1 Descrizione funzionamento

1. Selezionare "Review" sullo schermo del menu principale e poi premere il tasto "OK", il dispositivo visualizza la lista registrazioni come nella Figura 3-11.

Nota:

"😊": Significa che i risultati di questa registrazione non presentano anomalie.

"😬": Significa che i risultati di questa registrazione presentano anomalie.

"🤖": Significa che durante la misurazione si sono verificate interferenze o scollamenti.

"📈": Durante la misurazione è stata utilizzata la modalità avanzata.

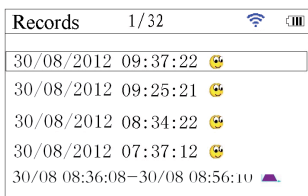


Figura 3-11 Lista Registrazioni

NOTA: I record di misurazioni in continua non visualizzano nessuna icona, ma solo il tempo di inizio e fine misurazione (senza l'anno).

2. Scegliere una registrazione dall'elenco e premere "OK" per rivederla, le forme d'onda della modalità rapida e in continua sono mostrati rispettivamente in Figura 3-12 e Figura 3-13. Per fermare il replay automatico, premere un qualsiasi pulsante di navigazione "◀/▶" o "▲/▼". Premere nuovamente uno dei pulsanti di navigazione "◀/▶" o "▲/▼" per visualizzare la forma d'onda in modalità manuale.

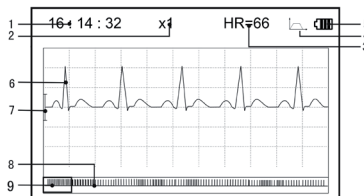




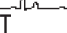

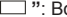

Figura 3-12 Schermata revisione dati ECG (Misurazione rapida)

Dati visualizzati

On-screen display:


1. "16: 14: 32": ora attuale.
2. "X1": scala ampiezza onde ECG.
- "X1/2": dimensione a metà della scala nominale;
- "X1": scala nominale;
- "X2": dimensione doppia della scala nominale
- "X3": dimensione tripla della scala nominale
3. "HR=66": la frequenza cardiaca è di 66bpm.


Nelle registrazioni delle misurazioni in continuo, la frequenza non viene visualizzata. Al suo posto viene inserito l'indicatore di pagina della schermata. "1/2": la pagina attuale è "1", su un totale di "2" pagine.



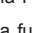
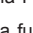
4. : Indica che la modalità filtro dell'ECG è "Enhanced" (avanzata);
5. : Stato carica batteria
6. : Onda ECG registrata
7. : Righello per ampiezza 1mV
8. : Compressione compatta della forma d'onda in scala.
9. : Box di selezione forma d'onda ECG.

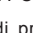

Note: La forma d'onda selezionata nel box viene visualizzata sulla schermata corrente.

La miniatura dell'onda ECG nel box di selezione corrisponde al 30 secondi di misurazione.

3. Premere nuovamente il tasto  "OK" e il risultato della misurazione del record selezionato sarà visualizzato sullo schermo, come mostrato in Figura 3-14.




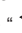
 "Return": premere "Return" per tornare alla schermata con l'elenco registrazioni.

 "Delete": premere  "OK" per cancellare la registrazione selezionata. Verrà visualizzato il messaggio di conferma "Sure to delete?" (sicuro di voler cancellare?), come mostrato nella Figura 3-15. Se la trasmissione wireless è attiva, al suo posto è presente la funzione  "Send". Premere il tasto  "Send" sul dispositivo e sul lato host, cliccare l'icona "Wireless Receive" all'interno del software "ECG Viewer Manager" sul PC. In questo modo i record dei dati verranno trasmessi e salvati sul PC.

4. Selezionare "YES" e quindi premere il tasto  "OK" per eseguire la cancellazione e tornare alla lista delle registrazioni. Premere il tasto  "Return" per tornare all'elenco senza eliminare nessuna registrazione.

3.4.2 Descrizione risultati misurazione

Quando l'apparecchio rileva uno scollamento o una sospetta aritmia nelle onde ECG, visualizza il messaggio "Poor signal, measure again- segnale scarso, misurare nuovamente (Figura 3-16)", "Suspected a little slow beat - sospetto battito lento (Figura 3-17)" ecc. si possono ottenere 17 tipi di risultati di misurazione ECG. Far riferimento alla Tabella successiva per i dettagli.

NOTA: la Figura 3-16 e la Figura 3-17 mostrano i risultati della misurazione con il metodo di misurazione in continuo. Il risultato della misurazione è mostrato sul lato sinistro della schermata. Se lo spazio per mostrare il risultato della misurazione non è sufficiente, sono attivi i tasti di navigazione " / " o " / " che consentono all'utente di spostare manualmente la schermata.

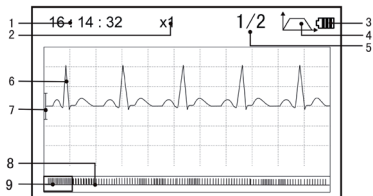


Figura 3-13 Schermata revisione dati ECG (Misurazione in continua)

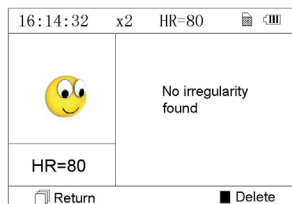


Figura 3-14

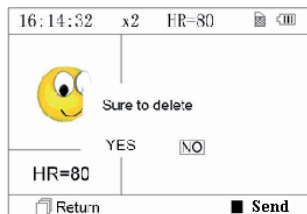


Figura 3-15

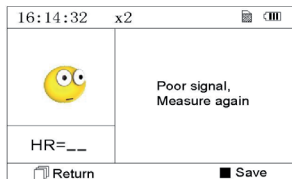


Figura 3-16 (1). Segnale scarso

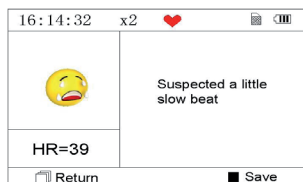
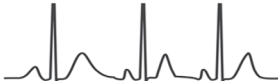
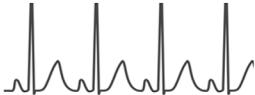
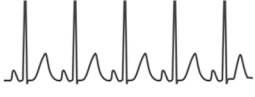
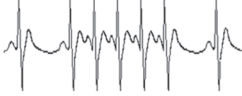
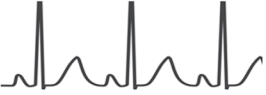
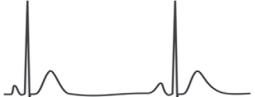
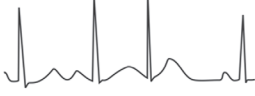
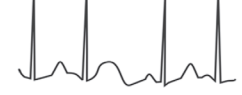

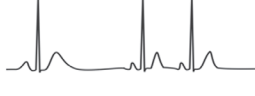
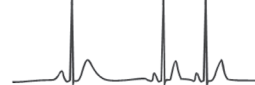


Figura 3-17 (2). battito leggermente lento

3.4.3 Tabella risultati misurazione

N.	Descrizione risultati misurazione ECG	Forma d'onda
1	Nessuna irregolarità	
2	Sospetto di battito leggermente accelerato	
3	Sospetto battito accelerato	
4	Sospetto ciclo breve di battito accelerato	
5	Sospetto di battito leggermente lento	
6	Sospetto battito lento	
7	Sospetto saltuario breve intervallo del battito	
8	Sospetto intervallo battiti irregolare	
9	Sospetto battito accelerato con intervallo breve	
10	Sospetto battito lento con intervallo battito breve	
11	Sospetto battito lento con intervallo battito irregolare	

N.	Descrizione risultati misurazione ECG	Forma d'onda
12	Aritmia	
13	Sospetto battito accelerato con aritmia	
14	Sospetto battito rallentato con aritmia	
15	Sospetto intervallo battito rallentato occasionale con aritmia	
16	Sospetto intervallo battito irregolare con aritmia	
17	Segnale debole, effettuare nuova misurazione	

3.5 Gestione dati

3.5.1 Cancellazione Dati

Selezionare "Memory" (memoria) dal menu principale e premere "OK" per accedere alla schermata della gestione dati come mostrato nella Figura 3-18.

"Return": premere il pulsante "Return" per tornare alla schermata principale.

"Delete": premere il pulsante per cancellare tutte le registrazioni. Prima della cancellazione, una schermata di conferma viene visualizzata sullo schermo, come visualizzato in Figura 3-19. Selezionando "YES" e premendo il tasto "OK", tutte le registrazioni saranno cancellate come mostrato in Figura 3-20.

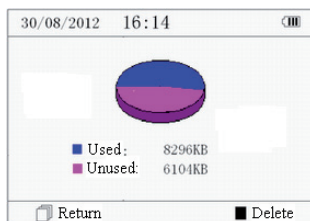


Figura 3-18 Schermata memoria

Nota: L'operazione di cancellazione dei dati effettuata da questo menù, cancella tutti i dati in memoria. Per cancellare solo una registrazione, utilizzare la funzione revisione.

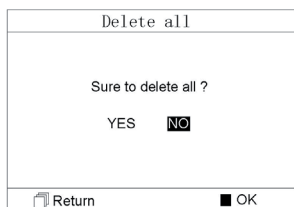


Figura 3-19

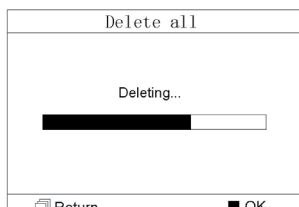


Figura 3-20 Cancellazione registrazioni

3.5.2 Caricamento dati

Collegare il dispositivo al PC con il cavo dati USB, il dispositivo automaticamente visualizzerà la schermata di caricamento come in Figura 3-21. I dati possono essere caricati sul PC per la gestione, la consultazione e l'analisi.

Nota: Assicurarsi che le batterie siano sufficientemente cariche quando si cancellano o caricano dati. Una carica insufficiente può causare l'interruzione delle operazioni.

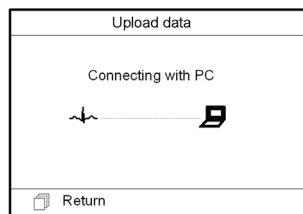


Figura 3-21 Caricamento dati

3.6 Impostazioni di sistema

Sulla schermata del menu principale, selezionare "Setting" (impostazioni) e poi premere "OK" per accedere alla schermata di regolazione impostazioni, come mostrato nella Figura 3-22 e Figura 3-23.

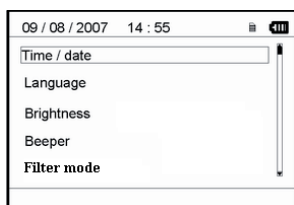


Figura 3-22

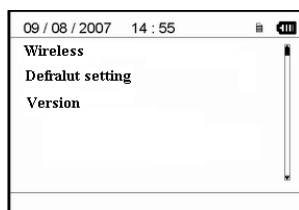


Figura 3-23

3.6.1 Regolazione Data/Ora

1. Sulla schermata di regolazione impostazioni, selezionare "Time/date" (Ora/data) con i tasti di navigazione poi premere "OK" per accedere allo schermo di regolazione dell'ora e della data (formato data: gg/mm/aaaa), come mostrato nella Figura 3-24.

2. Utilizzare i tasti di navigazione per regolare i valori e premere "OK" per evidenziare il cursore in nero e regolare un altro valore.

3. Una volta terminato, premere "OK" per salvare le impostazioni e tornare al livello superiore del menù.



Figura 3-24 regolazione Data/ora

3.6.2 Selezione Lingua

1. Sulla schermata di regolazione impostazioni, selezionare "Language" (lingua) per accedere alla schermata selezione lingua come mostrato nella Figura 3-25.

2. Premere i tasti di navigazione per selezionare la lingua tra Cinese e Inglese.

3. Premere il pulsante "OK" per salvare l'impostazione e tornare al livello superiore del menù.

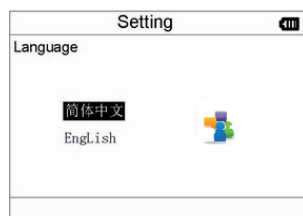


Figura 3-25 Selezione lingua

3.6.3 Regolazione Luminosità

1. Sulla schermata di regolazione impostazioni, selezionare "Brightness" (luminosità) per accedere alla schermata regolazione luminosità come mostrato nella Figura 3-26.

2. Regolare la luminosità con i tasti di navigazione; vi sono 7 livelli di regolazione..

3. Premere il pulsante "OK" per salvare l'impostazione e tornare al livello superiore del menù.

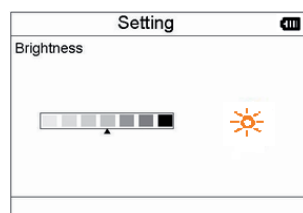



Figura 3-26 Regolazione Luminosità

3.6.4 Regolazione segnale acustico

1. Sulla schermata di regolazione impostazioni, selezionare “Beeper” (segnale acustico) per accedere al menu come mostrato nella Figura 3-27.
2. Selezionare “ON” o “OFF” con i tasti di navigazione per accendere o spegnere il segnalatore sonoro, la regolazione predefinita è su “ON” (accesso).
3. Premere il pulsante “ OK” per salvare l'impostazione e tornare al livello superiore del menù.

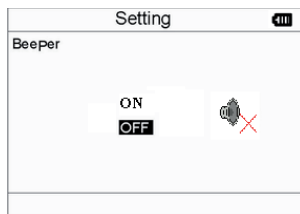



Figura 3-27 Regolazione segnale acustico

3.6.5 Regolazione modalità misurazione

1. Sulla schermata di regolazione impostazioni, selezionare “Measure mode” (modalità misurazione) per accedere alla schermata regolazione misurazione come mostrato nella Figura 3-28.
2. Selezionare modalità “Normal” (normale) o “Enhanced” (avanzata) con i tasti di navigazione. La regolazione predefinita è modalità “Normal”. Modalità normale: filtra i segnali di interferenza nella forma d'onda ECG. Modalità avanzata: riflette meglio la fedeltà della forma d'onda ECG.
3. Premere il pulsante “ OK” per salvare l'impostazione e tornare al livello superiore del menù.

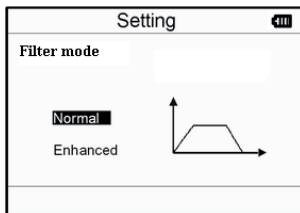



Figura 3-28 Regolazione modalità misurazione

3.6.6 Wireless Selection

1. Sulla schermata di regolazione impostazioni, selezionare “Wireless” per accedere al menu come mostrato nella Figura 3-29.
2. Selezionare “ON” o “OFF” con i tasti di navigazione per accendere o spegnere la funzionalità wireless.
3. Premere il pulsante “ OK” per salvare l'impostazione e tornare al livello superiore del menù.

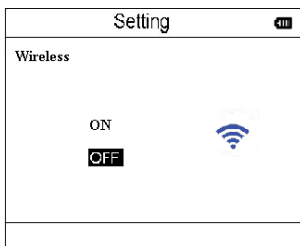




Figure 3-29 Wireless Selection

3.6.7 Ripristino impostazioni

1. Sulla schermata di regolazione impostazioni, selezionare “Default setting” (ripristino impostazioni) per caricare le impostazioni predefinite, vedi Figura 3-30.
2. Selezionare “YES” o “NO” con i tasti di navigazione, scegliendo “YES” e premendo “ OK” tutti i parametri verranno ripristinati alle impostazioni predefinite.
3. Premere “ Return” per tornare al livello superiore del menù.

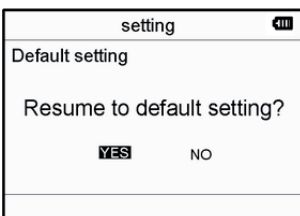



Figura 3-30 Ripristino impostazioni

3.6.8 Version Info

Sulla schermata impostazioni sistema, selezionare “Version” per accedere al menu informazioni versione come mostrato nella Figura 3-31.

3.7 Aiuto

Sulla schermata del menu principale, selezionare “Help”, poi premere “ OK” per accedere alla schermata di aiuto. La funzione fornisce diverse illustrazioni dei vari tipi di misurazioni ECG praticabili. Far riferimento alla Sezione 3.2.1 per i metodi di misurazione ECG in dettaglio.

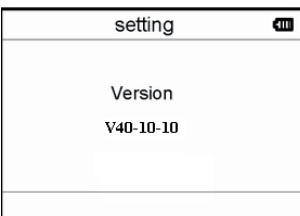


Figura 3-31 Informazioni versione

4 Caratteristiche tecniche

4.1 Misurazione ECG

Numero canali: Singolo segnale ECG.

Elettrodi: 3 elettrodi ricoperti di metallo o utilizzo di tre elettrodi adesivi per ECG tramite collegamento a cavetto con derivazione.

Modalità misurazione: il segnale ECG può essere captato selezionando la seguente derivazione:

Derivazione I (tra la mano destra e la sinistra);

Derivazione torace (tra la mano destra e il torace);

Derivazione II (tra la mano destra e la gamba sinistra).

Larghezza banda ECG: 1Hz~40Hz

Livello rumore interno: $\leq 30\mu\text{Vp-p}$

Gamma misurazione frequenza cardiaca: 30bpm~240bpm

Precisione misurazione frequenza cardiaca: $\pm 2\text{bpm}$ o $\pm 2\%$ se maggiore

Scala visualizzazione: 5.0mm/mV $\pm 10\%$

Rapporto di reiezione di modo comune (CMRR): $\geq 60\text{dB}$

Velocità ampiezza onda: 20mm/s $\pm 10\%$

Corrente di ingresso loop: $\leq 0.1\mu\text{A}$

Impedenza di ingresso: $\geq 5\text{ MO}$

4.2 Alimentazione

Alimentazione: 2×AAA batterie alcaline

Voltaggio elettrico: 2.7VDC~3.3VDC

Massima corrente media di funzionamento: $\leq 50\text{mA}$

Spegnimento automatico: 35s $\pm 5\text{s}$ (quando inattivo)

Indicatore livello batteria scarica: 2.5VDC $\pm 0.2\text{VDC}$

4.3 Classificazione

Tipo di protezione da scariche elettriche: dispositivo ad alimentazione interna

Grado di protezione da scariche elettriche: parte applicata di tipo B

Grado di protezione da ingresso nocivo di liquidi: L'equipaggiamento base non prevede protezione contro l'ingresso di liquidi.

Compatibilità elettromagnetica: Gruppo I, Classe B

4.4 Schermo

Tipo LCD: LCD a colori

Area schermo: 57.6mm × 40mm

4.5 Memoria dati

Fino a 10 ore di registrazioni possono essere salvate nella memoria interna;

I dati salvati possono essere caricati su un computer con il cavo dati fornito dal fabbricante.

4.6 Dimensioni totali e peso

Dimensioni: (L) 125× (P) 70 × (H) 21.5 mm

Peso: 106g (escluse batterie)

5 Accessori

Due batterie (AAA)

Custodia

Manuale d'uso

Cavo dati (optional)

Cavetto con derivazione ECG (optional)

Nota: gli accessori sono soggetti a modifiche. Per i dettagli e la quantità degli articoli vedere la Packing List.

6 Manutenzione e assistenza

6.1 Manutenzione

Quando appare l'icona batteria scarica, cambiare le batterie.

Si raccomanda di pulire l'elettrodo metallico con alcool denaturato quando il segnale di misurazione è troppo debole.

Pulire la superficie dell'unità con un panno pulito o lasciatela asciugare all'aria.

Togliere le batterie se l'unità non viene utilizzata per molto tempo.

Conservazione e trasporto

Temperatura ambiente: da -20°C a 60°C

Tasso di umidità: 10%~ 95%

Pressione atmosferica: 50KPa~107.4KPa



Questo apparecchio deve essere trasportato via terra (su strada o ferrovia) o via aerea secondo le condizioni contrattuali. Evitare colpi e cadute e proteggere l'apparecchio dalla luce del sole e dalla pioggia. Tenere lontano da sostanze corrosive, esplosive, temperature alte/basse e umidità.

In presenza di umidità o di vapore, non utilizzare l'apparecchio.

NON utilizzare subito l'apparecchio quando è appena stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo e umido.

NON premere il pulsante sul pannello di comando con materiali taglienti.

NON immergere in liquidi. NON spruzzare alcun liquido direttamente sull'apparecchio.

La durata di questo apparecchio è di 5 anni. Per garantire la sua durata, prestare attenzione alla manutenzione.

6.2 Istruzioni di pulizia e disinfezione

Pulire la superficie dei sensori con una garza morbida e una soluzione al 75% di alcool isopropilico, per una disinfezione di basso livello usare una soluzione 1:10 di candeggina. Successivamente pulire in superficie con un panno umido e asciugare con uno straccio.



Attenzione: Non sterilizzare il prodotto in autoclave o con ossido di etilene.

7 Risoluzione problemi

Problema: L'apparecchio non si accende.

Causa possibile	Soluzione
<ol style="list-style-type: none"> 1. Le batterie sono esaurite o quasi esaurite. 2. Le batterie non sono inserite correttamente. 3. L'apparecchio è guasto. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sostituire le batterie 2. Reinstallare le batterie. 3. Contattare l'assistenza.

Problema: L'apparecchio non riesce a misurare il battito cardiaco

Causa possibile	Soluzione
<ol style="list-style-type: none"> 1. Il collegamento tra elettrodo e corpo non è corretto. 2. Durante la misurazione ci si muove. 3. Interferenza elettromagnetica. 4. Segnale debole. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posizionare correttamente l'elettrodo. 2. Durante la misurazione, restare tranquilli e evitare movimenti. 3. Allontanare da fonti di interferenza 4. Cambiare il posto della misurazione (torace).

Problema: Escursione di onde ECG o onde sensibilmente irrilevanti





Causa possibile	Soluzione
<ol style="list-style-type: none"> 1. La pelle è secca o unta. 2. Il collegamento tra elettrodo e corpo non è perfetto. 3. Tensione muscolare. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulire la pelle con acqua e sapone e eliminare cellule di pelle e unto lasciando la pelle umida ma non unta. 2. Premere l'elettrodo con forza. 3. Stare rilassati durante la misurazione.

8 Messaggi di errore e Soluzioni

Errore	Causa	Soluzione
Errore di comunicazione	Sono presenti interferenze o anomalie.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere il tasto "Return" per uscire dallo stato corrente 2. Assicurarsi che il software su PC funzioni correttamente. 3. Riavviare la funzione wireless del dispositivo. 4. Rilassare la mano durante la misurazione
Memoria piena	La memoria flash è piena	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cancellare i dati ECG non indispensabili; 2. Caricare i dati su PC e poi cancellarli.

9 Legenda simboli

Simbolo	Descrizione
	Frequenza Cardiaca (Unità: battito al minuto)
	Modalità misurazione: avanzata
	Indicatore batteria
	Simbolo trasmissione Wireless
	Indicatore memoria piena
	Pulsante return/Invio
	Pulsante accensione
	Tipo B
	Preso cavo derivazione
	Attenzione – Consultare il manuale d'uso
	Pulsante conferma
	Tasti navigazione
	Porta interfaccia dati
SN	Numero di serie
	Interfaccia dati

Nota: I simboli “”, “”, “”, “” e “” vengono visualizzati sullo schermo, gli altri sul pannello di controllo.



Smaltimento

Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per ulteriori informazioni sui luoghi di raccolta, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto. In caso di smaltimento errato potrebbero venire applicate delle penali, in base alla leggi nazionali.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto.

Questo prodotto risponde a standard qualitativi elevati sia nel materiale che nella fabbricazione. La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura GIMA. Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione delle spese di mano d'opera o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi. Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura.

La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno l'effetto di prolungare la durata della garanzia. La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non autorizzato o con pezzi di ricambio non originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio.

GIMA non risponde di malfunzionamenti su apparecchiature elettroniche o software derivati da agenti esterni quali: sbalzi di tensione, campi elettromagnetici, interferenze radio, ecc.

La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se presente) risulti asportato, cancellato o alterato.

I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale è avvenuto l'acquisto. Spedizioni inviate direttamente a GIMA verranno respinte.

Appendice

Conoscenza generale di ECG

Normale ritmo sinusale: In condizioni sinusali, il nodo SA regola il ritmo cardiaco normalizzando il battito. Il battito cardiaco varia da 60 a 100 al minuto e il ritmo è regolare. L'onda P è normale e ognuna è seguita da un'onda QRS. Intervallo P-R: 0.12~0.20s; onda QRS: 0.06~0.10s; Nessuna attività ectopica ECG.

Sintomo: Ritmo sinusale, battito cardiaco: 60~100bpm

Indicazione: Normale

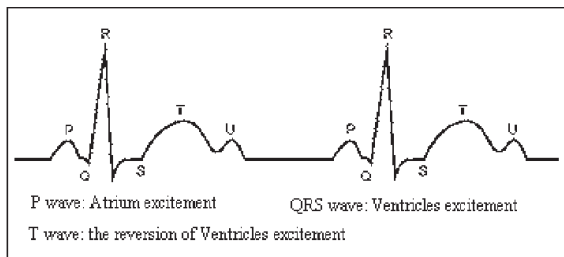


Figura 1 Onda ECG Normale

Diverse onde ECG anomale

1) **Tachicardia:** Il battito cardiaco accelera. La tachicardia è determinata dal ritmo cardiaco, se la media dei battiti cardiaci supera i 100 al minuto è considerata Tachicardia. L'indicazione risultante "Suspected fast beat = Sospetto battito accelerato" in questo apparecchio può significare tachicardia.

Sintomo: battito > 100bpm

Indicazione: Può verificarsi in persone normali che presentano le seguenti condizioni fisiologiche: collera, affaticamento, fumo, eccesso di alcolici, consumo eccessivo di caffè o té, ecc.

Patologie: anemia, ipertroidismo, ipossia, miocardite, ipocalemia, febbre, influenza nonché alcuni farmaci (come atropina, epinefrina ecc.).

Consiglio: Nel caso in cui la causa sia una patologia, recarsi in ospedale.

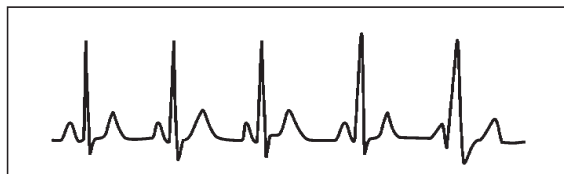


Figura 2 Tachicardia

2) **Bradycardia:** Il battito diventa più lento. E' determinata dal ritmo cardiaco che se mediamente è inferiore a 60 battiti al minuto si considera Bradycardia. L'indicazione risultante "Suspected slow beat = Sospetto battito rallentato" in questo apparecchio può significare Bradycardia.

Sintomo: battito cardiaco < 60 bpm

Indicazione: Si verifica quando una persona sana si addormenta e può verificarsi negli atleti (o coloro che sono dediti a frequenti pratiche sportive), gli anziani, o in caso di eccitazione vagale.

Patologia: Disfunzione del nodo del seno, ischemia cardiaca, cardiomiopatia, ipertensione intracranica, maggiore ipocalcemia, bassa temperatura, periodo di convalescenza dopo infezione acuta o dopo uso di medicinali come digitalina.

Consiglio: In presenza di patologia, consultare un medico.

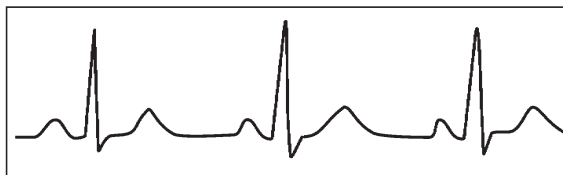


Figure 3 Bradicardia

3) **Battito prematuro:** Con un battito normale appare un'onda QRS prematuramente e viene seguita da una pausa. L'indicazione risultante "Suspected occasional short beat interval = Sospetto intervallo breve battito occasionale" nell'apparecchio può suggerire battito prematuro.

Cosa è un battito prematuro? È una contrazione prematura. Il normale battito cardiaco è sempre regolare e ciascun intervallo tra i battiti è altrettanto simmetrico; il battito prematuro esce da questo schema generale, il cuore batte prematuramente e i battiti sono seguiti da lunghi intervalli; il fenomeno di un battito prematuro tra due battiti cardiaci si chiama inserimento battito prematuro. L'indicazione "early beat = battito precoce" può indicare battito prematuro.

A seconda della diversa posizione originale, si può suddividere in: Contrazione Atriale Prematura, Contrazione Nodale Prematura e Contrazione Ventricolare Prematura (PVC), che deve essere esaminata da specialisti.

Sintomo: Il battito cardiaco presenta aritmia, si è in presenza del fenomeno per cui il cuore batte e si ferma per un istante improvvisamente. Alcune persone accusano palpitazione altre non presentano sintomi.

Indicazione: Il battito prematuro può verificarsi talvolta anche in persone sane, senza alcun sintomo oppure con palpitazioni. Può essere causato da affaticamento, ansia, insonnia, eccessivo fumo o abuso di alcool, eccessivo consumo di caffè o tè ecc. Può essere curato senza ricorrere a farmaci. Tuttavia se si presenta di frequente, con continuità, o multifocale potrebbe indicare una malattia cardiovascolare e è necessario consultare prima possibile un medico.

Consiglio: L'effettiva presenza di battito prematuro deve essere confermata da uno specialista, quindi memorizzate l'immagine e al momento della consultazione dal medico, richiamatela e mostrategliela affinché possa determinare di cosa si tratta (Contrazione Atriale Prematura, Contrazione Nodale Prematura, Contrazione Ventricolare Prematura o battito prematuro multifocale) e consigliare la terapia.

Sintomi paziente: il battito cardiaco normale è seguito da un battito prematuro.

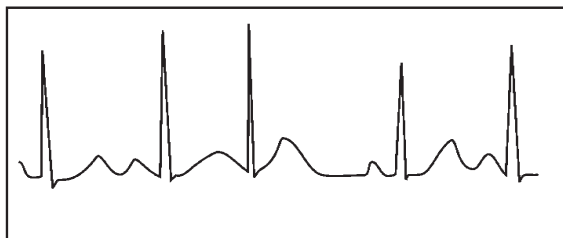


Figura 4 Battito prematuro

4) **Bigeminia:** È un tipo di PVC (contrazione ventricolare prematura) in cui un battito normale è seguito da uno prematuro.

Indicazione: PVC si verifica di frequente.

Consiglio: Consultare un medico.

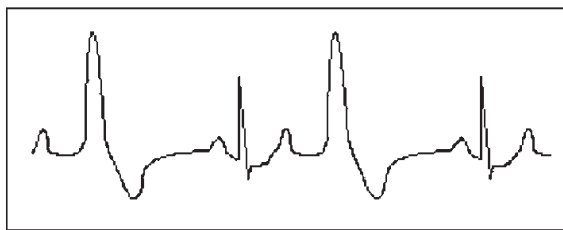


Figura 5 Bigeminia

5) **Trigeminia:** E' un tipo di PVC in cui due battiti normali sono seguiti da un battito prematuro.

Indicazione: PVC si verifica di frequente.

Consiglio: Consultare un medico.



Figura 6 Trigeminia

L'indicazione risultante "Suspected irregular beat interval = Sospetto intervallo battiti irregolare" in questo apparecchio può segnalare Bigeminia o Trigeminia.

6) **Ciclo corto di tachicardia:** PVC si verifica con continuità più di tre volte.

Sintomi paziente: PVC si verifica con continuità più di tre volte. Il battito cardiaco è veloce e regolare ma inizia e si ferma in modo improvviso.

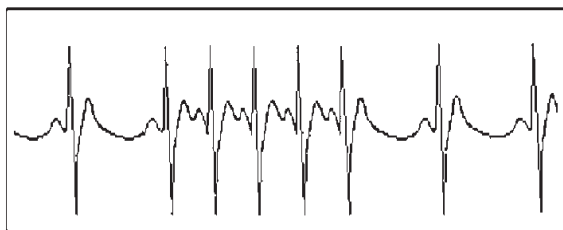


Figura 7 Tachicardia

A seconda della diversa posizione attiva originale, può essere: Ciclo Corto, Ciclo corto SVE (consultare uno specialista per determinare il tipo).

Ciclo corto: E' causata da Contrazione Atriale Prematura o Battito Prematuro Nodale, frequenza >180bpm.

Indicazione: Per lo più comune nei pazienti in buona salute, causa respiri profondi, tachipnea, cambi di posizione, deglutizione, collera ecc. Si verifica anche in caso di malattie cardiache come la Sindrome di Wolff - Parkinson-White, malattie cardiache reumatiche, malattie alle coronarie, Cardiomiopatia, malattie cardiache congenite, reazione ai farmaci (tossicosi digitale) ecc.

Consiglio: Se si verifica spesso, consultate un medico prima possibile.

Tachicardia ventricolare: Causata da Contrazione Ventricolare Prematura, Battito Cardiaco >140bpm.

Indicazione: Per lo più si verifica in pazienti con malattie cardiache, può causare fibrillazione ventricolare se è grave, quindi il paziente deve consultare un medico immediatamente.

Consiglio: La presenza di ciclo corto deve essere confermata da uno specialista, quindi memorizzate l'immagine e mostratela al medico come riferimento al momento della visita.

**WARNING**

1. Check the device to make sure that there is no visible damage that may affect user's safety and measurement performance. Stop using the unit, when there is obvious damage.
 2. Do NOT make diagnosis oneself by the measurement and measurement results, always consult the doctor if abnormal information is presented frequently.
 3. It is NOT designed or intended for medical diagnosis.
 4. Do NOT use the device in the bathroom or moist circumstance.
 5. Do NOT use if you carry a cardiac pacemaker.
 6. Do NOT operate in the environment where strong electro-magnetic interference exists.
 7. Necessary service must be performed by qualified service engineers ONLY.
 8. Clinical ECG examination is suggested for normal examination of your heart condition.
 9. Connect/Disconnect data cable to the monitor gently and carefully, do NOT wring or shake the data cable plug with force to insert into or unplug from data interface port, or the data interface port may be damaged.
 10. Dispose of the expired device and its accessories according to applicable local regulations.
- Caution: U.S. federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

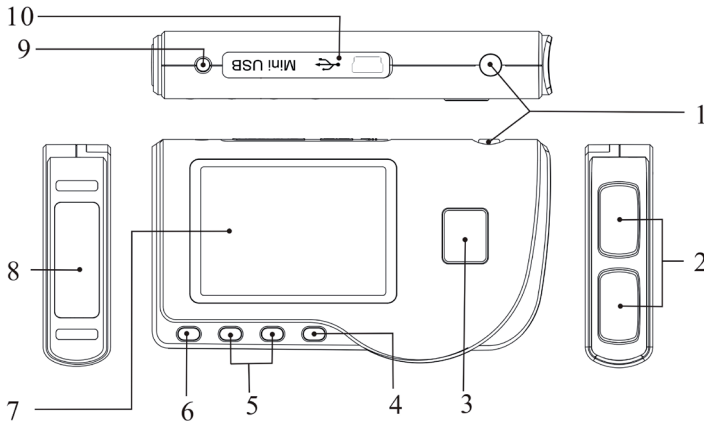









1 Overview**1.1 Appearance**

Figura 1 Illustrazione dell'apparecchio

1.  Power: Long time press (about 2 seconds) makes the device power on or off; short time press turns on/off the backlight.
2. Metal Electrode I, II
3.  Measurement: shortcut button for measuring, press this button to start measuring.
4. OK: confirm selection or modification.
5. Navigation key:
 /  Up/left/increase: move the cursor upwards/to the left, or adjust parameter values.
 /  Down/right/decrease: move the cursor downwards/to the right, or adjust parameter values.
6.  Return: back to upper level of menu.
7. Display screen: display ECG waveforms and data.
8. Metal Electrode III

- 9.  ECG Lead wire connector: for connecting to lead wire.
- 10.  Data interface: for connecting Mini USB data cable.

1.2 Name and Model

PC-80B Easy ECG Monitor Bluetooth

1.3 Structure

PC-80B Easy ECG Monitor Bluetooth consists of main board, panels and electrodes.

1.4 Features

- 1. Small in size and light in weight to carry.
- 2. One-key measurement, easy to operate.
- 3. ECG waveform and interpretation of results are displayed clearly on dot-matrix LCD screen.
- 4. Seventeen types measurement result can be presented.
- 5. Up to 1200 records for quick measurement or 10-hour data records for continuous measuring can be stored in built-in memory.
- 6. Data records can be reviewed, copied, deleted, and uploaded as well.
- 7. Power saving technique with automatic shutting-down function.
- 8. Two AAA batteries are used to support more than 10 hours working time (wireless transmission function is disabled).
- 9. Wireless data upload function.

1.5 Intended Use

PC-80B Easy ECG Monitor Bluetooth is intended for measuring and recording the ECG signal and average heart rate of adult patient. It is applicable for use in clinics and homes, and convenient to operate by the patients themselves. The device is not an ECG monitor as used in clinical institution or hospital, but is used for spot-check purpose ONLY. It can not be used to substitute the normal ECG examination or real time monitoring. The measurement results are a useful reference for doctor, but do not make direct diagnostic or analytical decision based on the information provided by this device.

1.6 Operating Environment

Operating temperature 5~40°C
 Operating humidity 30%~80%
 Atmospheric pressure 70kPa~106kPa

2 Installation

- 1. Open the battery cover (see the right figure).
- 2. Insert two AAA size batteries directly.
- 3. Close the battery cover.



Do NOT insert batteries with their polarities reversed. Dispose of the used batteries according to applicable local regulations. Protecting films are attached to the electrodes of device, so please remove the protecting films before measurement.

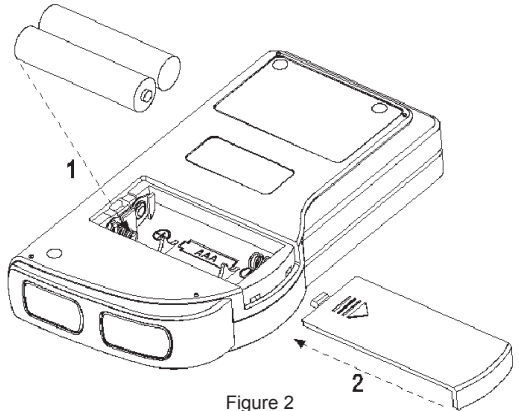



Figure 2


3 Operation

3.1 Start to measure ECG

Press the Power button (lasting for 2 seconds) to turn on the unit. The unit starts to initialize, and displays the following pictures.

After boot-strap, the unit enters into menu screen, as shown in Figure 3-2.

Note: During initialization, press “ Return” button to enter into main menu screen, as shown

in Figure 3-2. If press “ Measurement”, it will enter into measuring screen, as shown in Figure 3-4.

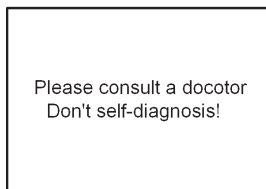


Figure 3-1A

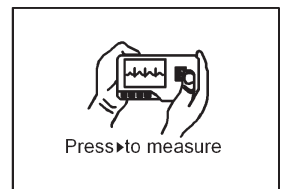


Figure 3-1B

There are 6 tool buttons, press navigation key to shift cursor and press "OK" to confirm. Each functional button will be defined as follows:



Measure: detect ECG waveform and HR value, and analyze whether the ECG waveform is normal.



Review: review the ECG records saved in this device (including ECG waveform and measurement result).



Memory: check the storage space and delete the ECG records saved in this device.



Setting: set parameters such as date, time, language, beeper, filter mode, brightness and wireless etc.



Help: provide the user with measuring methods etc. information.



Language: Set the display language. This device is designed with dual-language: (Chinese) and English, which can be switched alternatively by user.

3.2 ECG Measurement

3.2.1 Quick and Short ECG Measurement

Chest Measurement

In order to obtain ideal ECG signal, chest measurement is the first recommended method for it can ensure stable signal and fewer interference. Hold the device with the right hand. Make sure that the palm and fingers touch the metal electrode I and II reliably. Place the electrode III on bare skin about 5cm below the left nipple. The ECG signal detected by Chest Measurement is similar to Lead V ECG signal.

Possible improper operation:

- The contact place of electrode III deviates from left chest.
- The holding gesture is incorrect.
- The electrode III can not contact bare skin completely. (For example place the electrode on clothing.)

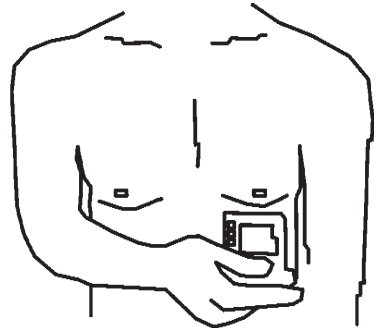


Figure 3-3A Chest Measurement

Leg Measurement

If it is not convenient to adopt chest measurement, the leg measurement will be recommended. When measuring, hold the device with the right hand. Make sure that the palm and fingers touch the metal electrode I and II reliably. Place the electrode III on the skin 10cm above the left foot ankle. The ECG signal detected by Leg Measurement is equivalent to Lead II ECG signal.

Possible improper operation:

- Wrong holding gesture.
- The electrode III can not contact bare skin completely. (For example, place the electrode III on the sleeve of trousers or socks.)

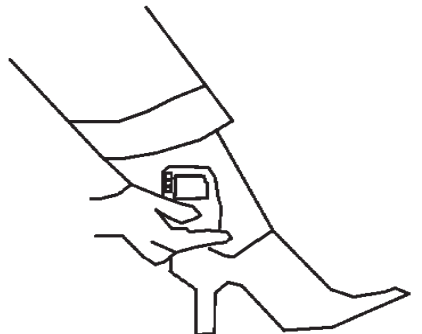


Figure 3-3B Leg Measurement



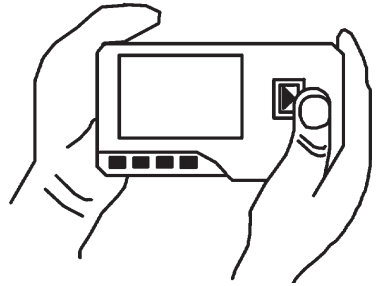
Figure 3-2

Palm Measurement

Palm Measurement is recommended in terms of convenient and quick measurement. Hold the device with right hand. Make sure that the palm and fingers touch the metal electrode I and II reliably. Press the electrode III closely against the center of the left palm. The ECG signal detected by Palm Measurement is equivalent to Lead I ECG signal.

Possible improper operation:

- A. Waving your both hands at will.
- B. Both hands loosely contact with electrodes during measurement.
- C. It is not palm contacts the electrode.



3-3C Palm Measurement

3.2.2 Continuous or Long-term ECG measurement

Lead Wire Measurement

To obtain clear and high quality ECG signal, the lead wire measurement can be used. Connect the lead wire firmly to the lead wire socket of the device. Place the electrodes and connect the lead wires as Figure3-3D to obtain the Lead II ECG signal; if you want to measure Lead I and Lead III ECG signal, according to the following table to connect the lead wires to the electrodes.

Possible improper operation:

- A. Wrong in connecting lead port.
- B. Place the electrode in the wrong part of your body.

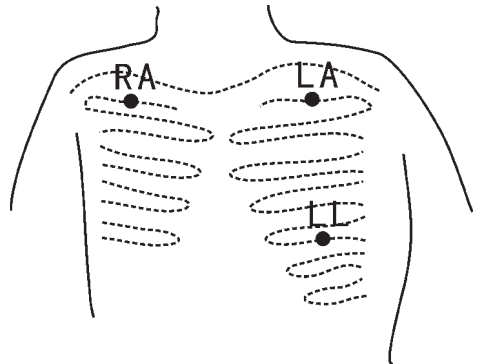



Figure 3-3D Lead Wire Measurement

Electrode / Location	Lead	Lead I	Lead II	Lead III
The intersection between the centerline of the right clavicle and Rib 2.		RA	RA	LA
The intersection between the centerline of the left clavicle and Rib 2.		LL	LA	RA
Between the left edge of the breast bone and Rib 5		LA	LL	LL

ECG Leads Configuration and Electrodes Location Table

3.3 ECG Measuring Procedure

3.3.1 Quick Measurement

1. After choosing a proper measuring method as described in Chapter 3.2.1, press  "Measure" to enter quick ECG measurement automatically, as shown in Figure 3-4. The first 15 seconds is preparing phase during which the device will judge whether the position of electrode is befitting or not according to measured ECG waveform. Please adjust your holding position if the detected waveform is not smooth.

On-screen display:

1. "16: 14: 32": Current time.
2. "X1": ECG waveform gain.
- "X1/2": Waveform scaled with half of the basic gain;
- "X1": Waveform scaled with basic gain;
- "X2": Waveform scaled with twice of the basic gain
- "X3": Waveform scaled with three times of the basic gain

3. "❤️": Heart beat mark. Its flashes are synchronized with heart beats.

4. "📈": Indicating that ECG filter mode is "Enhanced"; Refer to section 3.6.5 for filter setting.

5. "🔋": Status of battery power

6. "📊": ECG waveform

7. "1": Ruler for 1mV amplitude

8. "📊": Compact compression of scaled waveform.

9. "📶": Wireless mark. When the "Wireless" is set as "ON" status in system setting screen, this mark will display on the screen. After a successful connection between the device and the remote host, the ECG data can be uploaded to the host (PC) for further recall, analysis and storage.

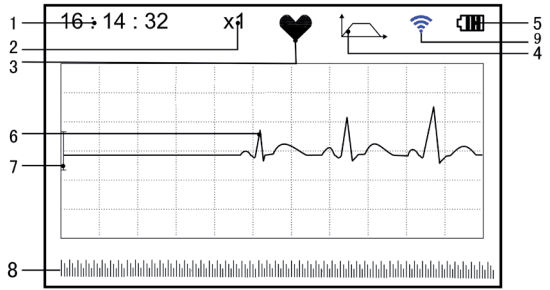


Figure 3-4 ECG Measuring Screen

2. When the compact compression of scaled waveform reaches to the end, it means the measurement finishes, then the device steps into data analysis phase which is followed by measurement results display as shown in Figure 3-5.

"🏠 Return": return to main menu screen directly and the current measurement result and measuring value won't be saved.

"💾 Save": save the current measurement result and measuring value.

3. In the measurement result screen, the current measurement data will be saved in this device automatically without any operation in 6 seconds or directly press the "💾 Save" key to save the data, as shown in Figure 3-6. The device will return to the main screen automatically after the data is saved.

4. If the wireless transmission is selected, the device will go to the screen as shown in Figure 3-7 after the data is saved.

Press the "📶 Send" key on the device side to start transmitting ECG record wirelessly, and on the host side, the "Wireless Receive" icon should be clicked while running software "ECG Viewer Manager" on PC so that the data records can be transmitted and saved to PC. After that the device will return to the main screen automatically. (Refer to User Manual for "ECG Viewer Manager" for detailed operation procedure)

3.3.2 Continuous Measurement

1. After choosing the continuous measuring method as described in Chapter

3.2.2, press the "🎯 Measure" to perform continuous ECG measurement automatically as shown in Figure 3-8. The difference between the continuous and quick measurement is described below:

"🏠 Exit": the prompt information of operation on the screen. Press the "🏠 Return" button to end the ECG measurement and return to the main screen. If the time of continuous measurement is over 30 seconds, this data will be saved automatically.

"HR=59": indicates the real-time heart rate.

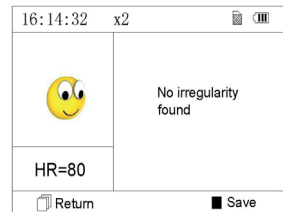


Figure 3-5 Measurement Result Screen



Figure 3-6 Data Saving

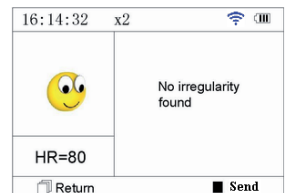


Figure 3-7

2. During the continuous measurement, if the wireless transmission function is selected and a successful connection is setup, click the "Wireless Receive" icon on the host side while running software "ECG Viewer Manager" on PC so the data record can be transmitted and saved to PC (Refer to User Manual for "ECG Viewer Manager" for detailed operation procedure.). The data measured in wireless real-time transmission status won't be stored in the unit.

3. If there is no operation after the continuous measurement has been carried out for 3 minutes, the unit will adopt power-saving mode automatically (the screen will darken), but the measurement won't be interrupted. Once you press any button or the alarm event occurs, the system will exit power-saving mode, and the screen resume to normal brightness.



Figure 3-8

Notes: 1) Figure 3-5 shows a regular ECG waveform measurement result, this device can provide 17 types measurement results, refer to Table 3-1(Section 3.4.3) for details.

2) During measurement, if the measured part and metal electrodes loosely contact, the device will prompt "Contact?", as shown in Figure 3-9. If there isn't signal, it will prompt "No signal". The user can press "Return" button to exit from the measurement.

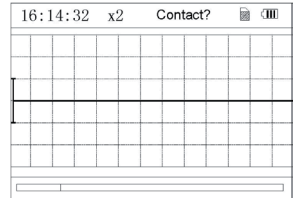


Figure 3-9

3) At most 1200 data records for quick measurement or 10-hour data records for continuous measurement can be saved in this device. When the storage space is full, the device will indicate and prompt that "Memory full! Overwrite record?" with a display of "Memory Full" icon as shown in Figure 3-10. Meanwhile, from now on, it won't store the new record until the user manually deletes the unnecessary data or upload the records to PC to free some memory.

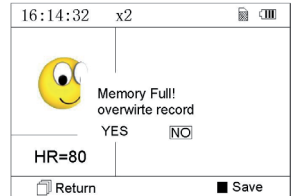


Figure 3-10

3.4 Wave Review

3.4.1 Operation Description

1. Select "Review" on main menu screen, then press "OK" button, the device enters record list screen as shown in Figure 3-11

Note:

- "😊": means the measured result of this record is regular.
- "😬": means the measured result of this record is irregular.
- "😬": means waveform with interference or lead off during measuring.
- "📈": If the enhanced mode is used, the icon of enhanced mode will be shown behind the record.



Figure 3-11 Record List

NOTE: There is no such legend icon display for the record of continuous measurement. Only the start and end measuring time (not including the year) is displayed here.

2. Choose a record in record list, then press "OK" button to review this ECG record, the waveform display for quick measurement and continuous measurement are shown in Figure 3-12 and Figure 3-13 respectively. To stop auto replay, just press the Navigation key "◀/▶" or "▲/▼". After that you can press the Navigation key "◀/▶" or "▲/▼" again to view the waveforms manually.



Figure 3-12 ECG Data Review Screen (Quick Measurement)

On-screen display:

1. "16: 14: 32": ECG waveform measuring time.
2. "X1": ECG waveform gain.
- "X1/2": Waveform scaled with half of the basic gain;
- "X1": Waveform scaled with basic gain;
- "X2": Waveform scaled with twice of the basic gain
- "X3": Waveform scaled with three times of the basic gain
3. "HR=66": heart rate value is 66bpm. For waveform review of continuous measurement, the heart rate value won't be displayed. "1/2": the screen page description for waveform review of continuous measurement. "1": current page, "2": total page.

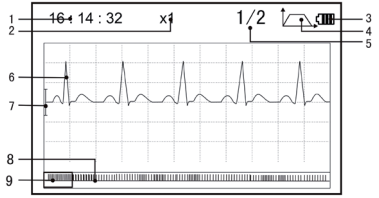


Figure 3-13 ECG Data Review Screen (Continuous Measurement)

4. "Enhanced": Indicating that ECG filter mode is "Enhanced".
5. "Battery": Status of battery power
6. "ECG": Reviewed ECG waveform
7. "1mV": Ruler for 1mV amplitude
8. "Compact": Compact compression of scaled waveform.
9. "Selecting Box": ECG waveform selecting box.

Note: The selected waveform in selecting box is displayed on the current screen. ECG waveform miniature in selecting box is the ECG waveform measured in 30 seconds.

3. Press "OK" button again, the measurement result of the selected record will be reviewed on the screen, as shown in Figure 3-14.

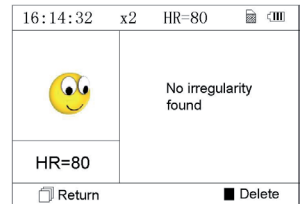


Figure 3-14

"Return": press "Return" button to return to record list screen.

"Delete": press "OK" button to delete the selected current record, at this time it prompts that "Sure to delete?", as shown in Figure 3-15. If the wireless transmission function is selected, here prompts "Send" instead. Press the "Send" button on the device, then on the host side, click the "Wireless Receive" icon while running the software "ECG Viewer Manager" on PC, the data will be transmitted and saved on PC.

4. Select "YES", then press "OK" button to perform deletion and return to record list screen. Press "Return" button directly, this record will not be deleted and the screen will return to record list screen.

3.4.2 Measurement Result Description

When device detects lead off or suspected arrhythmia ECG waveform, "Poor signal, Measure again (Figure 3-16)", "Suspected a little slow beat (Figure 3-17)" etc. 17 types ECG measurement results can be obtained. Refer to the following Table for details.

NOTE: Figure 3-16 and Figure 3-17 show the measurement results by continuous measuring method. The measurement by result continuous measuring method is shown on the left. If one screen hasn't enough space to show all the measurement results, the user can press Navigation Key "▲/▼" or "▶/◀" to manually shift the screen upwards or afterwards.

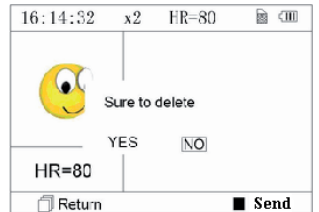


Figure 3-15

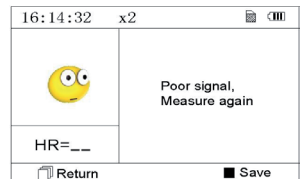


Figure 3-16

(1). Poor signal

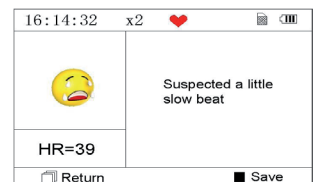


Figure 3-17

(2). A little slow beat

3.4.3 Measurement Result Table

N.	ECG Measurement Result Descriptions	Waveform
1	No irregularity found	
2	Suspected a little fast beat	
3	Suspected fast beat	
4	Suspected short run of fast beat	
5	Suspected a little slow beat	
6	Suspected slow beat	
7	Suspected occasional short beat interval	
8	Suspected irregular beat interval	
9	Suspected fast beat with short beat	
10	Suspected slow beat with short beat interval	
11	Suspected slow beat with irregular beat interval	

N. ECG Measurement Result Descriptions

Waveform

12 Waveform baseline wander



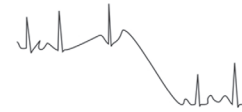
13 Suspected fast beat with baseline wander



14 Suspected slow beat with baseline wander



15 Suspected occasional short beat interval with baseline wander



16 Suspected irregular beat interval with baseline wander



17 Poor Signal, measure again



3.5 Data Management

3.5.1 Data Deletion

Select "Memory" on main menu screen, then press "OK" button to enter memory screen, as shown in Figure 3-18.

"Return": press "Return" button to return to main screen.

"Delete": press this key to delete all the records. Prior to deletion, a dialogue box "Sure to delete all?" will be presented on the screen, as shown in Figure 3-19. If choose "YES" and press "OK" button, all the records will be deleted, as shown in Figure 3-20.

Note: The operation of data deletion carried out in the memory screen means all the data in the device will be deleted; if you only want to delete one record, please do that on waveform review screen.

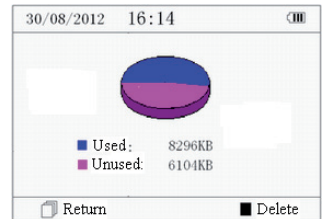


Figure 3-18 Memory Screen

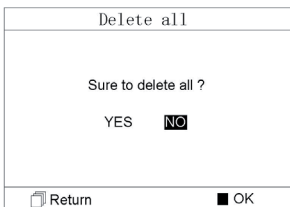


Figure 3-19

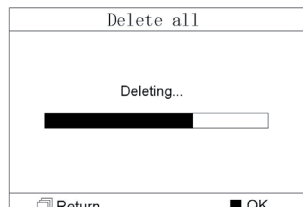


Figure 3-20 Records Deleting

3.5.2 Upload Data

Connect the device to PC with USB data cable, the device will automatically enter the upload display as shown in Figure 3-21. The data can be dumped to PC for data management, review and analysis.

Note: Ensure there is sufficient battery power when deleting or uploading the data since insufficient power may cause the interruption of operation.

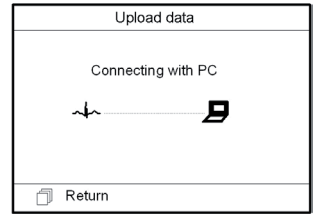


Figure 3-21 Upload Data Screen

3.6 System Setting

On the main menu screen, select "Setting", then press "OK" button to enter system setting screen, as shown in Figure 3-22 and Figure 3-23

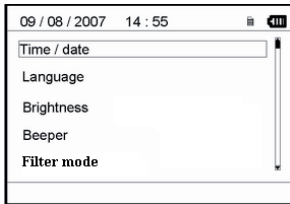


Figure 3-22

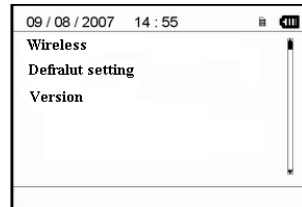


Figure 3-23

3.6.1 Time/Date Setting

1. On system setting screen, select "Time/date" with Navigation Key, then press "OK" button to enter time and date setting screen (date format: dd/mm/yyyy), as shown in Figure 3-24.
2. Use Navigation Key to adjust the value, and then press "OK" button to shift black cursor and adjust another value.
3. When finishing the settings, press "OK" button to save the setting and return to the upper level menu screen.

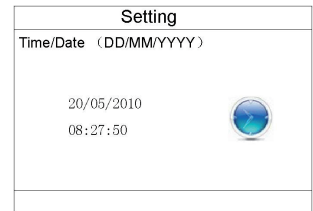


Figure 3-24 Time/date Setting

3.6.2 Language Setting

1. On system setting screen, select "Language" to enter language information screen, as shown in Figure 3-25.
2. Press the Navigation Key to select the language between "Chinese" and "English".
3. Press "OK" button to save setting and return to the upper level menu screen..

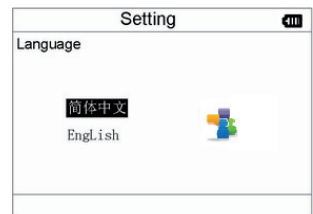


Figure 3-25 Language Setting

3.6.3 Brightness Setting

1. On system setting screen, select "Brightness" to enter brightness setting screen, as shown in Figure 3-26.
2. Adjust brightness with Navigation Key; 1~7 level adjustable;
3. Press "OK" button to save setting and return to the upper level menu screen.

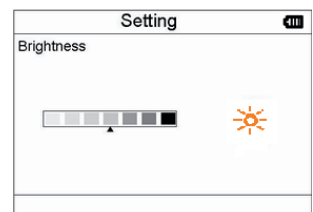



Figure 3-26 Brightness Setting

3.6.4 Beeper Setting

1. On system setting screen, select “Beeper” to enter beeper setting screen, as shown in Figure 3-27.
2. Choose “ON” or “OFF” with Navigation Key to turn on the beeper or turn off the beeper; the default setting is “ON”.
3. Press “ OK” button to save setting and return to the upper level menu screen.

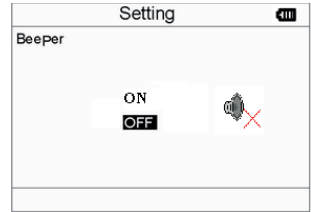



Figure 3-27 Beeper Setting

3.6.5 Measure Mode Setting

1. On system setting screen, select “Measure mode” to enter measure mode setting screen, as shown in Figure 3-28.
2. Choose “Normal” mode or “Enhanced” mode with Navigation Key. The default setting is “Normal” mode.
Normal mode: can filter the interference signal in ECG waveform.
Enhanced mode: can better reflect the fidelity of ECG waveform.
3. Press “ OK” button to save setting and return to the upper level menu screen.

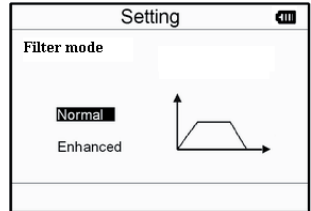



Figure 3-28 Measure Mode Setting

3.6.6 Wireless Selection

1. On system setting screen, select “Wireless” to enter wireless setting screen, as shown in Figure 3-29.
2. Press the Navigation Key to turn on or turn off the wireless function.
3. Press “ OK” button to save setting and return to the upper level menu screen.

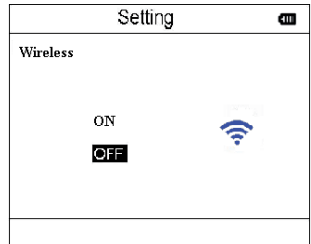




Figure 3-29 Wireless Selection

3.6.7 Resume Default

1. On system setting screen, select “Default setting” to enter into default setting screen, as shown in Figure 3-30.
2. Choose “YES” or “NO” with Navigation Key. If the choice is “YES”, then press “ OK” button, all the parameter settings will resume default settings.
3. Press “ Return” button to back to upper level menu.

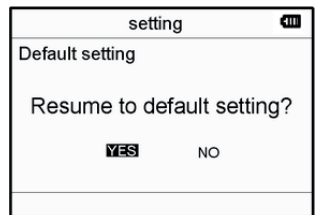



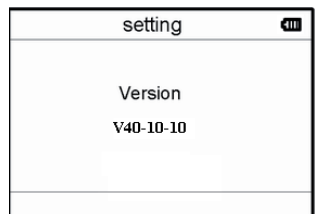
Figure 3-30 Default Setting

3.6.8 Version Info

On system setting screen, select “Version” to enter version information screen, as shown in Figure 3-30. Figure 3-31 Version Information

3.7 Help

On main menu screen, select “Help”, then press “ OK” button to enter help info screen. It provides different kinds of illustrations for ECG measuring methods. Refer to Section 3.2.1 for ECG measuring methods in details.



Figur3 3-31 Version information

4 Technical Specifications

4.1 ECG Measurement

Number of channels: Single channel ECG signal

Electrodes: 3 embedded metal electrodes or using 3 adhesive ECG electrodes by connection to the lead wire.

Measurement modes: the detecting ECG signal can be detected by the following lead selection:

Lead I (between right hand and left hand);

Chest Lead (between right hand and chest);

Lead II (between right hand and left leg).

ECG bandwidth: 1Hz~40Hz

Internal noise level: $\leq 30\mu\text{Vp-p}$

Heart Rate measuring range: 30bpm~240bpm

Heart Rate measuring accuracy: $\pm 2\text{bpm}$ or $\pm 2\%$ whichever is greater

Display scale: 5.0mm/mV $\pm 10\%$

Common-mode rejection ratio (CMRR): $\geq 60\text{dB}$

Waveform sweeping speed: 20mm/s $\pm 10\%$

Input loop current: $\leq 0.1\mu\text{A}$

Input impedance: $\geq 5\text{ MO}$

4.2 Power

Power: 2×AAA alkaline batteries

Supply voltage range: 2.7~3.3VDC

Max average working current: $\leq 50\text{mA}$

Auto power-off: 35s $\pm 5\text{s}$ (without operation)

Low battery indication: 2.5VDC $\pm 0.2\text{VDC}$

4.3 Classification

The type of protection against electric shock: Internally powered equipment

The degree of protection against electric shock: Type B applied part

The degree of protection against harmful ingress of liquid: Ordinary equipment without protection against ingress of liquid.

Electro-magnetic Compatibility: Group I, Class B

4.4 Display

LCD type: colour LCD

Display area: 57.6mm × 40mm

4.5 Data Memory

Up to 10-hour records can be saved in the built-in memory;

Stored data records can be uploaded to the computer by data cable provided by the manufacturer.

4.6 Overall Dimension and Weight

Dimension: (L) 125× (W) 70 × (H) 21.5 mm

Weight: 106g (not including batteries)

5 Accessories

A hanging cord

Two batteries (AAA)

A wallet

A User Manual

A data cable (optional)

An ECG lead wire (optional)

Note: The accessories are subject to change. Please see the Packing List for detailed items and quantity.

6 Maintenance and Service

6.1 Maintenance

Please change the batteries, when appears low-voltage icon.

It is recommended to wipe the metal electrode with medical alcohol, when the measuring signal is too weak.

Please wipe the surface of the unit with clean cloth or let it dry in air.

Please take out the batteries if the unit will not be used for a long time.

Storage and Transportation

Ambient temperature: -20 to 60°C

Relative humidity: 10~ 95%

Atmospheric pressure: 50~107.4KPa



This device should be transported by land (vehicle or railway) or air in accordance with the contractual terms. Do not hit or drop it with force and protect it from sunlight and rain.

Keep it away from corrosive substances, explosive substances, high/low temperature and moisture.

If the device gets wet or has water steam, please stop operating it.

When it is taken from cold environment to warm and humid environment, please DO NOT use it immediately.

DO NOT operate the button on front panel with sharp materials.

DO NOT immerge the device into liquid. Do NOT spray any liquid on it directly.

The life of this unit is 5 years. In order to ensure its long service life, please pay attention to the use of maintenance.

6.2 Cleaning and Disinfecting Instruction

Surface-clean sensor with a soft gauze by saturating with a solution such as 75% isopropyl alcohol, if low-level disinfection is required, use a 1:10 bleach solution. Then surface-clean with a damp cloth and dry with a piece of cloth.



Caution: Do not sterilize by irradiation steam, or ethylene oxide.

7 Troubleshooting

Trouble: The device can not turn on.

Possible Reason	Solution
<ol style="list-style-type: none"> 1. The batteries are drained or almost drained. 2. The batteries are not inserted properly. 3. The device is broken out. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Change batteries. 2. Reinstall batteries. 3. Please contact the local service center.

Trouble: The device is failure in measuring heart rate.

Possible Reason	Solution
<ol style="list-style-type: none"> 1. Electrode and body does not contact well. 2. Moved when measuring. 3. Electromagnetic interference. 4. Weak signal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Place the electrode correctly. 2. When measuring, please keep quiet and avoid moving. 3. Keep away from interference source. 4. Change a place (chest) to measure.















Trouble: ECG waveform excursion, strong irrelevant waveform or the ECG waveform displays on the screen, but the prompt info is "lead off";

Possible Reason	Solution
<ol style="list-style-type: none"> 1. Skin is dry or oily. 2. Electrode and body does not contact tightly. 3. Muscle strain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clean skin with soap and water and eliminate skin crumb and grease to make the skin wet and greaseless. 2. Press the electrode with a certain force. 3. Keep hand relax while measuring.

8 Error Message and Solutions

Error	Reason	Solution
Communication error	The communication is interfered or abnormal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Press the "Return" button to exit from current status 2. Ensure the PC software can operate normally. 3. Restart the wireless function or the device. 4. Keep hand relax while measuring.
Memory full	The memory of flash is full	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manually delete the ECG record directly; 2. Upload the record to PC, then delete it.

9 Key of Symbols

Symbol	Description
	Heart Rate (Unit: beats per minutes)
	Measure mode: enhanced
	Battery indicator
	Wireless transmission mark
	Full memory mark
	Return button
	Power button
	Type B
	Lead wire socket
	Warning - See User Manual
	Confirmation button
	Navigation key
	Data Interface Port
SN	SN Serial number
	USB data cable interface

Note: The symbols “”, “”, “”, “” and “” are displayed on the screen, the others are marked on the device panel.

**Disposal**

The product must not be disposed of along with other domestic waste. The users must dispose of this equipment by bringing it to a specific recycling point for electric and electronic equipment. For further information on recycling points contact the local authorities, the local recycling center or the shop where the product was purchased. If the equipment is not disposed of correctly, fines or penalties may be applied in accordance with the national legislation and regulations.

GIMA WARRANTY CONDITIONS

Congratulations for purchasing a GIMA product. This product meets high qualitative standards both as regards the material and the production. The warranty is valid for 12 months from the date of supply of GIMA.

During the period of validity of the warranty, GIMA will repair and/or replace free of charge all the defected parts due to production reasons. Labor costs and personnel traveling expenses and packaging not included. All components subject to wear are not included in the warranty.

The repair or replacement performed during the warranty period shall not extend the warranty.

The warranty is void in the following cases: repairs performed by unauthorized personnel or with non-original spare parts, defects caused by negligence or incorrect use. GIMA cannot be held responsible for malfunctioning on electronic devices or software due to outside agents such as: voltage changes, electro-magnetic fields, radio interferences, etc. The warranty is void if the above regulations are not observed and if the serial code (if available) has been removed, cancelled or changed. The defected products must be returned only to the dealer the product was purchased from. Products sent to GIMA will be rejected.

Appendix

General Knowledge of ECG

Normal sinus rhythm: In sinus conditions, S heart rate is in the range of 60 to 100 times per minute and the rhythm is regular. P wave is normal and each one is followed by a QRS wave. P-R interval: 0.12~0.20s;

QRS wave: 0.06~0.10s; No ectopic ECG activity.

Symptom: Sinus rhythm, heart rate: 60~100bpm

Indication: Normal

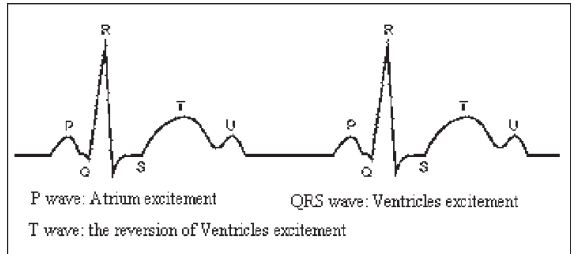


Figure 1 Normal ECG Waveform

Several abnormal ECG waveforms

1) **Tachycardia:** The heartbeat becomes faster. Tachycardia is determined by the rhythm of the heart, the average rhythm beats faster than 100 times a minute is considered as Tachycardia. The result description "Suspected fast beat" in this device may be doubted as Tachycardia.

Symptom: heart rate > 100bpm

Indication: It may occur with the normal people who have these physiology

conditions: rage, fatigue, smoking, drinking too much wine, excessive coffee and strong tea, etc.

Pathology: anemia, Hyperthyroidism, blood hypoxia, myocarditis, hypokalemia, fever, influence of some medication (such as atropine, epinephrine etc.).

Suggestion: If it belongs to pathology condition, please go to hospital.



Figure 2 Tachycardia Waveform

2) **Bradycardia:** The heartbeat becomes slowly. It is determined by the rhythm of the heart, the average rhythm is less than 60 beats per minute is considered as Bradycardia. The result description "Suspected slow beat" in this device may be doubted as Bradycardia.

Symptom: heart rate < 60bpm

Indication: It occurs when healthy people fall asleep, and it can be found in athlete (or those who love doing sports frequently), old people, or vagus excitement person.

Pathology: Sick sinus syndrome, Ischemic heart disease, Cardiomyopathy, intracranial hypertension, increased hypokalemia, Low temperature, period of convalescence of acute infectious disease or after use some medicines such as digitalis.

Suggestion: If it belongs to the pathology condition, please see the doctor.

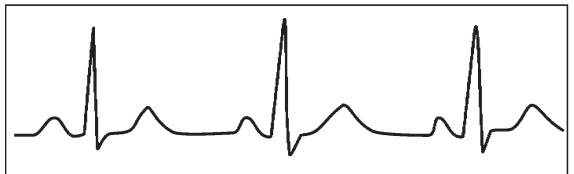


Figure 3 Bradycardia Waveform

3) **Premature beat:** In a normal beat a QRS waveform appears prematurely and is followed by a comeback pause. The result description "Suspected occasional short beat interval" in this device may be doubted as Premature beat.

What is premature beats? It is premature contraction. The normal heart beat is always regularly, and each beat interval is also symmetrically; Premature beat is out of his general regulation, the heart beats prematurely and followed by a long time interval; the phenomena of a premature beat between two heart beats is called inserting premature beat. The display of "early beat" may be suspected Premature beat.

According to different original positions it can be divided into Premature Atrial Contraction,

Premature Nodal Contraction and Premature Ventricular Contraction (PVC), which needed to be judged by experts.

Symptom: The heart beat is arrhythmic, it occurs as the phenomenon that the heart suddenly beats and then stops for a while. Some people have palpitation or have no symptom.

Indication: The premature beat can be found occasionally in healthy people, with no distinct symptom or sometimes with palpitation. This may be caused by fatigue,

anxiety, insomnia, smoking too much, or drinking too much wine, coffee, strong tea etc. It can be recovered without treatment. However, if premature beat occurs frequently, continuously or in multi-focus, it will indicate functional cardiovascular disease. please see a doctor as soon as possible.

Suggestion: The character of premature beat needs professional to confirm, so please save the temporal figure in time. When seeing a doctor, you can recall it to doctor to judge the character of premature (Premature Atrial Contraction, Premature Nodal Contraction, Premature Ventricular Contraction or multi-focus premature beat and help cure.

Testee's Symptom: Normal heart beat is followed by a premature beat.

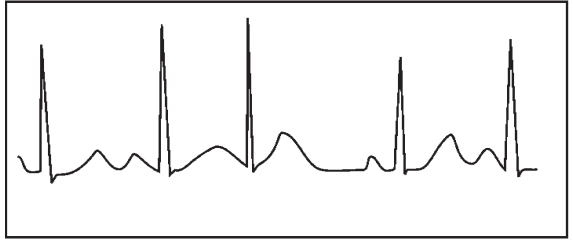


Figure 4 Premature Beat

4) **Bigeminy:** It is a type of PVC in which a normal beat is coupled with a premature beat.

Indication: PVC occurs frequently.

Suggestion: Please see the doctor.

5) **Trigeminy:** It is a type of PVC in which two normal beats are coupled with a premature beat.

Indication: PVC occurs frequently.

Suggestion: Please see the doctor.

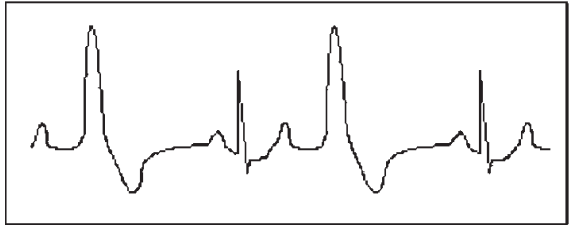


Figure 5 Bigeminy

The result description "Suspected irregular beat interval" in this device may be doubted as Bigeminy or Trigeminy.

6) **Short run of tachycardia:** PVC (Premature Ventricular Contraction) occurs more than 3 times continuously.

Testee's Symptom: PVC occurs More than 3 times continuously. The heart beat is fast and regularly, but starts and stops suddenly.

According to the different of active original position, it can be divided into: Short Run, SVE Short Run (Needing professional to judge).

Short Run: It is caused by Premature Atrial Contraction or Nodal Premature Beat, frequency > 180 bpm.

Indication: Most commonly found in healthy people, it causes by deep respiration, tachypnea, positional changes, swallow, rage etc. It also appears in functional cardiac disease, such as Wolff - Parkinson-White Syndrome, rheumatic heart disease, coronary heart disease, Cardiomyopathy, Congenital heart disease, medicinal reaction (digitalis toxicosis) etc.

Suggestion: If it occurs time after time, please see the doctor as soon as possible.

Ventricular Tachycardia: Caused by Premature Ventricular Contraction, Heart Rate > 140 bpm.

Indication: Most commonly found in heart disease patient, it can cause ventricle fibrillation if it's serious, so the tester needs to see a doctor immediately.

Suggestion: The character of short run needs professional to confirm, so please save the temporal figure in time. And you can provide it to doctor as a reference.



Figure 6 Trigeminy

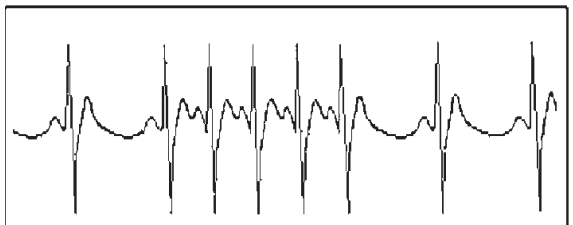


Figure 7 Tachycardia

**ATTENTION**

1. Contrôler l'appareil pour s'assurer qu'il ne présente aucun dommage pouvant nuire à la sécurité de l'utilisateur et falsifier la mesure. Interrompre l'utilisation de l'unité en cas de dommages évidents.
2. NE PAS effectuer d'autodiagnostic avec les mesures ou les résultats des mesures, toujours consulter un médecin en cas d'anomalies fréquentes.
3. L'appareil N'est PAS conçu ou créé pour effectuer des diagnostics médicaux.
4. NE PAS utiliser cet appareil dans un bain ou dans des endroits humides.
5. NE PAS utiliser avec un défibrillateur.
6. NE PAS utiliser sur des personnes ayant un pacemaker.
7. NE PAS allumer dans des endroits soumis à de fortes interférences électromagnétiques.
8. L'assistance nécessaire doit être effectuée EXCLUSIVEMENT par un personnel technique qualifié.
9. Un examen clinique ECG est conseillé pour vérifier les conditions cardiaques.
10. Brancher/débrancher délicatement et attentivement le câble données à/de l'écran, NE PAS tordre ou arracher la fiche du câble données avec force pour l'introduire ou la retirer du port d'interface données qui pourrait être endommagé.
11. À la date d'échéance, procéder à l'élimination de l'appareil et de ses accessoires conformément aux lois en vigueur dans le lieu d'utilisation.

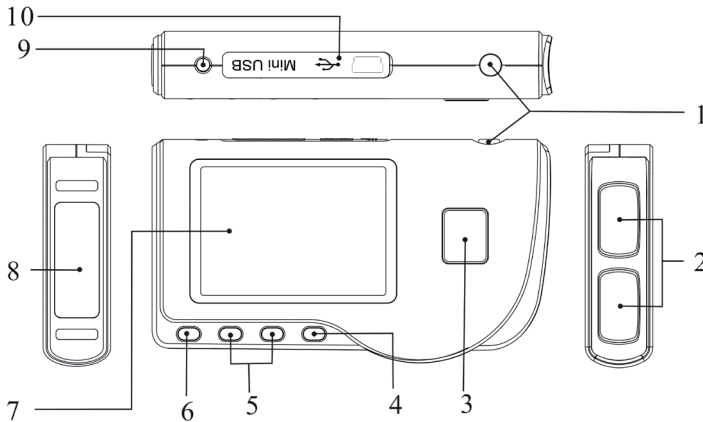







1. Indications générales**1.1 Aspect extérieur**

Figure 1 Illustration de l'appareil

1.  Allumage : En maintenant enfoncée cette touche (environ 2 secondes), l'appareil s'allume ou s'éteint ; en appuyant brièvement la lumière de l'écran s'allume.
2. Électrode métallique I, II
3.  Mesure : bouton de démarrage rapide pour la mesure, appuyer sur ce bouton pour démarrer la mesure.
4. OK : confirme la sélection ou la modification.
5. Touches de direction :
 -  /  Haut / gauche / augmente : déplace le curseur vers le haut / à gauche, ou règle les paramètres.
 -  /  Bas / droite / diminue : déplace le curseur vers le bas / à droite, ou règle les paramètres.
6.  Envoi : Retour au niveau précédent du menu.
7. Écran : affiche les ondes et les données de l'ECG.
8. Électrode métallique III

9. Connecteur dérivation ECG : pour le branchement au câble de dérivation.
10. Port interface données : pour le branchement avec un câble données mini USB.

1.2 Nom et Modèle

ECG de poche PC-80B Bluetooth

1.3 Structure

L'ECG de poche PC-80B Bluetooth est composé d'un écran principal, de panneaux et d'électrodes.

1.4 Caractéristiques

1. De petites dimensions et léger à transporter.
2. Mesure au moyen d'une touche, facile à utiliser.
3. Affichage clair des ondes ECG et interprétation des résultats sur écran LCD dot-matrix.
4. Il est possible d'obtenir dix-sept types de mesure.
5. Possibilité de mémoriser dans la mémoire incorporée, jusqu'à 1200 mesures pour la mesure rapide ou 10 heures de mesure en continu.
6. Les données mémorisées peuvent être relues, copiées, supprimées et même téléchargées sur un ordinateur.
7. Économie d'énergie grâce à la fonction d'arrêt automatique.
8. Avec deux piles AAA, il est possible d'effectuer plus de 10 heures d'activité (transmission sans fil désactivée).
9. Fonction de téléchargement des données sans fil.

1.5 Utilisation prévue

L'ECG de poche PC-80B Bluetooth est conçu pour contrôler et mémoriser les ondes et les indices cardiaques de l'ECG chez les patients adultes. Il peut être appliqué pour une utilisation ambulatoire ou domestique et peut être utilisé chez le patient. Le dispositif n'est pas un écran ECG pouvant être comparé aux modèles utilisés dans les cliniques ou les hôpitaux, mais il est utilisé uniquement pour effectuer des contrôles de santé. Il ne peut être utilisé en remplacement d'examen ECG traditionnels ou comme contrôle en temps réel. Les résultats des mesures sont utilisés comme référence pour les médecins mais ne servent pas à formuler des diagnostics ou des analyses en se basant uniquement sur les informations fournies par cet appareil.

1.6 Lieu d'utilisation

Température: ~40°C

Humidité: 30%~80%

Pression atmosphérique: 70kPa~106kPa

2 Installation

1. Ouvrir le couvercle des piles (voir la figure).
2. Introduire deux piles AAA.
3. Fermer le couvercle.



NE PAS introduire de piles en inversant la polarité. Éliminer les piles déchargées conformément aux lois en vigueur dans le lieu d'utilisation. Des pellicules de protection sont placées sur les électrodes du dispositif, veiller à les retirer avant de prendre les mesures.

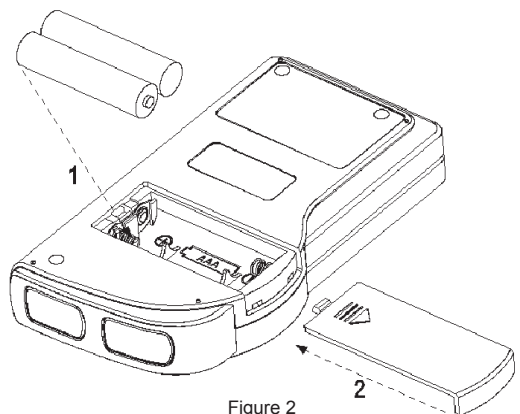


Figure 2

3 Fonctionnement

3.1 Démarrage des mesures ECG

Appuyer sur la touche d'allumage (pendant 2 secondes) pour allumer l'appareil. Lors de l'initialisation, les images suivantes s'affichent sur l'écran.

Après avoir démarré le système, on accède à un menu vidéo comme indiqué sur la figure 3-2.

Remarque : Pendant l'initialisation, appuyer sur

le bouton d'« envoi » pour accéder au menu vidéo principal comme indiqué sur la figure 3-2. En

appuyant sur « Measurement » (mesure), on accède au vidéo de la mesure comme indiqué sur la figure 3-4.

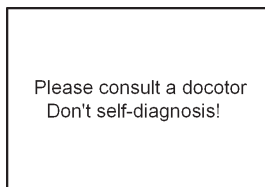


Figure 3-1A

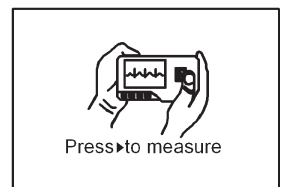



Figure 3-1B

Il y a 6 boutons instruments, appuyer sur le bouton de navigation pour positionner le curseur et appuyer sur «  OK » pour confirmer. Toutes les fonctions sont indiquées ci-après :



Mesure : détecte les ondes ECG et les valeurs HR et analyse si l'onde ECG est normale.



Relecture : permet de revoir les données des ECG sauvegardés en mémoire (y compris les ondes ECG et les résultats des mesures).



Mémoire : Affiche l'espace libre en mémoire et supprime les données des ECG mémorisés dans l'unité.



Réglage : règle les paramètres relatifs à la date du système, l'heure, la langue, la modalité, la luminosité, le contraste, etc.



Aide : fournit des informations sur les méthodes de mesure etc.



Langue : Règle la langue d'affichage. Le dispositif est programmé en deux langues (chinois et anglais) qui peuvent être sélectionnées par l'utilisateur.



Figure 3-2

3.2 Mesures ECG

3.2.1 Méthodes de mesure ECG rapides

Mesure thorax

Afin d'obtenir les ondes ECG idéales, on suggère la méthode de la mesure sur le thorax. Tenir le dispositif avec la main droite. S'assurer que la paume et les doigts touchent parfaitement les électrodes métalliques I et II. Positionner l'électrode III directement sur la peau à environ 5 cm sous le mamelon gauche. Le signal de l'ECG relevé par la mesure sur le thorax est similaire au signal V Dérivation ECG.

Dysfonctionnement :

- A. Le point de contact de l'électrode III ne correspond pas à la poitrine gauche.
- B. La main n'empoigne pas correctement l'appareil.
- C. L'électrode n'est pas en contact avec la peau. (Par exemple, l'électrode a été placée sur les vêtements).

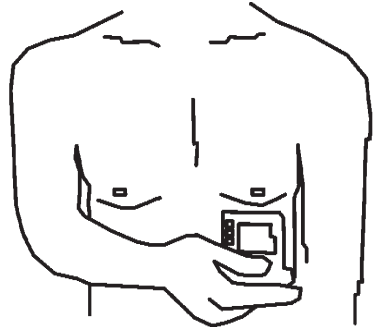


Figure 3-3A Mesure thorax

Mesure jambe

S'il n'est pas possible d'utiliser la mesure sur la poitrine, la mesure à la jambe est conseillée. Pendant la mesure, tenir le dispositif avec la main droite. S'assurer que la paume et les doigts touchent parfaitement les électrodes métalliques I et II. Placer l'électrode III sur la peau 10 cm au-dessus de la cheville gauche. Le signal de l'ECG relevé par la mesure sur la jambe équivaut au signal II Dérivation ECG.

Dysfonctionnement :

- A. L'appareil n'est pas empoigné correctement par la main.
- B. L'électrode III n'est pas en contact avec la peau : (par exemple, elle est placée sur l'ourlet des pantalons ou sur les chaussettes).

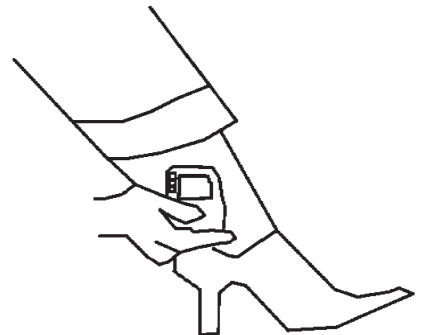


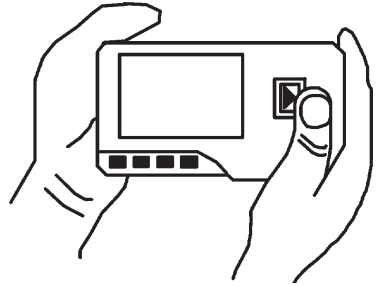
Figure 3-3B Mesure jambe

Mesure paume

Tenir le dispositif avec la main droite. S'assurer que la paume et les doigts touchent parfaitement les électrodes I et II. Appuyer sur l'électrode III contre le centre de la paume gauche. Le signal ECG relevé avec la mesure sur la paume équivaut au signal I Derivation ECG.

Dysfonctionnement :

- A. Les mains s'agitent de trop.
- B. Les deux mains ne sont pas en contact avec les électrodes pendant la mesure.
- C. La paume n'est pas en contact avec les électrodes.



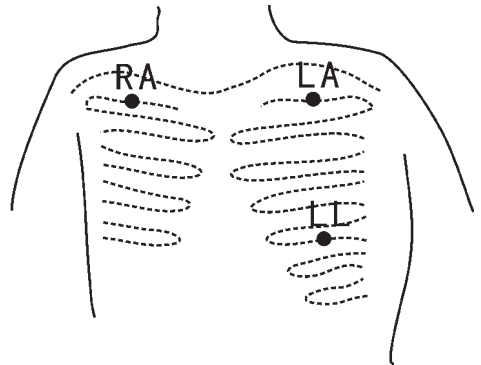
3-3C Mesure paume

3.2.2 Méthodes de mesure ECG en continu ou longues périodes
Mesure avec des câbles

Pour obtenir un meilleur ECG, il est possible d'effectuer la mesure au moyen d'un câble de raccordement. Brancher le câble à l'appareil au moyen de la fiche correspondante. Positionner les électrodes et brancher les câbles comme indiqué sur la figure suivante pour obtenir le signal ECG II Dérivation ; si l'on désire obtenir des mesures avec signaux I et III Dérivation, brancher les câbles aux électrodes conformément au tableau suivant.

Dysfonctionnement :

- A. Erreur dans le branchement au port.
- B. Électrode positionnée sur le corps de manière incorrecte.



Figures 3-3D Mesure au moyen de câbles

Électrode	Dérivation	Dérivation	Dérivation	Dérivation
		I	II	III
Position électrode				
L'intersection entre l'axe de la clavicule droite et la deuxième côte.	RA	RA	LA	
L'intersection entre l'axe de la clavicule gauche et la deuxième côte.	LL	LA	RA	
Entre l'extrémité gauche du sternum et la cinquième côte.	LA	LL	LL	

Tableau de positionnement des électrodes et configuration des dérivations ECG


3.3 Procédure de mesure ECG
3.3.1 Mesure rapide


1. Après avoir choisi une méthode de mesure adaptée, comme décrit au chapitre 3.2.1, appuyer sur « Measurement » pour démarrer automatiquement la mesure ECG rapide, comme indiqué sur la figure 3-4. Pendant les 15 premières secondes, le dispositif entre en phase préparatoire et évalue si la position des électrodes est adaptée ou non en fonction du tracé ECG mesuré. Si la forme d'onde relevée n'est pas claire, régler la position des électrodes.

Données affichées :

1. «16: 14: 32»: heure actuelle.
2. «X1»: échelle amplitude des ondes ECG.
«X1/2»: dimension à moitié de l'échelle nominale;
«X1»: échelle nominale;
«X2»: dimension double de l'échelle nominale
«X3»: dimension triple de l'échelle nominale



3. «»: indicateur battement cardiaque. Clignote avec le battement cardiaque.


4. «»: indique que la modalité du filtre de l'ECG est « Enhanced » (renforcée); se référer à la section 3.6.5 pour le réglage du filtre.

5. «»: État de charge de la batterie


6. «»: onde ECG

7. «»: Règle pour amplitude 1mV

8. «»: Compression compacte de la forme d'onde sur l'échelle.


9. «»: Symbole Wireless. Il apparaît quand le « Wireless » est activé sur la page écran des réglages du système. Après une connexion réussie entre le dispositif et l'host à distance, les données ECG peuvent être téléchargées par l'host (PC) pour de futures consultations, analyses et sauvegardes.

2. Quand la forme d'onde comprise dans l'échelle arrive à la fin, cela signifie que la mesure est terminée. Le dispositif passe ainsi à la phase d'analyses des données qui est suivie par la page écran des résultats de la mesure, comme indiqué sur la figure 3-5.


« Return »: retourne directement au menu principal sans sauvegarder les valeurs de la mesure et les résultats en cours.

« Save »: sauvegarde le résultat de la mesure en cours et ses valeurs.

3. Sur la page écran des résultats de la mesure, les données en cours sont sauvegardées automatiquement dans le dispositif sans aucune opération


dans un délai de 6 secondes ou en appuyant sur la touche « Save », comme indiqué sur la figure 3-6. Le dispositif reviendra automatiquement à la page écran principale une fois les données sauvegardées.


4. Si la transmission sans fil est active, une fois les données sauvegardées, le dispositif passe à la page écran illustrée sur la figure 3-7. Appuyer sur la touche

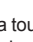
« Send » sur le côté du dispositif pour démarrer la transmission de l'ECG en modalité wireless, et sur le côté host, cliquer sur l'icône « Wireless Receive » à l'intérieur du logiciel « ECG Viewer Manager » sur l'ordinateur. De cette manière, l'enregistrement des données sera transmis et sauvegardé sur l'ordinateur, une fois cette opération terminée, le dispositif revient automatiquement à la page écran principale. (Se référer au Manuel d'utilisation « ECG Viewer Manager » pour la procédure détaillée de fonctionnement)

3.3.2 Mesure en continu

1. Après avoir choisi une méthode de mesure en continu, comme décrit au

chapitre 3.2.2, appuyer sur le bouton « Measurement » pour démarrer automatiquement la mesure ECG en continu, comme indiqué sur la figure 3-8. La différence entre la mesure en continu et la mesure rapide est décrite ci-après :

« Exit »: affiche les informations de fonctionnement sur l'écran. Appuyer sur

la touche « Return » pour terminer la mesure ECG et revenir à la page écran principale. Si le temps de mesure en continu dépasse 30 secondes, ces données seront sauvegardées automatiquement.

«HR = 59»: indique la fréquence cardiaque en temps réel.

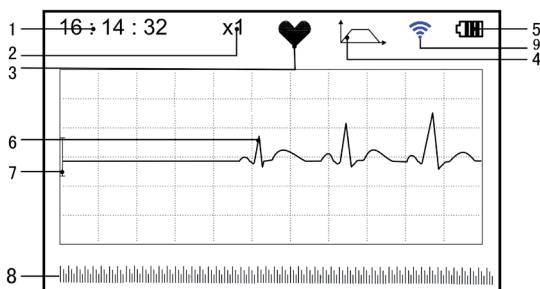


Figure 3-4 Page écran mesure ECG

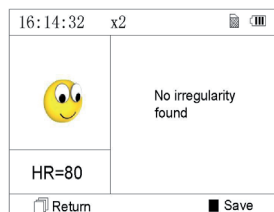


Figure 3-5 Page écran résultat mesure



3-6 Mémoire des données

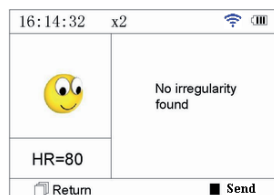


Figure 3-7

2. Pendant la mesure en continu, si la fonction de transmission wireless est sélectionnée et qu'une connexion est active, cliquer sur l'icône « Wireless Receive » à l'intérieur du logiciel « ECG Viewer Manager » sur l'ordinateur. De cette manière, l'enregistrement des données sera transmis et sauvegardé sur l'ordinateur, une fois cette opération terminée, le dispositif revient automatiquement à la page écran principale. (Se référer au Manuel d'utilisation « ECG Viewer Manager » pour la procédure détaillée de fonctionnement). Les données relevées dans l'état de transmission en temps réel sans fil ne sont pas mémorisées dans l'unité.

3. Si aucune opération n'est effectuée après 3 minutes de mesure en continu, l'unité passe automatiquement en modalité économie d'énergie (l'écran s'assombrit) mais la mesure n'est pas interrompue. Une fois une touche enfoucée ou en cas d'alarme, le système sort de cette modalité d'économie d'énergie, et l'écran reprend sa pleine luminosité.

Remarques : 1) La figure 3-5 indique le résultat d'une forme d'onde ECG normale, ce dispositif est en mesure de fournir 17 résultats de mesure différents, se référer au tableau 3-1 (section 3.4.3) pour les détails.

2) Pendant la mesure, si la partie soumise à la mesure et les électrodes métalliques perdent le contact, le dispositif affichera le message « Contact? » comme indiqué sur la figure 3-9. En cas d'absence du signal, le dispositif affichera « No signal ».

Appuyer sur le bouton « Return » pour sortir.

3) Dans le dispositif peuvent être sauvegardés un maximum de 1200 enregistrements de données de mesure rapide ou 10 heures de mesure en continu. Lorsque l'espace de mémoire est plein, le dispositif affiche le message « Memory full! Overwrite record? » et le symbole « » comme indiqué sur la figure 3-10. À compter de ce moment, aucun nouvel enregistrement ne sera mémorisé jusqu'à ce que l'utilisateur n'élimine manuellement les données non nécessaires ou télécharge les enregistrements sur l'ordinateur pour libérer la mémoire.

3.4 Relecture des ondes

3.4.1 Description du fonctionnement

1. Sélectionner « Review » sur la page du menu principal, puis appuyer sur la touche « OK », le dispositif affiche la liste des enregistrements comme indiqué sur la figure 3-11.

Remarque :

« »: Signifie que les résultats de cet enregistrement ne présentent aucune anomalie.

« »: Signifie que les résultats de cet enregistrement présentent des anomalies.

« »: Signifie que pendant la mesure, des interférences ou des déconnexions sont survenues.

« »: pendant la mesure, la modalité avancée a été utilisée.

REMARQUE : L'enregistrement des mesures en continu n'est accompagné d'aucune icône, mais seul le temps de départ et de fin de la mesure sont affichés (sans l'année).

2. Choisir un enregistrement dans la liste et appuyer sur « OK » pour la revoir, les formes d'onde de la modalité rapide et en continu sont montrées respectivement sur les figures 3-12 et 3-13. Pour arrêter la relecture automatique, appuyer sur un bouton de navigation « » ou « ». Appuyer de nouveau sur un des boutons de navigation « » ou « » pour afficher la forme d'onde en modalité manuelle.

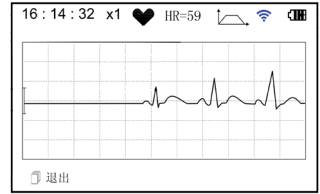


Figure 3-8

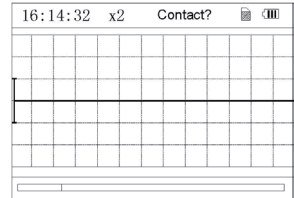


Figure 3-9

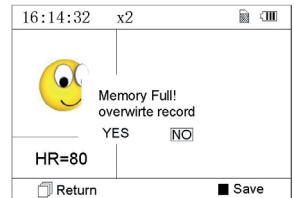


Figure 3-10



Figure 3-11 Liste des enregistrements

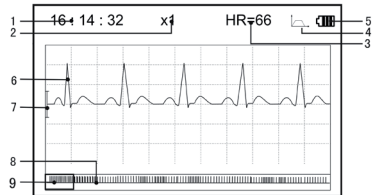


Figure 3-12 Page écran relecture des données ECG (Mesure rapide)

Données affichées

Affichage à l'écran :

- «16: 14: 32»: heure actuelle.
- «X1»: échelle amplitude des ondes ECG.
«X1/2»: dimension à moitié de l'échelle nominale;
«X1»: échelle nominale;
«X2»: dimension double de l'échelle nominale
«X3»: dimension triple de l'échelle nominale
- «HR=66»: la fréquence cardiaque est de 66 bpm. Dans les enregistrements des mesures en continu, la fréquence n'est pas affichée. À sa place se trouve l'indicateur de page de la page écran. « 1/2 » : la page actuelle est « 1 », sur un total de « 2 » pages.

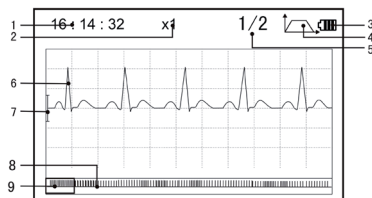


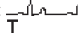
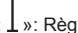





Figure 3-13 Page écran relecture des données ECG (Mesure en continu)





- «  »: indique que la modalité filtre de l'ECG est « Enhanced » (avancée);
- «  »: État de charge de la batterie
- «  »: Onde ECG enregistrée
- «  »: Règle pour amplitude 1mV
- «  »: Compression compacte de la forme d'onde sur l'échelle.
- «  »: Box de sélection forme d'onde ECG.



Remarques : La forme d'onde sélectionnée dans le box est affichée sur la page écran actuelle.

La miniature de l'onde ECG dans le box de sélection correspond à 30 secondes de mesure.

- Appuyer de nouveau sur la touche «  OK » et le résultat de la mesure de l'enregistrement sélectionné s'affichera sur l'écran, comme indiqué sur la figure 3-14.


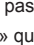
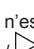
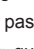
«  Return » : appuyer sur « Return » pour revenir à la page écran contenant les enregistrements.

«  Delete » : appuyer sur «  OK » pour supprimer l'enregistrement sélectionné. S'affichera le message de confirmation « Sure to delete? » (certain de vouloir supprimer ?), comme l'indique la figure 3-15. Si la transmission wireless est active, à sa place se trouve la fonction «  Send ». Appuyer sur la touche «  Send » sur le dispositif et sur le côté host, cliquer sur l'icône « Wireless Receive » à l'intérieur du logiciel « ECG Viewer Manager » sur l'ordinateur. De cette manière, l'enregistrement des données sera transmis et sauvegardé sur l'ordinateur.

- Sélectionner « YES », puis appuyer sur la touche «  OK » pour effectuer la suppression et revenir à la liste des enregistrements. Appuyer sur la touche «  Return » pour revenir à la liste sans éliminer aucun enregistrement.

3.4.2 Description résultats mesure

Lorsque l'appareil détecte une déconnexion ou une arythmie suspecte dans les ondes ECG, s'affiche les messages « Poor signal, measure again - signal faible, mesurer de nouveau (Figure 3-16) », « Suspected a little slow beat - battement lent suspecté (Figure 3-17) », etc., 17 types de résultats de mesure ECG sont disponibles. Se référer au tableau successif pour les détails.

REMARQUE : les figures 3-16 et 3-17 indiquent les résultats de la mesure avec la méthode de mesure en continu. Le résultat de la mesure est indiqué sur le côté gauche de la page écran. Si l'espace d'indication du résultat de la mesure n'est pas suffisant, sont actives les touches de navigation «  /  » ou «  /  » qui permettent à l'utilisateur de déplacer manuellement la page écran.

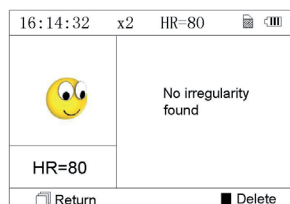


Figure 3-14

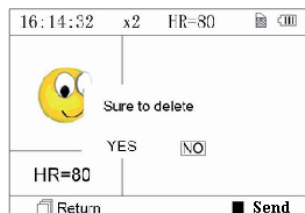


Figure 3-15

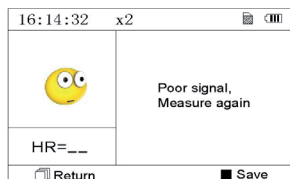


Figure 3-16
(1). Signal faible

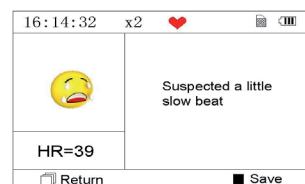
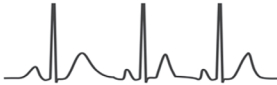
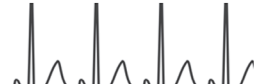
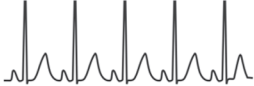
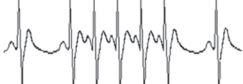
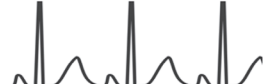

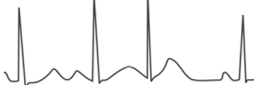
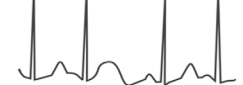

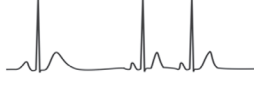
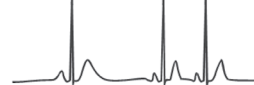
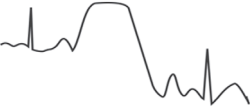


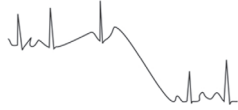




Figure 3-17
(2). Battement légèrement lent


3.4.3 Tableau résultats mesure



N°	Description résultats mesure ECG	Forme d'onde
1.	Aucune irrégularité	
2.	Battement légèrement accéléré suspecté	
3.	Battement accéléré suspecté	
4.	Cycle bref de battement accéléré suspecté	
5.	Battement légèrement lent suspecté	
6.	Battement lent suspecté	
7.	Bref intervalle occasionnel du battement suspecté	
8.	Intervalle irrégulier des battements suspecté	
9.	Battement accéléré avec intervalle bref suspecté	
10.	Battement lent avec intervalle battement bref suspecté	
11.	Battement lent avec intervalle battement irrégulier susp	



N°	Description résultats mesure ECG	Forme d'onde
12.	Arythmie	
13.	Battement accéléré avec arythmie suspecté	
14.	Battement ralenti avec arythmie suspecté	
15.	Intervalle battement ralenti occasionnel avec arythmie suspecté	
16.	Intervalle battement irrégulier avec arythmie suspecté	
17.	Signal faible, effectuer une nouvelle mesure	

3.5 Gestion des données

3.5.1 Suppression des données

Sélectionner « Memory » (mémoire) dans le menu principal et appuyer sur «  OK » pour accéder à la page écran de la gestion des données comme indiqué sur la figure 3-18.

«  Return » : appuyer sur le bouton «  Return » pour revenir à la page écran principale.

«  Delete » : appuyer sur le bouton pour supprimer les enregistrements. Avant de supprimer, une page écran de confirmation s'affiche à l'écran, comme indiqué sur la figure 3-19. En sélectionnant « YES », puis en appuyant sur la touche «  OK », tous les enregistrements seront supprimés comme indiqué sur la figure 3-20.

Remarque : L'opération de suppression des données effectuée depuis ce menu, supprime toutes les données en mémoire. Pour supprimer un seul enregistrement, utiliser la fonction de relecture.

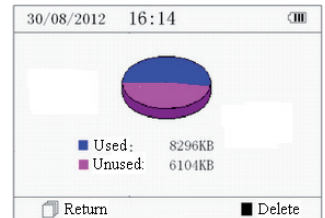


Figure 3-18 Page écran mémoire

3.5.2 Téléchargement des données

Brancher le dispositif à l'ordinateur au moyen du câble données USB, le dispositif affichera automatiquement la page écran de téléchargement comme indiqué sur la figure 3-21. Les données peuvent être téléchargées sur l'ordinateur pour la gestion, la consultation et l'analyse.

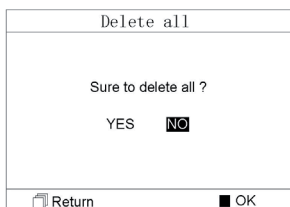


Figure 3-19

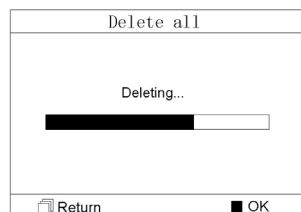


Figure 3-20 Suppression des enregistrements

Remarque : S'assurer que les piles sont suffisamment chargées au moment de la suppression ou du téléchargement des données. Une charge insuffisante pourrait interrompre les opérations.

3.6 Paramètres du système

Sur la page écran du menu principal, sélectionner « Settings » (paramètres) et appuyer sur « OK » pour accéder à la page écran de réglage des paramètres, comme indiqué sur les figures 3-22 et 3-23.

3.6.1 Réglage Date/Heure

1. Sur la page écran de réglage des paramètres, sélectionner « Time/date »

(Heure/Date) au moyen des touches de navigation, puis appuyer sur « OK

» pour accéder à l'écran de réglage de l'heure et de la date (format date : jj/mm/aaaa), comme indiqué sur la figure 3-24.

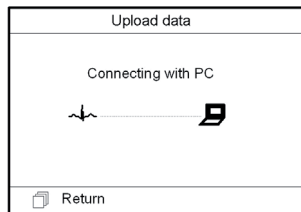


Figure 3-21 Téléchargement des données

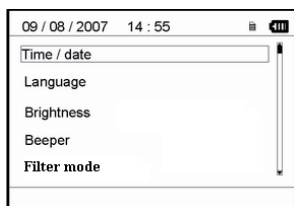


Figure 3-22

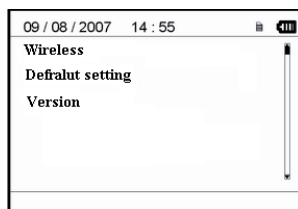


Figure 3-23

2. Utiliser les touches de navigation pour régler les valeurs et appuyer sur « OK » pour mettre en évidence le curseur noir et régler une autre valeur.

3. Une fois l'opération terminée, appuyer sur « OK » pour sauvegarder les paramètres et revenir au niveau supérieur du menu.

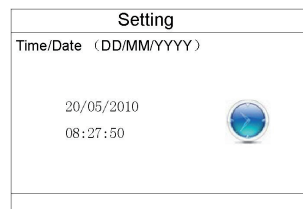


Figure 3-24 Réglage Date/heure

3.6.2 Sélection langue

1. Sur la page écran de réglage des paramètres, sélectionner « Language » (langue) pour accéder à la page écran de sélection de la langue comme indiqué sur la figure 3-25.

2. Appuyer sur les touches de navigation pour sélectionner le chinois ou l'anglais.

3. Appuyer sur « OK » pour sauvegarder les paramètres et revenir au niveau supérieur du menu.

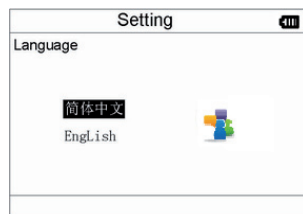


Figure 3-25 Sélection langue

3.6.3 Réglage Luminosité

1. Sur la page écran de réglage des paramètres, sélectionner « Brightness » (luminosité) pour accéder à la page écran de réglage de la luminosité comme indiqué sur la figure 3-26.

2. Régler la luminosité au moyen des touches de navigation ; 7 niveaux de réglage sont disponibles.

3. Appuyer sur « OK » pour sauvegarder les paramètres et revenir au niveau supérieur du menu.

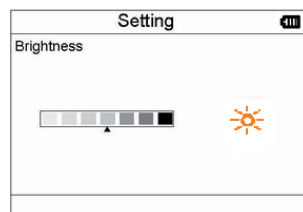



Figure 3-26 Réglage Luminosité

3.6.4 Réglage signal sonore

1. Sur la page écran de réglage des paramètres, sélectionner « Beeper » (signal sonore) pour accéder au menu comme indiqué sur la figure 3-27.
2. Sélectionner « ON » ou « OFF » au moyen des touches de navigation pour activer ou désactiver le signal sonore, le réglage prédéfini est « ON » (activé).
3. Appuyer sur «  OK » pour sauvegarder les paramètres et revenir au niveau supérieur du menu.

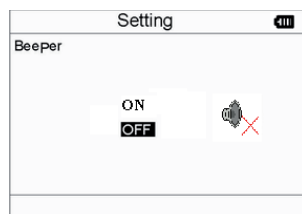



Figure 3-27 Réglage signal sonore

3.6.5 Réglage modalité mesure

1. Sur la page écran de réglage des paramètres, sélectionner « Measure mode » (modalité de mesure) pour accéder à la page écran de réglage de la mesure comme indiqué sur la figure 3-28.
2. Sélectionner la modalité « Normal » (normale) ou « Enhanced » (avancée) au moyen des touches de navigation. Le réglage prédéfini est la modalité « Normal ». Modalité normale : elle filtre les signaux d'interférence dans la forme d'onde ECG. Modalité avancée : elle reflète mieux la fidélité de la forme d'onde ECG.
3. Appuyer sur «  OK » pour sauvegarder les paramètres et revenir au niveau supérieur du menu.

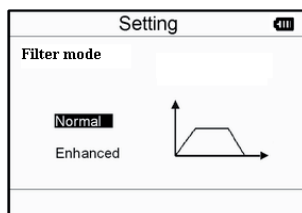



Figure 3-28 Réglage modalité mesure

3.6.6 Sélection Wireless (sans fil)

1. Sur la page écran de réglage des paramètres, sélectionner « Wireless » pour accéder au menu comme indiqué sur la figure 3-29.
2. Sélectionner « ON » ou « OFF » au moyen des touches de navigation pour activer ou désactiver la fonction wireless.
3. Appuyer sur «  OK » pour sauvegarder les paramètres et revenir au niveau supérieur du menu.

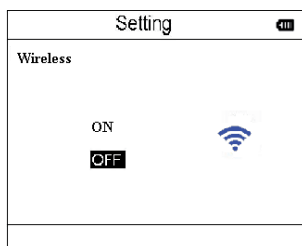




Figure 3-29 Sélection Wireless

3.6.7 Rétablissement des paramètres

1. Sur la page écran de réglage des paramètres, sélectionner « Default setting » (rétablissement des réglages) pour rétablir les paramètres prédéfinis, voir la figure 3-30.
2. Sélectionner « YES » ou « NO » au moyen des touches de navigation, en choisissant « YES » et en appuyant sur «  OK », tous les paramètres prédéfinis seront rétablis.
3. Appuyer sur «  Return » pour revenir au niveau supérieur du menu.

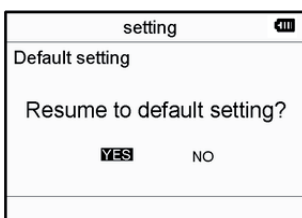



Figure 3-30 Rétablissement des paramètres

3.6.8 Version Info

Sulla schermata impostazioni sistema, selezionare "Version" per accedere al menu informazioni versione come mostrato nella Figura 3-31.

3.7 Aide

Sur la page écran du menu principal, sélectionner « Help », puis appuyer sur «  OK » pour accéder à la page écran d'aide. La fonction fournit diverses illustrations de différents types de mesures ECG pouvant être effectués. Se référer à la section 3.2.1 pour les méthodes de mesure ECG détaillées.

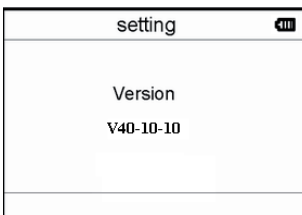


Figure 3-31 Informations sur la version

4 Caractéristiques techniques

4.1 Mesures ECG

Nombre de canaux : Un seul canal ECG.

Électrodes : 3 électrodes métalliques ou utilisation de trois électrodes adhésives pour ECG à travers le branchement à un câble avec dérivation.

Modalité de mesure : le signal ECG peut être capté en sélectionnant la dérivation suivante :

Dérivation I (entre la main droite et la main gauche) ;

Dérivation thorax (entre la main droite et le thorax) ;

Dérivation II (entre la main droite et la jambe gauche) ;

Largeur bande ECG : 1Hz~40Hz

Niveau sonore interne : $\leq 30\mu\text{Vp-p}$

Intervalle de mesure fréquence cardiaque : 30bpm~240bpm

Précision mesure fréquence cardiaque : $\pm 2\text{bpm}$ ou $\pm 2\%$ si renforcée

Échelle de visualisation : $5.0\text{mm/mV} \pm 10\%$

Rapport de réjection en mode commun (CMRR) : $\geq 60\text{dB}$

Vitesse largeur onde : $20\text{mm/s} \pm 10\%$

Courant d'entrée loop : $\leq 0.1\mu\text{A}$

Impédance d'entrée : $\geq 5\text{MO}$

4.2 Alimentation

Alimentation : 2 x piles alcalines AAA

Voltage électrique : 2.7VDC~3.3VDC

Maximale courant moyen de fonctionnement : $\leq 50\text{mA}$

Arrêt automatique : $35\text{s} \pm 5\text{s}$ (quand il est inactif)

Indicateur niveau pile déchargée : 2.5VDC \pm 0.2VDC

4.3 Classification

Type de protection contre les décharges électriques : dispositif à alimentation interne

Degré de protection contre les décharges électriques : partie appliquée de type B

Degré de protection contre la pénétration néfaste de liquides : L'équipement de base ne prévoit pas de protection contre la pénétration néfaste de liquides.

Compatibilité électromagnétique : Groupe I, classe B

4.4 Écran

Type LCD : LCD à couleurs

Zone écran : 57.6mm \times 40mm

4.5 Mémoire données

Jusqu'à 10 heures d'enregistrement peuvent être sauvegardées dans la mémoire interne ;

Les données sauvegardées peuvent être téléchargées sur un ordinateur au moyen du câble données fourni par le fabricant.

4.6 Dimensions totales et poids

Dimensions : (L) 125 \times (P) 70 \times (H) 21.5 mm

Poids : 106g (piles exclues)

5 Accessoires

Deux piles (AAA)

Boîtier

Manuel d'utilisation

Câble données (en option)

Câble avec dérivation ECG (en option)

Remarque : les accessoires peuvent être modifiés. Pour les détails et la quantité des articles, voir la liste de colisage.

6 Entretien et assistance

6.1 Entretien

Quand apparaît l'icône batterie déchargée, remplacer les piles.

Il est conseillé de nettoyer l'électrode métallique avec de l'alcool dénaturé lorsque le signal de mesure est trop faible.

Nettoyer la surface de l'unité avec un chiffon propre ou laisser la sécher à l'air libre.

Retirer les piles si l'unité n'est pas utilisée pendant une longue période.

Stockage et transport

Température ambiante : de -20°C à 60°C

Taux d'humidité : 10%~95%

Pression atmosphérique : 50KPa~107.4KPa



Cet appareil doit être transporté par voie terrestre (sur route ou voie ferroviaire) ou par avion en fonction des conditions contractuelles. Protéger des coups et des chutes, et ne pas exposer l'appareil à la lumière du soleil et à la pluie.

Tenir éloigné des substances nocives, explosives, des températures élevées/basses et de l'humidité.

En présence d'humidité ou de vapeur, ne pas utiliser l'appareil.

NE PAS utiliser l'appareil immédiatement quand il vient d'être déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud et humide.

NE PAS appuyer sur le bouton situé sur le panneau de commande avec des objets coupants.

NE PAS immerger dans des liquides. NE PAS pulvériser de liquide directement sur l'appareil.

La durée de vie de cet appareil est de 5 ans. Pour garantir sa durée de vie, prêter attention à l'entretien.

6.2 Instructions pour le nettoyage et la désinfection

Nettoyer la surface des capteurs avec une gaze douce et une solution contenant 75 % d'alcool isopropylique, pour une désinfection de bas niveau, utiliser une solution contenant de l'eau de javel. Puis nettoyer la surface avec un chiffon humide et sécher avec un chiffon sec.



Attention : Ne pas stériliser le produit par autoclave ou avec de l'oxyde d'éthylène.

7 Résolution des problèmes

Problème : L'appareil ne s'allume pas.

Cause probable	Solution
<ol style="list-style-type: none"> 1. Les piles sont déchargées ou presque déchargées. 2. Les piles ne sont pas mises correctement. 3. L'appareil est en panne. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remplacer les piles 2. Remettre les piles. 3. Contacter le service après-vente.

Problème : L'appareil ne réussit pas à prendre le battement cardiaque

Cause probable	Solution
<ol style="list-style-type: none"> 1. Le branchement entre l'électrode et le corps n'est pas correct. 2. Pendant la mesure, la personne bouge. 3. Interférence électromagnétique. 4. Signal faible. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Positionner correctement l'électrode. 2. Pendant la mesure, rester calme et éviter de bouger. 3. S'éloigner des sources d'interférence. 4. Changer le lieu de mesure (thorax).














Problème : Excursion des ondes ECG ou ondes non pertinentes

Cause probable	Solution
<ol style="list-style-type: none"> 1. La peau est sèche ou huileuse. 2. Le branchement entre l'électrode et le corps n'est pas parfait. 3. Tension musculaire. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nettoyer la peau avec de l'eau et du savon et éliminer les cellules de peau et le gras en laissant la peau humide mais non huileuse. 2. Appuyer fortement sur l'électrode. 3. Se détendre pendant la mesure.

8 Message d'erreur et solutions

Erreur	Cause	Solution
Erreur de communication	Des interférences ou des anomalies sont présentes.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyer sur la touche « Return » pour quitter l'état actuel 2. S'assurer que le logiciel sur l'ordinateur fonctionne correctement. 3. Redémarrer la fonction wireless du dispositif. 4. Détendre la main pendant la mesure
Mémoire pleine	La mémoire flash est pleine	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supprimer les données ECG qui ne sont pas indispensables 2. Télécharger les données sur l'ordinateur, puis les supprimer.

9 Legenda simboli

Symbole	Description
	Fréquence cardiaque (Unité : battement par minute)
	Modalité mesure : avancée
	Indicateur pile
	Symbole transmission wireless
	Indicateur mémoire pleine
	Bouton return/Envoi
	Bouton de marche
	Type B
	Prise câble de dérivation
	Attention - Consulter le manuel d'utilisation
	Bouton de confirmation
	Touches de navigation
	Port interface données
SN	Numéro de série
	Interface données

Remarque: Les symboles “”, “”, “”, “” et “” s'affichent sur l'écran, les autres sur le panneau de contrôle.



Élimination des déchets d'EEE: Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les utilisateurs doivent remettre leurs appareils usagés à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation, le recyclage des déchets d'EEE.

Pour obtenir plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez votre mairie, le service local de collecte et de traitement des déchets ou le point de vente du produit. Toute personne contrevenant aux lois nationales en matière d'élimination des déchets est passible de sanctions administratives.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

Toutes nos félicitations pour avoir acheté un de nos produits. Ce produit est conçu de manière à garantir des standards qualitatifs élevés tant en ce qui concerne le matériau utilisé que la fabrication. La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date de la fourniture GIMA.

Durant la période de validité de la garantie, la réparation et/ou la substitution de toutes les parties défectueuses pour causes de fabrication bien vérifiées, sera gratuite. Les frais de main d'œuvre ou d'un éventuel déplacement, ainsi que ceux relatifs au transport et à l'emballage sont exclus.

Sont également exclus de la garantie tous les composants sujets à usure. La substitution ou réparation effectuées pendant la période de garantie ne comportent pas le prolongement de la durée de la garantie. La garantie n'est pas valable en cas de : réparation effectuée par un personnel non autorisé ou avec des pièces de rechange non d'origine, avaries ou vices causés par négligence, chocs ou usage impropre. GIMA ne répond pas des dysfonctionnements sur les appareillages électroniques ou logiciels causés par l'action d'agents extérieurs tels que : sautes de courant, champs électromagnétiques, interférences radio, etc. La garantie sera révoquée en cas de non respect des prescriptions ci-dessus et si le numéro de matricule (si présent) résultera avoir été enlevé, effacé ou altéré. Les produits considérés défectueux doivent être rendus seulement et uniquement au revendeur auprès duquel l'achat a été effectué. Les expéditions qui seront envoyées directement à GIMA seront repoussées.

Annexe

Connaissances générales d'ECG

Rythme sinusal normal : Dans des conditions sinusales, le nœud sino-auriculaire régule le rythme cardiaque en normalisant le battement. Le battement cardiaque varie de 60 à 100 par minute et le rythme est régulier. L'onde P est normale et chacune est suivie d'une onde QRS.

Intervalle P-R : 0.12~0.20s ; onde QRS : 0.06~0.10s ; Aucune activité ectopique ECG.

Symptôme : Rythme sinusal, pulsation : 60~100bpm

Indication : Normale

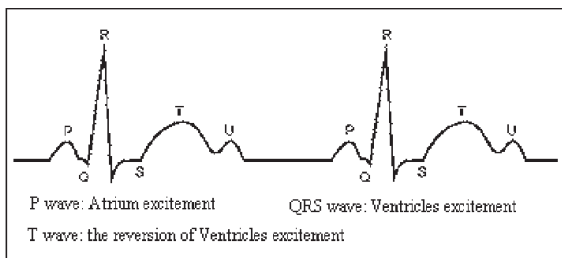


Figure 1 Onde ECG normale

Différentes ondes ECG anormales

1) **Tachycardie** : Le battement cardiaque s'accélère. La tachycardie est déterminée par le rythme cardiaque, si la moyenne des battements cardiaques dépasse le nombre de 100 par minute, il s'agit de tachycardie. L'indication « Suspected fast beat = Battement accéléré suspecté » sur cet appareil peut signifier tachycardie.

Symptôme : battement > 100 bpm

Indication : Chez les personnes saines présentant les conditions physiologiques suivantes : colère, fatigue, tabagisme, excès d'alcool, consommation excessive de café ou de thé, etc.

Pathologie : anémie, hyperthyroïdie, hypoxie, myocardite, hypocalcémie, fièvre, grippe et certains médicaments (tels que atropine, adrénaline, etc.).

Conseil : En cas de pathologie, se rendre à l'hôpital.



Figure 2 Tachycardie

2) **Bradycardie** : Le battement est plus lent. Elle est déterminée par le rythme cardiaque qui est en moyenne inférieur à 60 pulsations par minute, il s'agit de bradycardie. L'indication « Suspected slow beat = Battement ralenti suspecté » sur cet appareil peut signifier bradycardie.

Symptôme : battement < 60 bpm

Indication : Lorsque qu'une personne saine s'endort ou chez les athlètes (ou chez les personnes soumises à des activités sportives fréquentes), les personnes âgées, ou en cas d'excitation vagale.

Pathologie : Dysfonctionnement du nœud sinusal, cardiopathie ischémique, cardiomyopathie, hypertension intracrânienne, hypocalcémie, basse température, période de convalescence après une infection aiguë ou après l'utilisation de médicaments tels que digitale.

Conseil : En cas de pathologie, consulter un médecin.

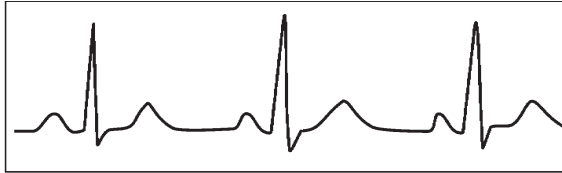


Figure 3 Bradycardie

3) **Battement prématuré** : En présence d'un battement normal apparaît prématurément une onde QRS, suivie d'une pause. L'indication « Suspected occasional short beat interval = Intervalle bref battement occasionnel suspecté » sur l'appareil, il peut s'agir d'un battement prématuré. Qu'est-ce qu'un battement prématuré ? Il s'agit d'une contraction prématurée. Le battement cardiaque normal est toujours régulier et chaque intervalle entre les battements est lui aussi symétrique ; le battement prématuré sort de ce schéma général, le cœur bat prématurément et les battements sont suivis de longs intervalles ; le phénomène de battement prématuré entre deux battements cardiaques s'appelle battement prématuré. L'indication « early beat = battement précoce » peut indiquer un battement prématuré. En fonction de la position originale, il peut se diviser entre : Contraction atriale prématurée, Contraction nodale prématurée et Contraction ventriculaire prématurée (PVC), qui doivent être examinées par des spécialistes.

Symptôme : Le battement cardiaque présente une arythmie, on est en présence de ce phénomène lorsque le cœur bat et s'arrête à l'improviste pendant un court instant. Certaines personnes ressentent des palpitations, d'autres ne présentent aucun symptôme.

Indication : Le battement prématuré peut se présenter de temps en temps même chez des personnes saines n'ayant aucun symptôme ni de palpitations. Il peut être provoqué par la fatigue, le stress, l'insomnie, le tabagisme, l'abus d'alcool, une consommation excessive de café ou de thé, etc. Il peut être soigné sans avoir recours à des médicaments. Cependant, si le phénomène est fréquent, continu, ou multifocal, il pourrait s'agir d'une maladie cardiovasculaire et il est nécessaire de consulter un médecin le plus vite possible.

Conseil : La présence effective d'un battement prématuré doit être confirmée par un spécialiste, mémorisez donc l'image et au moment de la consultation chez le médecin, retrouvez-la et montrez-la au médecin afin qu'il puisse déterminer de quoi il s'agit (Contraction atriale prématurée, Contraction nodale prématurée, Contraction ventriculaire prématurée ou battement prématuré multifocal) et indiquer une thérapie.

Symptômes du patient : le battement cardiaque normal est suivi d'un battement prématuré.

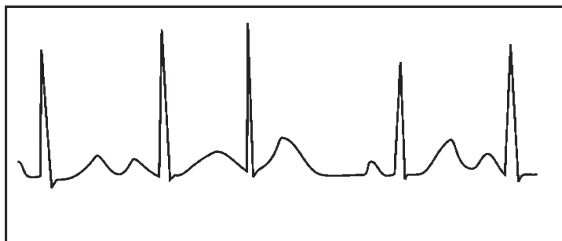


Figure 4 Battement prématuré

4) **Bigéminie** : Il s'agit d'un type de PVC (Contraction ventriculaire prématurée) où le battement normal est suivi d'un battement prématuré.

Indication : Le PVC survient fréquemment.

Conseil : Consulter un médecin.



Figure 5 Bigéminie

5) **Trigéminie** : Il s'agit d'un type de PVC où deux battements normaux sont suivis d'un battement prématuré.

Indication : Le PVC survient fréquemment.

Conseil : Consulter un médecin.



Figure 6 Trigéminie

L'indication « Suspected irregular beat interval = Intervalle irrégulier battements suspecté » sur cet appareil peut signifier bigéminie ou trigéminie.

6) **Cycle court de tachycardie** : Le PVC survient en continu plus de trois fois.

Symptômes du patient : Le PVC survient en continu plus de trois fois. Le battement cardiaque est rapide et régulier mais commence et s'arrête à l'improviste.

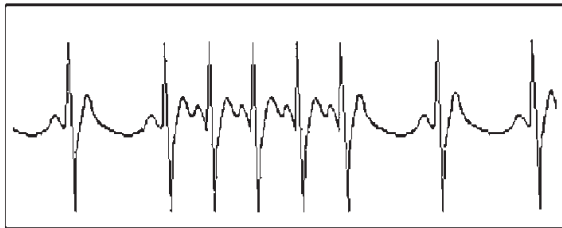


Figure 7 Tachycardie

En fonction de la position active originale, il peut se diviser entre : Cycle court, Cycle court SVE (consulter un spécialiste pour déterminer le type de cycle).

Cycle court : Il est provoqué par une Contraction atriale prématurée ou un Battement prématuré nodal, fréquence > 180 bpm.

Indication : Fréquent chez les patients en bonne santé, il provoque des respirations profondes, de la tachypnée, des changements de position, la déglutition, la colère, etc. Il se présente également en cas de cardiopathies telles que le Syndrome de Wolff - Parkinson-White, de cardiopathies rhumatismales, de maladies coronaires, cardiomyopathie, cardiopathies congénitales, réactions aux médicaments (intoxication), etc.

Conseil : Si se présente souvent, consultez un médecin le plus rapidement possible.

Tachycardie ventriculaire : Provoquée par une Contraction ventriculaire prématurée, Battement cardiaque > 140 bpm.

Indication : Elle se présente en général chez les patients ayant des cardiopathies, elle peut provoquer des fibrillations ventriculaires si elle est grave, le patient doit donc consulter un médecin immédiatement.

Conseil : La présence d'un cycle court doit être confirmée par un spécialiste, mémorisez donc l'image et montrez-la au médecin comme référence lors de la visite.

**ATENCIÓN**

1. *Controlar el aparato para asegurarse de que no presente daños evidentes que puedan afectar la seguridad del usuario y la medición. Interrumpir el uso de la unidad en caso de daños evidentes.*
2. *NO realizar auto-diagnosís mediante mediciones o resultados de mediciones, consultar siempre con el médico en caso de aparición frecuente de datos anómalos.*
3. *El aparato NO ha sido diseñado o creado para diagnosís médicas.*
4. *NO utilizar este aparato en el cuarto de baño o en ambientes húmedos.*
5. *NO utilizar con un desfibrilador.*
6. *NO utilizar en pacientes portadores de marcapasos cardíaco.*
7. *NO poner en funcionamiento en ambientes con fuertes interferencias electromagnéticas.*
8. *La asistencia necesaria debe ser realizada EXCLUSIVAMENTE por personal técnico cualificado.*
9. *Se recomienda un examen clínico ECG para comprobar las funciones cardíacas.*
10. *Conectar/desconectar el cable de datos a la pantalla suavemente y con cuidado, NO torcer ni arrancar el enchufe del cable de datos con fuerza para introducirlo o extraerlo del puerto de interfaz datos, ya que se podría dañar.*
11. *Cuando se llega a la fecha de caducidad se deben eliminar el aparato y sus accesorios según las leyes locales vigentes.*

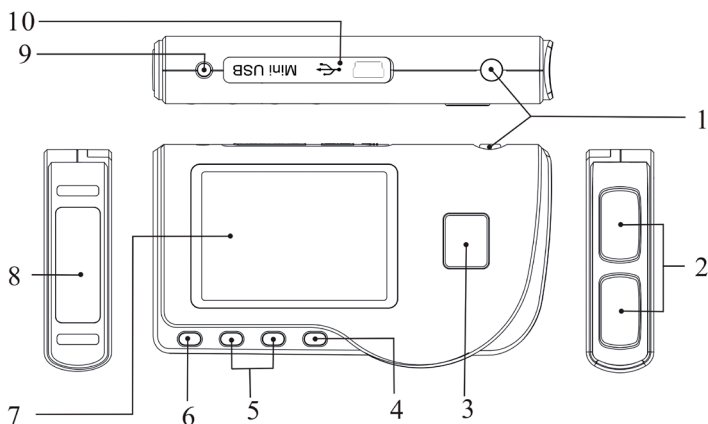

1 Indicaciones generales**1.1 Aspecto exterior**

Figura 1 Ilustración del aparato

1. Encendido: Manteniendo presionada esta tecla (aprox. 2 segundos) se enciende o se apaga el aparato; presionándola brevemente se enciende la luz de la pantalla.
2. Electrodo metálico I, II
3. Medición: tecla de inicio rápido para la medición, presionar esta tecla para iniciar la medición.
4. OK: confirma la selección o la modifica.
5. Teclas direccionales:
 - / Arriba / izquierda / aumentar: desplaza el cursor hacia arriba / a la izquierda, o ajusta los parámetros.
 - / Abajo / derecha / disminuir: desplaza el cursor hacia abajo / a la derecha, o ajusta los parámetros.
6. Envío: Vuelve al nivel anterior en el menú.
7. Pantalla: visualiza las ondas y los datos del ECG.
8. Electrodo metálico III

9.  Conector derivaciones ECG: para la conexión al cable de derivaciones.

10.  Puerto interfaz datos: para la conexión con cable datos mini USB.

1.2 Nombre y modelo

Pantalla PC-80B ECG Easy Bluetooth

1.3 Estructura

La pantalla PC-80B ECG Easy Bluetooth está formada por un panel principal, paneles y electrodos.

1.4 Características

1. De pequeñas dimensiones y ligero de transportar.
2. Medición mediante una tecla, funcionamiento fácil.
3. Visualización clara ondas ECG e interpretación de resultados en la pantalla LCD dot-matrix.
4. Se pueden realizar diecisiete tipos de medición.
5. Posibilidad de memorizar en la memoria incorporada, hasta 1200 registros para la medición rápida o 10 horas de medición en continuo.
6. Los datos memorizados se pueden revisar, copiar, cancelar e incluso cargar en el ordenador.
7. Ahorro energético gracias a la función de apagado automático.
8. Con dos pilas AAA se pueden realizar más de 10 horas de actividad (transmisión inalámbrica desactivada).
9. Función de upload de datos inalámbrico.

1.5 Aplicaciones previstas

La Pantalla PC-80B ECG Easy Bluetooth ha sido diseñado para controlar y memorizar las ondas y los índices cardíacos del ECG en pacientes adultos. Se puede aplicar para uso ambulatorio o doméstico y puede ser utilizado por el propio paciente. El dispositivo no es una pantalla ECG comparable con los modelos empleados en clínicas y hospitales, sino que tiene un uso para fines exclusivamente de controles ocasionales. No se puede usar en sustitución de exámenes ECG tradicionales o para la monitorización en tiempo real. Los resultados de las mediciones se utilizan como referencia para los médicos, pero no se pueden establecer diagnósticos o análisis directas únicamente sobre la base de la información proporcionada por este aparato.

1.6 Ambiente operativo

Temperatura: 5~40°C

Humedad: 30%~80%

Presión atmosférica: 70kPa~106kPa

2 Instalación

1. Abrir la tapa de las pilas (ver la figura).
2. Introducir dos pilas formato AAA.
3. Cerrar la tapa



Al introducir las pilas NO invertir la polaridad. Realizar la eliminación de las pilas agotadas según las leyes locales vigentes. Sobre los electrodos del dispositivo están colocadas algunas películas protectoras que se deben remover antes de la medición.

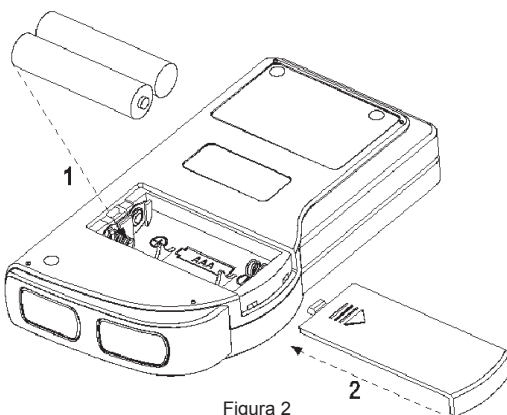


Figura 2


3 Funcionamiento


3.1 Inicio medición ECG

Presionar la tecla Encendido (durante 2 segundos) para encender el aparato. Durante la inicialización aparecen en la pantalla las siguientes imágenes.

Después de iniciar el sistema, se accede a un menú vídeo como se muestra en la Figura 3-2.

Nota: Durante la inicialización presionar la tecla “

 Envío” para acceder al menú vídeo principal como se muestra en la Figura 3-2. Presionando

“  Measurement” (medición), se accederá al vídeo de la medición como se muestra en la Figura 3-4.

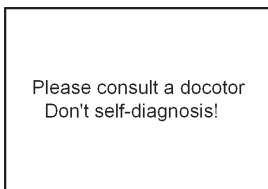


Figura 3-1A

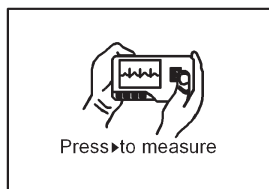


Figura 3-1B

Están presentes 6 teclas herramientas, presionar la tecla de navegación para posicionar el cursor y presionar "OK" para confirmar. Todas las funciones se enumeran a continuación:



Medición: detecta las ondas ECG y los valores HR y analiza si la onda ECG es normal.



Revisión: permite volver a visualizar los datos de los ECG memorizados (incluso las ondas ECG y los resultados de las mediciones).



Memoria: Visualiza el espacio libre en la memoria y elimina los datos de los ECG memorizados en la unidad.



Regulación: ajusta los parámetros relativos a la fecha del sistema, la hora, el idioma, la modalidad, la luminosidad, el contraste, etc.



Ayuda: proporciona información sobre los métodos de medición, etc.



Configura el idioma de la pantalla. El dispositivo está configurado en dos idiomas (chino e inglés) que el usuario puede seleccionar.



Figura 3-2

3.2 Medición ECG

3.2.1 Métodos de medición ECG rápidos

Medición del tórax

Para conseguir las ondas ECG ideales, se recomienda el método de la medición del tórax. Mantener el dispositivo con la mano derecha. Asegurarse de que la palma y los dedos toquen perfectamente los electrodos metálicos I y II. Colocar el electrodo III sobre la piel desnuda a una distancia de aproximadamente 5 cm debajo del pezón izquierdo. La señal del ECG detectada por la medición del tórax es similar a la señal V Derivación ECG.

Funcionamiento incorrecto:

- A. El punto de contacto del electrodo III no corresponde al pecho izquierdo.
- B. La mano no sujeta correctamente el aparato.
- C. El electrodo no está completamente en contacto con la piel desnuda. (Por ejemplo, el electrodo está colocado por encima de la ropa).

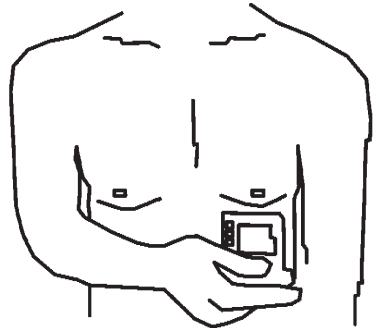


Figura 3-3A Medición del tórax

Medición de la pierna

En el caso en que no fuera posible utilizar la medición en el pecho, se recomienda la medición de la pierna. Durante la medición, mantener el dispositivo con la mano derecha. Asegurarse de que la palma y los dedos toquen perfectamente los electrodos metálicos I y II. Colocar el electrodo III sobre la piel 10 cm por encima del tobillo izquierdo. La señal del ECG detectada por la medición de la pierna equivale a la señal II Derivación ECG.

Funcionamiento incorrecto:

- A. La mano no sujeta correctamente el aparato.
- B. El electrodo III no está completamente en contacto con la piel desnuda: (por ejemplo está colocado sobre el dobladillo de los pantalones o los calcetines).

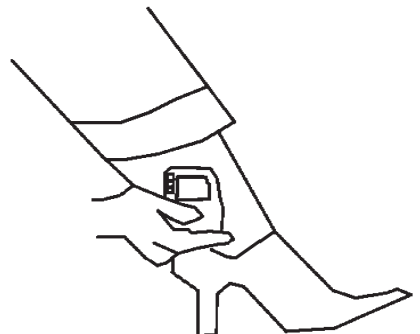


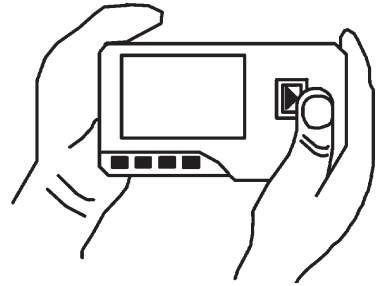
Figura 3-3B Medición de la pierna

Medición de la Palma

Mantener el dispositivo con la mano derecha. Asegurarse de que la palma y los dedos toquen perfectamente los electrodos I y II. Presionar el electrodo III contra el centro de la palma izquierda. La señal del ECG detectada por la medición de la Palma equivale a la señal I Derivación ECG.

Funcionamiento incorrecto:

- A. Las manos se mueven demasiado.
- B. Durante la medición ambas manos pierden el contacto con los electrodos.
- C. La palma no está en contacto con los electrodos.



3-3C Medición de la palma

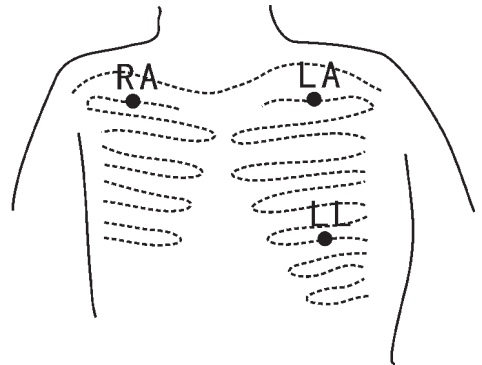
3.2.2 Métodos de medición ECG en continuo o por largos periodos

Medición con cables

Para un mejor ECG, se puede utilizar la medición a través del cable de conexión. Conectar el cable al aparato mediante el relativo enchufe. Colocar los electrodos y conectar los cables como se muestra en la figura de al lado para conseguir la señal ECG II Derivación; si se desea realizar mediciones con señal I y III derivación, conectar los cables a los electrodos según la siguiente tabla.

Funcionamiento incorrecto:

- A. Error en la conexión al puerto.
- B. Electrodo colocado sobre el cuerpo de forma incorrecta.




Figuras 3-3D Medición con cables

Electrodo	Derivación	Derivación I	Derivación II	Derivación III
Posición Electrodo				
La intersección entre el eje de la clavícula derecha y segunda costilla.		RA	RA	LA
La intersección entre el eje de la clavícula izquierda y segunda costilla.		LL	LA	RA
Entre el extremo izquierdo del esternón y de la quinta costilla		LA	LL	LL

Tabla de posicionamiento electrodos y configuración derivaciones ECG

3.3 Procedimiento de medición ECG

3.3.1 Medición rápida

1. Después de seleccionar un método de medición adecuado, como descrito en el capítulo 3.2.1, presionar “ Measure” para iniciar automáticamente la medición ECG rápida, como se muestra en la Figura 3-4. Durante los primeros 15 segundos el dispositivo entra en la fase preparatoria y comprueba si la posición de los electrodos es adecuada o no en función del trazado ECG medido. Si la forma de onda detectada no está clara, ajustar la posición de los electrodos.

Datos visualizados:

1. "16: 14: 32": hora actual.
2. "X1": escala amplitud ondas ECG.
- "X1/2": dimensión en la mitad de la escala nominal;
- "X1": escala nominal;
- "X2": dimensión doble de la escala nominal
- "X3": dimensión triple de la escala nominal

3. "❤️": indicador latido cardíaco. Parpadea con el latido cardíaco.

4. "📈": indica que la modalidad filtro del ECG es "Enhanced" (reforzada); hacer referencia a la sección 3.6.5 para la regulación del filtro.

5. "🔋": Estado carga batería

6. "📊": onda ECG

7. "1": Regla para amplitud 1mV

8. "📊": Compresión compacta de la forma de onda en escala.

9. "📶": Símbolo Wireless. Aparece cuando el "Wireless" está activado en la pantalla configuraciones de sistema. Después de conectar correctamente el dispositivo con el servidor remoto, se pueden cargar los datos ECG en el servidor (ordenador) para futuras consultas, análisis y memorización.

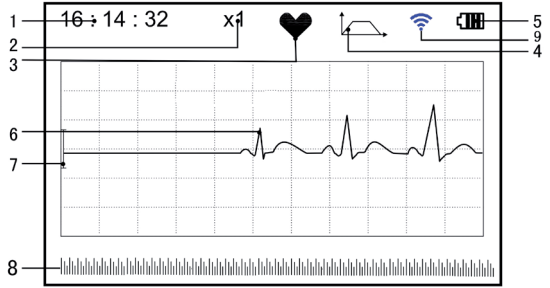


Figura 3-4 Pantalla medición ECG

2. Cuando la forma de onda comprimida en escala llega al final, significa que la medición ha finalizado. Entonces el dispositivo pasa a la fase de análisis de datos, seguida por la visualización de los resultados de la medición en la pantalla, como se muestra en la Figura 3-5.

"📄 Return": vuelve al menú principal directamente, sin guardar los valores de la medición y los resultados corrientes.

"📄 Save": guarda el resultado de la medición corriente y sus valores.

3. En la pantalla de los resultados de la medición, los datos corrientes se guardan automáticamente en el dispositivo, sin realizar ninguna operación durante 6 segundos o presionando la tecla "📄 Save", como se muestra en la Figura 3-6.

El dispositivo volverá automáticamente a la pantalla principal después de la memorización de los datos.

4. Si la transmisión inalámbrica está activada, después de la memorización de los datos, el dispositivo pasa a la pantalla que se muestra en la Figura 3-7.

Presionar la tecla "📄 Send" en la parte lateral del dispositivo para iniciar la transmisión del ECG en modalidad inalámbrica, y en el lado servidor, hacer clic sobre el icono "Wireless Receive" dentro del software "ECG Viewer Manager" en el ordenador. De esta forma los registros de los datos serán transmitidos y guardados en el ordenador, al final el dispositivo vuelve a la pantalla principal automáticamente. (Hacer referencia al Manual Usuario de "ECG Viewer Manager" para el procedimiento de funcionamiento detallado)

3.3.2 Medición en continuo

1. Después de seleccionar el método de medición en continuo, como descrito en

el capítulo 3.2.2, presionar la tecla "▶️ Measure" para realizar automáticamente la medición ECG en continuo, como se muestra en la Figura 3-8. La diferencia entre la medición en continuo y la rápida se describe a continuación:

"📄 Exit": visualiza la información de funcionamiento en la pantalla. Presionar la

tecla "📄 Return" para finalizar la medición ECG y volver a la pantalla principal.

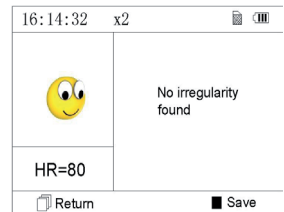


Figura 3-5 Pantalla resultados de medición



3-6 Memorización de datos

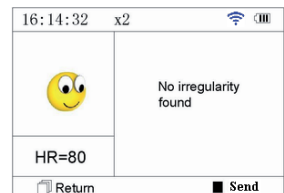


Figura 3-7

Si el tiempo de medición en continuo es superior a 30 segundos, estos datos se guardarán automáticamente.

“HR = 59”: indica la frecuencia cardíaca en tiempo real.


2. Durante la medición en continuo, si está seleccionada la función de transmisión inalámbrica y está activada una conexión, hacer clic sobre el icono “Wireless Receive” dentro del software “ECG Viewer Manager” en el ordenador. De esta forma los registros de los datos serán transmitidos y guardados en el ordenador, al final el dispositivo vuelve a la pantalla principal automáticamente. (Hacer referencia al Manual Usuario de “ECG Viewer Manager” para el procedimiento de funcionamiento detallado). Los datos detectados en el estado de transmisión inalámbrica en tiempo real no se memorizan en la unidad.

3. Si no se realiza ninguna operación después de 3 minutos de medición en continuo, la unidad pasa automáticamente en modalidad de ahorro de energía (la pantalla oscurece) sin interrumpir la medición. Una vez presionado cualquier tecla o en caso de alarma, el sistema sale de la modalidad de ahorro de energía, y la pantalla restablece la plena luminosidad.

Notas: 1) La figura 3-5 muestra el resultado de una normal forma de onda ECG; este dispositivo es capaz de proporcionar 17 distintos resultados de medición, para el detalle hacer referencia a la Tabla 3-1 (sección 3.4.3).


2) Durante la medición, si la parte sometida a medición y los electrodos metálicos pierden el contacto, el dispositivo visualizará el mensaje “Contact?”, como muestra la Figura 3-9. En caso de ausencia de la señal, el dispositivo visualizará “No signal”.

Presionar la tecla “ Return” para salir.

3) En el dispositivo se pueden memorizar hasta un máximo de 1200 registros de datos de medición rápida o 10 horas de datos para la medición en continuo. Cuando el espacio de memoria está lleno, el dispositivo visualiza el mensaje “Memory full! Overwrite record?” y el símbolo “” como se muestra en la Figura 3-10. A partir de este momento, no se memorizarán nuevos registros hasta que el usuario no elimine manualmente los datos innecesarios o cargue los registros en el ordenador para liberar memoria.

3.4 Revisión ondas


3.4.1 Descripción del funcionamiento

1. Seleccionar “Review” en la pantalla del menú principal y luego presionar la tecla “ OK”, el dispositivo visualiza la lista registros como indicado en la Figura 3-11.

Nota:


“”: Significa que los resultados de este registro no presentan anomalías.








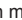
“”: Significa que los resultados de este registro presentan anomalías.

“”: Significa que durante la medición han ocurrido interferencias o desconexiones.

“”: Durante la medición se ha utilizado la modalidad avanzada.

NOTA: Los registros de mediciones en continuo no visualizan ningún icono, sino exclusivamente el tiempo de inicio y finalización de la medición (sin el año).

2. Seleccionar un registro de la lista y presionar “ OK” para volver a visualizarlo; las formas de onda de la modalidad rápida y en continuo se muestran respectivamente en la Figura 3-12 y en la Figura 3-13. Para

detener la repetición automática, presionar cualquier tecla de navegación “/ ” o “/ ”. Volver a presionar una de las teclas de navegación “/ ” o “/ ” para visualizar la forma de onda en modalidad manual.

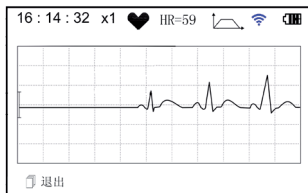


Figura 3-8

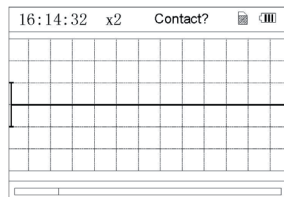


Figura 3-9

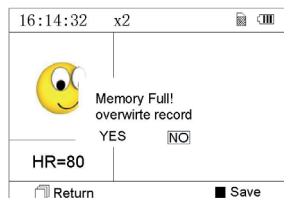


Figura 3-10

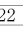
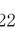
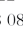


Records	1/32	Wi-Fi	Battery
30/08/2012 09:37:22			
30/08/2012 09:25:21			
30/08/2012 08:34:22			
30/08/2012 07:37:12			
30/08 08:36:08-30/08 08:56:10			

Figura 3-11 Lista Registros

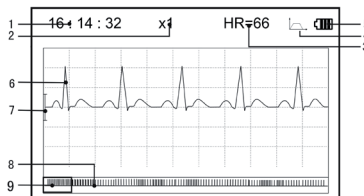


Figura 3-12 Pantalla revisión de datos ECG (Medición rápida)

Datos visualizados

On-screen display:

1. "16: 14: 32": hora actual.
2. "X1": escala amplitud ondas ECG.
"X1/2": dimensión en la mitad de la escala nominal;
"X1": escala nominal;
"X2": dimensión doble de la escala nominal
"X3": dimensión triple de la escala nominal
3. "HR=66": la frecuencia cardíaca es de 66bpm. En los registros de las mediciones en continuo no se visualiza la frecuencia. En su lugar se introduce el indicador de página de la pantalla. "1/2": la página actual es "1", de un total de "2" páginas.

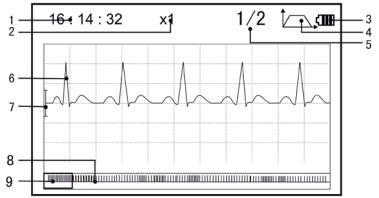


Figura 3-13 Pantalla revisión de datos ECG (Medición en continuo)

4. "Enhanced": Indica que la modalidad filtro del ECG es "Enhanced" (avanzada);
5. Battery icon: Estado carga batería
6. ECG waveform: Onda ECG registrada
7. "1mV": Regla para amplitud 1mV
8. Compact waveform: Compresión compacta de la forma de onda en escala.
9. Selection box: Cuadro de selección forma de onda ECG.

Notas: La forma de onda seleccionada en el cuadro se visualiza en la pantalla corriente.

La miniatura de la onda ECG en el cuadro de selección corresponde a 30 segundos de medición.

3. Volver a presionar la tecla "OK" y el resultado de la medición del registro seleccionado aparecerá en la pantalla, como se muestra en la Figura 3-14.

- "Return": presionar "Return" para volver a la pantalla con la lista de registros.
- "Delete": presionar "OK" para cancelar el registro seleccionado. Aparecerá el mensaje de confirmación "Sure to delete?" (¿está seguro de que desea borrar?), como se muestra en la Figura 3-15. Si la transmisión inalámbrica está activada, en su lugar está presente la función "Send". Presionar la tecla "Send" en el dispositivo y en el lado servidor, hacer clic sobre el icono "Wireless Receive" dentro del software "ECG Viewer Manager" en el ordenador. De esta forma los registros de los datos serán transmitidos y guardados en el ordenador.

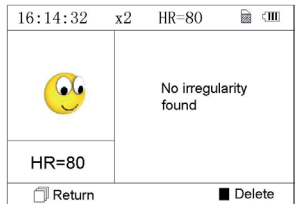


Figura 3-14

4. Seleccionar "YES" y luego presionar la tecla "OK" para realizar la cancelación y volver a la lista de registros. Presionar la tecla "Return" para volver a la lista sin eliminar ningún registro.

3.42 Descripción resultados de medición

Cuando el aparato detecta una desconexión una sospecha de arritmia en las ondas ECG, visualiza el mensaje "Poor signal, measure again- señal débil, repetir la medición (Figura 3-16)", "Suspected a little slow beat - sospecha de latido lento (Figura 3-17)" etc. se pueden conseguir 17 tipos de resultados de medición ECG. Hacer referencia a la Tabla siguiente para el detalle.

NOTA: la Figura 3-16 y la Figura 3-17 muestran los resultados de la medición con el método de medición en continuo. El resultado de la medición se muestra en el lado izquierdo de la pantalla. Si el espacio para mostrar el resultado de la medición no fuera suficiente, están activadas las teclas de navegación "Left/Right" o "Up/Down" que permiten al usuario desplazar manualmente la pantalla.

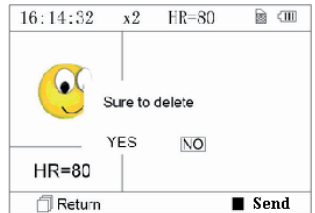


Figura 3-15

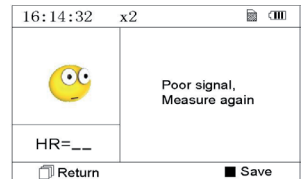


Figura 3-16 (1). Señal débil

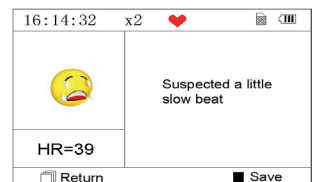
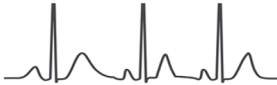
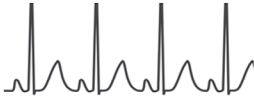
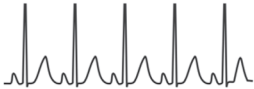
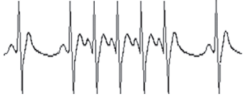
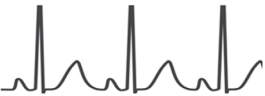
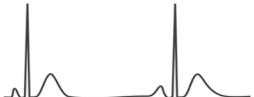
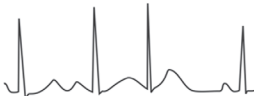
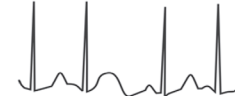

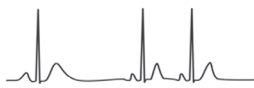
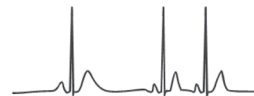
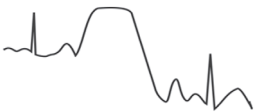


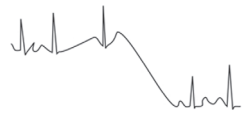




Figura 3-17 (2). latido ligeramente lento

3.4.3 Tabla resultados de medición

N.	Descripción resultados medición ECG	Forma de onda
1.	Ninguna irregularidad	
2.	Sospecha de latido ligeramente acelerado	
3.	Sospecha de latido acelerado	
4.	Sospecha de ciclo breve de latido acelerado	
5.	Sospecha de latido ligeramente lento	
6.	Sospecha de latido lento	
7.	Sospecha de intervalo breve ocasional del latido	
8.	Sospecha de intervalo de latidos irregular	
9.	Sospecha de latido acelerado con intervalo breve	
10.	Sospecha de latido lento con intervalo latido breve	
11.	Sospecha de latido lento con intervalo latido irregular	

N.	Descripción resultados medición ECG	Forma de onda
12.	Arritmia	
13.	Sospecha de latido acelerado con arritmia	
14.	Sospecha de latido lento con arritmia	
15.	Sospecha de intervalo latido lento ocasional con arritmia	
16.	Sospecha de intervalo latido irregular con arritmia	
17.	Señal débil, realizar una nueva medición	

3.5 Gestión de datos

3.5.1 Cancelación de datos

Seleccionar "Memory" (memoria) del menú principal y presionar **OK** para acceder a la pantalla de la gestión de los datos, como se muestra en la Figura 3-18.

Return: presionar la tecla **Return** para volver a la pantalla principal.

Delete: presionar la tecla para cancelar todos los registros. Antes de la cancelación, una pantalla de confirmación se visualiza en el display, como se muestra en la Figura 3-19. Seleccionando "YES" y presionando la tecla **OK**, todos los registros se borrarán como se muestra en la Figura 3-20.

Nota: La operación de cancelación de los datos realizada en este menú elimina todos los datos memorizados. Para borrar sólo un registro utilizar la función de revisión.

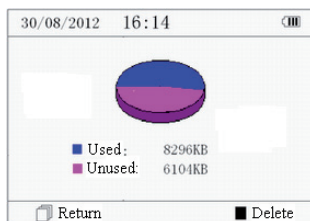


Figura 3-18 Pantalla de memoria

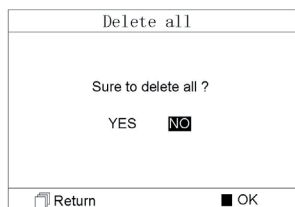


Figura 3-19

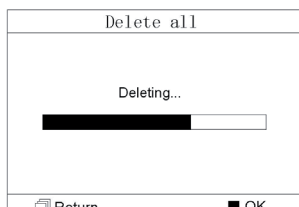


Figura 3-20 Cancelación de registros

3.5.2 Carga de datos

Conectar el dispositivo al ordenador con el cable de datos USB, el dispositivo visualizará automáticamente la pantalla de carga, como se muestra en la Figura 3-21. Se pueden cargar los datos en el ordenador para la gestión, la consulta y el análisis.

Nota: Asegurarse de que las pilas estén suficientemente cargadas cuando se borran o se cargan los datos. Una carga insuficiente puede provocar la interrupción de las operaciones.

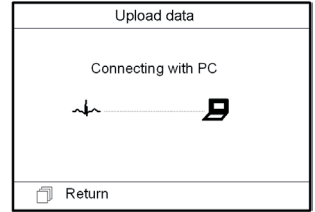


Figura 3-21 Carga de datos

3.6 Configuraciones de sistema

En la pantalla del menú principal, seleccionar "Setting" (configuraciones) y luego presionar "OK" para acceder a la pantalla de ajuste de configuraciones, como se muestra en la Figura 3-22 y en la Figura 3-23.

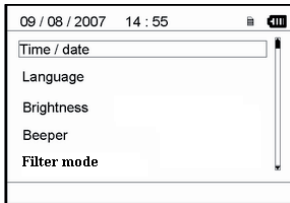


Figura 3-22

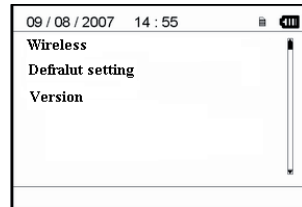


Figura 3-23

3.6.1 Ajuste de Fecha/Hora

1. En la pantalla de ajuste de configuraciones, seleccionar "Time/date" (Hora/fecha) con las teclas de navegación y luego presionar "OK" para acceder a la pantalla de ajuste de la hora y fecha (formato fecha: dd/mm/aaaa), como se muestra en la Figura 3-24.
2. Utilizar las teclas de navegación para ajustar los valores y presionar "OK" para evidenciar el cursor en negro y ajustar otro valor.
3. Una vez finalizado, presionar "OK" para guardar las configuraciones y volver al nivel superior del menú.

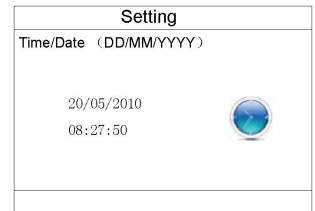


Figura 3-24 ajuste de Fecha/Hora

3.6.2 Selección de Idioma

1. En la pantalla de ajuste de configuraciones, seleccionar "Language" (idioma) para acceder a la pantalla de selección de idioma como se muestra en la Figura 3-25.
2. Presionar las teclas de navegación para seleccionar el idioma entre Chino e Inglés.
3. Presionar "OK" para guardar la configuración y volver al nivel superior del menú.

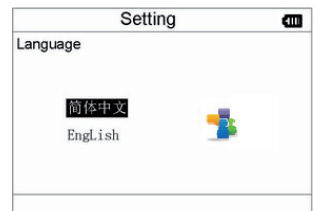


Figura 3-25 Selección de idioma

3.6.3 Ajuste de Luminosidad

1. En la pantalla de ajuste de configuraciones, seleccionar "Brightness" (luminosidad) para acceder a la pantalla de ajuste de luminosidad como se muestra en la Figura 3-26.
2. Ajustar la luminosidad con las teclas de navegación; están presentes 7 niveles de ajuste.
3. Presionar "OK" para guardar la configuración y volver al nivel superior del menú.

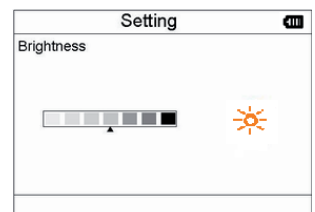



Figura 3-26 Ajuste de Luminosidad

3.6.4 Ajuste de señal acústica

1. En la pantalla de ajuste de configuraciones, seleccionar “Beeper” (señal acústica) para acceder al menú como se muestra en la Figura 3-27.
2. Seleccionar “ON” o “OFF” con las teclas de navegación para encender o apagar el avisador sonoro, el ajuste predeterminado está en “ON” (encendido).
3. Presionar “ OK” para guardar la configuración y volver al nivel superior del menú.

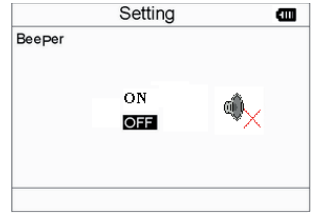


Figura 3-27 Ajuste de señal acústica

3.6.5 Ajuste de modalidad de medición


1. En la pantalla de ajuste de configuraciones, seleccionar “Measure mode” (modalidad de medición) para acceder a la pantalla de ajuste de medición como se muestra en la Figura 3-28.
2. Seleccionar la modalidad “Normal” (normal) o “Enhanced” (avanzada) con las teclas de navegación. El ajuste predeterminado es la modalidad “Normal”. Modalidad normal: filtra las señales de interferencia en la forma de onda ECG. Modalidad avanzada: refleja mejor la fidelidad de la forma de onda ECG.
3. Presionar “ OK” para guardar la configuración y volver al nivel superior del menú.

Figura 3-28 Ajuste de modalidad de medición

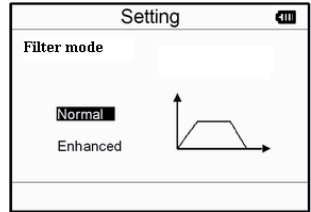

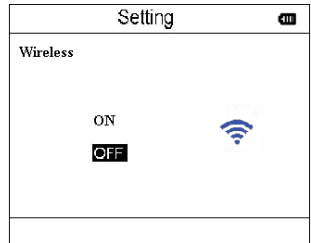


Figura 3-28 Ajuste de modalidad de medición



3.6.6 Wireless Selection

1. En la pantalla de ajuste de configuraciones, seleccionar “Wireless” para acceder al menú como se muestra en la Figura 3-29.
2. Seleccionar “ON” o “OFF” con las teclas de navegación para encender o apagar la función inalámbrica.
3. Presionar “ OK” para guardar la configuración y volver al nivel superior del menú.



Figuras 3-29 Wireless Selection

3.6.7 Restablecimiento de configuraciones

1. En la pantalla de ajuste de configuraciones, seleccionar “Default setting” (restablecer configuraciones) para cargar las configuraciones predeterminadas, ver Figura 3-30.
2. Seleccionar “YES” o “NO” con las teclas de navegación, al elegir “YES” y presionando “ OK” todos los parámetros se restablecerán a la configuraciones predeterminadas.
3. Presionar “ Return” para volver al nivel superior del menú.

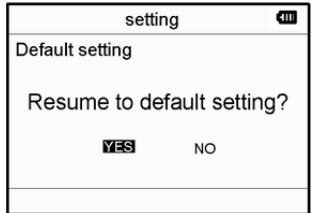



Figura 3-30 Restablecimiento de configuraciones

3.6.8 Version Info

En la pantalla de ajuste de configuraciones, seleccionar “Version” para acceder al menú información versión como se muestra en la Figura 3-31.

3.7 Ayuda

En la pantalla del menú principal, seleccionar “Help”, luego presionar “ OK” para acceder a la pantalla de ayuda. La función proporciona distintas ilustraciones de tipos de mediciones ECG que se pueden realizar. Hacer referencia a la Sección 3.2.1 para el detalle de los métodos de medición ECG.

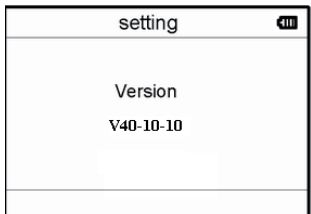


Figura 3-31 Información versión

4 Características técnicas

4.1 Medición ECG

Número de canales: Señal ECG individual.

Electrodos: 3 electrodos recubiertos de metal o uso de tres electrodos adhesivos para ECG mediante conexión con cable con derivación.

Modalidad de medición: la señal ECG se puede captar seleccionando la siguiente derivación:

Derivación I (entre la mano derecha y la izquierda);

Derivación tórax (entre la mano derecha y el tórax);

Derivación II (entre la mano derecha y la pierna izquierda).

Ancho de banda ECG: 1Hz~40Hz

Nivel ruido interno: $\leq 30\mu\text{Vp-p}$

Rango medición frecuencia cardíaca: 30bpm~240bpm

Precisión medición frecuencia cardíaca: $\pm 2\text{bpm}$ o $\pm 2\%$ si es superior

Escala de visualización: 5.0mm/mV $\pm 10\%$

Razón de rechazo al modo común (CMRR): $\geq 60\text{dB}$

Velocidad amplitud onda: 20mm/s $\pm 10\%$

Corriente de entrada loop: $\leq 0.1\mu\text{A}$

Impedancia de entrada: $\geq 5\text{ MO}$

4.2 Alimentación

Alimentación: 2 \times AAA pilas alcalinas

Voltaje eléctrico: 2.7VDC~3.3VDC

Máxima corriente media de funcionamiento: $\leq 50\text{mA}$

Apagado automático: 35s $\pm 5\text{s}$ (cuando está desactivado)

Indicador de nivel de pila descargada: 2.5VDC $\pm 0.2\text{VDC}$

4.3 Clasificación

Tipo de protección de descargas eléctricas: dispositivo de alimentación interna

Grado de protección de descargas eléctricas: parte aplicada de tipo B

Grado de protección contra la entrada dañina de líquidos: El equipamiento básico no prevé la protección contra la entrada de líquidos.

Compatibilidad electromagnética: Grupo I, Clase B

4.4 Pantalla

Tipo LCD: LCD de color

Área pantalla: 57.6mm \times 40mm

4.5 Memoria de datos

En la memoria interna se pueden guardar hasta 10 horas de registros;

Los datos memorizados se pueden cargar en un ordenador con el cable de datos proporcionado por el fabricante.

4.6 Dimensiones totales y peso

Dimensiones: (L) 125 \times (P) 70 \times (H) 21.5 mm

Peso: 106g (pilas excluidas)

5 Accesorios

Dos pilas (AAA)

Estuche

Manual de uso

Cable datos (opcional)

Cable con derivación ECG (opcional)

Nota: los accesorios están sujetos a cambios. Para el detalle y la cantidad de los artículos, véase la Lista de Empaque.

6 Mantenimiento y asistencia

6.1 Mantenimiento

Cuando aparece el icono de pila descargada, sustituir las pilas.

Se recomienda limpiar el electrodo metálico con alcohol desnaturalizado cuando la señal de medición es demasiado débil.

Limpia la superficie de la unidad con un paño limpio o dejarla secar al aire.

Quitar las pilas si no se utiliza la unidad durante un tiempo prolongado.

Conservación y transporte

Temperatura ambiente: de -20°C a 60°C

Índice de humedad: 10%~ 95%

Presión atmosférica: 50KPa~107.4KPa



Este aparato se debe transportar por tierra (en carretera o ferrocarril) o por aire según las condiciones del contrato. Evitar golpes y caídas y proteger el aparato de la luz del sol y de la lluvia. Mantener lejos de sustancias corrosivas, explosivas, temperaturas altas/bajas y humedad.

No utilizar el aparato en presencia de humedad o vapor.

NO utilizar inmediatamente el aparato cuando se acaba de desplazarlo de un ambiente frío a un ambiente caliente y húmedo.

NO presionar el botón en el panel de mandos con materiales cortantes.

NO sumergir en líquidos. NO pulverizar ningún líquido directamente sobre el aparato.

La duración de este aparato es de 5 años. Para garantizar su duración, prestar atención al mantenimiento.

6.2 Instrucciones de limpieza y desinfección

Limpia la superficie de los sensores con una gaza suave y una solución al 75% de alcohol isopropílico, para una desinfección de bajo nivel usar una solución 1:10 de lejía. Sucesivamente limpiar la superficie con un paño húmedo y secar con un trapo.



Atención: No esterilizar el producto en autoclave o con óxido de etileno.

7 Solución de problemas

Problema: El aparato no se enciende.

Possible causa	Solución
<ol style="list-style-type: none"> 1. Las pilas están agotadas o casi agotadas. 2. Las pilas no se han introducido correctamente. 3. El aparato está averiado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sustituir las pilas 2. Volver a colocar las pilas. 3. Contactar con la asistencia.

Problema: El aparato no puede medir el latido cardíaco

Possible causa	Solución
<ol style="list-style-type: none"> 1. La conexión entre electrodo y cuerpo es incorrecta. 2. Durante la medición hay muchos movimientos. 3. Interferencia electromagnética. 4. Señal débil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Colocar correctamente el electrodo. 2. Durante la medición, estar tranquilos y evitar movimientos. 3. Mantenerse lejos de fuentes de interferencias 4. Cambiar la zona de medición (tórax).













Problema: Variación de ondas ECG o ondas sensiblemente irrelevantes

Possible causa	Solución
<ol style="list-style-type: none"> 1. La piel está seca o grasienta. 2. La conexión entre electrodo y cuerpo no es perfecta. 3. Tensión muscular. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limpiar la piel con agua y jabón y eliminar las células de piel y grasa dejando la piel húmeda pero no grasienta. 2. Presionar el electrodo con fuerza. 3. Relajarse durante la medición.

8 Mensaje de error y soluciones

Error	Causa	Solución
Error de comunicación	Están presentes interferencias o anomalías.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presionar la tecla "Return" para salir del estado corriente 2. Asegurarse de que el software en el ordenador funcione correctamente. 3. Reiniciar la función inalámbrica del dispositivo. 4. Relajar la mano durante la medición
Memoria llena	La memoria flash está llena	<ol style="list-style-type: none"> 1. Borrar los datos ECG no indispensables; 2. Cargar los datos en el ordenador y luego eliminarlos.

9 Legenda simboli

Símbolo	Descripción
	Frecuencia Cardíaca (Unidad: latido por minuto)
	Modalidad de medición: avanzada
	Indicador pila
	Símbolo transmisión inalámbrica
	Indicador memoria llena
	Botón return/Envío
	Botón de encendido
	Tipo B
	Toma cable derivación
	Atención – Consultar el manual de uso
	Botón confirmar
	Teclas de navegación
	Puerta interfaz datos
SN	Número de serie
	Interfaz datos

Nota: Los símbolos “”, “”, “”, “” e “” aparecen en la pantalla, los demás en el panel de control.



Eliminación: El producto no ha de ser eliminado junto a otros residuos domésticos. Los usuarios tienen que ocuparse de la eliminación de los aparatos por desguazar llevándolas al lugar de recogida indicado por el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos.

Para más información sobre los lugares de recogida, contactar el propio ayuntamiento de residencia, el servicio de eliminación de residuos local o la tienda en la que se compró el producto. En caso de eliminación equivocada podrían ser aplicadas multas, en base a las leyes nacionales.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Enhorabuena por haber comprado un producto nuestro.

Este producto cumple con elevadas normas cualitativas, tanto en el material como en la fabricación. La garantía es válida por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de suministro GIMA. Durante el periodo de vigencia de la garantía se procederá a la reparación y/o sustitución gratuita de todas las partes defectuosas por causas de fabricación bien comprobadas, con exclusión de los gastos de mano de obra o eventuales viajes, transportes y embalajes.

Están excluidos de la garantía todos los componentes sujetos a desgaste.

La sustitución o reparación efectuada durante el periodo de garantía no tienen el efecto de prolongar la duración de la garantía. La garantía no es válida en caso de: reparación efectuada por personal no autorizado o con piezas de recambio no originales, averías o vicios causados por negligencia, golpes o uso impropio. GIMA no responde de malfuncionamientos en aparatos electrónicos o software derivados de agentes externos como: oscilaciones de tensión, campos electromagnéticos, interferencias radio, etc.

La garantía decae si no se respeta lo indicado arriba y si el número de matrícula (si está presente) se ha quitado, borrado o cambiado.

Los productos considerados defectuosos tienen que devolverse solo al revendedor al que se le compró. Los envíos realizados directamente a GIMA serán rechazados.

Apéndice**Conocimiento general de ECG**

Ritmo sinusal normal: En condiciones sinusales, el nudo SA regula el ritmo cardíaco normalizando el latido. El latido cardíaco varía entre 60 y 100 por minuto y el ritmo es regular. La onda P es normal y cada una es seguida por una onda QRS. Intervalo P-R: 0.12~0.20s; onda QRS: 0.06~0.10s; Ninguna actividad ectópica ECG.

Síntoma: Ritmo sinusal, latido cardíaco: 60~100bpm

Indicación: Normal

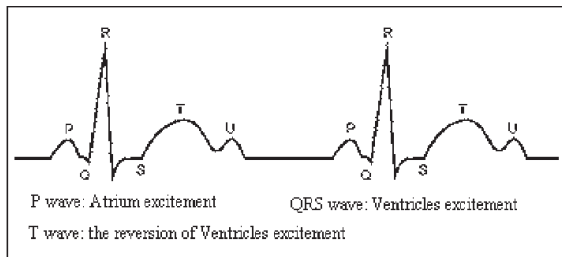


Figura 1 Onda ECG Normal

Distintas ondas ECG anómalas

1) **Taquicardia:** El latido cardíaco acelera. La taquicardia está determinada por el ritmo cardíaco, si la media de los latidos cardíacos supera los 100 por minuto se considera Taquicardia. La indicación resultante "Suspected fast beat = Sospecha de latido acelerado" en este aparato puede significar taquicardia.

Síntoma: latido > 100bpm

Indicación: Puede ocurrir en personas normales que presentan las siguientes condiciones fisiológicas: cólera, agotamiento, tabaco, exceso de alcohol, consumo excesivo de café o té, etc.

Patologías: anemia, hipertiroidismo, hipoxia, miocarditis, hipopotasemia, fiebre, gripe además de algunos fármacos (como atropina, epinefrina, etc.).

Consejo: En el caso en que la causa sea una patología, acudir al hospital.

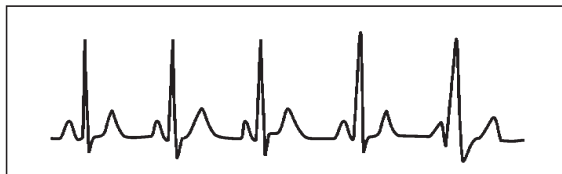


Figura 2 Taquicardia

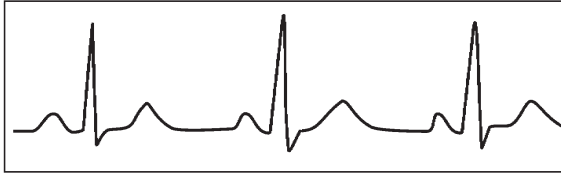
2) **Bradicardia:** El latido se vuelve más lento. Está determinada por el ritmo cardíaco que, si con una media inferior a 60 latidos por minuto, se considera Bradicardia. La indicación resultante "Suspected slow beat = Sospecha de latido lento" en este aparato puede significar Bradicardia.

Síntoma: latido cardíaco < 60bpm

Indicación: Ocurre cuando una persona sana se duerme y puede ocurrir en atletas (o quienes practican frecuentes actividades deportivas), ancianos, o en caso de excitación vagal.

Patología: Disfunción del nodo sinusal, isquemia cardíaca, cardiomiopatía, hipertensión intracraneal, mayor hipopotasemia, baja temperatura, periodo de convalecencia después de infección aguda o tras el uso de medicamentos como digital.

Consejo: En presencia de patología, consultar un medico.



Figuras 3 Bradicardia

3) **Latido prematuro:** Con un latido normal aparece una onda QRS prematuramente y es seguida por una pausa. La indicación "Suspected occasional short beat interval = Sospecha de intervalo breve latido ocasional" en el aparato puede indicar un latido prematuro. ¿Qué es un latido prematuro? Es una contracción prematura. El latido cardíaco normal es siempre regular y cada intervalo entre los latidos es igualmente simétrico; el latido prematuro se sale de este esquema general, el corazón late prematuramente y los latidos son seguidos por largos intervalos; el fenómeno de un latido prematuro entre dos latidos cardíacos se denomina introducción latido prematuro. La indicación "early beat = latido precoz" puede indicar latido prematuro. En función de la distinta posición original, se puede dividir en: Contracción Atrial Prematura, Contracción Nodal Prematura y Contracción Ventricular Prematura (PVC), que debe ser controlada por especialistas.

Síntoma: El latido cardíaco presenta arritmia, estamos en presencia de un fenómeno en el cual el corazón late y, de repente, se detiene por un instante. Algunas personas presentan palpitaciones, otra no presentan síntomas.

Indicación: En algunos casos el latido prematuro puede ocurrir incluso en personas sanas, sin ningún síntoma o bien con palpitaciones. Puede ser provocado por el cansancio, ansia, insomnio, exceso de tabaco abuso de alcohol, consumo excesivo de café o té, etc. Se puede curar sin recurrir a fármacos. Sin embargo si se presenta de forma frecuente y continua, o multifocal, podría indicar una enfermedad cardiovascular y será necesario consultar un medico lo antes posible.

Consejo: Un especialista debe confirmar la efectiva presencia de un latido prematuro, luego es necesario memorizar la imagen y, en el momento de la consulta del medico, enseñársela para que pueda determinar de qué se trata (Contracción Atrial Prematura, Contracción Nodal Prematura, Contracción Ventricular Prematura o latido prematuro multifocal) y recomendar la terapia.

Síntomas paciente: el latido cardíaco normal es seguido por un latido prematuro.



Figura 4 Latido prematuro

4) **Bigeminismo:** Es un tipo de PVC (contracción ventricular prematura) en la cual el latido normal es seguido por uno prematuro.

Indicación: PVC ocurre de forma frecuente.

Consejo: Consultar un medico.

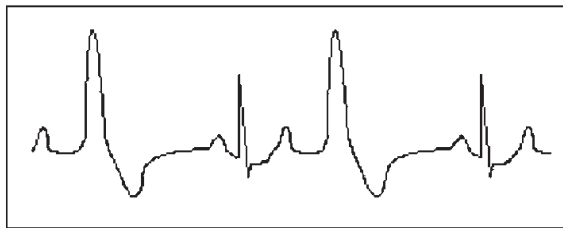


Figura 5 Bigeminismo

5) **Trigeminismo:** Es un tipo de PVC en la cual dos latidos normales son seguidos por un latido prematuro.

Indicación: PVC ocurre de forma frecuente.

Consejo: Consultar un medico.



Figura 6 Trigeminismo

La indicación "Suspected irregular beat interval = Sospecha de intervalo latidos irregular" en este aparato puede señalar Bigeminismo o Trigeminismo.

6) **Ciclo corto de taquicardia:** PVC ocurre de forma continua más de tres veces.

Síntomas paciente: PVC ocurre de forma continua más de tres veces. El latido cardíaco es rápido y regular, pero inicia y se detiene de repente.

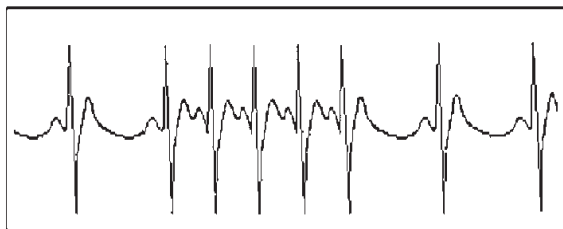


Figura 7 Taquicardia

En función de la distinta posición activa original, puede ser: Ciclo Corto, Ciclo corto SVE (consultar un especialista para determinar el tipo).

Ciclo corto: Es provocada por Contracción Atrial Prematura o Latido Prematuro Nodal, frecuencia > 180bpm.

Indicación: Generalmente es frecuente en pacientes sanos, provoca respiración profunda, taquipnea, cambios de posición, deglución, cólera, etc. Ocurre también en caso de enfermedades cardíacas como el Síndrome de Wolff - Parkinson-White, enfermedades cardíacas reumáticas, enfermedades coronarias, Cardiomiopatía, enfermedades cardíacas congénitas, reacciones a medicamentos (toxicosis digitalis), etc.

Consejo: Si ocurre de forma frecuente, consultar un medico lo antes posible.

Taquicardia ventricular: Es provocada por Contracción Ventricular Prematura, Latido Cardíaco > 140bpm.

Indicación: Generalmente ocurre en pacientes con enfermedades cardíacas, puede causar fibrilación ventricular si es grave, luego el paciente debe inmediatamente consultar un medico.

Consejo: Un especialista debe confirmar la presencia del ciclo corto, luego es necesario memorizar la imagen y enseñársela al medico como referencia durante la consulta.