


EURO DEFIB PADS

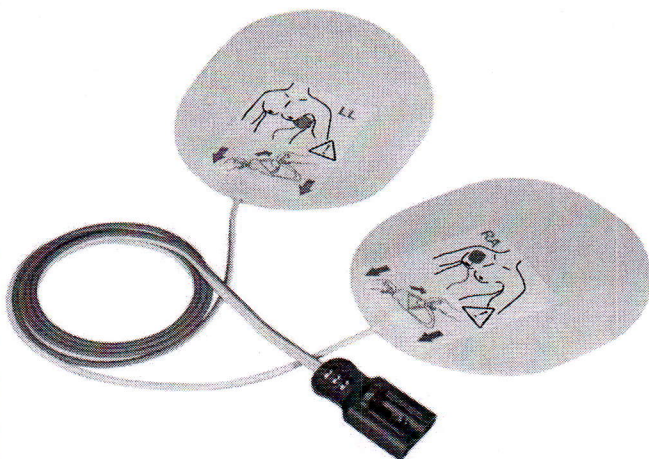

Piastre monouso multifunzione, per defibrillazione, cardioversione sincronizzata, stimolazione cardiaca transcutanea e monitoraggio ECG, provviste di connessione diretta a cavi e defibrillatori.

Per le loro caratteristiche tecniche garantiscono una bassa impedenza ed una ridotta soglia di stimolazione, con un'ottima adattabilità al paziente.

Disponibili in versioni per adulti e pediatriche. Per alcuni modelli sono disponibili anche le versioni con cavo e connettore fuori dalla busta o con pad radiotrasparenti. Alcuni modelli pediatrici sono disponibili con sistema di riduzione dell'energia per connessione diretta con AED.

Tutti i modelli non contengono lattice.

Disposable multifunction electrodes for defibrillation, synchronized cardioversion, transcutaneous cardiac stimulation and ECG monitoring, with direct connection to cables and defibrillators.

Thanks to its technical features they grant a low impedance and a low stimulation threshold, with a very good patient compliance.

Adult and paediatric versions available. Some models are available with connector and cable outside the pouch or with radiotransparent pads. Some pediatric models are available with energy reduction system for direct connection with AED.

The products are Latex-free.

SISTEMA DI CODIFICA MODELLI - PART NUMBERING SYSTEM

F79XX: Adulti standard / Adult standard **(A)**
F79XXW: Adulti con cavo fuori busta / Adult lead out **(B)**
F77XX: Adulti radiotrasparenti / Adult radiotransparent
F77XXW: Adulti radiotrasparenti con cavo fuori busta / Adult radiotransparent, lead out
F79XXP: Pediatriche standard / Paediatric standard
F77XXP: Pediatriche radiotrasparenti / Paediatric radiotransparent
F79XXPL: Pediatriche standard con riduttore di energia / Paediatric standard, reduced energy

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

Serie Series	ADULTI - ADULT			PEDIATRICHE - PAEDIATRIC	
	STANDARD	CAVO FUORI BUSTA LEAD OUT	RADIOTRASARENTI RADIOTRANSAPARENT	STANDARD	RADIOTRASARENTI RADIOTRANSAPARENT
Indicazioni d'uso (peso del paziente) <i>Indications for use (patient body weight)</i>	> 25kg	> 25kg	> 25kg	< 25kg	< 25kg
Materiale di supporto <i>Support material</i>	FOAM medicale, spessore 1 mm <i>Medical FOAM, thickness 1 mm</i>				
Larghezza dell'anello adesivo <i>Width adhesive ring</i>	1,3 cm	0,7cm	1,3 cm	1,6 cm	1,6 cm
Superficie totale (per ogni piastra) <i>Total surface (for each electrode)</i>	148 cm ²	136 cm ²	148 cm ²	75 cm ²	75 cm ²
Area attiva (per ogni piastra) <i>Active area (for each electrode)</i>	95 cm ²	100 cm ²	95 cm ²	40 cm ²	40 cm ²
Materiale conduttivo <i>Conductive material</i>	Lamina di metallo <i>Metal sheet</i>				
Gel elettroconduttore <i>Electro-conductive gel</i>	Gel adesivo conduttivo a bassa impedenza <i>Low impedance conductive adhesive gel</i>				
Lunghezza del cavo (*) <i>Cable length (*)</i>	120 cm (**)	120 cm	100 cm	120 cm (***)	100 cm
Connessione <i>Connection</i>	Connettore antishock di sicurezza o a clip, a seconda dei modelli <i>Safety antishock or clip connection, according to the model</i>				
Compatibilità <i>Compatibility</i>	Vedi lista di compatibilità <i>See compatibility list</i>				
Q.tà di scariche tollerate x max intensità <i>Q.ty of tolerable discharges x power max</i>	50 x 360 J	50 x 360 J	50 x 360 J	50 x 100 J	50 x 100 J
Conformità alla normative <i>Compliance to regulations</i>	Direttiva - Directive 93/42/CEE (dispositivi di classe IIB - class IIB devices); ANSI/AAMI: DF-80; IEC/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1				

(*) Applicabile solo ai modelli con cavo - *Applicable only for models with cable*

(**) Ad eccezione del modello F7965, che ha il cavo da 100 cm - *Except for F7965 model, which is equipped with a 100 cm cable*

(***) Ad eccezione del modello F7965P, che ha il cavo da 50 cm - *Except for F7965P model, which is equipped with a 50 cm cable*

(A) 33448-33576-33577-33579-33459
 33586-33587-33588-33589

(B) 33420


CARATTERISTICHE ELETTRICHE - ELECTRICAL FEATURES

Descrizione - Description	EURO DEFIB PADS	ANSI/AAMI:DF-80
Impedenza ai piccoli segnali in AC <i>Low signals AC impedance</i>	@ 10 Hz @ 30 kHz	< 3000 ohm < 5 ohm
Impedenza ai grandi segnali in AC <i>Large signals AC impedance</i>		< 3 ohm
Combinazione di rumore interno e instabilità dell'offset <i>Noise</i>		< 20 μ V < 100 μ V
Tensione residua dopo la defibrillazione @ 4 sec. <i>Defibrillation offset voltage @ 4 sec.</i>		< 350 mV < 400 mV
Rigidità dielettrica - corrente di fuga @ 7,5 kV <i>Dielectric strenght - leakage current @ 7.5 kV</i>		< 250 μ A < 250 μ A
Tensione continua di offset <i>DC offset voltage</i>		< 10 mV < 100 mV


CONFEZIONAMENTO - PACKAGING

Confezionamento primario <i>Primary packaging</i>	1 coppia in busta di polietilene e alluminio termosaldata <i>1 pair in polyethylene and aluminium sealed pouch</i>
Confezione di vendita <i>Sale packaging</i>	10 coppie in scatola di cartone (5 coppie per la serie "Pediatriche") <i>10 pairs in carton box (5 pairs for "Paediatric" Series)</i>
Immagazzinamento <i>Storage</i>	Conservare in luogo asciutto, con temperatura compresa tra +5°C e +30°C <i>To be stored in a dry place, with temperature between +5°C and +30°C</i>
Scadenza <i>Expiry date</i>	Riportata sulla confezione (30 mesi dalla data di produzione) <i>As indicated on the packaging (shelf life 30 months)</i>

ALCUNE IMMAGINI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO - JUST A FEW MODELS ARE SHOWN FOR EXAMPLE

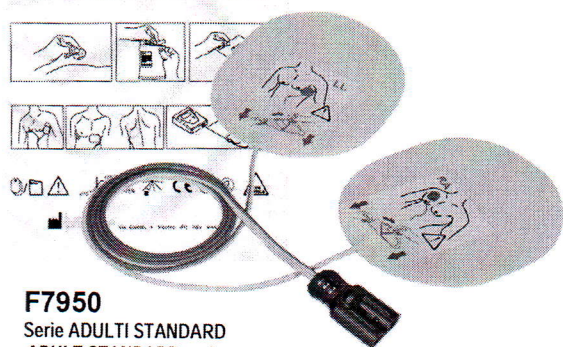


F7950
Serie ADULTI STANDARD
ADULT STANDARD series

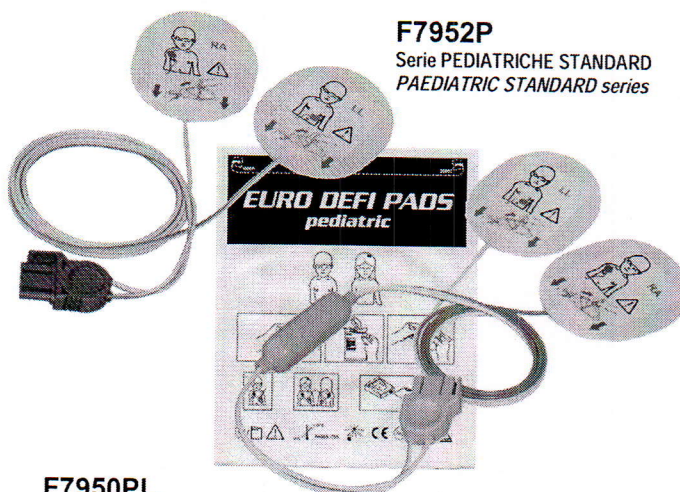

F7952P
Serie PEDIATRICHE STANDARD
PAEDIATRIC STANDARD series

F7950PL
Serie PEDIATRICHE CON RIDUTTORE DI ENERGIA
PAEDIATRIC REDUCED ENERGY series

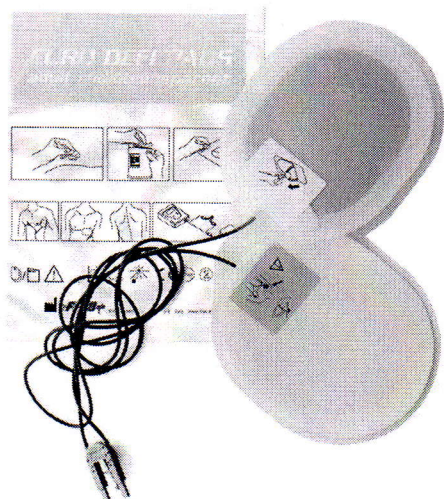

F7751
Serie ADULTI RADIOTRASPARENTE
ADULT RADIOTRASPARENT series

F7955W
Serie ADULTI CAVO FUORI BUSTA
ADULT LEAD OUT series

