

TAVOLO DI MAYO BASE IN ACCIAIO INOX E POMPA OLEODINAMICA

Manuale utente



ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

La ringraziamo per la fiducia accordataci con l'acquisto dei nostri articoli. La preghiamo di leggere attentamente questo manuale, predisposto appositamente per informarla circa il suo corretto uso in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

NORMATIVE

Tutti i modelli sono realizzati nel rispetto delle vigenti normative UNI, eliminando fonti di eventuale rischio per l'utente in caso di urto involontario, come bordi taglienti, spigoli vivi, base di lavorazione.

SICUREZZA

Non è consentito l'utilizzo per scopi estranei alla sua destinazione.

Il costruttore declina ogni responsabilità per danni provocati da un utilizzo del prodotto in modo scorretto, improprio o non previsto nel presente manuale.

Sostituire tempestivamente, per ragioni di sicurezza, parti usurate o danneggiate.

MANUTENZIONE / PULIZIA

Il carrello non richiede particolari manutenzioni, tuttavia deve essere controllato il corretto serraggio di tutte le parti mobili, prima dell'impiego.

- Per la pulizia possono essere utilizzati normali detersivi, purché non contengano cloro e suoi composti. Al momento della pulizia è importante seguire il senso della satinatura dell'acciaio inossidabile, senza esercitare una pressione eccessiva.
- Nel caso di macchie persistenti provare con prodotti specifici per l'acciaio inox.

Attenzione:

Non usare per la pulizia pagliette in acciaio o altro che possa graffiare o smerigliare. Evitare l'uso di acido muriatico o candeggina. Non lasciare a lungo sul piano oggetti di ferro.

ASSISTENZA

Nel caso che qualche componente, fuori dall'ordinaria manutenzione, si dovesse deteriorare, rivolgersi al vostro distributore, saranno a vostra disposizione per qualsiasi problema consigliandovi la soluzione più opportuna.

GARANZIA

- Questo articolo è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di fatturazione.
- La Ditta costruttrice assicura la sostituzione di tutte quelle parti originali che, in condizioni di normale utilizzo e manutenzione dell'articolo (escludendo quindi qualunque uso professionale) risultassero, a giudizio insindacabile dei suoi tecnici, difettose per fabbricazione.
- Non sono coperte da tali garanzie :
 - Le parti danneggiate per normale usura e da cattivo uso / manutenzione dell'articolo;
 - Le parti danneggiate da montaggio ed utilizzo non conforme alle prescrizioni del presente libretto.
- Resta inteso che la garanzia verrebbe automaticamente a decadere qualora siano state effettuate delle modifiche sull'articolo senza assenso del costruttore, oppure siano stati montati sull'articolo dei particolari non originali.
- Il costruttore declina inoltre qualunque responsabilità in materia di responsabilità civile derivante da un utilizzo dell'articolo improprio o non conforme alle norme di uso e manutenzione.
- L'assistenza in garanzia sarà riconosciuta solo se la richiesta presso il rivenditore autorizzato sarà accompagnata dalla presentazione di questo libretto debitamente timbrato.

- Tutte le spese di manodopera e di trasporto, come per eventuali danni o perdite subite durante quest'ultimo, saranno a carico dell'utente, così come le eventuali spese di regolazione o di normale manutenzione.
- Si consiglia di verificare immediatamente dopo l'acquisto che il prodotto risulti visivamente in buono stato e di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'utilizzo.
- Ogni richiesta di parti di ricambio dovrà specificare il modello dell'articolo, data di acquisto ed il numero del particolare.

AVVERTENZE


Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.
Smaltimento : il prodotto descritto in questo manuale deve essere consegnato a ditte specifiche per la rottamazione.

INFORMAZIONI GENERALI

Carrello servitore porta-strumenti regolabile in altezza; vassoio asportabile in acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite; struttura porta vassoio in tubolare di acciaio inox fissato alla pompa; pompa con movimento idraulico per la regolazione in altezza del vassoio da cm 85 a cm 120 mediante pedale. Base in acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite; con quattro ruote gemellate piroettanti diam. 50 mm. Modello smontato fornito in kit di montaggio.

SCHEDA DIMENSIONALE

Dimensione (L x P x H) Cm	70 x 45 x 85 / 120
Dim. Piano (L x P x H) Cm	70 x 45 x 1,8
Portata x piano Kg	40
Peso netto Kg	19,0
Peso lordo Kg	20,0
Volume mc	0,08
Numero colli	1
Imballo (L x P x H) Cm	60 x 17 x 77

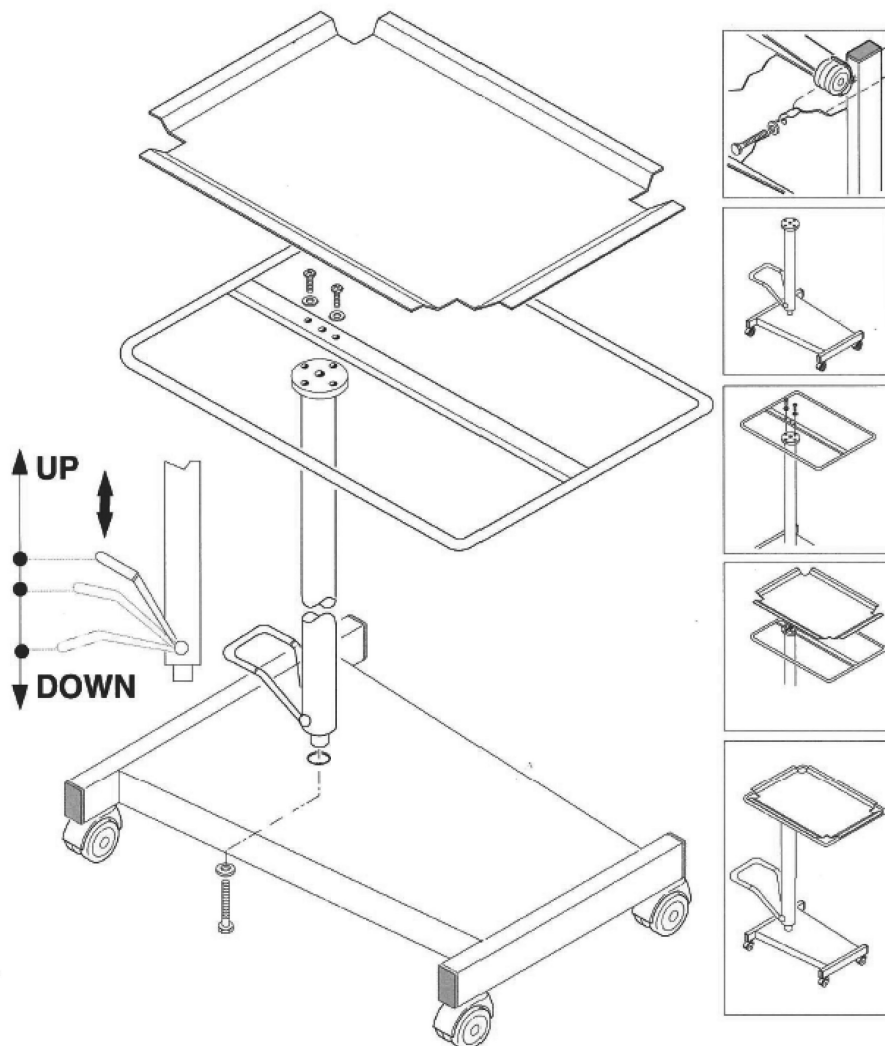

MAYO TABLE STAINLESS STEEL BASE AND PUMP

User manual



ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

We thank you for the trust you place in us in buying our products. Please read this manual carefully. It is purposely made available to inform you how to use it correctly in accordance with crucial safety requirements.

REGULATIONS

All models are produced in compliance with UNL regulations applicable, eliminating sources of potential risk to the user, should unintended collisions occur, such as cutting edges, sharp corners, work surface.

SAFETY

Use for purposes other than what it is intended for is not allowed.

The manufacturer declines all responsibility for damage caused by using the product the wrong or improper way, or in a way unforeseen in the current manual.

Replace worn or damaged parts in good time for safety reasons.

MAINTENANCE / CLEANING

The trolley does not require any particular maintenance, nevertheless the right tightening torque of all mobile parts must be checked before use.

- Normal detergents can be used to clean it, provided they do not contain chlorine or its composites. When cleaning it is important to follow the direction of the satin on the stainless steel, without exerting excessive pressure.
- If persistent stains occur, try using products specifically designed for stainless steel.

N.B.:

Do not use brillo pads to clean with or anything else which might scratch or cause abrasion. Avoid using hydrogen chloride or bleach. Do not leave iron objects on the surface for long periods of time.

ASSISTENCE

Should any of the component parts deteriorate beyond general maintenance, contact your distributor, they will be available to advise you on the most appropriate solution to every kind of problem.

WARRANTY

- This item is guaranteed for a period of 24 months from the date of invoicing.
- The product development company guarantees the replacement of all the original parts should they, under normal conditions of use and maintenance of the product (thus excluding every kind of professional use), appear faulty from the production process in the incontestable view of the company's technicians.
- The following are not covered by guarantees of this kind :
 - Damaged parts from normal and bad usage / maintenance of this item;
 - Damaged parts resulting from assemblage and usage not compliant with the regulations in this booklet.
- It is understood that the warranty will automatically become invalid at any point at which the item is modified without the manufacturer's consent, or not-original parts have been built onto the product.
- Moreover, the manufacturer declines all responsibility in the matter of civil responsibility deriving from improper use or non-compliance with the standards of use and maintenance.

- Guaranteed assistance will only be recognised if the request by the authorised retailer is made along with a stamped copy of this booklet.
- All the human resources and transport costs such as possible damage or losses incurred during the latter with be born by the user, as will also any costs for making adjustments or normal maintenance.
- We recommend checking immediately after purchase that the product is in a visibly good state and carefully reading the manual for use before using it.
- Every request for spare parts must specify the product model, purchase date and component number.

WARNINGS

The information contained in this document are subject to modifications without notice having to be given.

Disposal : the product described in this manual must be sent to specific companies to be demolished.

GENERAL INFORMATION


Serving equipment trolley, adjustable in height, removable stainless steel tray AISI 304 with scotch brite finishing; structure bears tray with rolled bead fixed to the pump; pump with hydraulic movement for adjusting the tray height from 85cm to 120cm by means of a pedal.

Stainless steel base AISI 304 with scotch brite finishing, with four, mirror-image projecting wheels with a diameter 50 mm

Unassembled model supplied as a kit.

TABLE OF DIMENSIONS

Dimension (L x P x H) cm	70 x 45 x 85 / 120
Dimension Surface (L x P x H) cm	70 x 45 x 1.8
Load x surface kg	40
Net weight kg	19.0
Gross weight kg	20.0
Volume M3	0.08
Number of necks	1
Packaging (L x P x H) cm	60 x 17 x 77

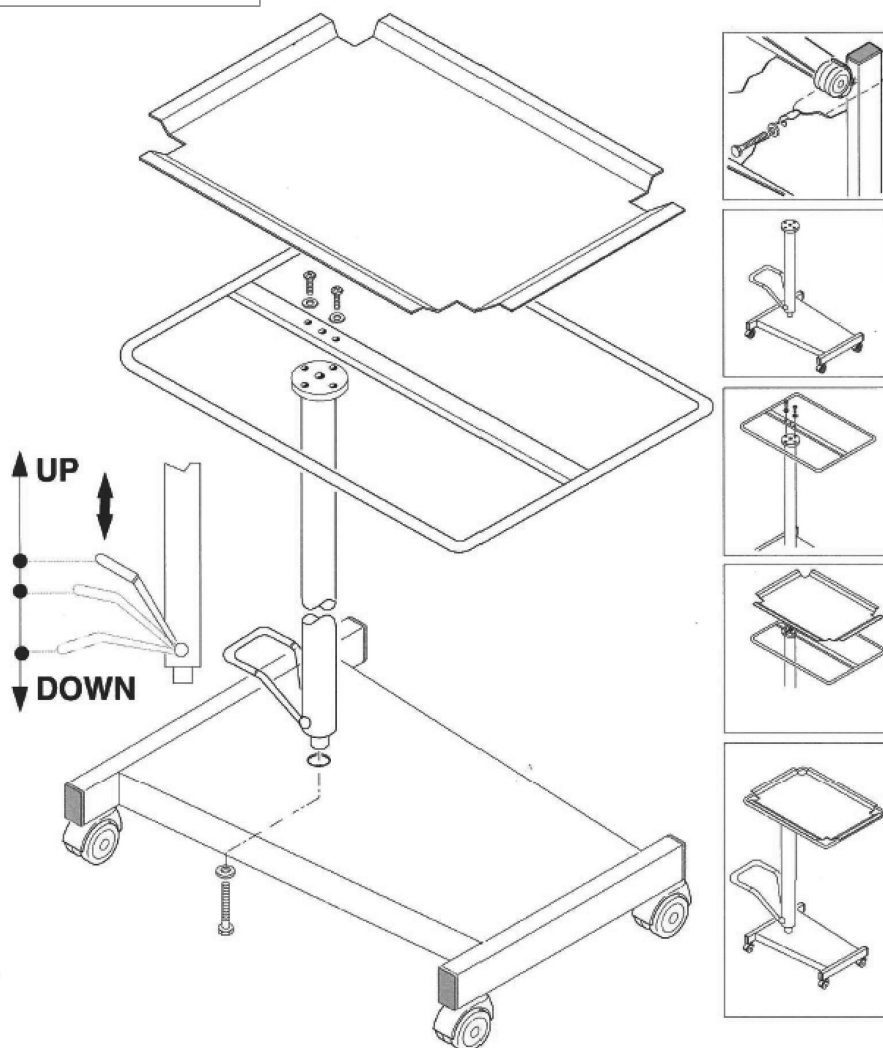

REF 27455



Gima S.p.A.
Gessate (MI) - Italy
Made in Italy

