



# GIMA


PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**CINGHIE MONITOR FETALE RIUTILIZZABILI**  
**REUSABLE FOETAL TRANSDUCER BELTS**  
**SANGLES RÉUTILISABLES POUR TRANSDUCTEUR FOETAL**  
**CORREAS PACIENTE INDIVIDUAL PARA SONDA FETAL**  
**CORREIA FETAL TRANSDUTORA REUTILIZÁVEL**  
**EINWEG-GÜRTEL FÜR FETALEN SCHALLKOPF**  
**ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑ**  
**ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**  
**EENMALIGE FOETALE TRANSDUCER RIEM**  
**PASEK PRZETWORNIKA PŁODU DO WIELOKROTNEGO**  
**UŻYTKU**  
**CUREA ABDOMINALĂ PENTRU MONITORIZARE FETALĂ,**  
**REFOLOSIBILĂ**  
**ÅTERANVÄNDBART FOSTERGIVAREBÄLTE**

**REF B08 (GIMA 29545)**

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller /  
Κατασκευαστής / Fabrikant / Producent / Producător / Tillverkare:  
Dongguan Belcare Medical Technology Co., Ltd.  
402 of 4th. Block, #3 of Keyuan Road, Tangxia Town,  
Dongguan, Guangdong, China 523710 - joe@belcare-med.com  
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/ Importiert von/ Importado  
por/ Importado por/ Εισάγεται από / Geïmporteerd door /  
Importowane przez / Importat de / Importerad av:  
Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

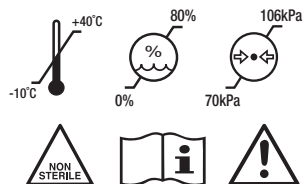

**Utilisation prévue :**

- Ce produit permet d'ajuster la position de la boucle sur la ceinture afin de fixer le capteur foetal.

**Présentation du produit:**

- Nom du produit: Ceinture transductrice foetale réutilisable.
- Structure du produit: Il est composé d'une ceinture élastique et d'une boucle.

**Gamme de produits:**

- Il est utilisé pour fixer un capteur foetal pendant la surveillance foetale.

**Condition d'utilisation:**

- Température: 0°C ~ 40°C
- Humidité relative: 15% ~ 95%
- Pression atmosphérique: 70kpa ~ 106kpa

**Emballage et stockage:**

- La ceinture foetale doit être emballée individuellement, le produit emballé doit être stocké dans un gaz non corrosif et dans un lieu bien ventilé.

**Conditions de stockage :**

- Température: -10°C ~ 40°C
- Humidité relative: ≤80%
- Pression atmosphérique: 70kpa ~ 106kpa

**Installation/utilisation:**

- Fixez une extrémité de la ceinture au capteur en engageant l'un des trous de la ceinture sur le bouton situé au-dessus du capteur.
- Maintenez le capteur en position, tendez l'autre extrémité de la ceinture et engagez la ceinture sur le bouton, en veillant à une tension suffisante pour maintenir le capteur en contact ferme avec l'abdomen.

- Évitez de trop serrer car cela causera un inconfort inutile au patient.

**Propreté du produit :**

- Lavez la ceinture à l'eau tiède, ne pas frotter le bord de la ceinture foetale pour éviter son retrait et ne pas l'exposer.

**Période de validité:**

- Période de validité: 2 ans.

**Remplacer / jeter:**

- Dans les situations telles que la casse ou les dommages liés à l'élasticité, veuillez changer la ceinture foetale.
- La ceinture peut être traitée comme un déchet normal.

**Contre-indications, précautions, avertissements et mises en garde:**

- Contre-indications: Les ceintures ne doivent pas être fixées sur une blessure.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie au spandex.
- Por favor, lea las instrucciones antes de usar.

**CONDITIONS DE GARANTIE GIMA**

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois

