

# medilog<sup>®</sup>AR


Holter all'avanguardia, efficiente e affidabile



**SCHILLER**  
The Art of Diagnostics

# medilog®AR

- Robusto, protetto da scariche e spruzzi e facile da pulire
- Concetto flessibile a doppia batteria per una durata di registrazione di oltre 14 giorni
- Rilevamento di fibrillazione atriale/flutter atriale in zero secondi in base all'analisi dell'onda P reale

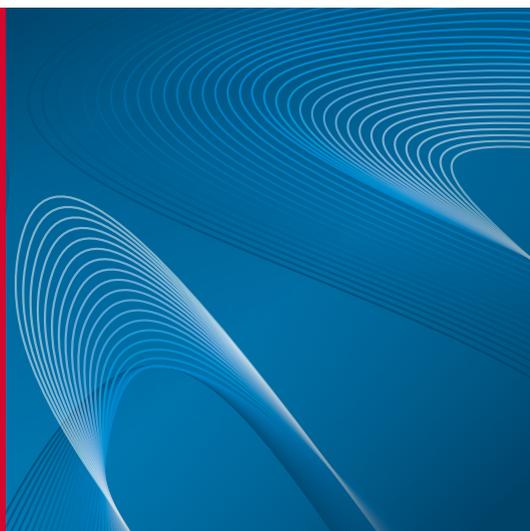

## IDEALE PER LA ROUTINE CLINICA

Il design protetto da scariche e spruzzi rende l'Holter medilog®AR ideale per la routine clinica quotidiana. L'Holter e la relativa custodia di trasporto sono robusti e di facile pulizia.

## DUE SETTIMANE DI ALIMENTAZIONE

Grazie al concetto a doppia batteria, è possibile eseguire lo screening dei pazienti per oltre 14 giorni senza



Concetto ecocompatibile a doppia batteria (illustrazione)

dover consultare un medico per la sostituzione delle batterie.

### BATTERIA ECOCOMPATIBILE:

Regolando la risoluzione del segnale, la batteria interna può funzionare per 24/72 ore o per oltre 7 giorni. La batteria interna di alta qualità si ricarica tramite USB.

### BATTERIA AAA MONOUSO:

Per i tempi di risposta più rapidi in cliniche ad elevata produttività, è possibile utilizzare batterie AAA standard facilmente disponibili.

### OLTRE 14 GIORNI:

Per la durata massima di registrazione, è possibile combinare una batteria interna a piena carica con una batteria AAA per ottenere oltre 14 giorni di durata con rilevamento AF automatico.

## VARIE OPZIONI DI TRASPORTO

medilog®AR è talmente piatto da infilarsi comodamente nella tasca dei pantaloni. Con la custodia di trasporto, può essere indossato su una cintura o al collo, direttamente sul corpo.

## REALIZZATO PER LA SOPPRESSIONE DEGLI ARTEFATTI

Il registratore Holter medilog®AR presenta una velocità di campionamento degli ECG a riposo superiore, di 32.000 Hz su 3 canali. Viene utilizzato per analisi dell'onda P reale, soppressione sofisticata degli artefatti e rilevamento del movimento, per una valutazione rapida.

## RILEVAMENTO FIBRILLAZIONE ATRIALE/AFL IN ZERO SECONDI:

medilog®AR esegue una scansione per fibrillazione atriale e flutter atriale



cercando direttamente le onde P, proprio come farebbe un cardiologo.

#### EPISODI RESPIRATORI:

Grazie alla registrazione delle respirazioni derivate dall'ECG, medilog®AR è in grado di eseguire lo screening di potenziali episodi respiratori durante il sonno. Il sensore SpO<sub>2</sub> opzionale, connesso tramite Bluetooth, consente di ottenere ulteriori informazioni respiratorie.



Sensore SpO<sub>2</sub>, collegato per la notte

## MOLTO PIÙ DI UNO SCREENING DELL'ARITMIA

Individuazione della fibrillazione atriale in zero secondi, analisi degli episodi respiratori e HRV ad alta risoluzione sono solo alcune delle eccezionali funzionalità di medilog®AR. L'analisi viene effettuata utilizzando il rinomato software medilog®DARWIN2.



**Americas**  
SCHILLER Americas Inc.  
Doral, Florida 33172

**North America:**  
Phone +1 786 845 06 20  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schilleramericas.com  
www.schilleramericas.com

**Latin America & Caribbean**  
Phone +1 305 591 11 21  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schilleramericas.com  
www.schilleramericas.com



**Asia**  
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia  
52200 Kuala Lumpur, Malaysia  
Phone +603 6272 3033  
Fax +603 6272 2030  
sales@schiller.com.my  
www.schiller-asia.com



**Austria**  
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.  
A-4040 Linz  
Phone +43 732 70 90  
Fax +43 732 757 000  
sales@schiller.at  
www.schiller.at



**China**  
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment  
Co.,Ltd.  
100015 Beijing, China  
Phone +86 010 52007020  
Fax +86 010 52007020-8016  
info@schillerchina.com  
www.schillermedical.cn



**Croatia**  
SCHILLER d.o.o.  
10000 Zagreb  
Phone +385 1 309 66 59  
Fax +385 1 309 66 60  
info@schillerzg.hr  
www.schiller.hr



**France**  
SCHILLER Médical  
F-67160 Wissembourg  
Phone +33 3 88 63 36 00  
Fax +33 3 88 63 36 49  
info@schiller.fr  
www.schiller-medical.com



**France (distribution France)**  
SCHILLER France S.A.S.  
F-77608 Bussy St Georges  
Phone +33 1 64 66 50 00  
Fax +33 1 64 66 50 10  
contact@schillerfrance.fr  
www.schiller-france.com



**Germany**  
SCHILLER Medizintechnik GmbH  
D-85622 Feldkirchen b. München  
Phone +49 89 62 99 81 0  
Fax +49 89 609 50 90  
info@schillermed.de  
www.schillermed.de



**India**  
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.  
Mumbai - 400 059, India  
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141  
Fax +91 22 2920 9142  
sales@schillerindia.com  
www.schillerindia.com



**Poland**  
SCHILLER Poland Sp. z o.o.  
PL-02-729 Warszawa  
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90  
Fax +48 22 843 20 89  
schiller@schiller.pl  
www.schiller.pl



**Russia & C.I.S.**  
AO SCHILLER.RU  
125040 Moscow, Russia  
Phone +7 (495) 970 11 33  
Fax +7 (495) 956 29 10  
mail@schiller.ru  
www.schiller.ru



**Serbia**  
SCHILLER d.o.o.  
11010 Beograd  
Phone +381 11 39 79 508  
Fax +381 11 39 79 518  
info@schiller.rs  
www.schiller.rs



**Slovenia**  
SCHILLER d.o.o.  
2310 Slovenska Bistrica  
Phone +386 2 843 00 56  
Fax +386 2 843 00 57  
info@schiller.si  
www.schiller.si



**Spain**  
SCHILLER ESPAÑA, S.A.  
ES-28232 Las Rozas/Madrid  
Phone +34 91 713 01 76  
Fax +34 91 355 79 33  
schiller@schiller.es  
www.schiller.es



**Switzerland**  
SCHILLER-Reomed AG  
CH-8912 Obfelden  
Phone +41 44 744 30 00  
Fax +41 44 740 37 10  
sales@schiller-reomed.ch  
www.schiller-reomed.ch



**Turkey**  
SCHILLER TÜRKIYE  
Okmeydani-Sisli - Istanbul  
Phone +90 212 210 8681 (pbx)  
Fax +90 212 210 8684  
info@schiller.com.tr  
www.schiller-turkiye.com



**United Kingdom**  
SCHILLER UK  
Bellshill, ML4 3PR  
Phone +44 1698 744 505  
Fax +44 1698 744 474  
sales@schilleruk.com  
www.schilleruk.com

La disponibilità del dispositivo sul mercato è soggetta ad approvazione normativa.

